

Bedienungsanleitung für den doppelseitigen Medikamentenwagen (Deutsch)



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



I. Produktname: Medikamentenwagen

II. Typnr.: MT750-01

III. Anwendung & Produkteinführung

Parameter des doppelseitigen ABS-Medikamentenwagens (50 Plätze):

Abmessungen: 750 x 480 x 930 mm

1. Geeignet für medizinisches Fachpersonal zur Notfallversorgung, Verbandswechsel und Medikamentengabe an Patienten.

3. Hauptteil

Hauptsächlich bestehend aus Aluminium, Stahl und ABS-Kunststoff, mit vier tragenden Säulen aus Aluminiumlegierung.

3. Doppelwandiger ABS-Boden im Spritzgussverfahren, integrierte Handläufe an beiden Seiten der Tischplatte mit vertiefter Form, um das Verrutschen von Gegenständen zu verhindern. Dreiseitige Edelstahl-Schutzgeländer, transparente Tischplatte aus Weichglas; zwei ABS-Abfallbehälter zur einfachen Abfalltrennung; eine Dokumentenbox und ein L-förmiger Infusionsständer. Ein Aufbewahrungskorb und zwei Kanülenbehälter.

4. Vorderseite: Zentralverriegelung, fünfstufige Medikamentenablage. Der Innenraum ist in drei Bereiche für die Medikamenteneinnahme (Morgen, Mittag, Abend) unterteilt und bietet Platz für 25 Personen. Ein großes Medikamententablett ist 24 cm hoch. Die Schubladen sind mit 3x3 mm großen Trennwänden ausgestattet, die eine flexible Aufbewahrung verschiedener Medikamente und Geräte ermöglichen.

Rückseite: Zentralverriegelung, fünfstufiges Medikamententablett, unterteilt in drei Bereiche für jeweils 25 Personen (Morgen, Mittag, Abend).

6. Vier hochwertige, geräuscharme Rollen, zwei mit und zwei ohne Bremse, die unter allen Bedingungen einsetzbar sind und über eine Bremsfunktion verfügen.

IV. Detaillierte Konstruktionszeichnungen der einzelnen Teile

Funktionsbeschreibung der einzelnen Teile:

1. Tischplatte – Zur Ablage von medizinischen Geräten wie Laptops und Elektrokardiographen (max. 100 kg).

2. Schutzgeländer – Verhindert das Herausfallen von Gegenständen aus der Tischplatte durch Bewegung.

3. Tischplatte – Zur Ablage von Medikamenten, Kochsalzlösungen usw. (max. 30 kg).

4. Rolle – Mit Bremsfunktion.

5. Feststellschraube – Hebelschalter zum Anheben und Verriegeln des Infusionsständers.

6. Schubladenschloss – Kontrolliert das Schließen aller Schubladen. Verhindert das Herausfallen von Gegenständen. (Einzelne Schublade: max. 15 kg).

7. Medikamentenbox – Zur Aufbewahrung von benötigten Artikeln (max. Durchmesser der Trennwand einstellen). (Einzelne Schublade: max. 15 kg).

8. Rückwand-Medikamentenbox – Zur Aufbewahrung von benötigten Artikeln (max. Durchmesser der Trennwand einstellen).

Einzelne Schublade, maximal 15 kg.

9. Große Schublade – Zur Aufbewahrung geeigneter Gegenstände (Trennwanddurchmesser einstellen).

Einzelne Schublade, maximal 15 kg.

10. Handfest anziehende Schraube – zur Befestigung der Arbeitsfläche.
11. Abwurfbehälter für gebrauchte Nadeln.
12. Abfalleimer – zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfällen (außer medizinischen Abfällen) (jeweils maximal 3 kg).

V. Montageanleitung

1. Legen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf eine saubere, ebene Fläche.
2. Entnehmen Sie sämtliches Zubehör; einige Teile befinden sich in der unteren Schublade.



3. Montage der 4 Rollen:

- 1) Kippen Sie den Wagen vorsichtig auf die Seite oder drehen Sie ihn um (es empfiehlt sich, ein weiches Tuch unterzulegen), um die Befestigungspunkte für die Rollen an der Unterseite des Rahmens freizulegen.
 - 2) Betätigen Sie die Bremsen der Rollen, richten Sie die Gewindestifte an den Befestigungsöffnungen am Rahmen aus und schrauben Sie sie fest.
 - 3) Stellen Sie den Wagen vorsichtig wieder aufrecht auf den Boden.
 - 4) Überprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Bremsen die Räder blockieren und ein Wegrollen des Wagens verhindern. Lösen Sie anschließend die Bremsen und prüfen Sie, ob sich die Räder frei drehen lassen.
4. Bringen Sie das seitlich montierbare Zubehör an – wie z. B. den Dokumentenhalter, den Behälter für spitze/scharfe Gegenstände, den Abfallbehälter usw. (siehe Abbildung).



VI. Sicherheitshinweise zum Produkt

1. Stellen Sie sich nicht auf die Oberseite des Produkts und verwenden Sie es nicht als Plattform, da dies zum Umkippen des Fahrzeugs und zu Verletzungen führen kann.
2. Erhitzen Sie weder die Oberseite noch andere Komponenten. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit

kochendem Wasser über 60 °C.

3. Dieses Produkt ist mit 4 Rollen ausgestattet, von denen 2 über Bremsen verfügen. Sollten Sie das Produkt nicht schieben können, überprüfen Sie bitte, ob die Bremsen der Rollen aktiviert sind.

4. Achten Sie beim Schieben darauf, dass die Rollen das Netzkabel nicht einklemmen oder überfahren. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

5. Vermeiden Sie die Lagerung in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub. Temperatur: -10 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: nicht über 80 % RH, Luftdruck: 760 hPa bis 1060 hPa. Lagern Sie das Produkt in einem gut belüfteten Innenraum ohne korrosive Gase.

Produkt-Medikamentenbox: Die Medikamentenbox kann je nach Bedarf konfiguriert und in verschiedene Fächer unterschiedlicher Größe unterteilt werden.

VII. Reinigung und Wartung des Produkts

Wringen Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, das in einer verdünnten neutralen Reinigungslösung getränkt ist, gut aus und wischen Sie das Produkt damit ab. Wringen Sie anschließend ein in sauberem Wasser getränktes Tuch gut aus, um eventuelle Reinigungsmittelreste zu entfernen. Trocknen Sie das Produkt abschließend mit einem sauberen Tuch ab.

※ Verwenden Sie keine flüchtigen Substanzen (Verdünner, Lösungsmittel, Benzin).

※ Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab; es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

※ Dieses Produkt ist nicht hitzebeständig. Verwenden Sie zur gründlichen Reinigung eine Sterilisationsmethode bei niedriger Temperatur.


VIII. Lagerung

Verpackte Produkte sollten in einem trockenen, gut belüfteten Raum ohne korrosive Materialien oder Wärmequellen gelagert werden.



HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD

A1-2703 SHIDAI BUILDING, GUANG AN STREET. CHANG AN
DISTRICT. SHIJIAZHUANG CITY. HEBEI PROVINCE. CHINA

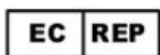

SUNGO Europe B.V

Fascinato Boulevard 522, unit 1.7.2909VA
Capelle aan del Ussel, The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,
Valencia (Spain)

