

# Manuel d'instructions du chariot à médicaments double face (Français)



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



I. Nom du produit : Chariot à médicaments

II. Référence : MT750-01

III. Application et présentation du produit

Caractéristiques du chariot de distribution de médicaments double face en ABS (50 places) :

Dimensions : 750 x 480 x 930 mm

1. Convient aux professionnels de santé pour les soins d'urgence, les changements de pansements et l'administration de médicaments aux patients.

3. Structure principale : principalement composée d'aluminium, d'acier et de plastique technique ABS, avec quatre colonnes porteuses et des colonnes en alliage d'aluminium.

3. Fond en ABS double couche moulé par injection, mains courantes intégrées de chaque côté du plateau avec un design encastré pour éviter les glissements d'objets. Garde-corps en acier inoxydable sur trois côtés, plateau en verre souple transparent ; deux poubelles en ABS pour faciliter le tri et le stockage des déchets ; un porte-documents et un support à perfusion en forme de L. Un panier de rangement et deux conteneurs pour objets tranchants.

4. Face avant : verrouillage centralisé, plateau à médicaments à cinq niveaux. L'intérieur est divisé en compartiments pour les médicaments du matin, du midi et du soir, pouvant accueillir 25 personnes. Un grand plateau à médicaments mesure 24 cm de haut. Les tiroirs sont équipés de séparateurs de 3 x 3 mm, permettant un rangement flexible des médicaments et du matériel.

À l'arrière : Système de verrouillage centralisé, plateau à médicaments à cinq niveaux, divisé en compartiments pour 25 personnes (matin/midi/soir).

Quatre roulettes silencieuses de luxe, dont deux avec freins et deux sans freins, utilisables dans toutes les conditions.

IV. Schémas structurels détaillés de chaque partie

Description fonctionnelle de chaque partie :

1. Plateau – Pour poser des équipements médicaux tels que des ordinateurs portables et des électrocardiographes, poids maximal : 100 kg.

2. Garde-corps – Empêche les objets placés sur le plateau supérieur de tomber en cas de mouvement.

3. Plateau supérieur – Pour ranger des médicaments, des flacons de solution saline, etc. (poids maximal : 30 kg).

4. Roulette – Avec fonction de freinage.

5. Vis de serrage manuel – Interrupteur de levage du support de perfusion, verrouillage du support de perfusion.

6. Serrure de tiroir – Contrôle la fermeture de tous les tiroirs. Empêche la perte d'objets. Poids maximal par tiroir : 15 kg.

7. Boîte à médicaments – Permet de ranger les articles appropriés selon les besoins (diamètre limite des compartiments réglable).

Poids maximal par tiroir : 15 kg.

8. Boîte à médicaments arrière – Permet de ranger les articles appropriés selon les besoins (diamètre limite des compartiments réglable).

Poids maximal par tiroir : 15 kg.

9. Grand tiroir – Permet de ranger les articles appropriés selon les besoins (diamètre limite des compartiments réglable).

Poids maximal par tiroir : 15 kg.

10. Vis de serrage manuel – Pour fixer le plan de travail.

11. Boîte à objets tranchants – Pour les aiguilles usagées.

12. Poubelle – Pour le stockage temporaire des déchets autres que les déchets médicaux (poids maximal par poubelle : 3 kg).

#### V. Instructions de montage

1. Après avoir ouvert l'emballage, placez le produit sur une surface propre et plane.

2. Retirez tous les accessoires ; certains se trouvent dans le tiroir inférieur.



#### 3. Installation des 4 roulettes :

1) Inclinez délicatement le chariot sur le côté ou retournez-le (il est conseillé de placer un chiffon doux en dessous) afin d'accéder aux points de fixation des roulettes situés sous le châssis.

2) Activez les freins des roulettes, alignez les tiges filetées avec les orifices de fixation sur le châssis, puis vissez-les fermement.

3) Remettez prudemment le chariot en position verticale sur le sol.

4) Vérification : assurez-vous que les freins bloquent bien les roues et empêchent le chariot de glisser ; désactivez ensuite les freins pour vérifier que les roues tournent librement.

4. Fixez les accessoires latéraux (porte-documents, conteneur pour objets tranchants, poubelle, etc.), comme illustré sur l'image ci-dessous.



#### VI. Précautions de sécurité relatives au produit

1. Ne montez pas sur le panneau supérieur et n'utilisez pas le produit comme plateforme, car cela pourrait provoquer le basculement du véhicule et entraîner des blessures.

2. Ne chauffez pas le panneau supérieur ni aucun autre composant. Évitez tout contact direct avec de l'eau bouillante à plus de 60 °C.

3. Ce produit est équipé de 4 roulettes, dont 2 sont munies de freins. Si vous ne parvenez pas à le pousser, vérifiez que les roulettes ne sont pas en position de freinage.

4. Lorsque vous poussez le produit, veillez à ce que les roulettes n'écrasent pas le cordon d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation en cas de non-utilisation prolongée.

5. Évitez de stocker le produit dans des environnements à haute température, humides et poussiéreux. Température : -10 °C à 40 °C, humidité relative : ne dépassant pas 80 % HR, pression atmosphérique : 760 hPa à 1060 hPa. Stockez le produit dans un endroit intérieur bien ventilé et exempt de gaz corrosifs.

Boîte à médicaments : La boîte à médicaments peut être configurée selon les besoins et divisée en différents compartiments de tailles variées.

## VII. Nettoyage et entretien du produit

Pour le nettoyage, essorez un chiffon doux imbibé d'une solution de détergent neutre diluée et essuyez le produit. Essorez ensuite un chiffon imbibé d'eau propre pour éliminer tout résidu de détergent. Enfin, séchez le produit avec un chiffon propre.

※ N'utilisez pas de substances volatiles (diluants, agents volatils, essence).

※ Ne rincez pas directement à l'eau ; attention aux risques d'électrocution.

※ Ce produit n'est pas résistant à la chaleur. Pour un nettoyage en profondeur, veuillez utiliser une méthode de stérilisation à basse température.


## VIII. Stockage

Les produits emballés doivent être stockés dans une pièce sèche et bien ventilée, à l'abri des matériaux corrosifs et des sources de chaleur.



**HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD**

A1-2703 SHIDAI BUILDING, GUANG AN STREET. CHANG AN  
DISTRICT. SHIJIAZHUANG CITY. HEBEI PROVINCE. CHINA

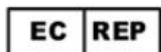

**SUNGO Europe B.V**

Fascinato Boulevard 522, unit 1.7.2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



**Quirumed S.L.U. CIF B97267405**

C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,  
Valencia (Spain)

