

Manuale di istruzioni del Carrello portamedicinali bifacciale (italiano)



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



I. Nome del prodotto: Carrello per medicinali

II. Codice modello: MT750-01

III. Applicazione e presentazione del prodotto

Parametri del carrello per la distribuzione di farmaci a doppio lato in ABS: (50 posti)

Dimensioni: 750*480*930 mm

1. Adatto per gli operatori sanitari per fornire cure di emergenza, medicazioni e farmaci ai pazienti;

2. Corpo principale

Composto principalmente da una struttura in alluminio, acciaio e plastica ABS, con quattro colonne portanti e colonne in lega di alluminio.

3. Tecnologia di stampaggio a iniezione a doppio strato in ABS per il fondo, corrimano integrati su entrambi i lati del piano di lavoro con design incassato per evitare che gli oggetti scivolino. Ringhiere di protezione su tre lati in acciaio inossidabile, piano di lavoro in vetro temperato trasparente; due cestini per rifiuti in ABS per una facile differenziazione e smaltimento dei rifiuti; una scatola portadocumenti e un supporto per flebo a forma di L. Un cestino portaoggetti e due contenitori per oggetti taglienti.

4. Parte anteriore: Chiusura centralizzata, vassoio per medicinali a cinque livelli. L'interno è suddiviso in sezioni per la somministrazione di farmaci al mattino, a mezzogiorno e alla sera, per 25 persone. Un grande vassoio per medicinali alto 24 cm. I cassetti sono dotati di divisori da 3x3 mm, che consentono un'organizzazione flessibile di vari farmaci e attrezzature.

Parte posteriore: Sistema di chiusura centralizzata, vassoio per medicinali a cinque livelli, suddiviso in scomparti per 25 persone per la somministrazione di farmaci al mattino/mezzogiorno/sera.

5. Quattro ruote piroettanti silenziose di alta qualità, due con freno e due senza freno, utilizzabili in qualsiasi condizione, con funzione di bloccaggio.

IV. Schemi strutturali dettagliati di ciascuna parte

Descrizione funzionale di ciascuna parte:

1. Piano di lavoro: per posizionare apparecchiature mediche come computer portatili ed elettrocardiografi, con un peso non superiore a 100 kg.

2. Ringhiera di protezione: per impedire che gli oggetti posizionati sul pannello superiore cadano a causa del movimento.

3. Pannello superiore: per riporre farmaci, flaconi di soluzione fisiologica, ecc. (peso non superiore a 30 kg).

4. Ruota: con funzione di freno.

5. Vite a farfalla: interruttore di sollevamento del supporto per flebo, bloccaggio del supporto per flebo.

6. Serratura del cassetto: controlla la chiusura di tutti i cassetti. Previene la perdita di oggetti. Peso massimo per singolo cassetto: 15 kg.

7. Cassetto per farmaci: per riporre gli articoli appropriati secondo necessità (impostare il diametro limite del divisorio). Peso massimo per singolo cassetto: 15 kg.

8. Cassetto posteriore per farmaci: per riporre gli articoli appropriati secondo necessità (impostare il diametro limite del divisorio). Peso massimo per singolo cassetto: 15 kg.

9. Cassetto grande: per riporre gli articoli appropriati secondo necessità (impostare il diametro limite

del divisorio). Peso massimo per singolo cassetto: 15 kg.

10. Vite a farfalla: per fissare il piano di lavoro.

11. Contenitore per oggetti taglienti: per aghi usati.

12. Cestino per rifiuti: per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti diversi dai rifiuti medici (peso massimo per ciascun cestino: 3 kg).

V. Istruzioni per il montaggio

1. Dopo aver aperto l'imballaggio, posizionare il prodotto su una superficie pulita e piana.

2. Rimuovere tutti gli accessori; alcuni si trovano nel cassetto inferiore.



3. Installare le 4 rotelle:

1) Inclinare delicatamente il carrello su un lato o capovolgerlo (si consiglia di posizionare un panno morbido sotto di esso) per accedere alle basi di fissaggio delle rotelle, situate nella parte inferiore del telaio.

2) Inserire i freni delle rotelle, allineare i perni filettati con i fori di montaggio sul telaio e avvitarli saldamente.

3) Riportare con cautela il carrello in posizione verticale sul pavimento.

4) Verifica: controllare che i freni blocchino le ruote, impedendo al carrello di scivolare; successivamente, rilasciare i freni per assicurarsi che le ruote ruotino liberamente.

4. Fissare gli accessori laterali, come il contenitore per documenti, il contenitore per oggetti taglienti, il cestino per i rifiuti, ecc. (come mostrato nell'immagine seguente).



VI. Precauzioni per la sicurezza del prodotto

1. Non salire sul pannello superiore né utilizzare il prodotto come piattaforma, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del veicolo e provocare lesioni.

2. Non riscaldare il pannello superiore o altri componenti. Evitare il contatto diretto con acqua bollente a temperature superiori a 60°C.

3. Questo prodotto è dotato di 4 ruote, di cui 2 con freno. Se non è possibile spingerlo, verificare che le ruote non siano bloccate.
4. Durante lo spostamento, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione con le ruote. Scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi.
5. Evitare di conservare il prodotto in ambienti con temperature elevate, umidi e polverosi. Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, umidità relativa: non superiore all'80% RH, pressione atmosferica: $760\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$. Conservare in un ambiente interno ben ventilato e privo di gas corrosivi.
- Vano portaoggetti per medicinali: Il vano portaoggetti per medicinali può essere configurato in base alle esigenze e suddiviso in diversi scomparti di diverse dimensioni.

VII. Pulizia e manutenzione del prodotto

Per la pulizia, strizzare un panno morbido imbevuto di una soluzione diluita di detergente neutro e pulire il prodotto. Quindi, strizzare un panno imbevuto di acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente. Infine, asciugare il prodotto con un panno pulito.


- ※ Non utilizzare sostanze volatili (diluenti, solventi, benzina).
- ※ Non risciacquare direttamente con acqua; prestare attenzione al rischio di scosse elettriche.
- ※ Questo prodotto non è resistente al calore. Per una pulizia approfondita, utilizzare un metodo di sterilizzazione a bassa temperatura.

VIII. Conservazione

I prodotti imballati devono essere conservati in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da materiali corrosivi o fonti di calore.



HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD
A1-2703 SHIDAI BUILDING, GUANG AN STREET. CHANG AN
DISTRICT. SHIJIAZHUANG CITY. HEBEI PROVINCE. CHINA

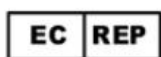

SUNGO Europe B.V
Fascinato Boulevard 522, unit 1.7.2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,
Valencia (Spain)

