




Benutzer Handbuch

A045-1 **Gynäkologischer Tisch aus Edelstahl**

Registrierungscode: SKF-A

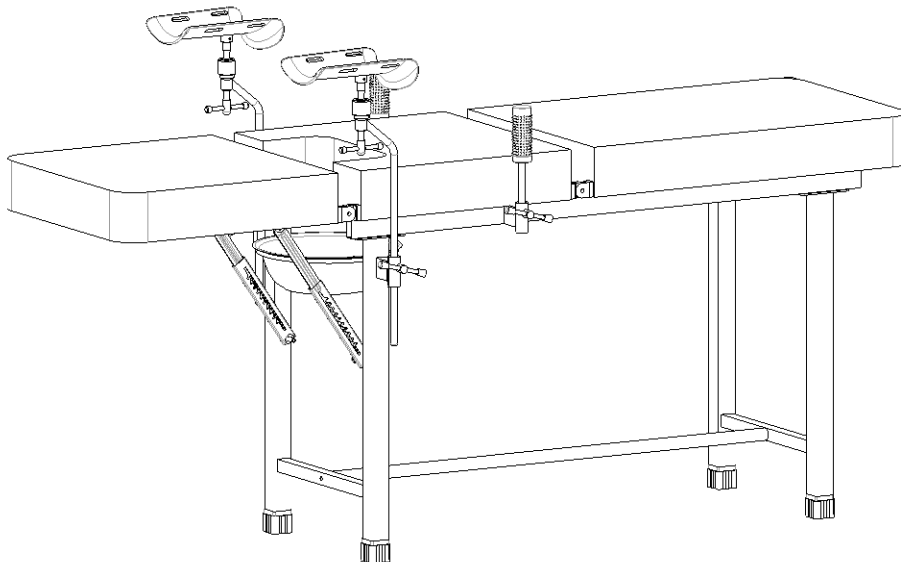

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098

Inhalt

Manuelle Einführung	2
1. Installationsanleitung	3
1.1 Liste des Standardzubehörs	3
1.2 Montage der Bettfüße	6
1.3 Anschlussrohrmontage	7
1.4 Installation der mechanischen Wasserwaage	8
1.5 Fußpedalinstallation	9
1.6 Handstange	10
2. Verwendung	11
2.1 Einstellung des Rückenteils	12
2.2 Einstellung des Beinbereichs	13
3. Wartung des gynäkologischen Tisches aus Edelstahl	13
4. Verpackung, Transport, Lagerung	14
5. Kundendienst	14

Manuelle Einführung

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte genau, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheitshinweisen vertraut sind.

► Diese Anleitung gilt für den gynäkologischen Tisch A045-1 aus Edelstahl. Sie enthält die Installationsmethode, die Bedienungsanleitung und die Wartungs- und Kontrollpunkte.

► Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für den Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

► Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technische Parameter des Produkts.

► Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.

► Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, muss diese Hinweise lesen und befolgen.





► Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:

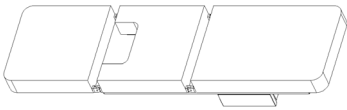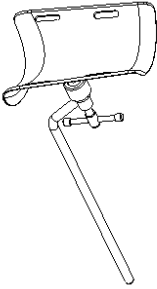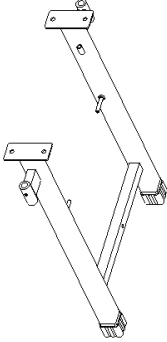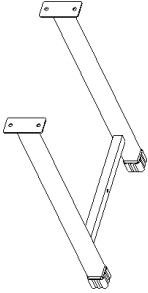Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Grundplatte		/	1	Stück
2	Steigbügel		/	2	Stück
2	Hinter dem Bettfuß		L427*B653 mm	1	Stück
3	Vorderer Bettfuß		L427*B653 mm	1	Stück








4	Waschbecken		φ300*85 mm	1	Stück
5	Beckenring		φ285-L80 mm	1	Stück
7	Verbindungsrohr		Φ25*993-M8 mm	1	Stück
8	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Satz

Tabelle a.1


Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Sechskantschraube		M10*25 mm	8	Stück
2	Flachkopf		$\Phi 10 \times \Phi 21 \times H1,8$ mm	8	Stück
3	Federscheibe		$\Phi 10 * \Phi 17 * H3$ mm	8	Stück
4	Mutter		M10 mm	8	Stück
5	Sechskantschraube		M8*40 mm	2	Stück
6	Flachpad		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2$ mm	2	Stück
7	Federscheibe		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5$ mm	2	Stück
8	Sicherungsmutter		M8 mm	2	Stück
9	Gynäkologisches Bett, Komplettset		Sieben Teile ein Set	2	Stück
10	Handstruktur		$\Phi 32$ mm	2	Stück
11	Kunststoff-Griffhülse		$\Phi 32$ mm	2	Stück

1,2 -Bettfußmontage


Legen Sie eine Schutzunterlage und stellen Sie den Instrumentenwagen kopfüber auf.

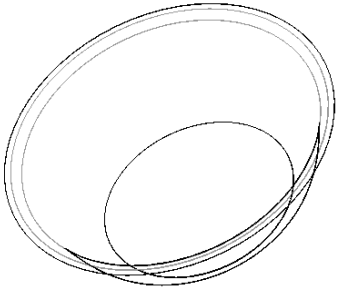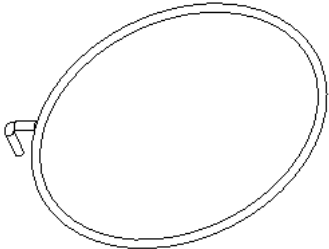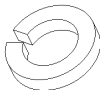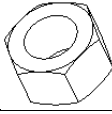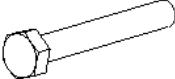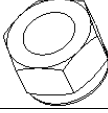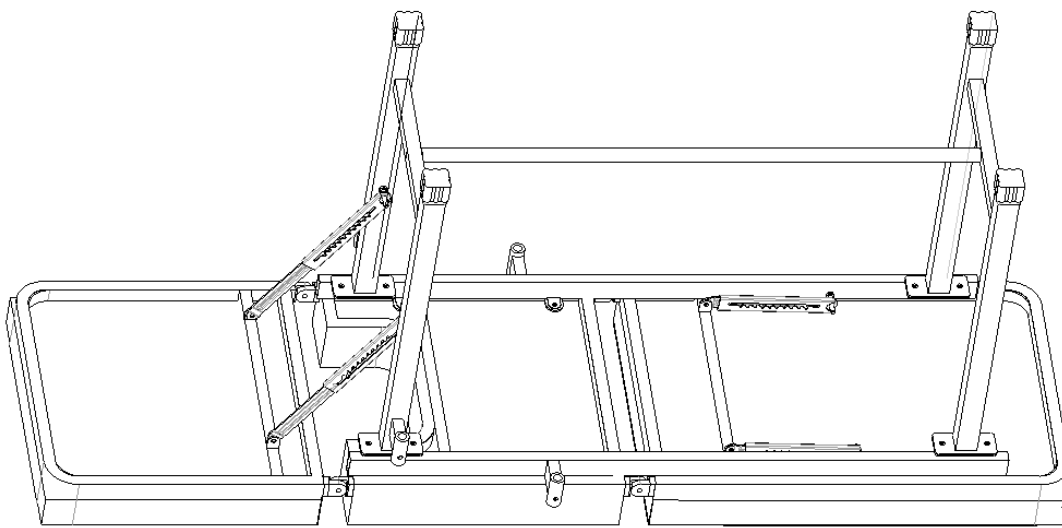


Sechskantschraube

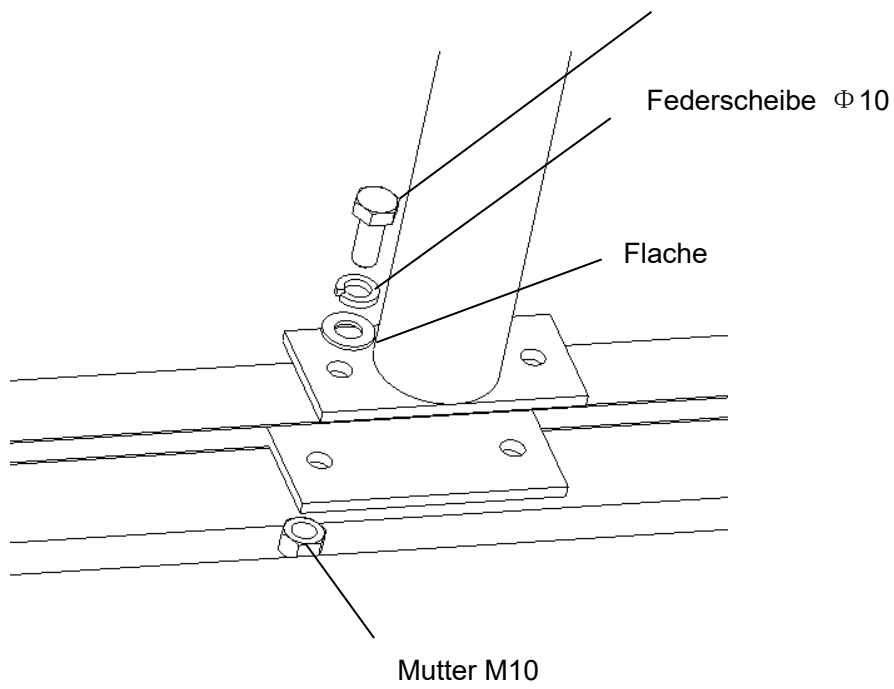



1.3 Anschlussrohrmontage

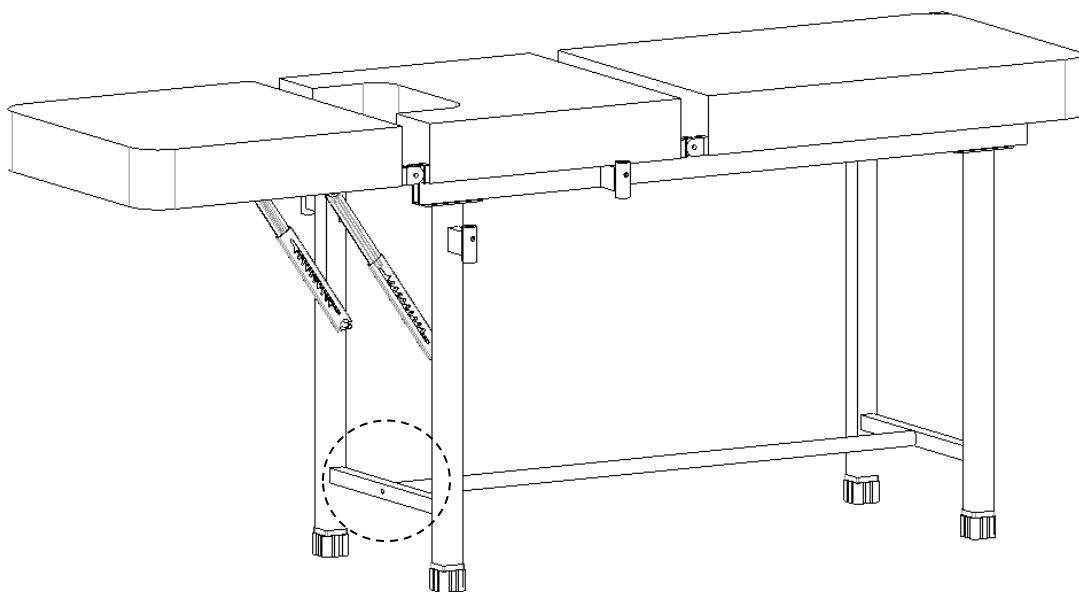

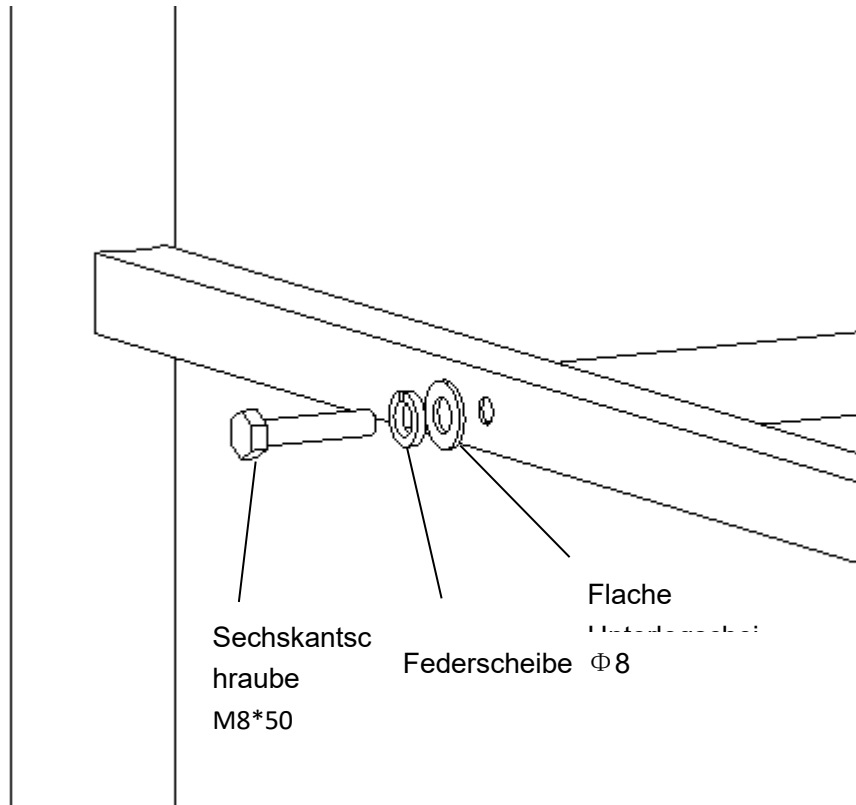



1.4 Mechanische Installation

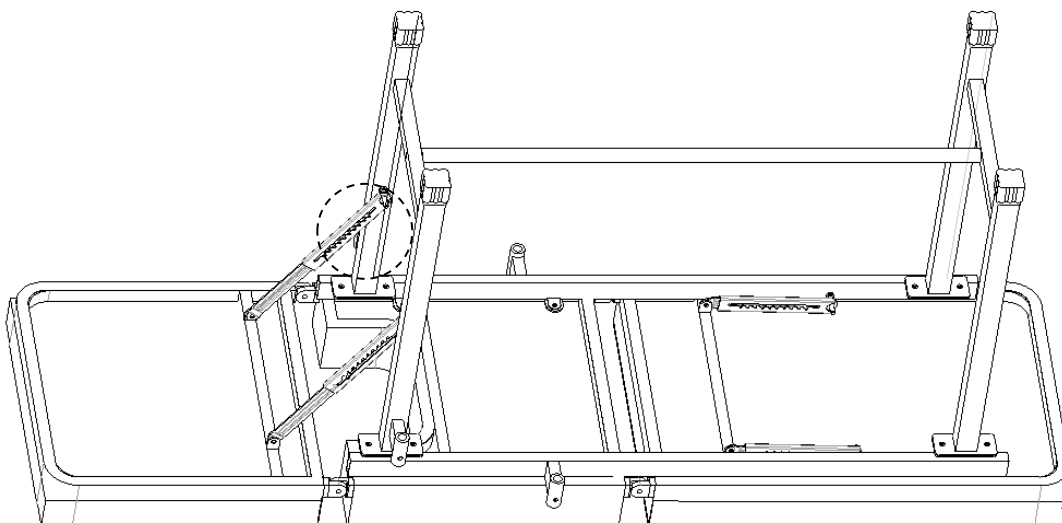


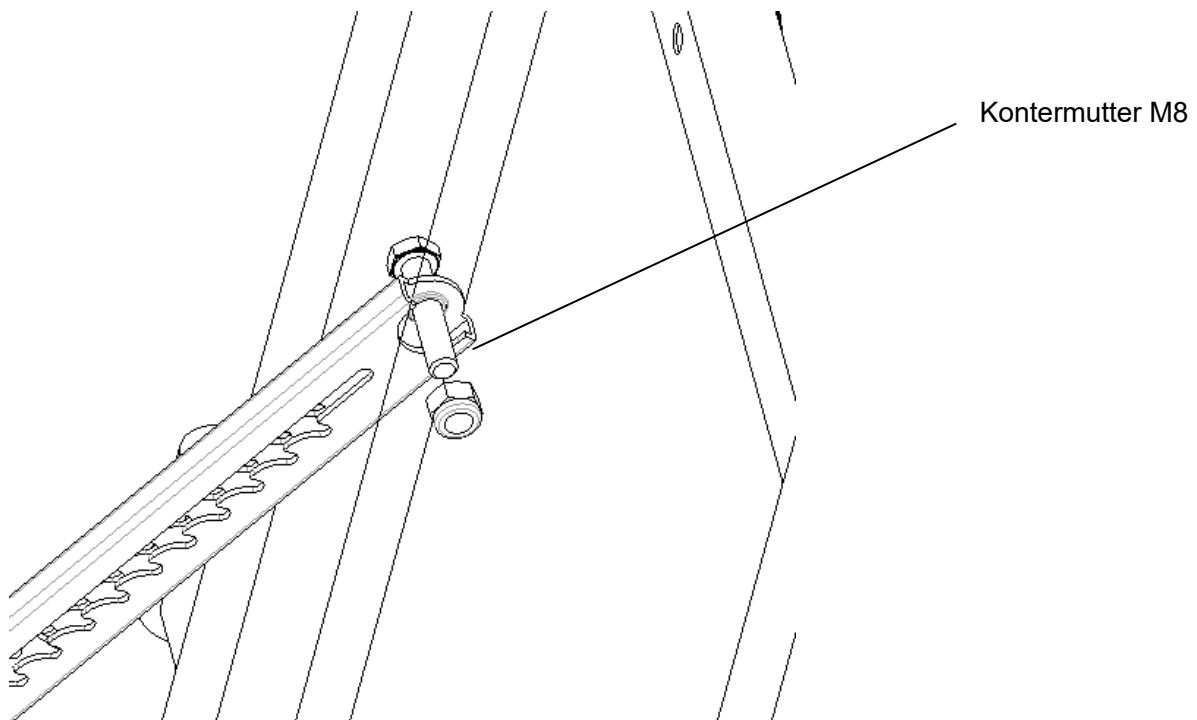


1.5 Montage des Fußpedals

Stecken Sie das Pedal in die Schraubhülse, drehen Sie den Schraubenschlüssel 1, um die Höhe des Pedals einzustellen, und drehen Sie den Schraubenschlüssel 2, um den Winkel des Pedals um 360° einzustellen.

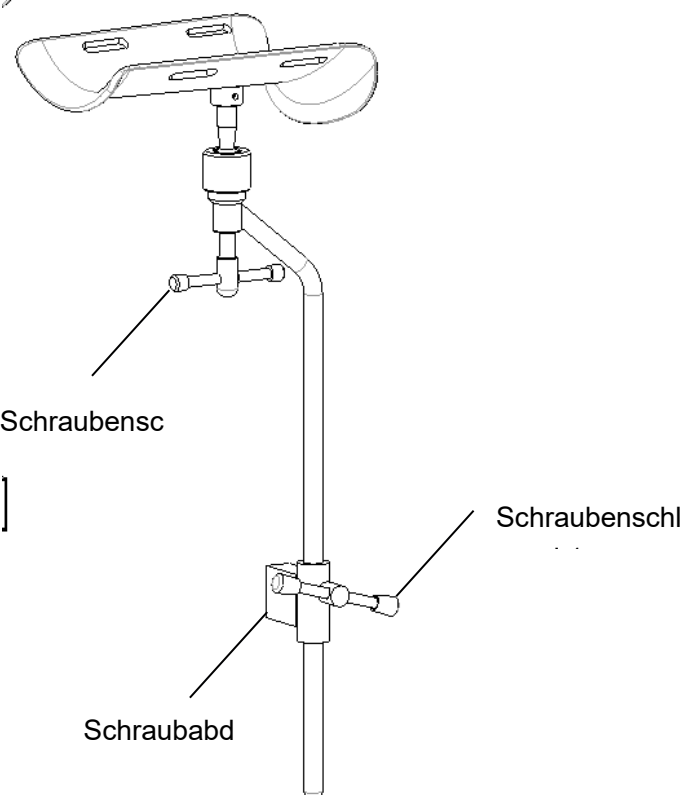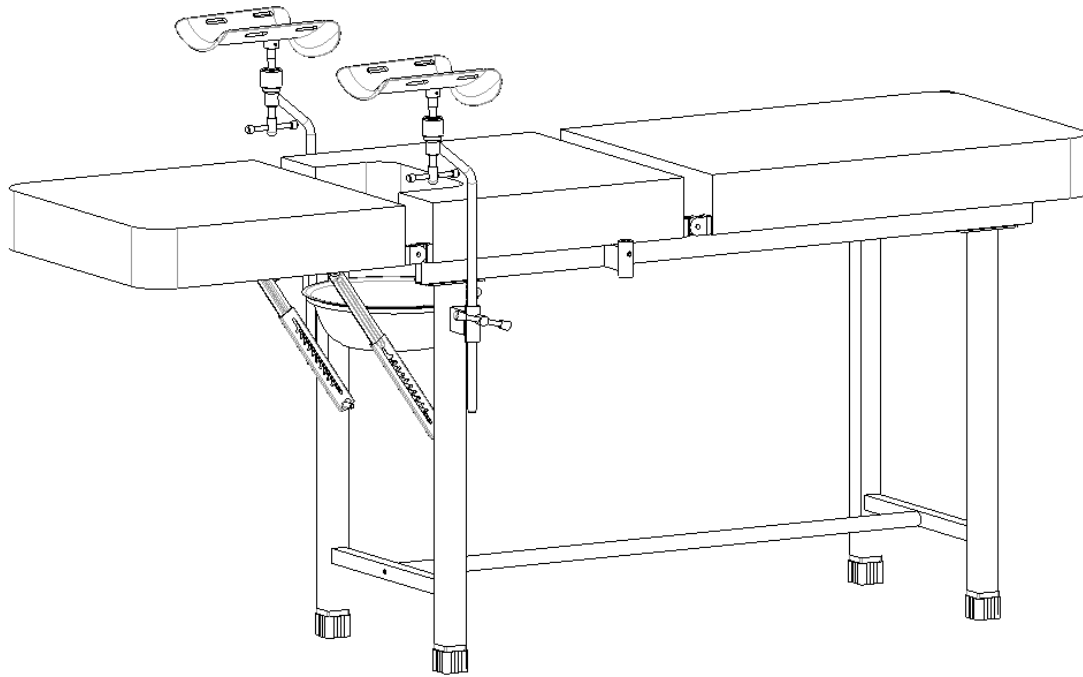


1.6 Montage der Handstange

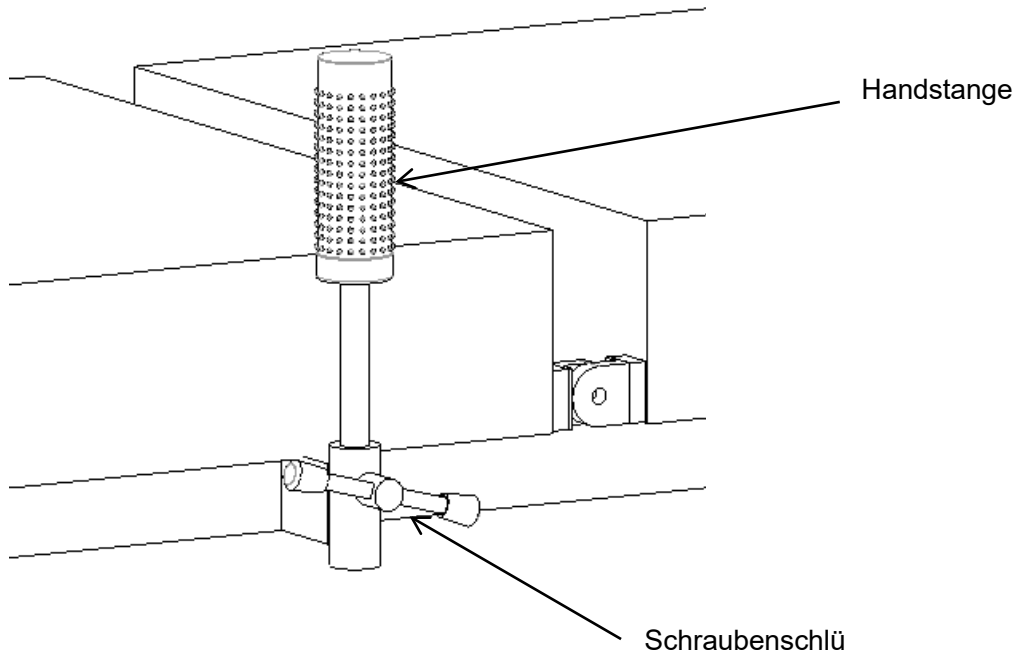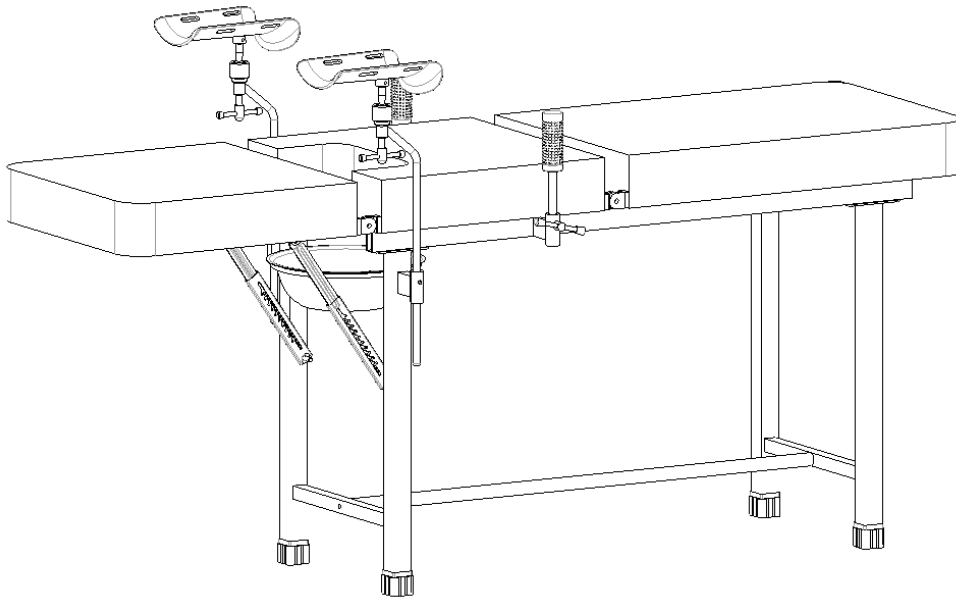

Durch Drehen des Schraubenschlüssels kann die Höhe der Handstange eingestellt werden


2. Verwendung

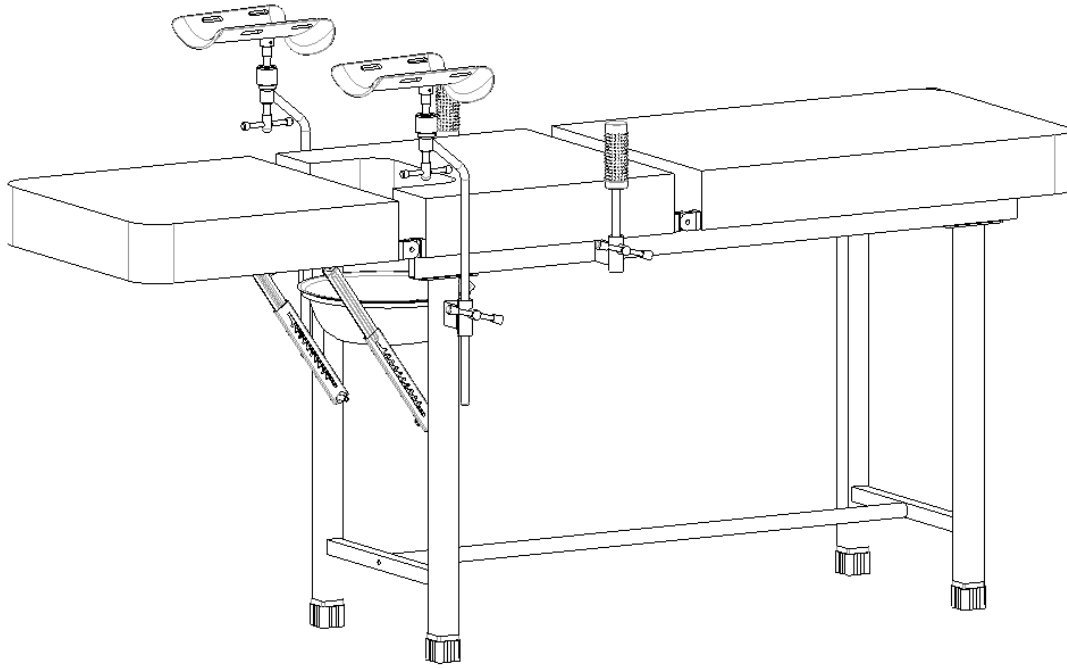

Abmessungen	Länge	mm	1820±10
	Breite		590±10
	Höhe		800±10
Gewicht	Sichere Tragfähigkeit	kg	17


2,1 Einstellung des hinteren Teils

Heben Sie die Rückenlehne direkt in den gewünschten Winkel, um das Anheben der Rückenlehne abzuschließen. Heben Sie die Rückenlehne bis zum maximalen Winkel an und senken Sie sie dann ab, um das Absenken der Rückenlehne abzuschließen.

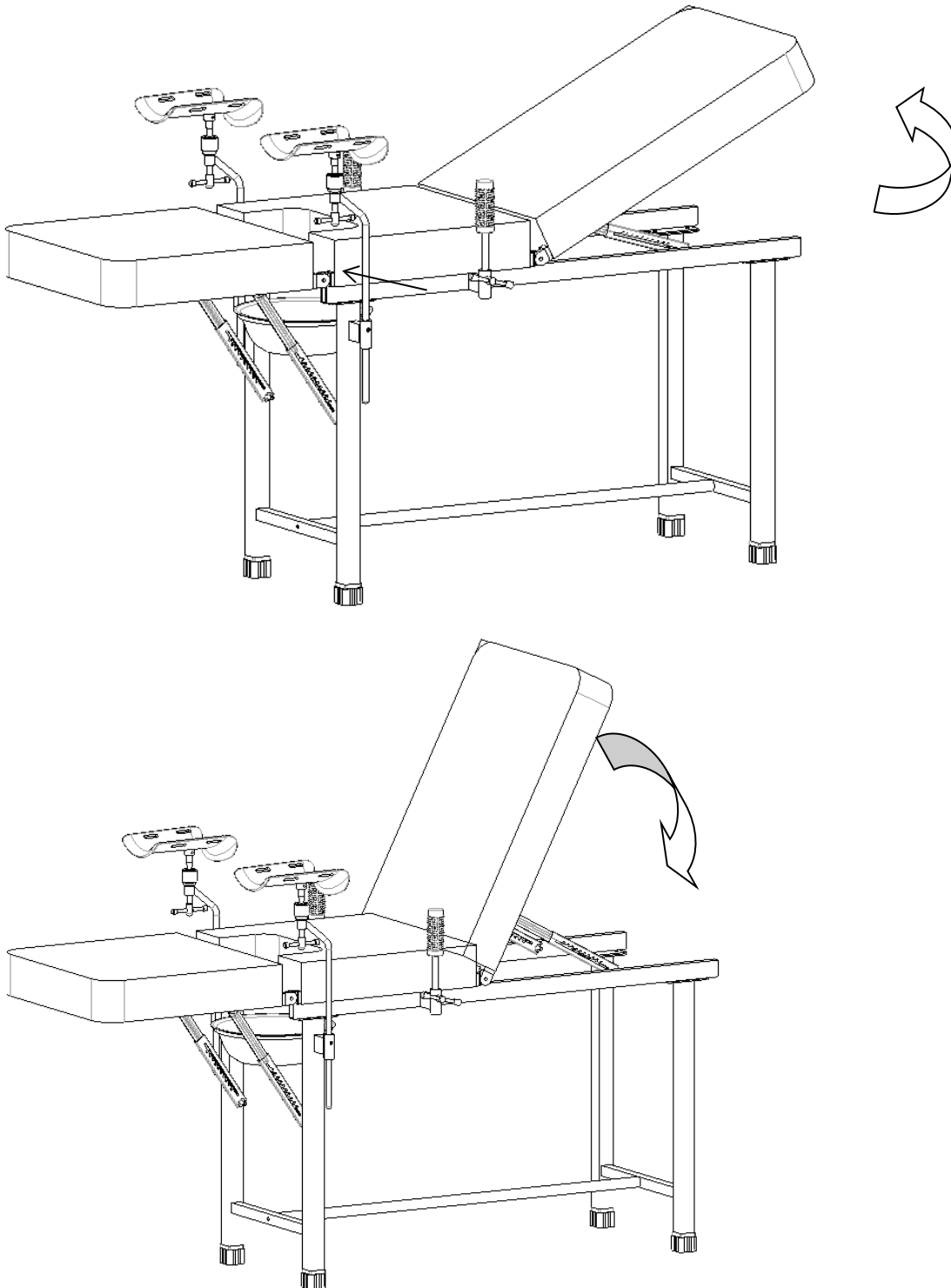

2.2 Einstellung des Beinteils

Heben Sie die Beinplatte direkt bis zum maximalen Winkel an und senken Sie dann die Rückenplatte langsam ab, um das Absenken der Beine abzuschließen.

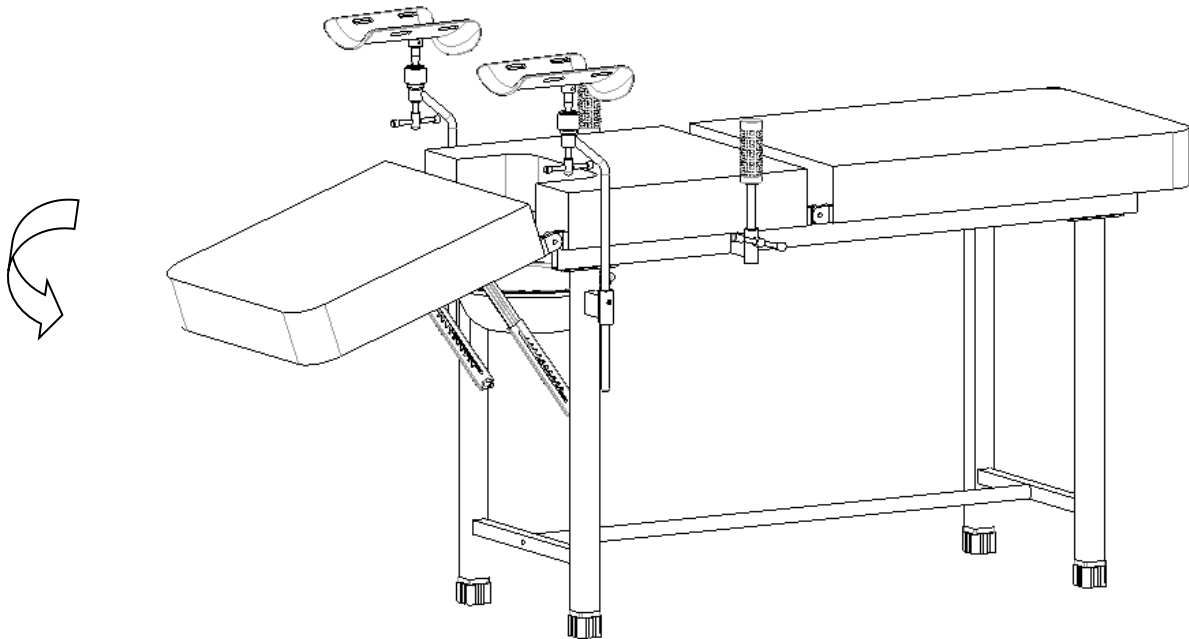

3. Wartung des gynäkologischen Tisches aus Edelstahl

1. Um den gynäkologischen Tisch aus Edelstahl sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, alle sechs Monate zu überprüfen, ob die Verbindungen fest sitzen und alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
2. Wenn der gynäkologische Tisch aus Edelstahl altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht hat, können die Metallteile des Behandlungswagens und die Kunststoffteile des Edelstahlbeckens recycelt werden.
3. Vermeiden Sie während des Gebrauchs Kratzer an der Platte durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.
4. Wenn die Platte versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Behandlungswagens, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.

4. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des gynäkologischen Tisches aus Edelstahl erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des gynäkologischen Tisches aus Edelstahl überstürztes Herausnehmen, starke Erschütterungen und schützen Sie ihn vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der gynäkologische Tisch aus Edelstahl sollte wie folgt gelagert werden:
 - a) Umgebungstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
 - c) Luftdruck: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten am Produkt durchführt.
2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Zerlegen Sie das Innere des Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Ab dem Kaufdatum wird das Produkt vom Unternehmen kostenlos repariert, wenn es innerhalb eines Jahres aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: A045-1 | REF.: 319-A045-1

GYNÄKOLOGISCHER TISCH



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

Nr. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Einheit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia (Spanien)

LOT:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com