




Manuel d'utilisation

A045-1

Table gynécologique en acier inoxydable

Code d'enregistrement : SKF-A

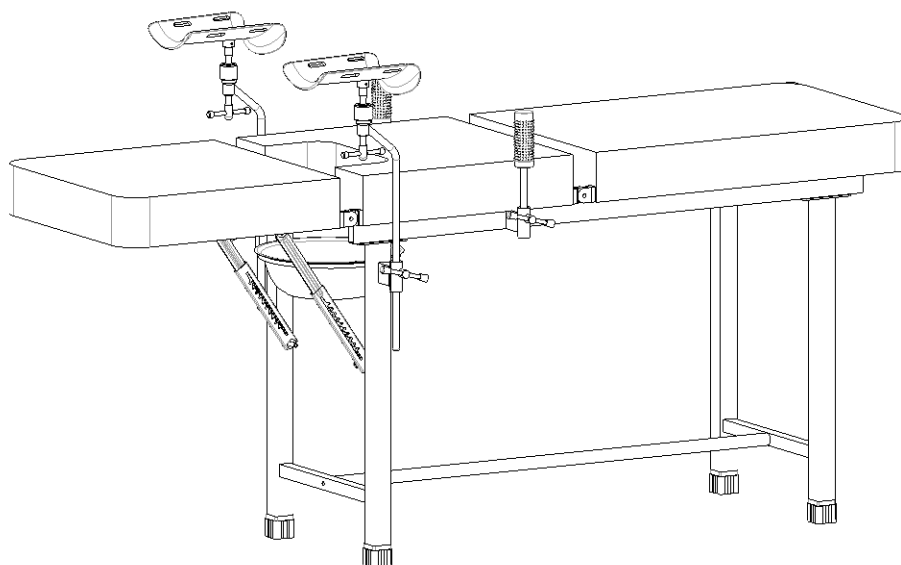

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co, Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

Contenu de l'article

Introduction au manuel	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation du pied de lit	6
1.3 Installation du tuyau de raccordement	7
1.4 Installation du niveau mécanique	8
1.5 Installation de la pédale	9
1.6 Installation de la barre de maintien	10
2. Méthode d'utilisation	11
2.1 Réglage du dossier	12
2.2 Réglage du repose-jambes	13
3. Table gynécologique en acier inoxydable - entretien	13
4. Emballage, transport, stockage	14
5. Service après-vente	14

Introduction au manuel

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de connaître le manuel de l'utilisateur et toutes les précautions.

► Ce manuel s'applique à la table gynécologique en acier inoxydable A045-1. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle de l'entretien.

► Les graphiques de ce manuel sont uniquement destinés à servir de référence aux utilisateurs. En cas d'utilisation réelle, veuillez vous référer à l'objet réel.

► Ce manuel d'utilisation comprend la description, l'instruction, l'entretien et les paramètres techniques du produit.

► Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.

► Toute personne utilisant ou faisant fonctionner ce produit doit le lire et s'y conformer.





► Sauf dans certaines situations inattendues, les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec l'utilisation et les précautions.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert la boîte d'emballage, vérifiez si les pièces suivantes sont complètes dans la boîte d'emballage :

Tableau a :

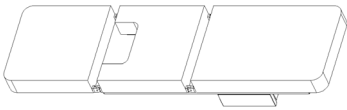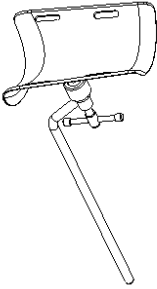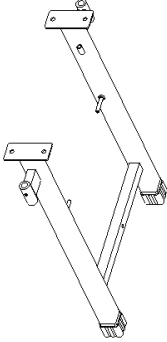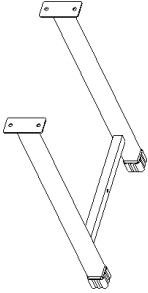NO.	Nom	Image	Spécification	QTÉ	Unité
1	Plaque de lit		/	1	pc
2	Étrier		/	2	pc
2	Derrière le pied de lit		L427*L653mm	1	pc
3	Pied de lit avant		L427*L653mm	1	pc








4	Cuvette		Φ 300*85mm	1	pc
5	Cerceau de bassin		Φ 285-L80mm	1	pc
7	Tuyau de raccordement		Φ 25*993-M8mm	1	pièces
8	Vis	/	Voir tableau a.1	1	régler

Tableau a.1



NO.	Nom	Image	Spécification	QTÉ	Unité
1	Vis hexagonale		M10*25mm	8	pièces
2	Tampon plat		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1.8\text{mm}$	8	pces
3	Rondelle élastique		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3\text{mm}$	8	pces
4	Ecrou		M10mm	8	pièces
5	Vis hexagonale		M8*40mm	2	pièces
6	Tampon plat		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1.2\text{mm}$	2	pces
7	Rondelle élastique		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2.5\text{mm}$	2	pièces
8	Contre-écrou		M8mm	2	pièces
9	Lit gynécologique complet		Sept pièces un ensemble	2	pièces
10	Structure de la main		$\Phi 32\text{mm}$	2	pièces
11	Manchon de poignée en plastique		$\Phi 32\text{mm}$	2	pièces

1.2 Installation du pied de lit



Poser un coussin de protection et mettre le corps du chariot d'instruments à l'envers ;

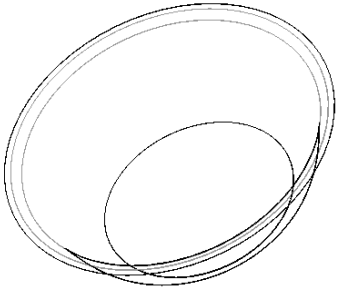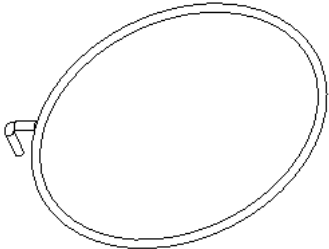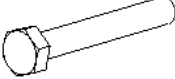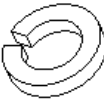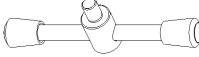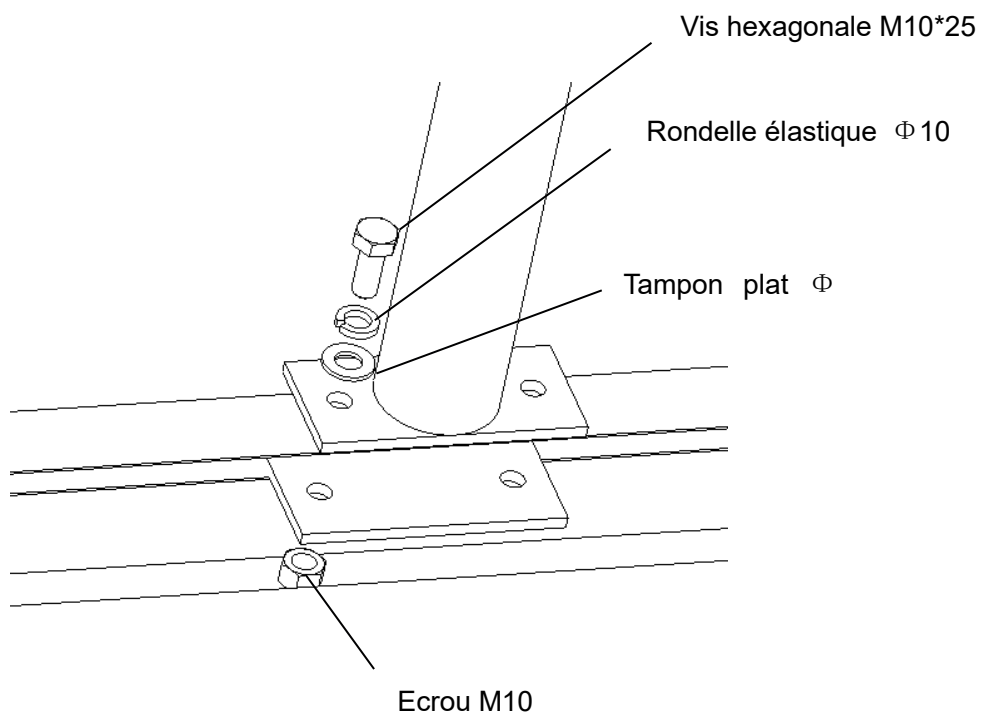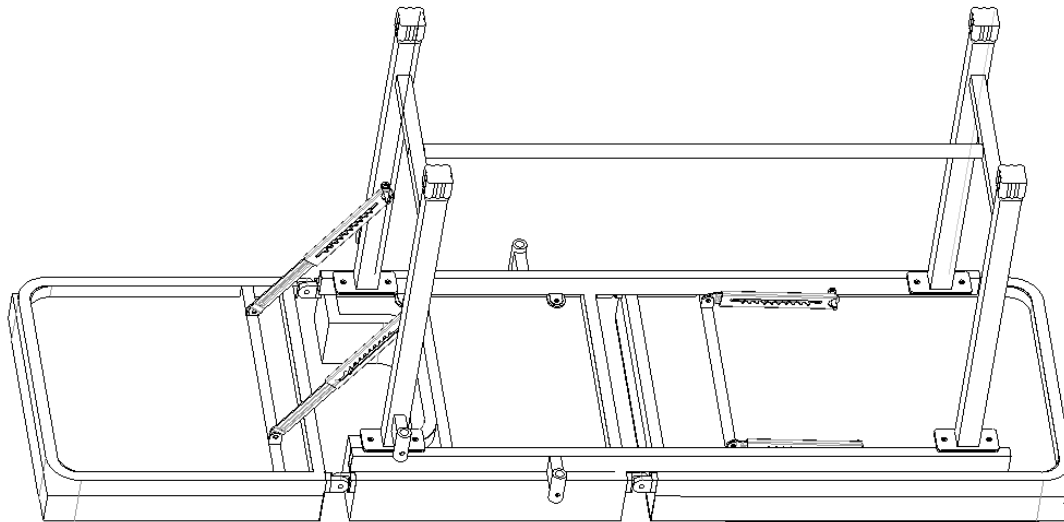

1.3 Installation du tuyau de raccordement

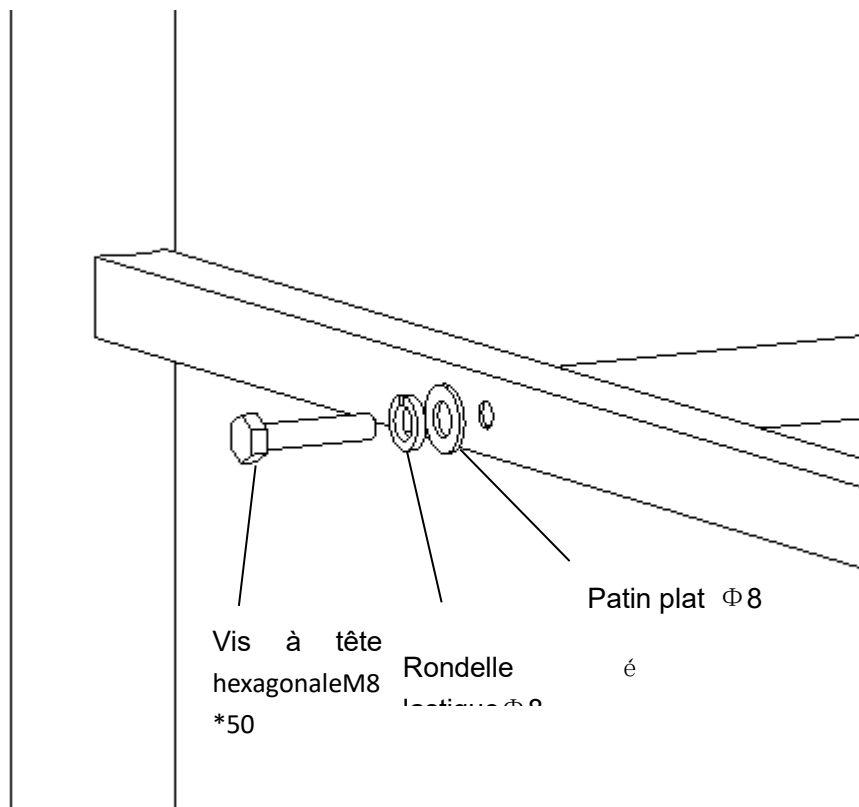
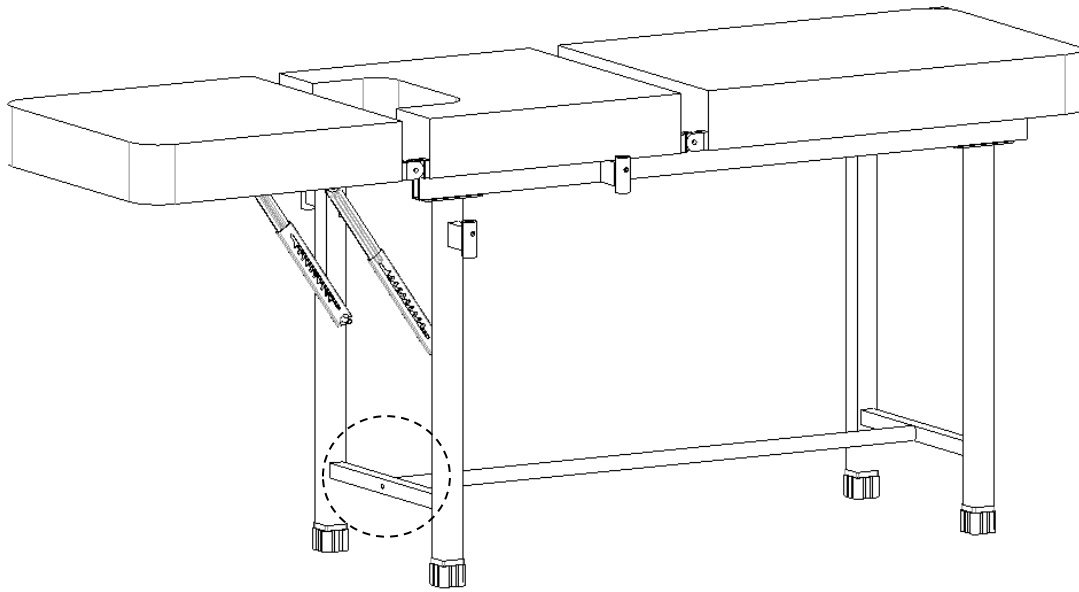


1.4 Installation du niveau mécanique

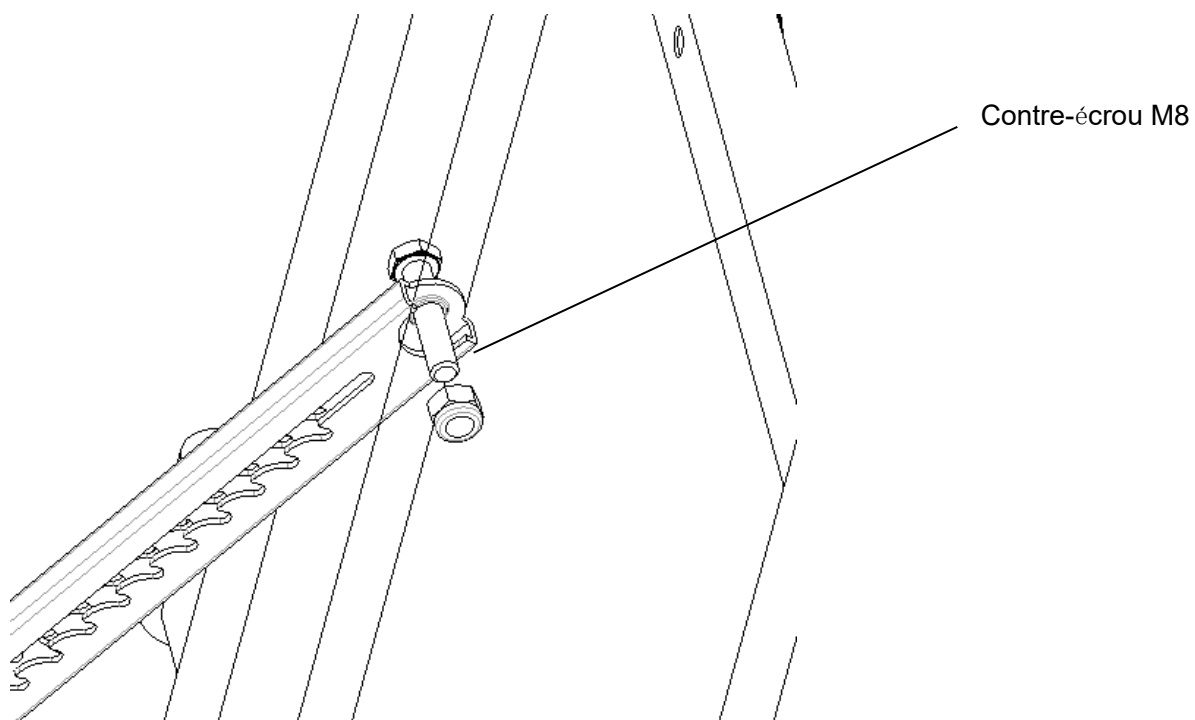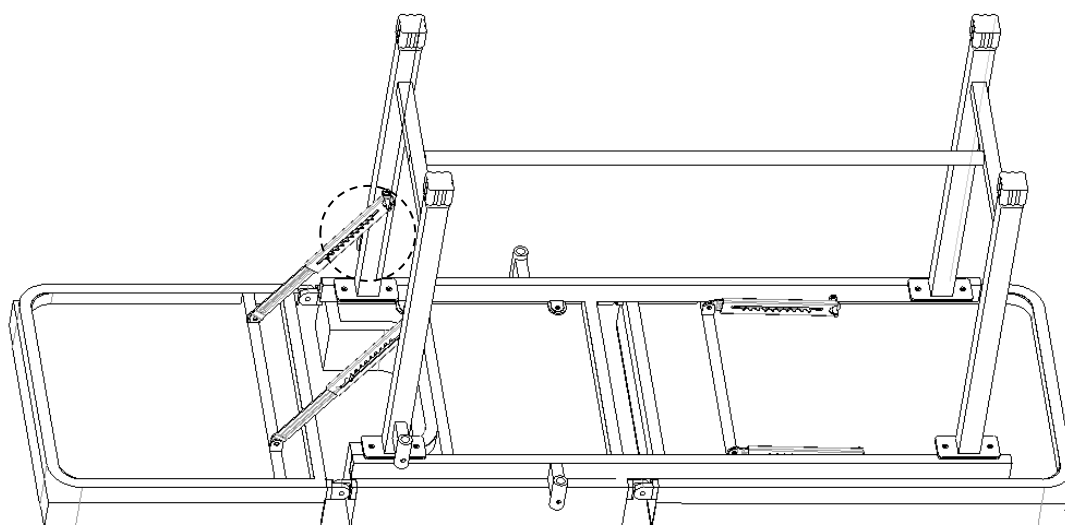


1.5 Installation de la pédale

Insérer la pédale dans le manchon à vis, tourner la clé 1 pour régler la hauteur de la pédale, et tourner la clé 2 pour régler l'angle de la pédale sur 360° .

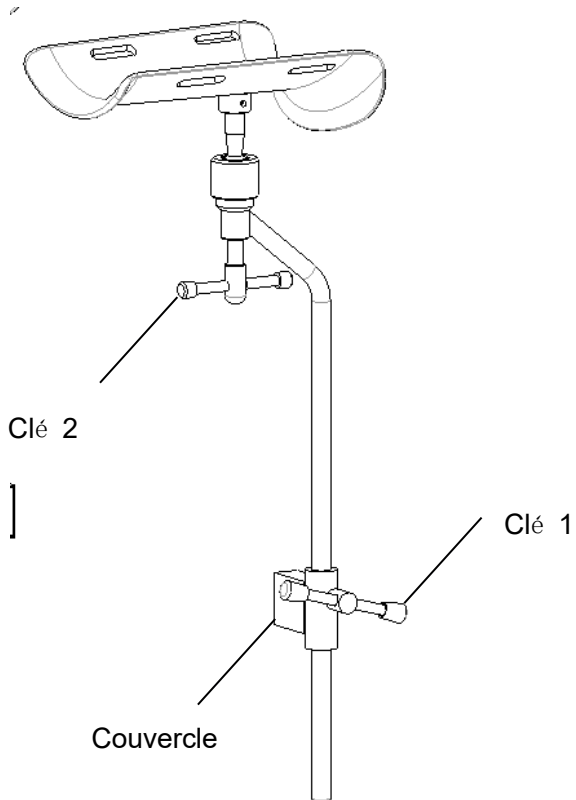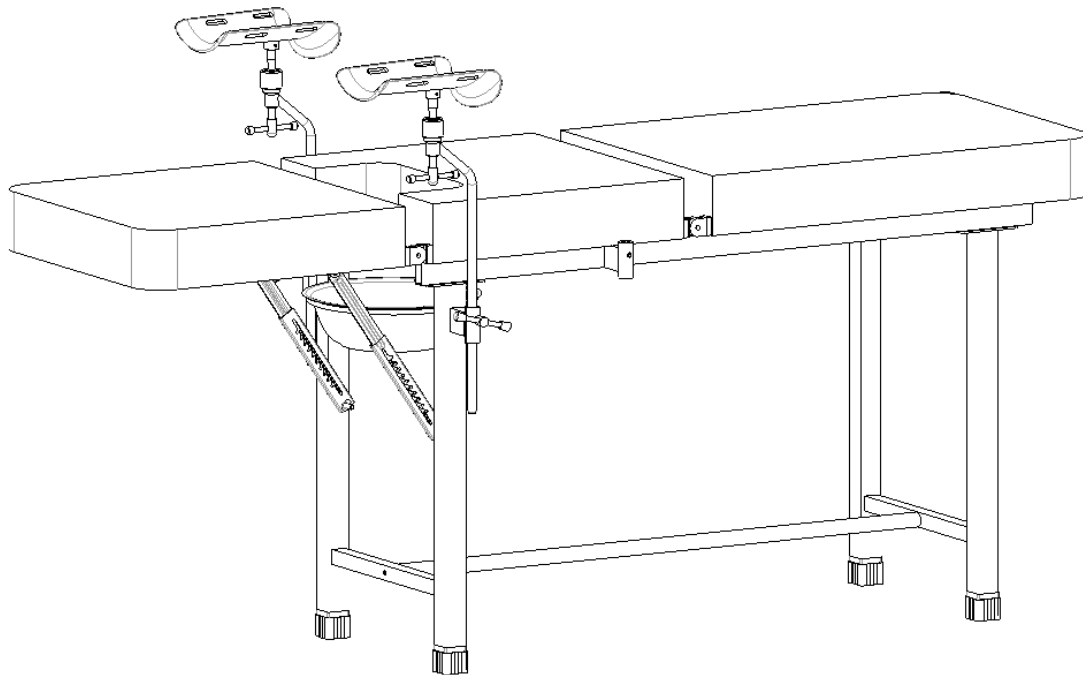


1.6 Installation de la barre de maintien

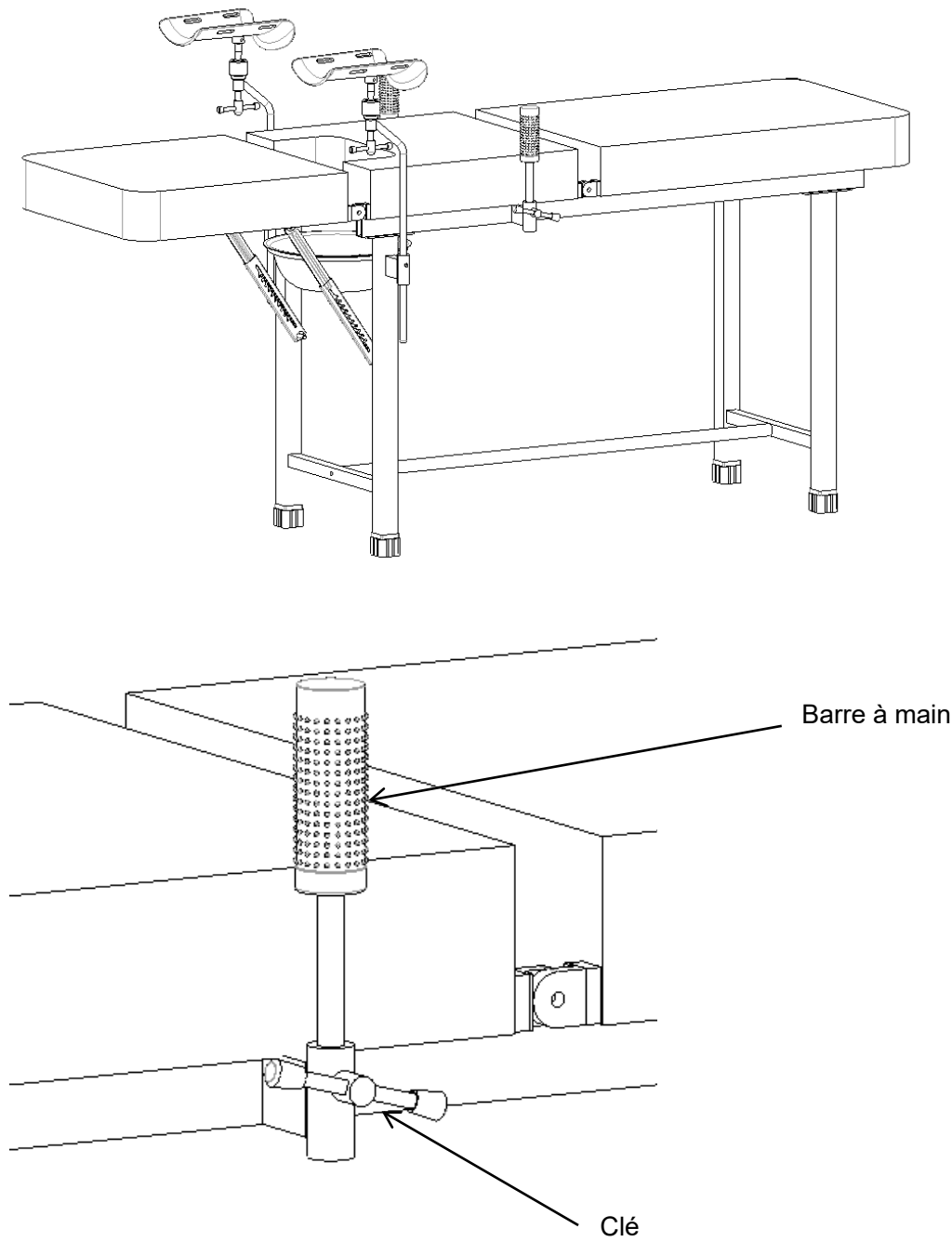

Tourner la clé permet de régler la hauteur de la barre de maintien.



2. méthode d'utilisation

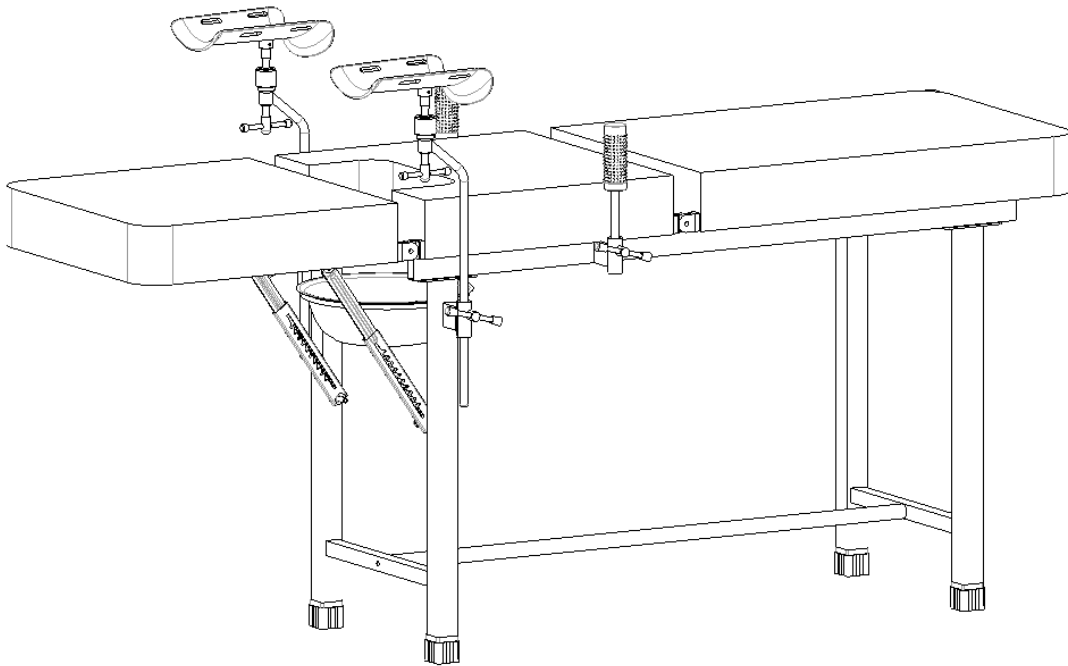

Dimension	Longueur	mm	1820±10
	Largeur		590±10
	Hauteur		800±10
Poids	Charge admissible	Kg	170


2.1 Réglage de la section arrière

Soulever la plaque arrière directement à l'angle désiré pour terminer le levage de la plaque arrière. Soulever la planche dorsale jusqu'à l'angle maximal, puis l'abaisser pour terminer la descente de la planche dorsale.

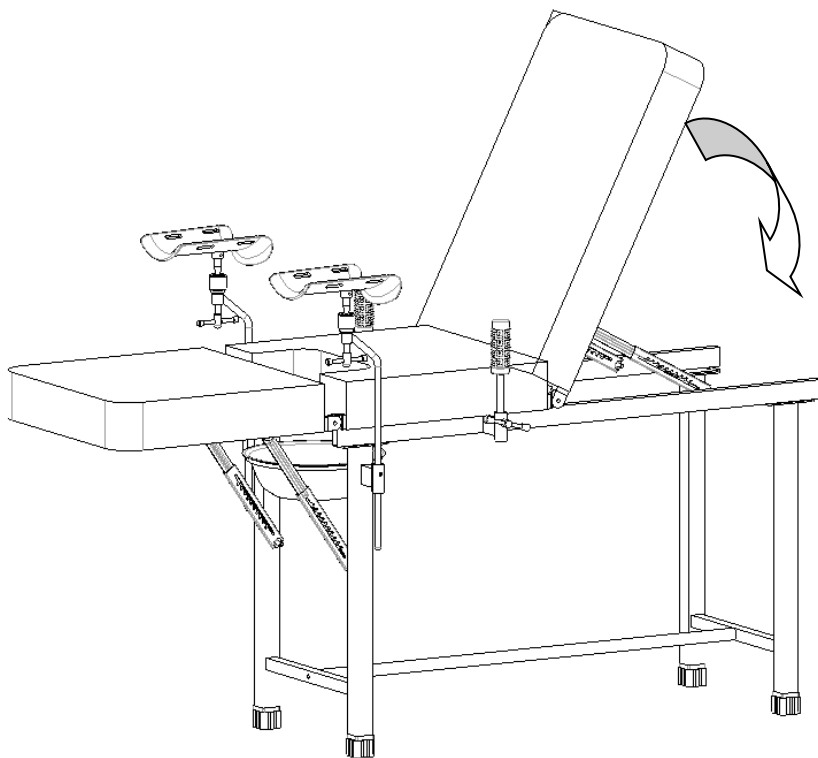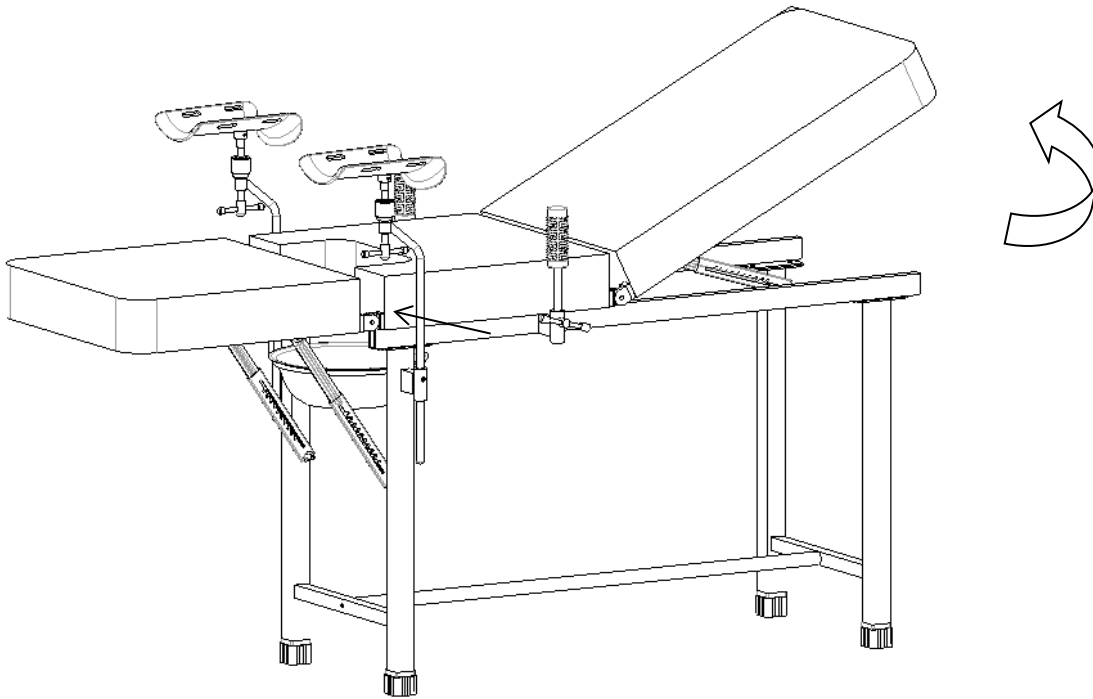

2.2 Réglage de la jambière

Soulever la plaque jambière directement jusqu'à l'angle maximal, puis abaisser lentement la plaque dorsale pour achever la descente de la plaque jambière.

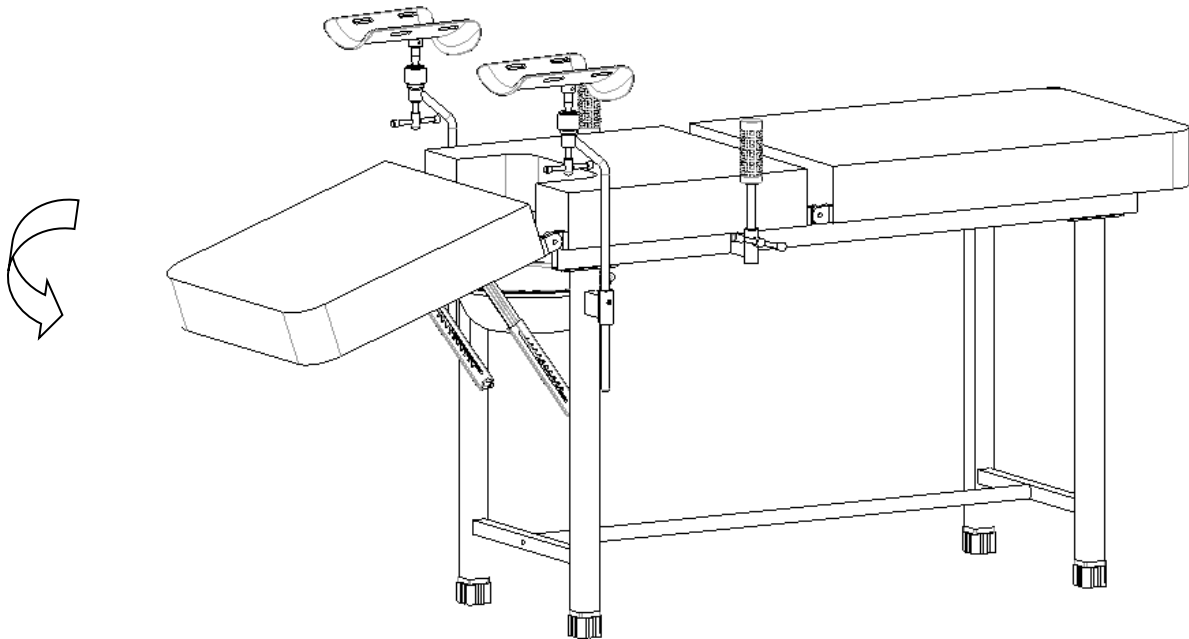

3. table gynécologique en acier inoxydable - entretien

1. Afin d'utiliser la table gynécologique en acier inoxydable en toute sécurité, des contrôles de sécurité doivent être effectués régulièrement. Il est recommandé de la vérifier tous les six mois pour s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.
2. Lorsque la table gynécologique en acier inoxydable vieillit et qu'elle atteint une certaine durée d'entretien, la partie métallique du chariot de traitement et les pièces en plastique du cadre du bassin en acier inoxydable peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angle vif ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour qu'il reste propre et sec.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot de traitement, car la surface en acier inoxydable rouillerait.

4. emballage, transport, stockage

1. L'emballage de la table gynécologique en acier inoxydable est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Pendant le transport de la table gynécologique en acier inoxydable, il faut éviter les chocs, les vibrations violentes et la protection contre les rayons du soleil et la pluie.
3. La table gynécologique en acier inoxydable doit être stockée :
 - a) Température ambiante : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. service après-vente

1. Veuillez conserver correctement les dossiers qui accompagnent la machine et les factures de ce produit, et vous devez présenter ces dossiers lorsque la société effectue la garantie et l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société à temps, afin qu'elle puisse vous fournir une assistance technique et des services d'entretien précis et rapides.
3. Ne démontez pas vous-même le dispositif interne de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

TABLE GYNÉCOLOGIQUE**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Province de Jiangsu, Chine

**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Pays-Bas



Importador : Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Espagne)

LOT:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co, Ltd.

CODE DE STOCK : 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com