




Utente manuale

A045-1 **Tavolo ginecologico in acciaio inox**

Codice di registrazione: SKF-A

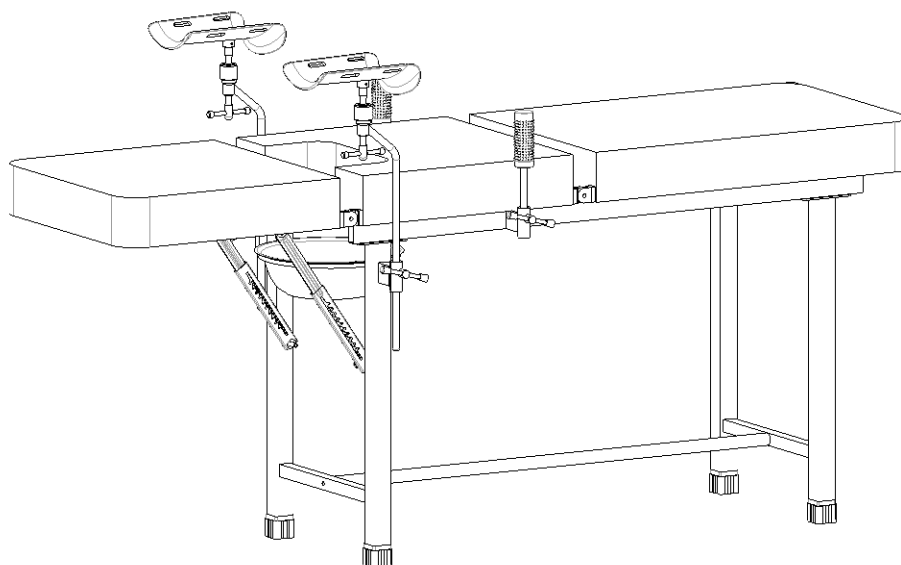

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098

Contenuto del manuale

Introduzione al manuale	2
1. Guida all'installazione	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione del piede del letto.....	6
1.3 Installazione del tubo di collegamento	7
1.4 Installazione del livello meccanico	8
1.5 Installazione del pedale	9
1.6 Installazione della barra delle mani.....	<u>10</u>
2. Metodo di utilizzo.....	<u>11</u>
2.1 Regolazione della sezione posteriore	<u>12</u>
2.2 Regolazione della sezione gambe	<u>13</u>
3. Tavolo ginecologico in acciaio inox - manutenzione.....	<u>13</u>
4. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	<u>14</u>
5. Servizio post-vendita	<u>14</u>

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Si richiede a tutti gli utenti di conoscere il manuale d'uso e tutte le precauzioni.

Questo manuale è applicabile al tavolo ginecologico A045-1 in acciaio inox. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni operative e i punti di controllo della manutenzione.

La grafica di questo manuale è solo un riferimento per l'utente. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

Questo manuale d'uso comprende la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza o il distributore.

Chiunque utilizzi o faccia funzionare questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.





Salvo situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscere l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto la confezione, verificare che i seguenti componenti siano completi nella confezione:

Tabella a:

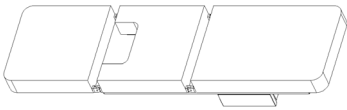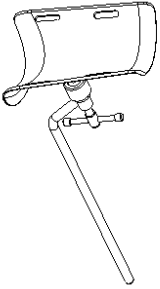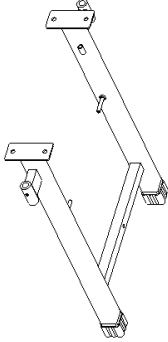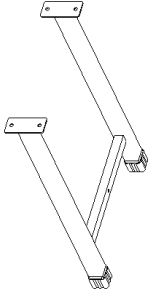NO.	Nome	Immagine	Specifiche	Q.TÀ	Unità
1	Piastra letto		/	1	pc
2	Staffa		/	2	pezzi
2	Dietro il piede del letto		L427*W653mm	1	pz
3	Piede del letto anteriore		L427*W653mm	1	pc











4	Bacino		ϕ 300*85mm	1	pc
5	Cerchio per bacino		ϕ 285-L80mm	1	pc
7	Tubo di collegamento		Φ 25*993-M8mm	1	pz
8	Vite	/	Fare riferimento alla tabella a.1	1	set

Tabella a.1



NO.	Nome	Immagine	Specifiche	Q.TÀ	Unità
1	Vite esagonale		M10*25 mm	8	pezzi
2	Cuscinetto piatto		$\Phi 10*\Phi 21*H1,8\text{mm}$	8	pz.
3	Rondella elastica		$\Phi 10*\Phi 17*H3\text{mm}$	8	pz.
4	Dado		M10mm	8	pezzi
5	Vite esagonale		M8*40mm	2	pezzi
6	Cuscinetto piatto		$\Phi 8*\Phi 16*H1,2\text{mm}$	2	pz.
7	Rondella elastica		$\Phi 8*\Phi 14*H2,5\text{ mm}$	2	pz.
8	Dado di bloccaggio		M8 mm	2	pezzi
9	Set completo letto ginecologico		Sette pezzi un set	2	pezzi
10	Struttura della mano		$\Phi 32\text{mm}$	2	pezzi
11	Maniglia in plastica		$\Phi 32\text{mm}$	2	pezzi

1.2 Installazione del piede del letto



Stendere un cuscinetto di protezione e mettere il corpo del carrello portastrumenti sottosopra;

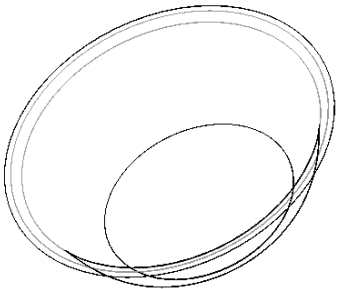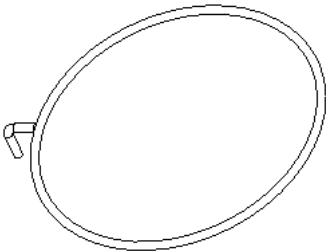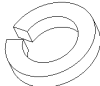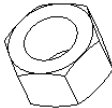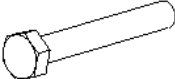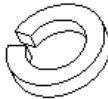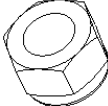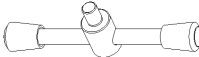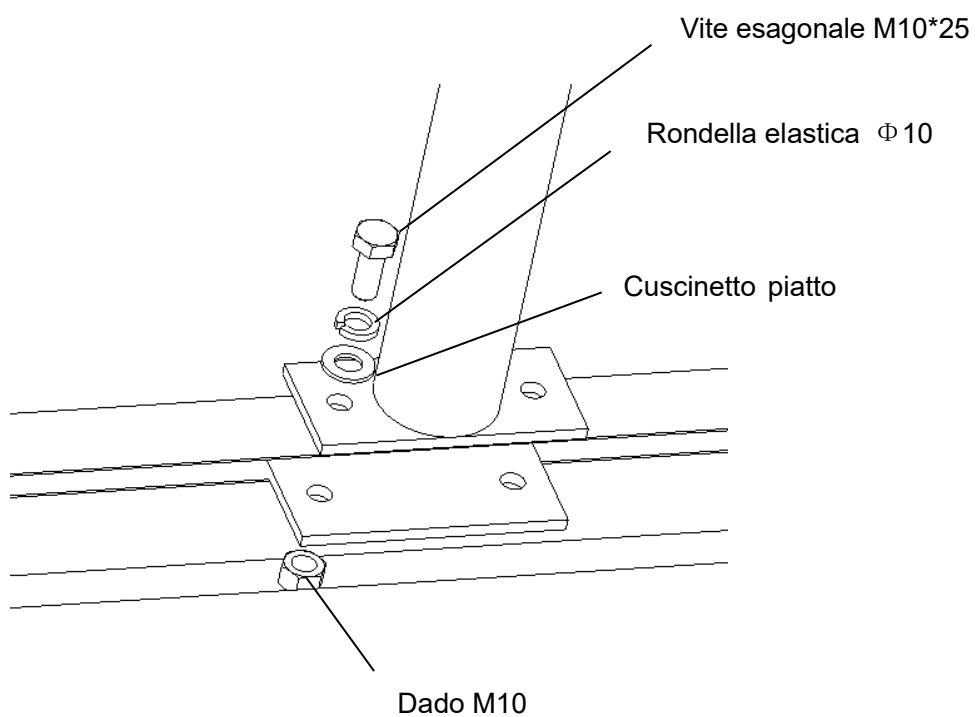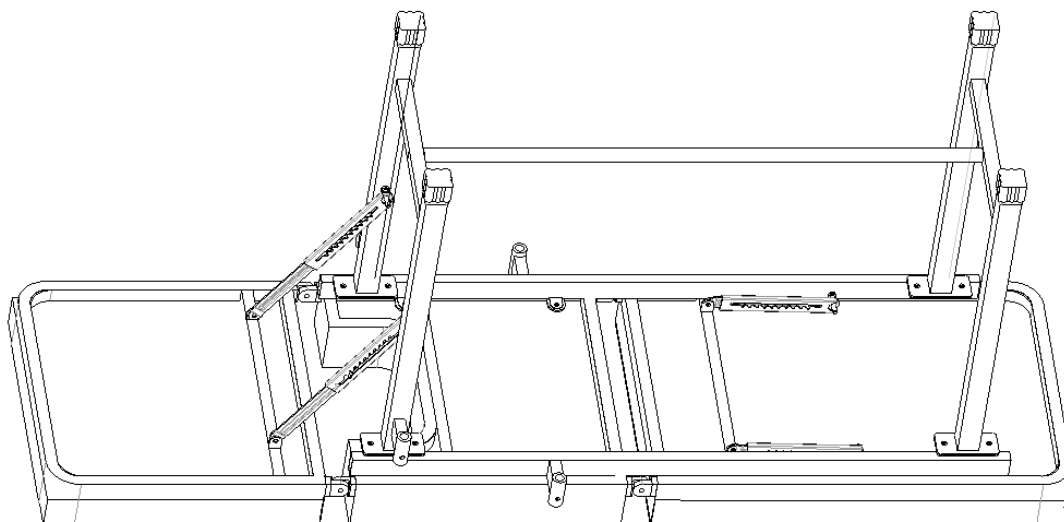

1.3 Installazione del tubo di collegamento

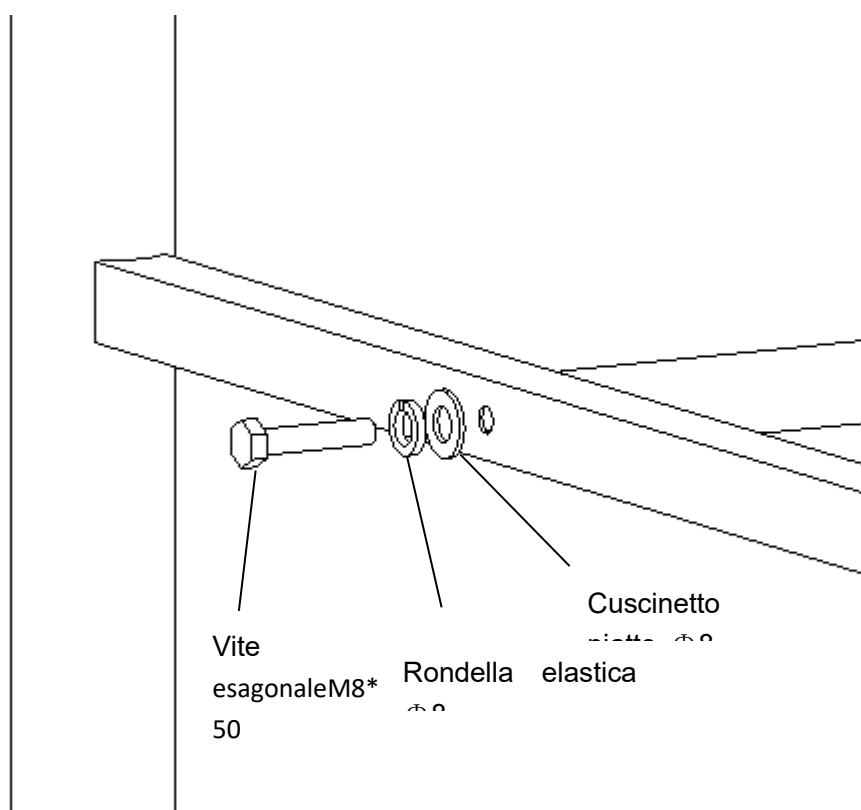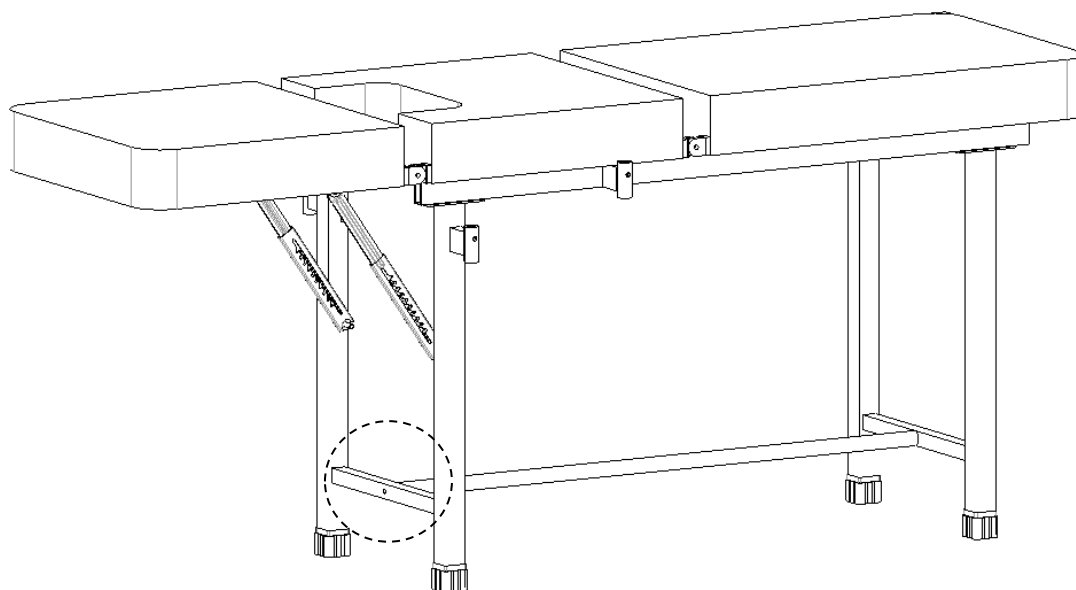


1.4 Installazione meccanica del livello

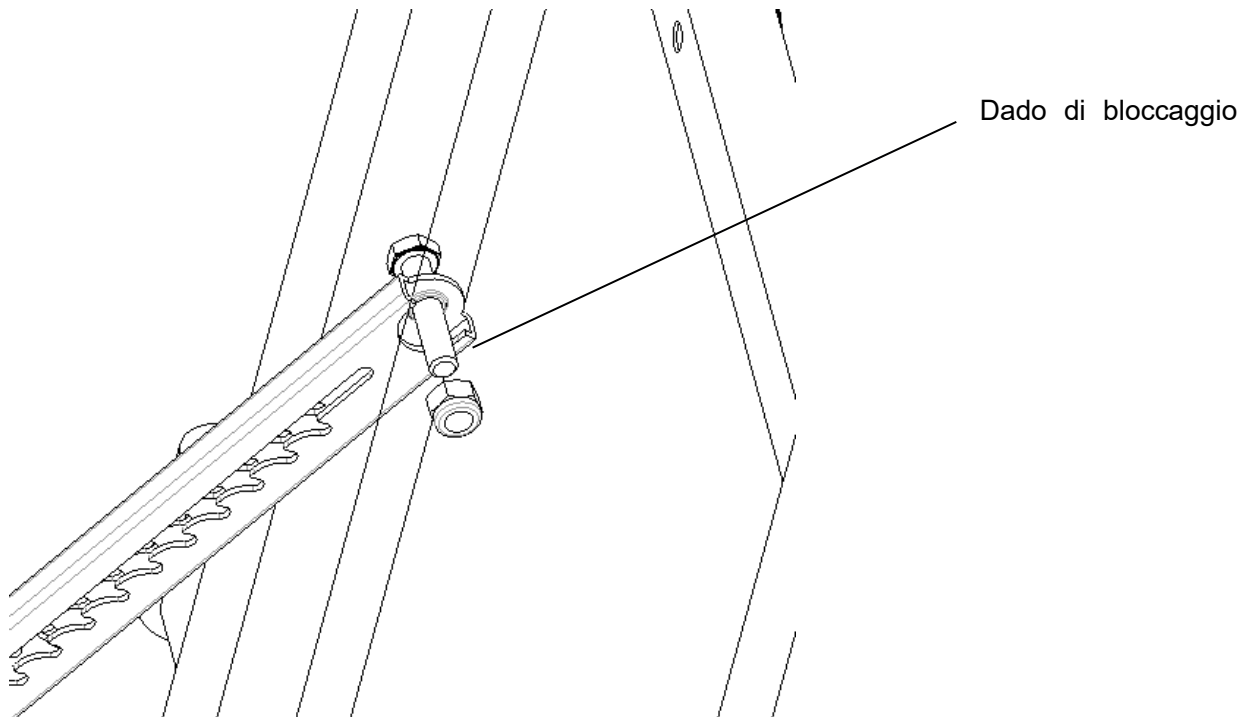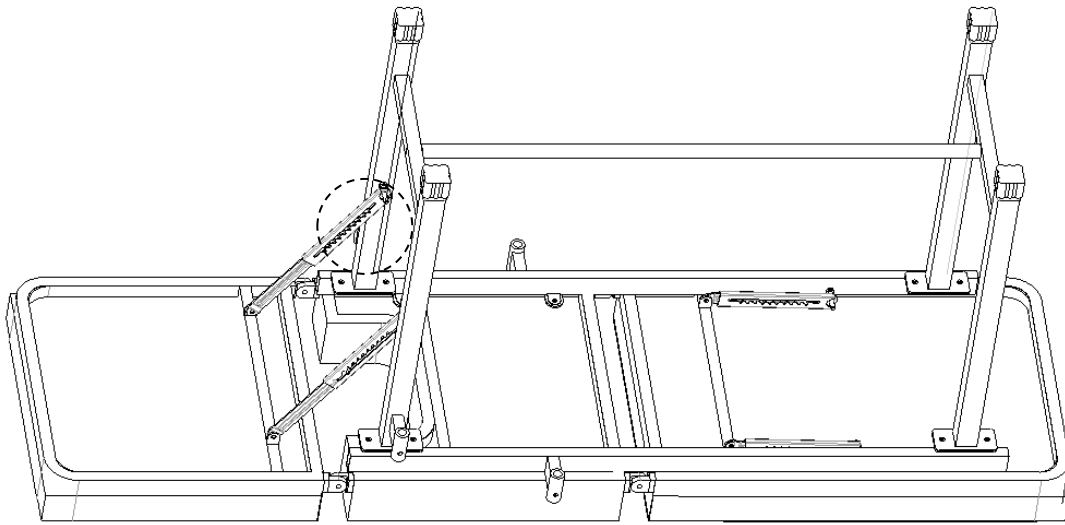


1.5 Installazione del pedale

Inserire il pedale nel manicotto a vite, ruotare la chiave 1 per regolare l'altezza del pedale e ruotare la chiave 2 per regolare l'angolo del pedale di 360° .

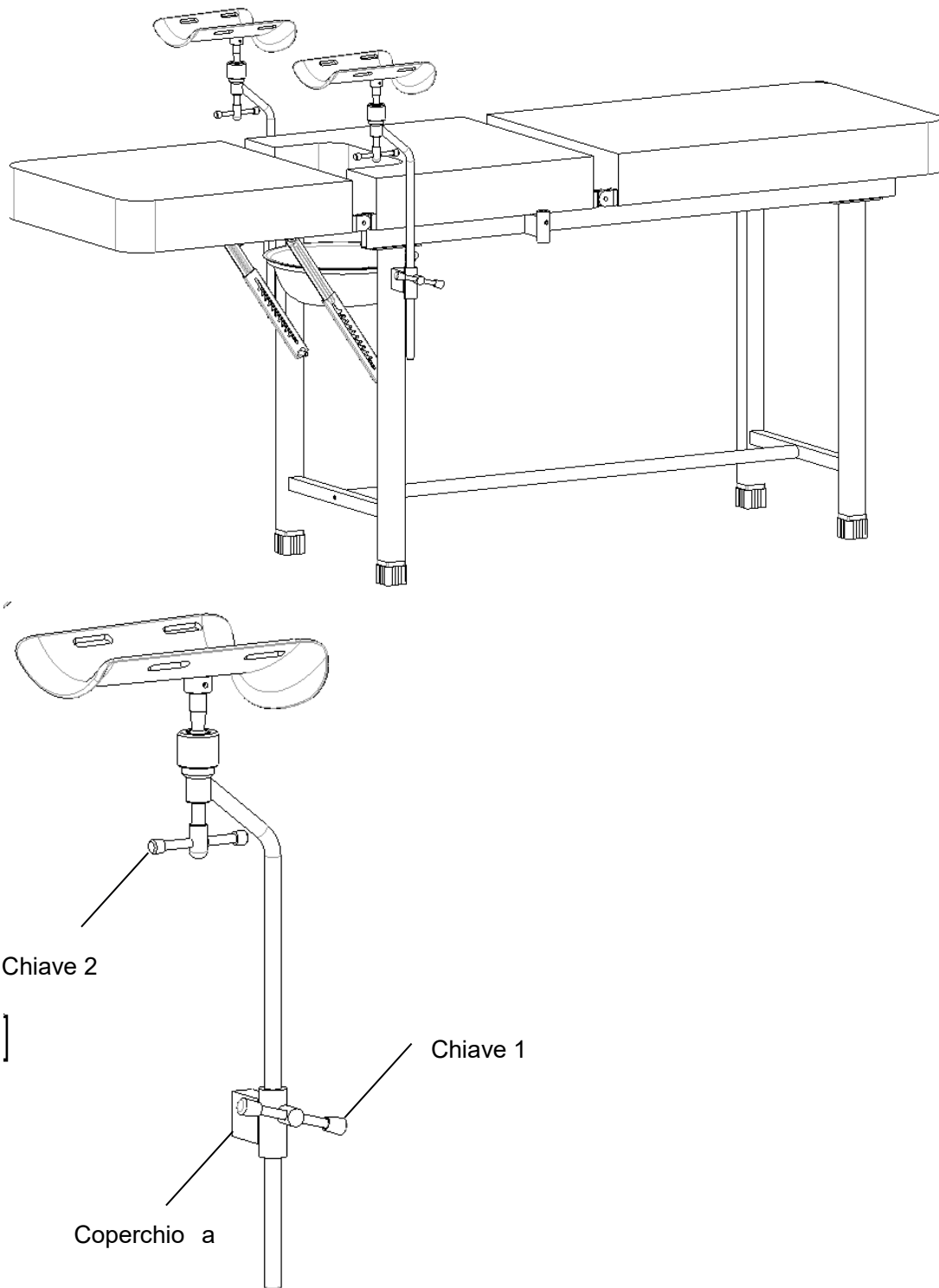


1.6 Installazione del manubrio

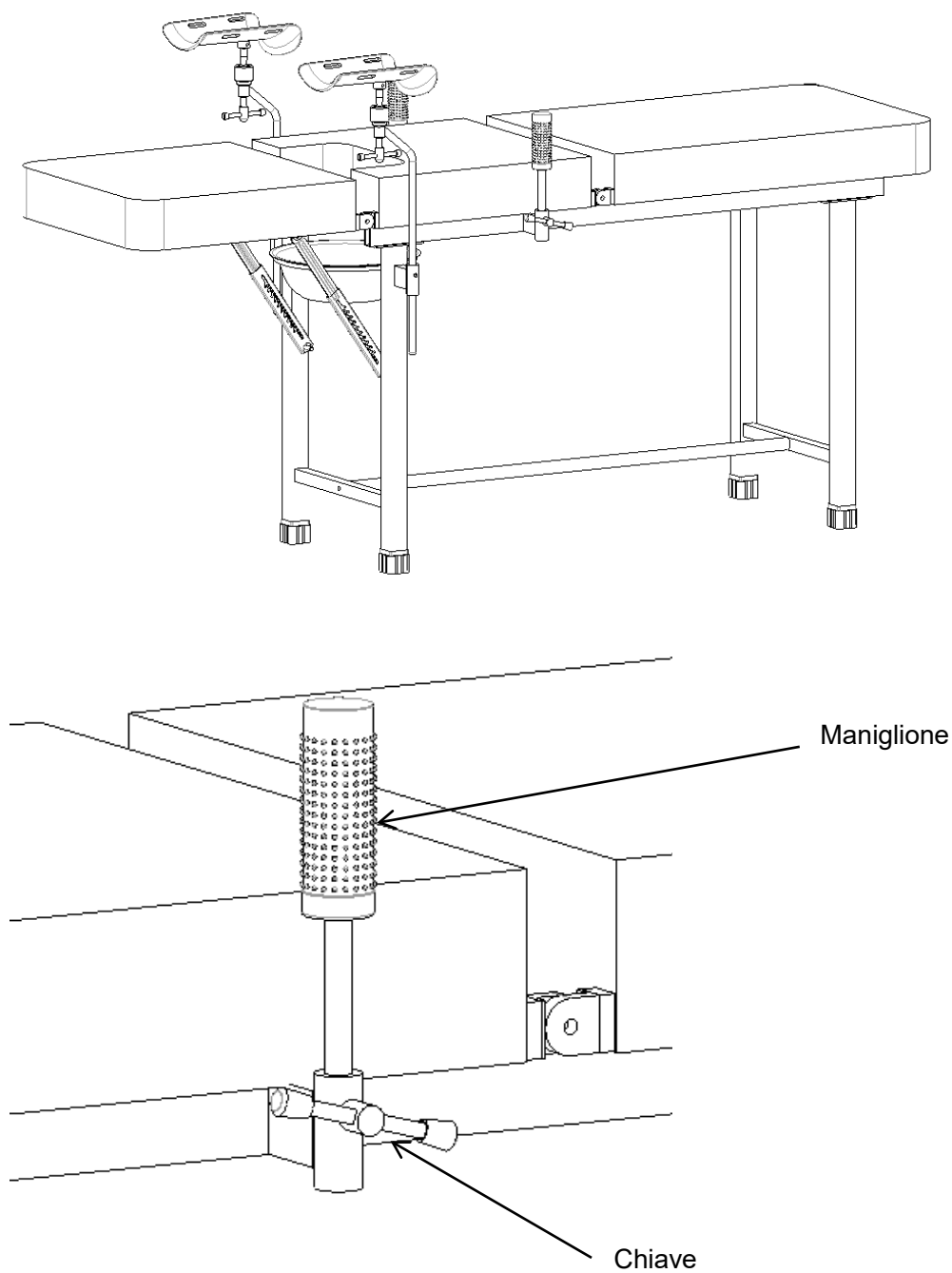

Ruotando la chiave è possibile regolare l'altezza della barra manuale.


2. Metodo di utilizzo

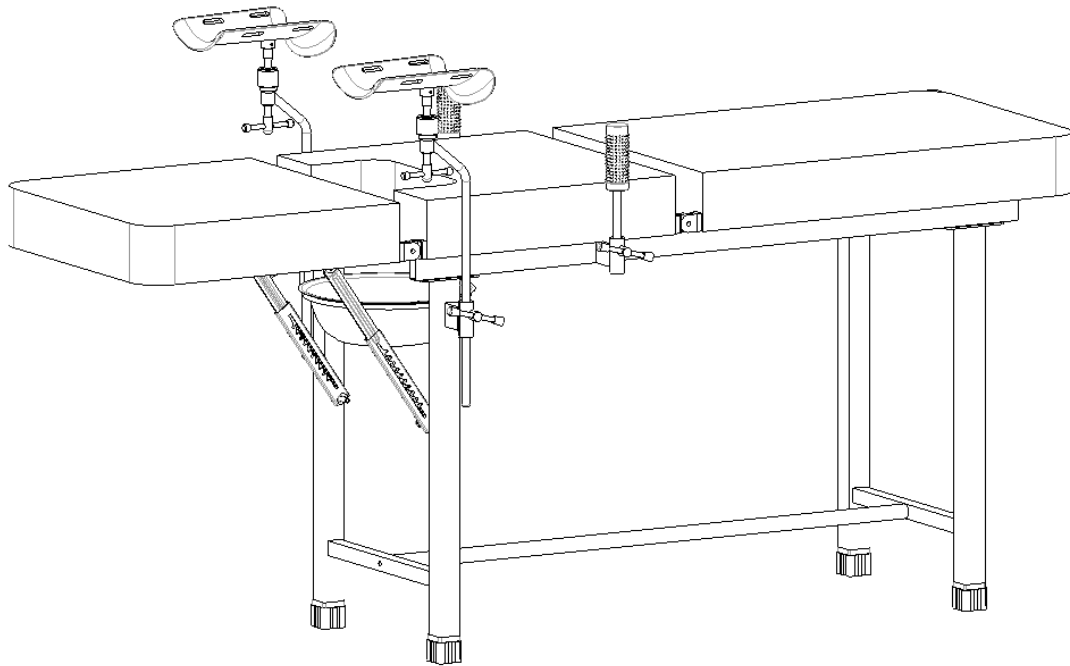

Dimensione	Lunghezza	mm	1820±10
	Larghezza		590±10
	Altezza		800±10
Peso	Portata sicura	Kg	170


2.1 Regolazione della sezione posteriore

Sollevare il pannello posteriore direttamente all'angolo desiderato per completare il sollevamento del pannello posteriore. Sollevare la piastra posteriore fino all'angolo massimo, quindi abbassarla per completare la discesa della piastra posteriore.

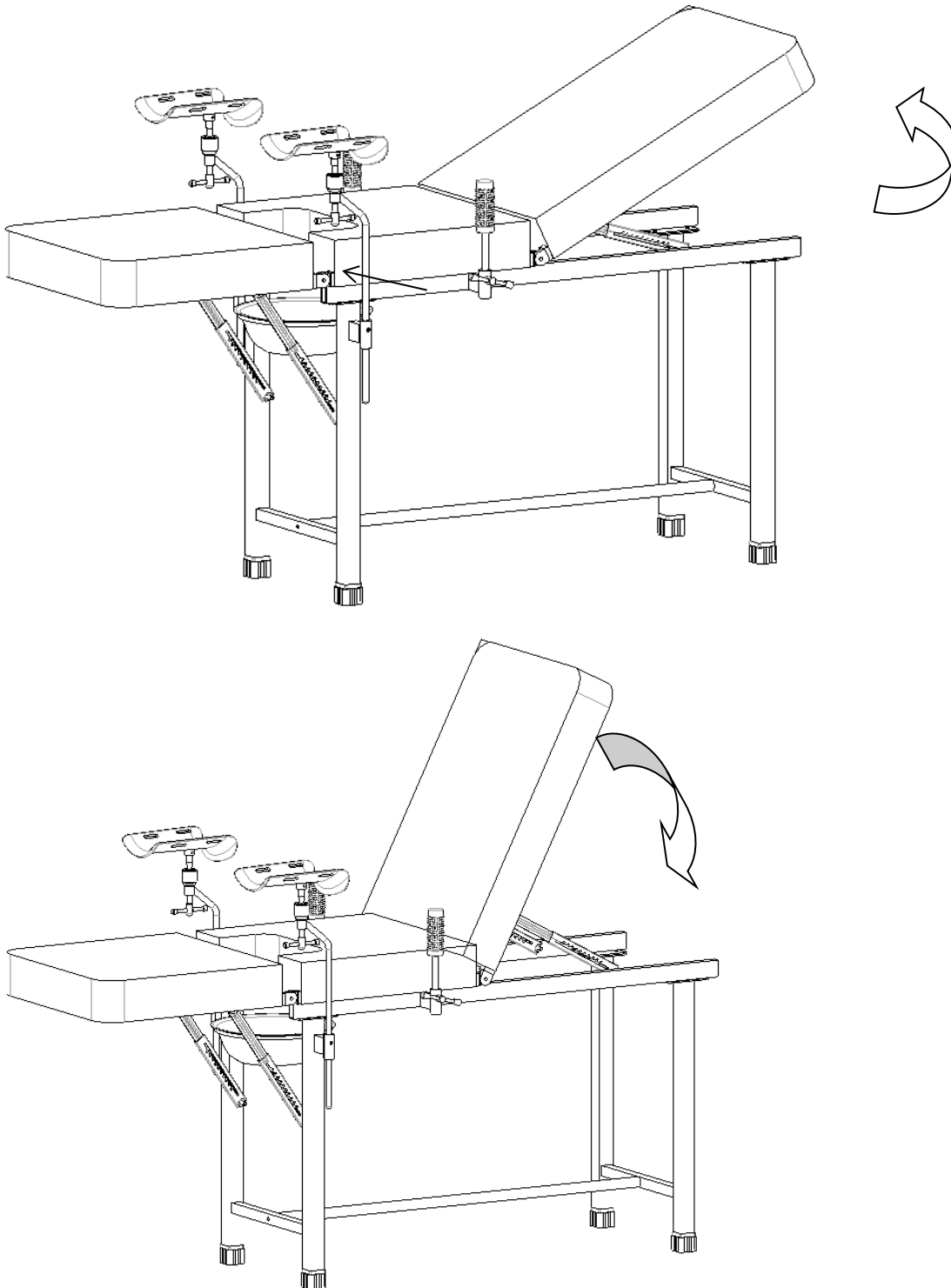

2.2 Regolazione della sezione gambe

Sollevare la piastra gambe direttamente all'angolo massimo, quindi abbassare lentamente la piastra posteriore per completare la discesa delle gambe.

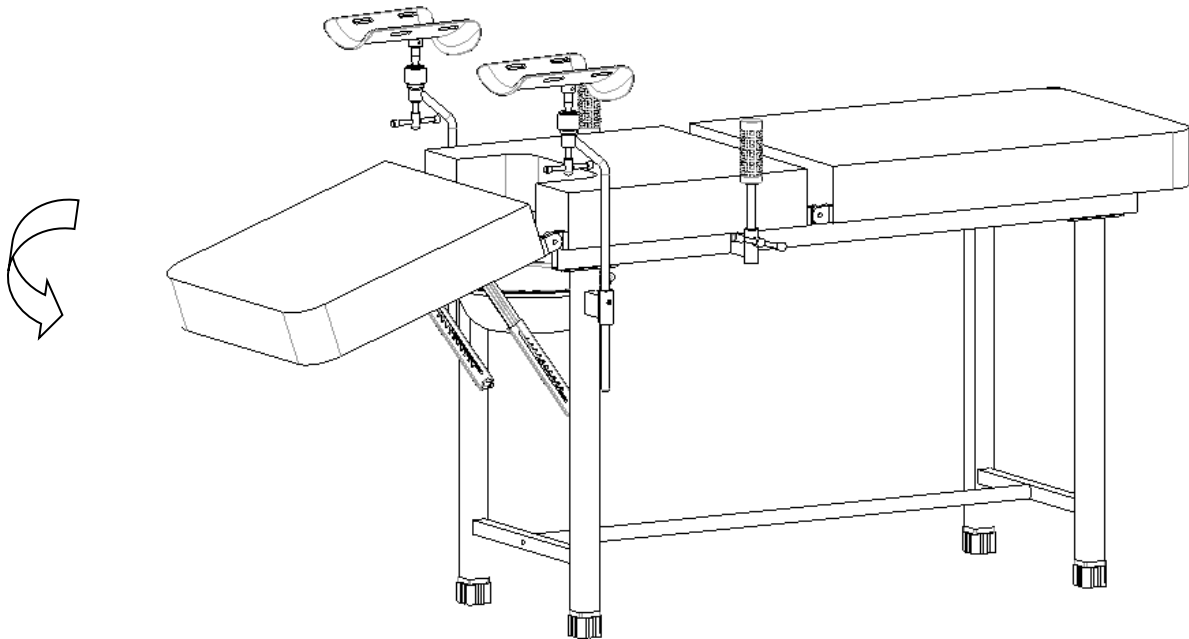

3. Tavolo ginecologico in acciaio inox - manutenzione

1. Per utilizzare il tavolo ginecologico in acciaio inox in modo sicuro, è necessario eseguire regolarmente le ispezioni di sicurezza. Si raccomanda di controllarlo ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.
2. Quando il tavolo ginecologico in acciaio inox invecchia e raggiunge un certo tempo di manutenzione, la parte metallica del carrello di trattamento e le parti in plastica del telaio del bacino in acciaio inox possono essere riciclate.
3. Evitare di graffiare il pannello con apparecchi o coltelli ad angolo vivo durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello di trattamento, in quanto potrebbero causare la formazione di ruggine sulla superficie in acciaio inox.

4. Imballaggio, trasporto e stoccaggio

1. L'imballaggio del tavolo ginecologico in acciaio inox viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del lettino ginecologico in acciaio inox, evitare di sottoporlo a forti vibrazioni e di proteggerlo dalla luce solare e dalla pioggia.
3. Il tavolo ginecologico in acciaio inox deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Umidità relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressione atmosferica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i file forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto; è necessario presentare questi file quando l'azienda esegue la garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare la nostra azienda in tempo, in modo che la nostra azienda possa fornire un supporto tecnico accurato e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Non smontare da soli il dispositivo interno di questo prodotto per evitare danni inutili. Se l'uso è compromesso da problemi di qualità, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il nostro rivenditore autorizzato.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO:A045-1 | RIF.: 319-A045-1

TAVOLO GINECOLOGICO



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parco dimostrativo dell'agricoltura moderna, città di Zhangjiagang,
Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Paesi Bassi



Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Spagna)

LOTTO:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com