




Benutzer handbuc h

SK-B1 **Untersuchungstisch aus Edelstahl**

Registrierungscode: SK-B1

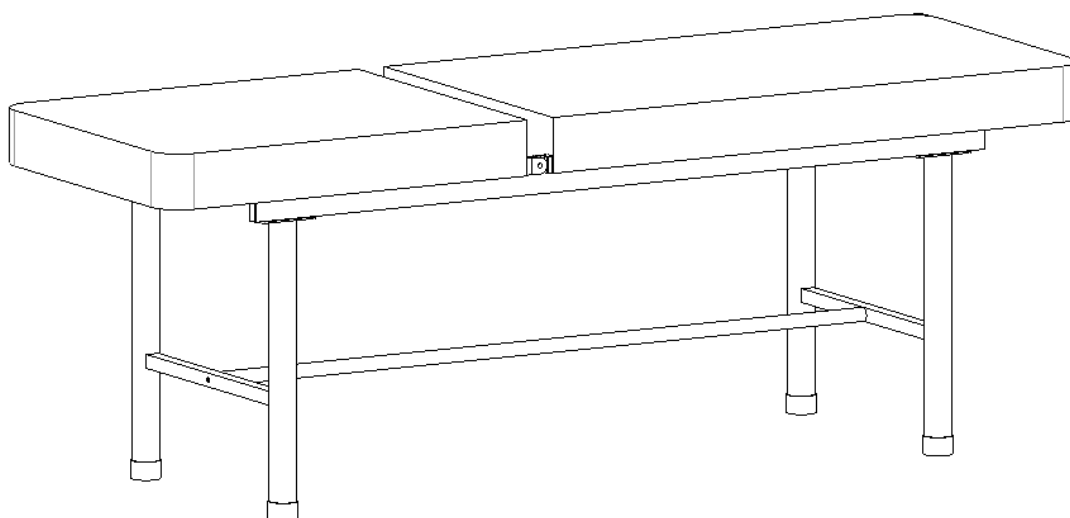

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

LAGER-CODE: 870098

Inhalt

Manuelle Einführung	2
1. Installationsanleitung.....	3
1.1 Liste des Standardzubehörs	3
1.2 Installation der Fußkonstruktion	5
1.3 Installation der Verbindungsrohre	6
2. Verwendung	7
2.1 Funktion zum Anheben der Rückenlehne	7
3. Wartung von Edelstahl-Untersuchungstischen-	8
4. Verpackung, Transport, Lagerung	9
5. Kundendienst	9

Manuelle Einführung

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Verwendung genau. Wir verlangen von allen Benutzern, dass sie die Bedienungsanleitung und alle Vorsichtsmaßnahmen kennen.

► Diese Anleitung gilt für den Untersuchungstisch SK-B1 aus Edelstahl. Sie enthält die Installationsmethode, Bedienungsanweisungen und Wartungs-Checkpunkte.

► Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für die Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

► Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technischen Parameter des Produkts.

► Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler.

► Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.

► Außer in unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind.

Tabelle a:










Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Couchplatte		/	1	Stück
2	Fußkonstruktion		539*543 mm	2	Stück
3	Verbindungsrohr		Φ25*1,2*1253-M8 mm	1	Stück
4	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Set

Tabelle a.1:



Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Außensechskantschraube		M10*25 mm	8	Stück
2	Flache Unterlegscheibe		Φ10*Φ21*H1,8 mm	8	Stück
3	Federscheibe		Φ 10* Φ 17*H3 mm	8	Stück
4	Sicherungsmutter		M10 mm	8	Stück
5	Außensechskantschraube		M8*40 mm	2	Stück
6	Flache Unterlegscheibe		Φ8*Φ16*H1,2 mm	2	Stück
7	Federscheibe		Φ8*Φ14*H2,5 mm	2	Stück

1,2 Montage der Fußkonstruktion


Legen Sie eine Schutzunterlage aus und stellen Sie die Hauptkonstruktion auf den Kopf.

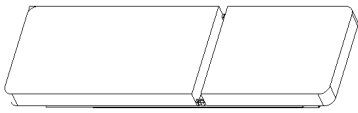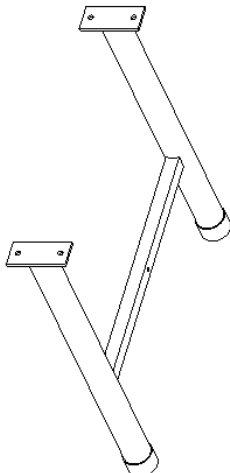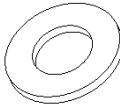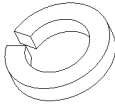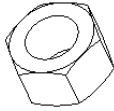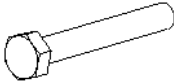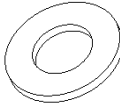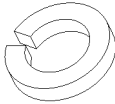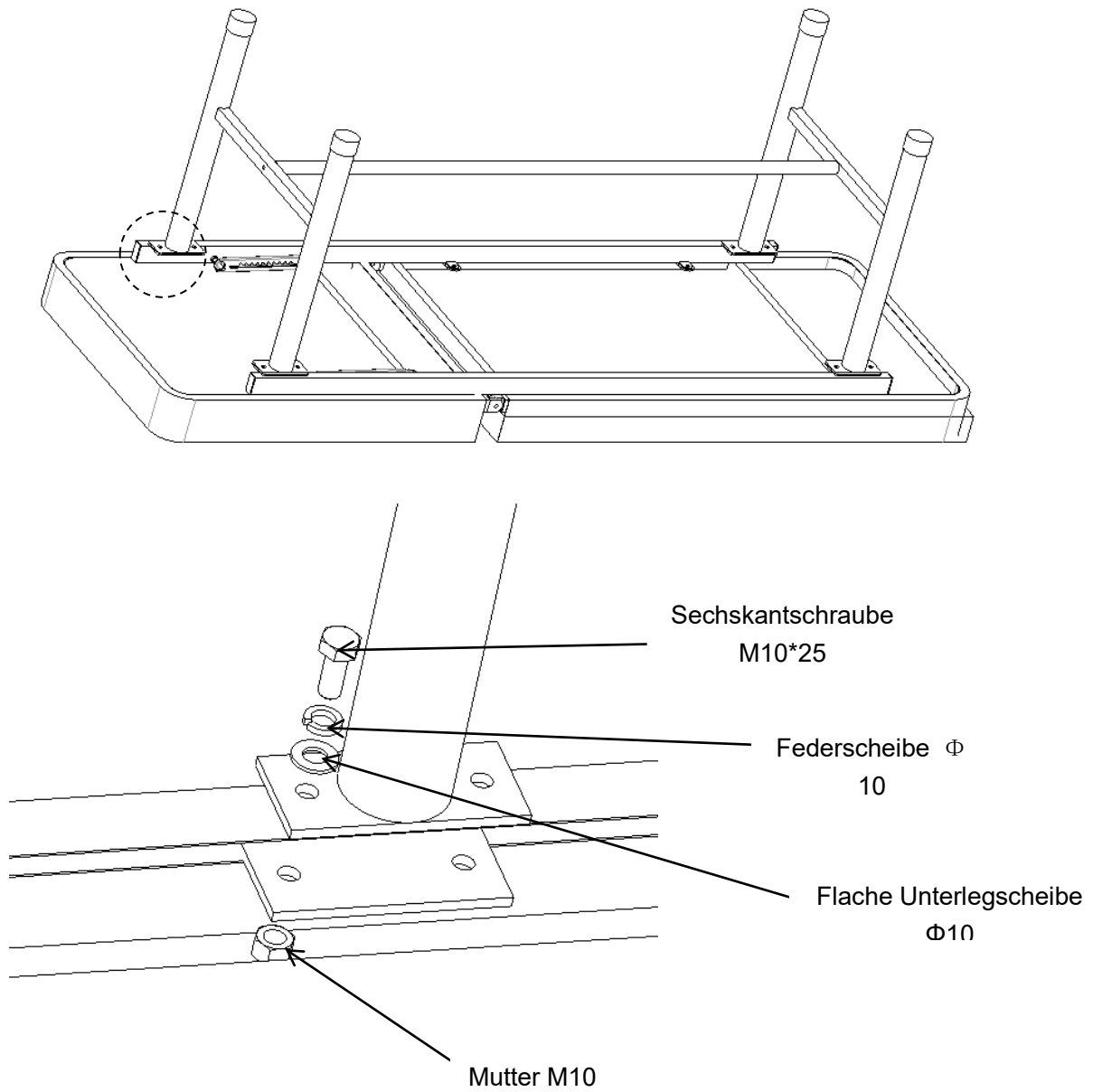

1.3 Installation des Verbindungsrohrs

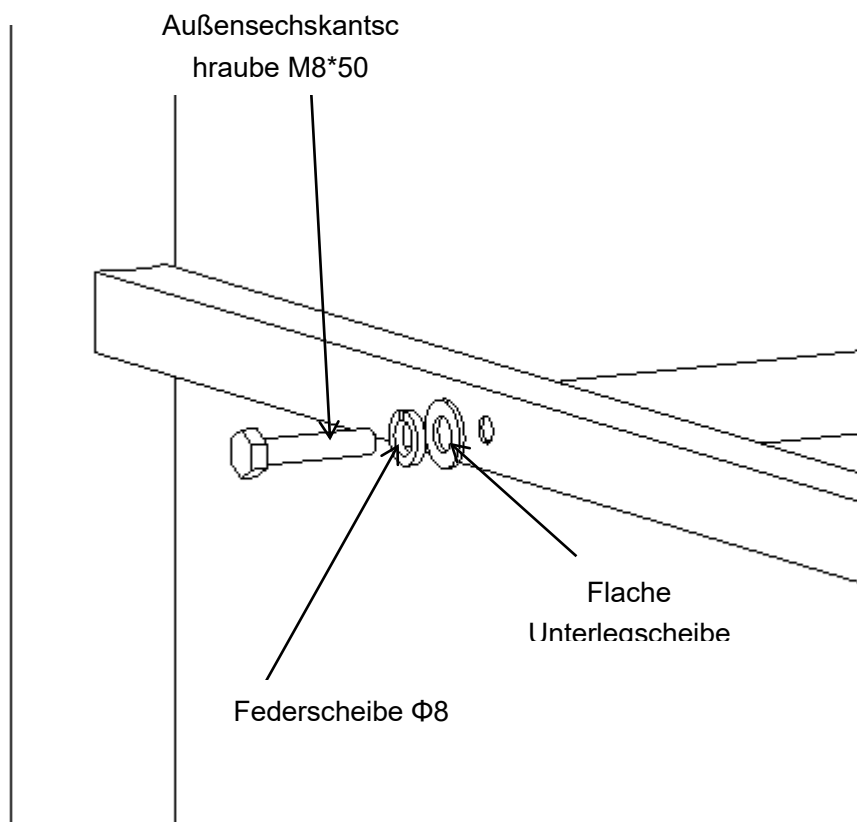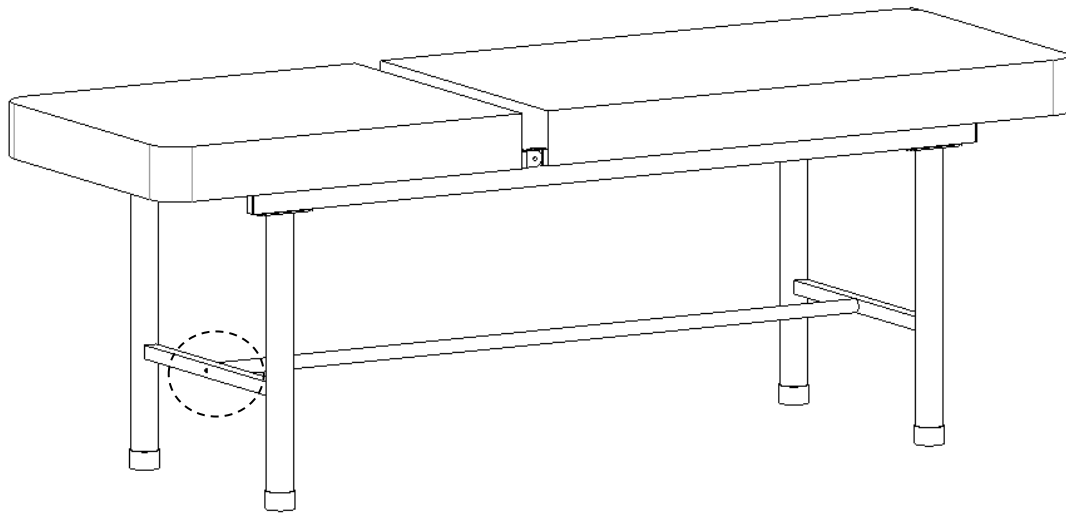


2. Verwendungsmethode

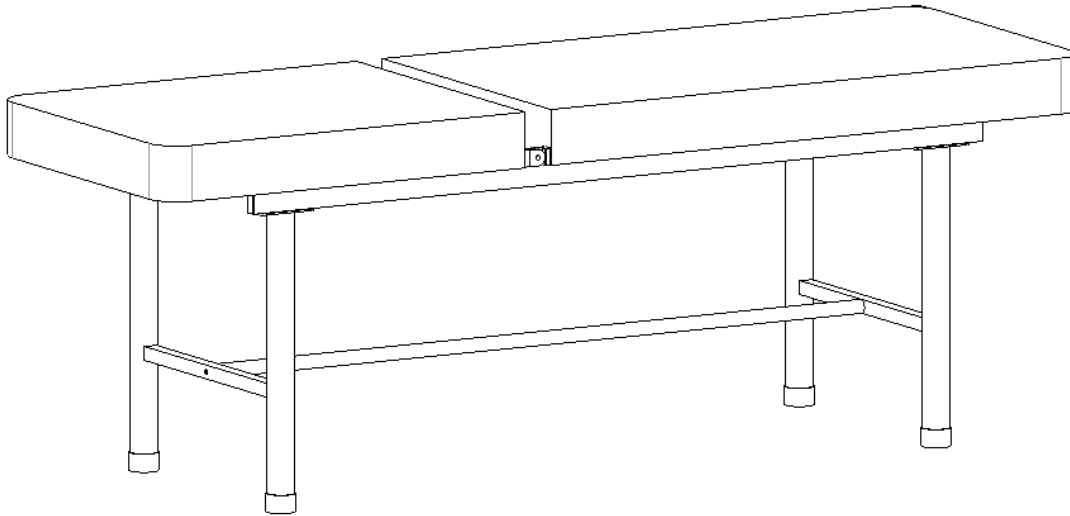


Abmessungen	Länge	mm	1900±10
	Breite		600±10
	Höhe		680±10
Gewicht	Sichere Arbeitslast	kg	170

2,1 Rückenlehnen-Hebefunktion

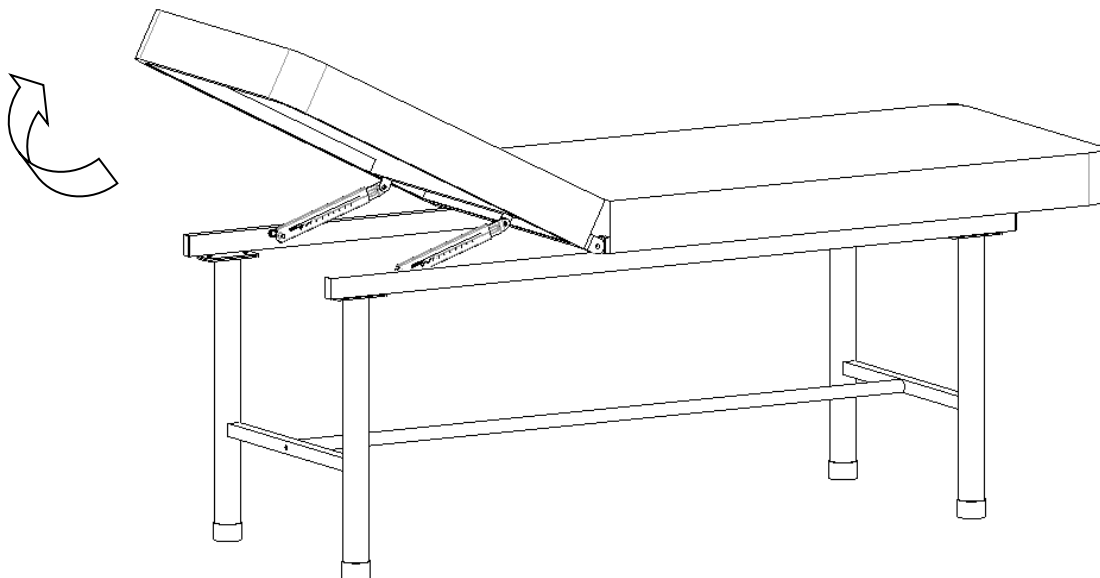

Heben Sie die Rückenplatte an, um die Rückenlehnen-Hebefunktion zu aktivieren. Heben Sie die

Platte in die höchste Position und senken Sie sie anschließend wieder ab.

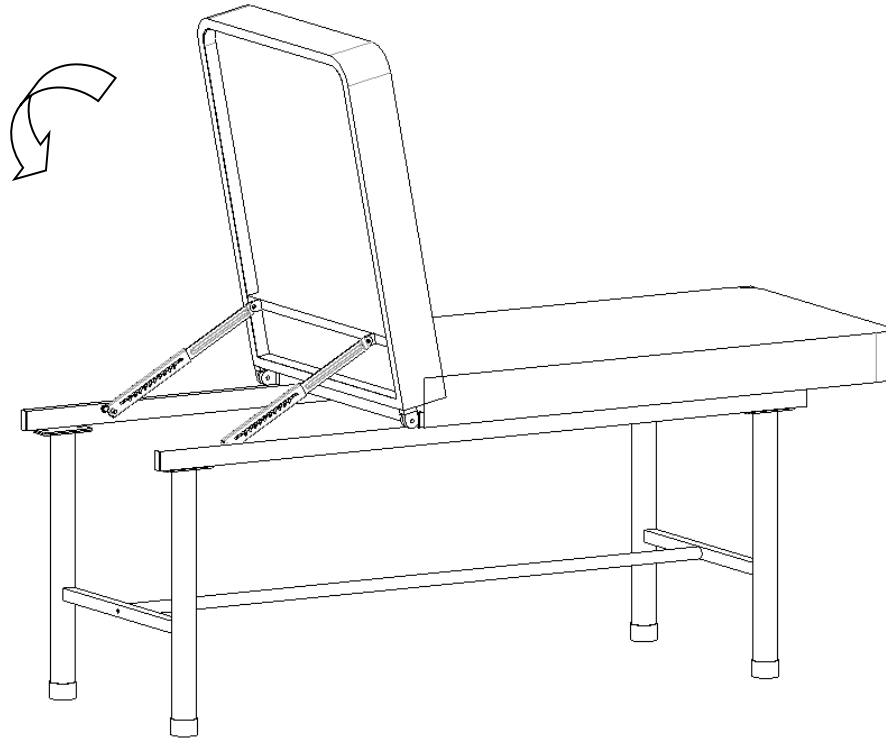

3. Wartung der Edelstahl-Untersuchungsliege

1. Um den Untersuchungstisch sicher zu verwenden, ist es notwendig, regelmäßige Sicherheitsinspektionen am Untersuchungstisch durchzuführen. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal arbeiten.
2. Wenn der Rahmen des Untersuchungstisches altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht ist, können die Metall- und Kunststoffteile des Untersuchungstisches recycelt werden.
3. Vermeiden Sie während der Benutzung Kratzer auf der Platte durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.
4. Wenn die Platte versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Untersuchungstisches, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.

4. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Untersuchungstisches erfolgt gemäß dem Vertrag oder der Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Untersuchungstisches überstürztes Herausnehmen, starke Erschütterungen und schützen Sie ihn vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Untersuchungstisch sollte wie folgt gelagert werden:
 - a) Umgebungstemperatur: -40 °C bis +70 °C.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 %.
 - c) Luftdruck: 500 hPa bis 1060 hPa.

5. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf, da Sie diese vorlegen müssen, wenn das Unternehmen Garantieleistungen und Wartungsarbeiten für das Produkt durchführt.
2. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung.
4. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, bietet das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SK-B1 | REF.: 319-SK-B1

MESA DE EXAMEN / EXAMINATION TABLE / TABLE D'EXAMEN / TAVOLO DA VISITA / MESA DE EXAME / Untersuchungstisch



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT: HW26xxx



2026-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com