




Manuale d'uso

SK-B1

Lettino da visita in acciaio inossidabile

Codice di registrazione: SK-B1

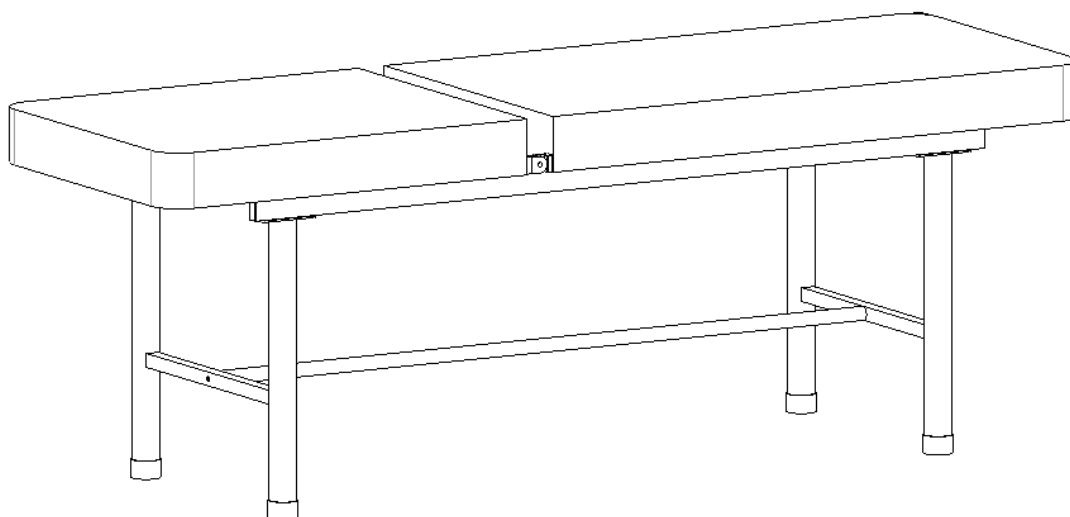

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE MAGAZZINO: 870098

Contenuto

Introduzione manuale	2
1. Guida all'installazione	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione della struttura del piede	5
1.3 Installazione del tubo di collegamento	6
2. Modalità	7
2.1 Funzione di sollevamento dello schienale	7
3. Manutenzione del lettino da visita in acciaio inossidabile-	8
4. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	9
5. Assistenza post-vendita	9

Introduzione manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire rigorosamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso. Tutti gli utenti devono conoscere il manuale d'uso e tutte le precauzioni.

► Il presente manuale è applicabile al lettino da visita in acciaio inossidabile SK-B1. Contiene le modalità di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo per la manutenzione.

► Le immagini presenti in questo manuale sono solo a titolo di riferimento per gli utenti. Nell'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

► Il presente manuale d'uso include la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

► Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.

► Chiunque utilizzi o utilizzi questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.

► Salvo situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a familiarizzarsi con l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto l'imballaggio, verificare che tutte le parti elencate di seguito siano presenti nella confezione.

Tabella a:










N.	Nome	Immagine	Specifiche	Quantità	Unità
1	Piastra per divano		/	1	pz
2	Struttura del piede		539*543 mm	2	pz
3	Tubo di collegamento		Φ25*1,2*1253-M8 mm	1	pz
4	Vite	/	Fare riferimento alla tabella a.1	1	set

Tabella a.1:



N.	Nome	Immagine	Specifiche	Quantità	Unità
1	Vite esagonale esterna		M10*25 mm	8	pz
2	Rondella piatta		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1,8$ mm	8	pz
3	Rondella elastica		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3$ mm	8	pz
4	Dado di bloccaggio		M10 mm	8	pz
5	Vite esagonale esterna		M8*40 mm	2	pz
6	Rondella piatta		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	2	pz
7	Rondella elastica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	2	pz

1,2 Installazione della struttura del piede


Posizionare un cuscinetto protettivo e capovolgere la struttura principale;

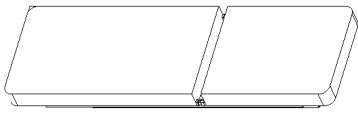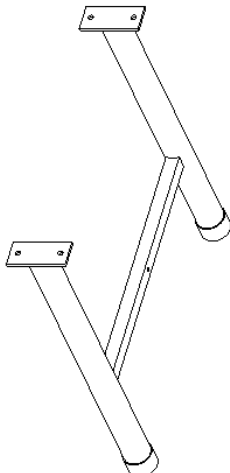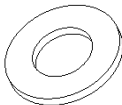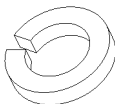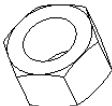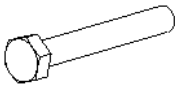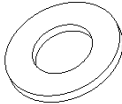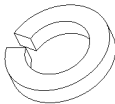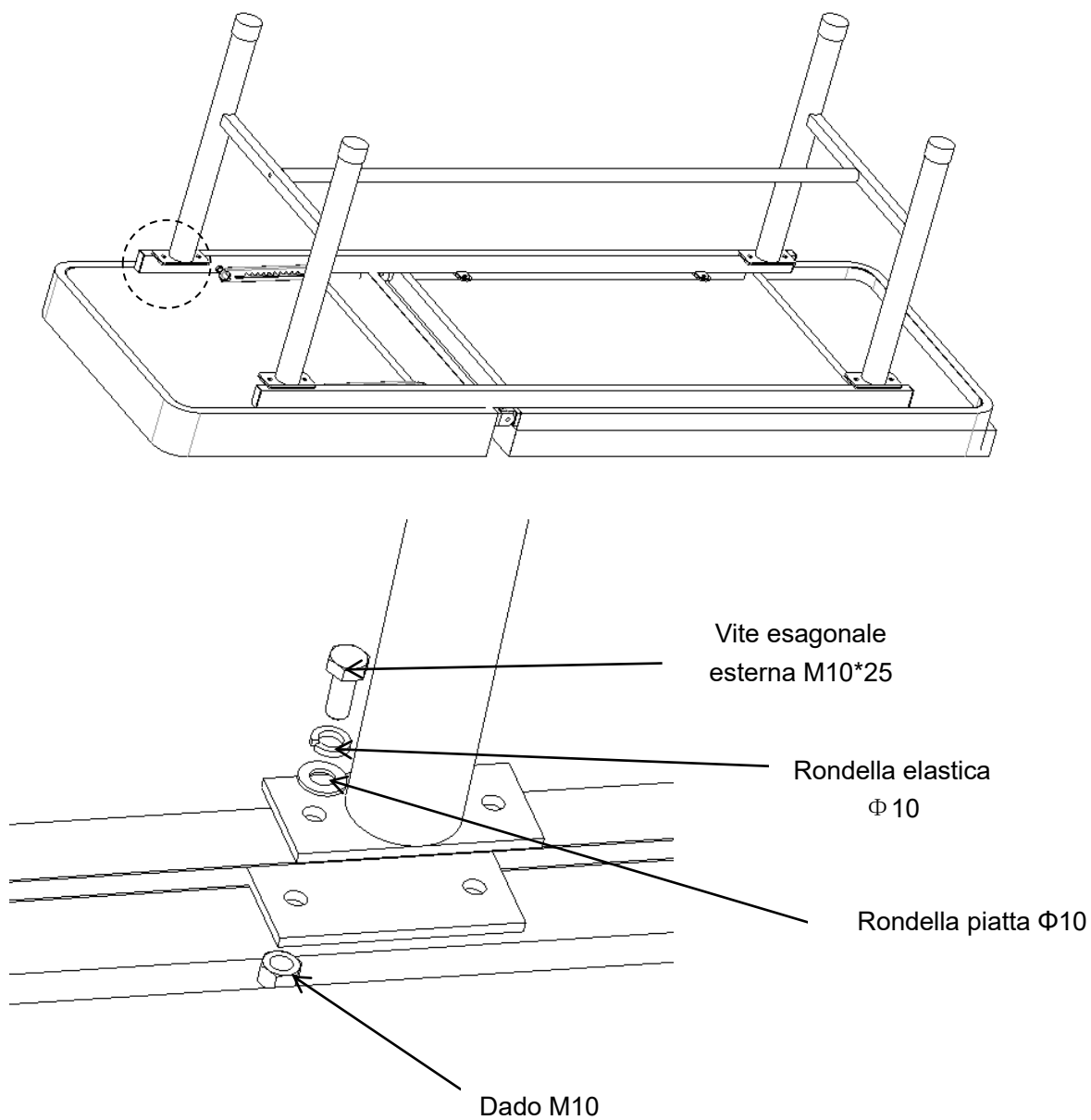

1.3 Installazione del tubo di collegamento

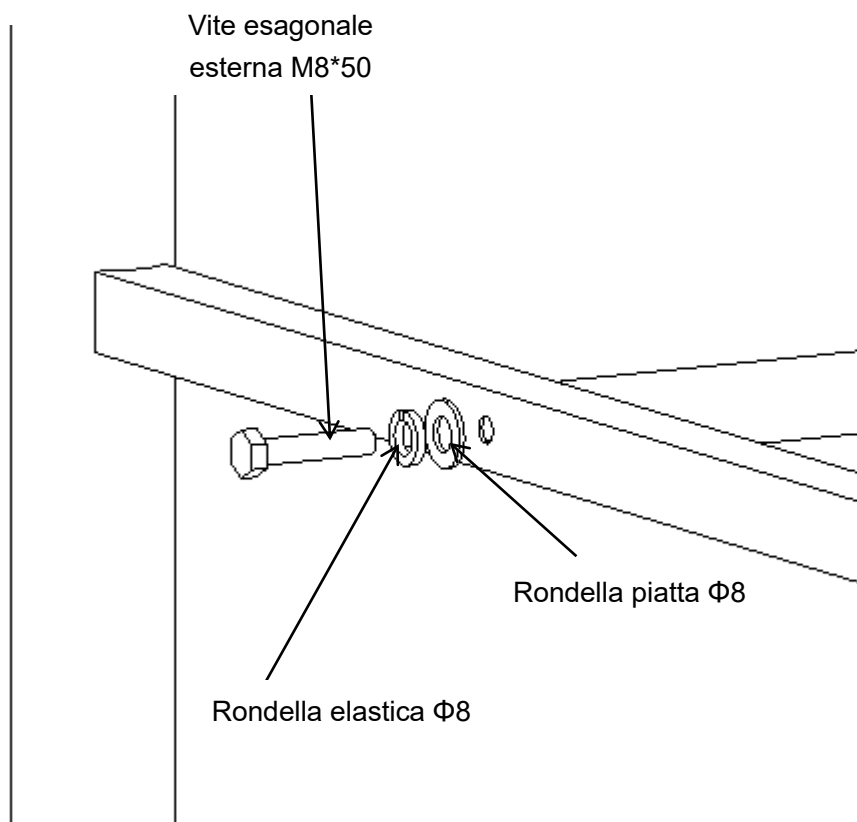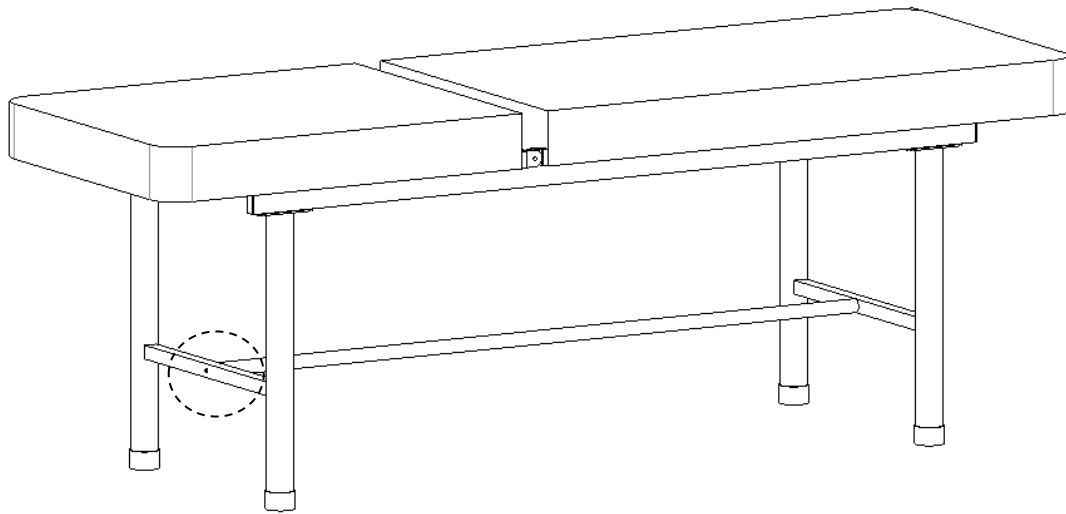


2. Metodo di utilizzo

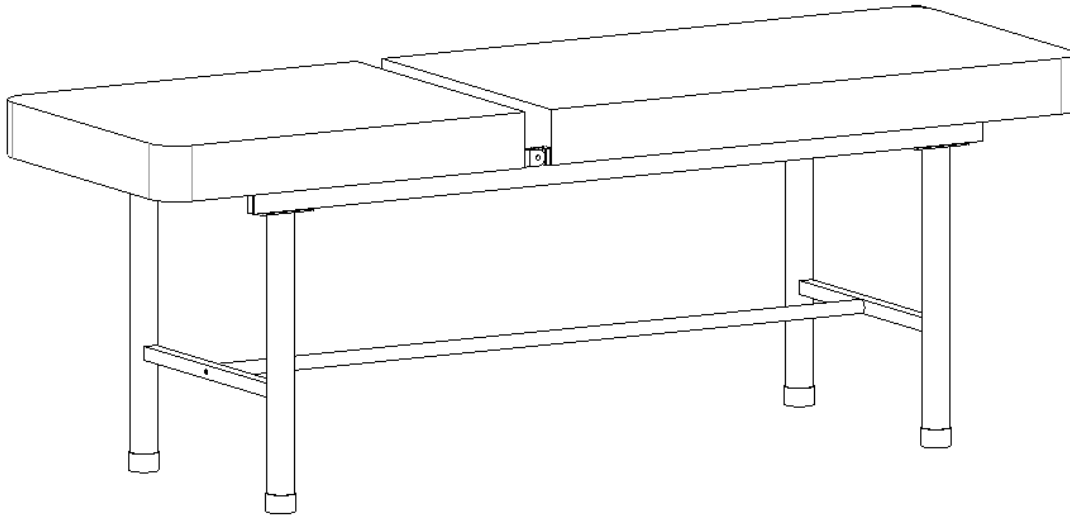


Dimensioni	Lunghezza	mm	1900±10
	Larghezza		600±10
	Altezza		680±10
Peso	Carico di lavoro sicuro	Kg	170

2.1 Funzione di sollevamento dello schienale

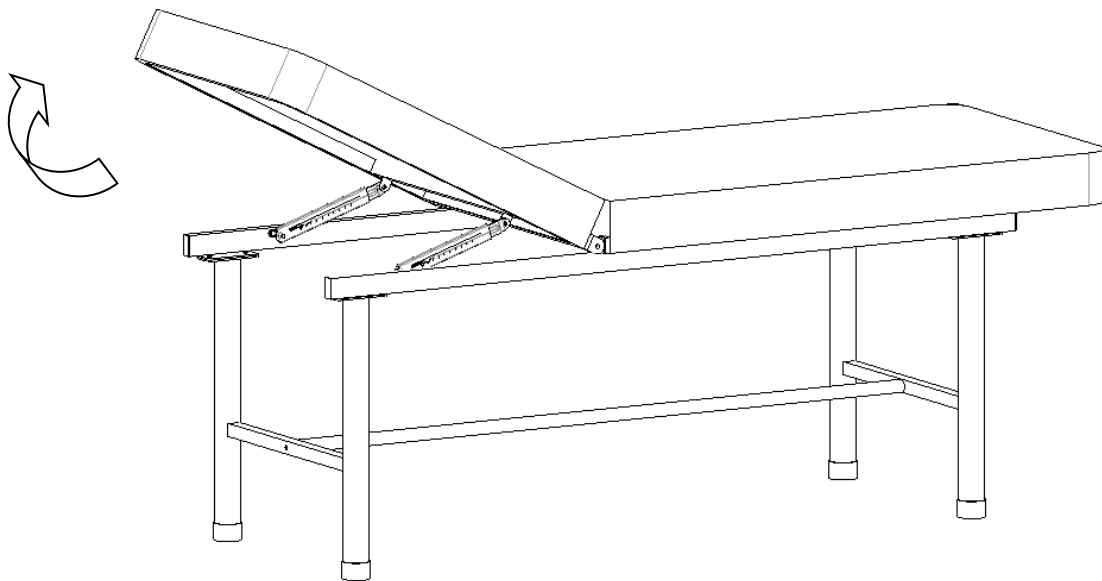

Sollevare la piastra posteriore per attivare la funzione di sollevamento dello schienale, sollevare la

piastra nella posizione più alta, quindi abbassare la piastra posteriore.

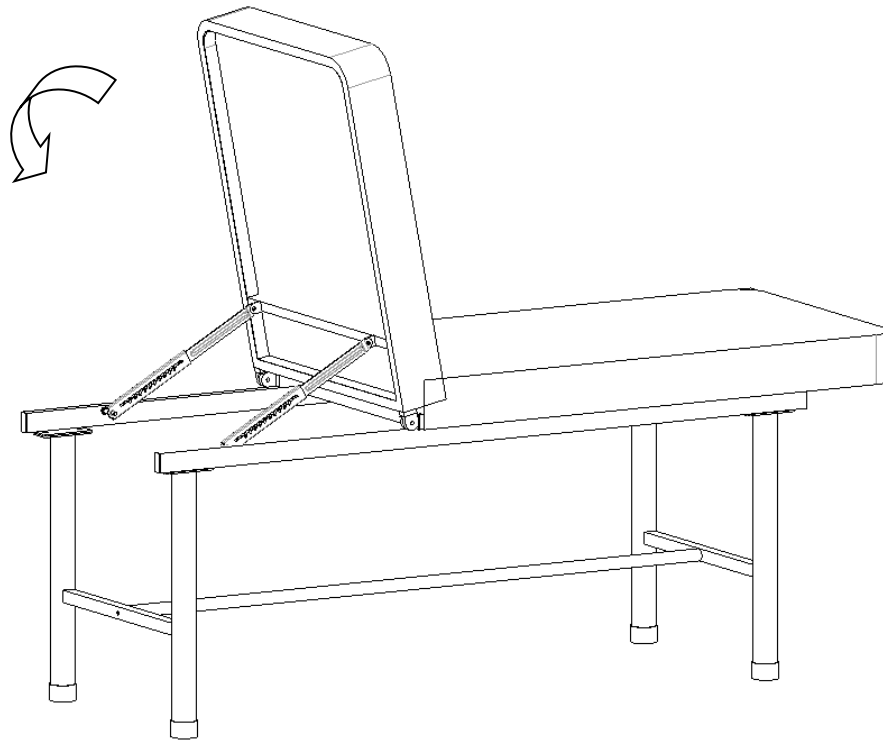

3. Manutenzione del lettino da visita in acciaio inossidabile

1. Per utilizzare il lettino da visita in modo sicuro, è necessario eseguire regolari ispezioni di sicurezza sul lettino. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.
2. Quando il telaio del lettino da visita invecchia e raggiunge un certo tempo di manutenzione, le parti metalliche e plastiche del lettino da visita possono essere riciclate.
3. Evitare di graffiare il pannello con utensili affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il lettino da visita, poiché potrebbero causare la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

4. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del lettino da visita viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Evitare di trasportare il lettino da visita in modo affrettato, sottoponendolo a vibrazioni violente, e proteggerlo dalla luce solare e dalla pioggia durante il trasporto.
3. Il lettino da visita deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: da -40 °C a +70 °C.
 - b) Umidità relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

5. Servizio post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, poiché saranno necessari per richiedere l'assistenza in garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un supporto tecnico accurato e rapido e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa di un'installazione e un utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto godrà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SK-B1 | REF.: 319-SK-B1

MESA DE EXAMEN / EXAMINATION TABLE / TABLE D'EXAMEN / TAVOLO DA VISITA / MESA DE EXAME / Untersuchungstisch



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT: HW26xxx



2026-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098



N. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com