




Usuario manual

SKB037(B) **Acero inoxidable** **Carro para pacientes**

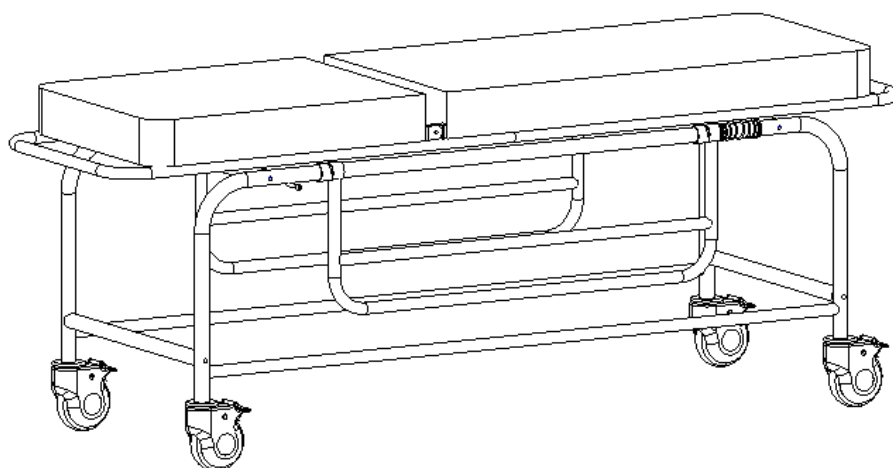

SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ACCIONES: 870098

Contenido

Introducción manual.....	2
1. Guía de instalación.....	3
1.1 Lista de accesorios estándar.....	3
1.2 Instalación de las ruedas.....	5
1.3 Instalación de los pies	6
1.4 Instalación del somier.....	7
2. Instrucciones del producto.....	9
2.1 Método de uso de las ruedas	10
2.2 Método de uso de las barandillas	11
2.3 Instrucciones del respaldo	12
2.4 Instalación del soporte para suero.....	13
2.4.2 Uso del soporte para suero	14
3. Exclusión de averías	14
4. Mantenimiento de la camilla de acero inoxidable para pacientes	14
5. Embalaje, transporte y almacenamiento.....	16
6. Servicio posventa.....	16

Introducción al manual

Nota:

Lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar el producto. Es imprescindible que todos los usuarios conozcan el manual de usuario y todas las precauciones.

- ▶ Este manual es aplicable al carro para pacientes de acero inoxidable SKB037(B). Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de revisión para el mantenimiento.
- ▶ Los gráficos de este manual son solo para referencia del usuario. En el uso real, consulte el objeto real.
- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, las instrucciones, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- ▶ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
- ▶ Cualquier persona que utilice o maneje este producto debe leer y cumplir con estas instrucciones.
- ▶ Salvo en situaciones imprevistas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que las siguientes piezas se encuentran completas en la caja:

Tabla a:

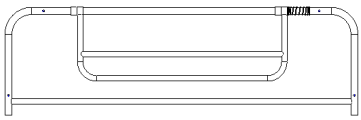
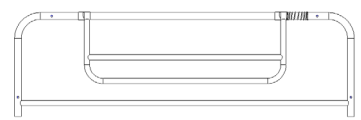
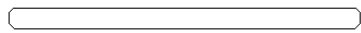
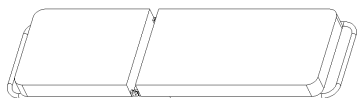
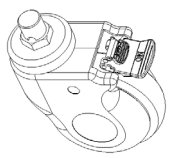
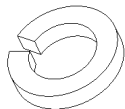
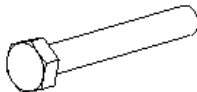
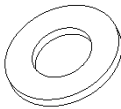
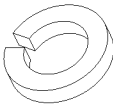
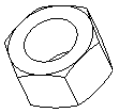
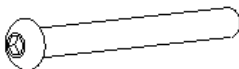
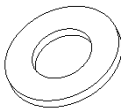
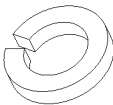
N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Pie derecho		L1600*W485 mm	1	pcs
2	Pie izquierdo		1600 mm x 485 mm	1	pcs
3	Tubo de conexión del pie		Φ32*551-M8 mm	2	pcs
4	El tubo de conexión del pie tiene orificios		Φ32*551-M8 mm	2	pcs
5	Estructura de la cama		L1960*W520 mm	1	pcs
6	Ruedas		Rueda con cubierta de 5 pulgadas y tornillo con freno	4	pcs
7	Polo IV		Φ 16-19 mm/blanco roto	1	pcs
8	Tornillo	/	Consulte la tabla a.1	1	juego


Tabla a.1:

N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Arandela elástica		$\Phi 16^* \Phi 23,8^* H3,5$ mm	4	pcs
2	Tornillo hexagonal		M8*70 mm	4	unidades
3	Arandela plana		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	4	pcs
4	Arandela elástica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	4	pcs
5	Tuerca de seguridad		M8 mm	4	pcs
6	Tornillo con cabeza		M8*45 mm	8	pcs
7	Arandela plana		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	8	pcs
8	Arandela elástica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	8	pcs

1.2 Instalar las ruedas



Coloque una almohadilla protectora y ponga el cuerpo de la cama boca abajo;

Saque la arandela elástica $\Phi 16$ del paquete de tornillos, saque la rueda de cubierta, inserte la rueda de cubierta en el tubo y apriétela en sentido horario, y luego apriétela con una llave hexagonal.

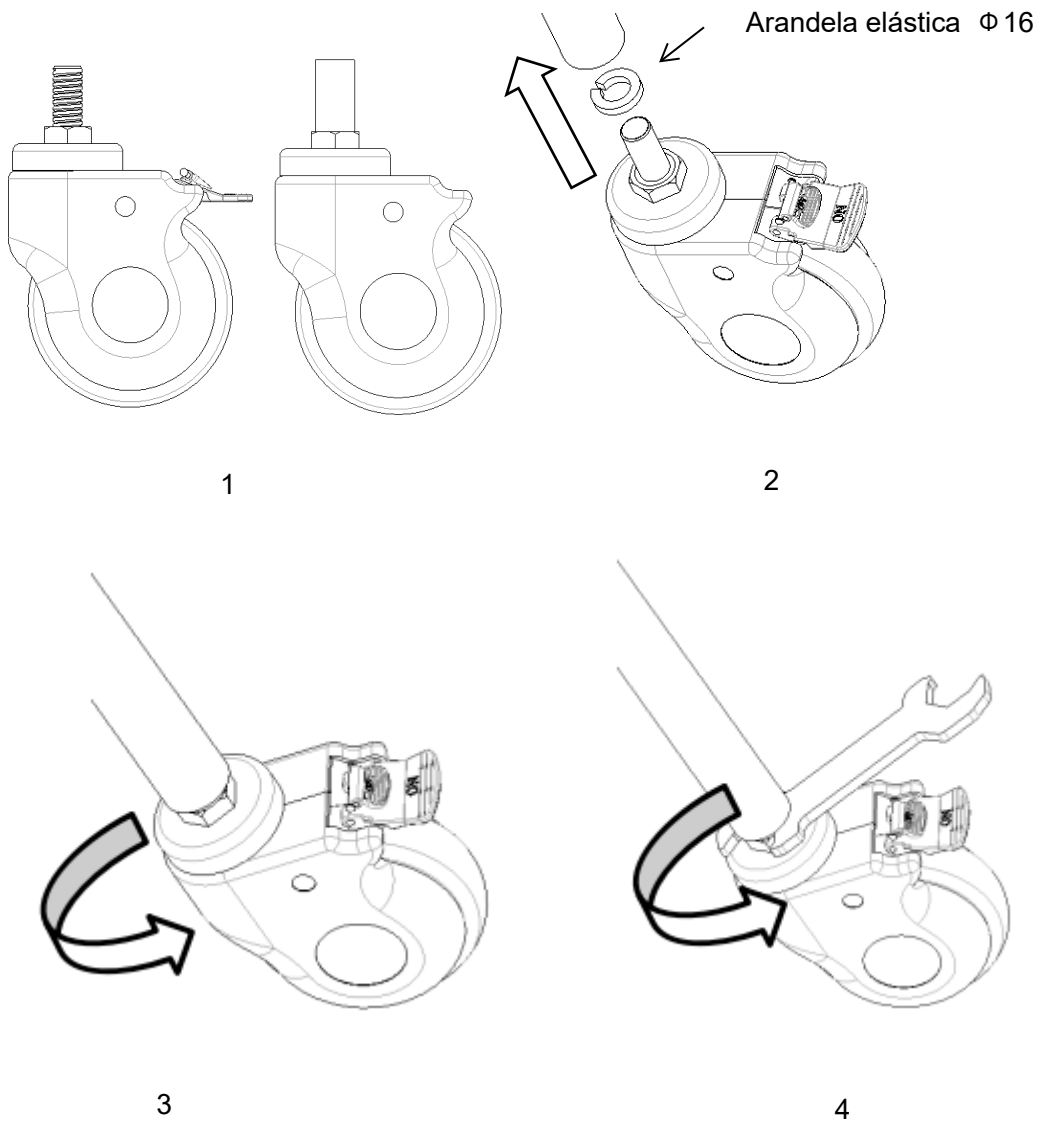



1.3 Instalar los pies

Fije el pie con una llave Allen como se muestra en la figura.

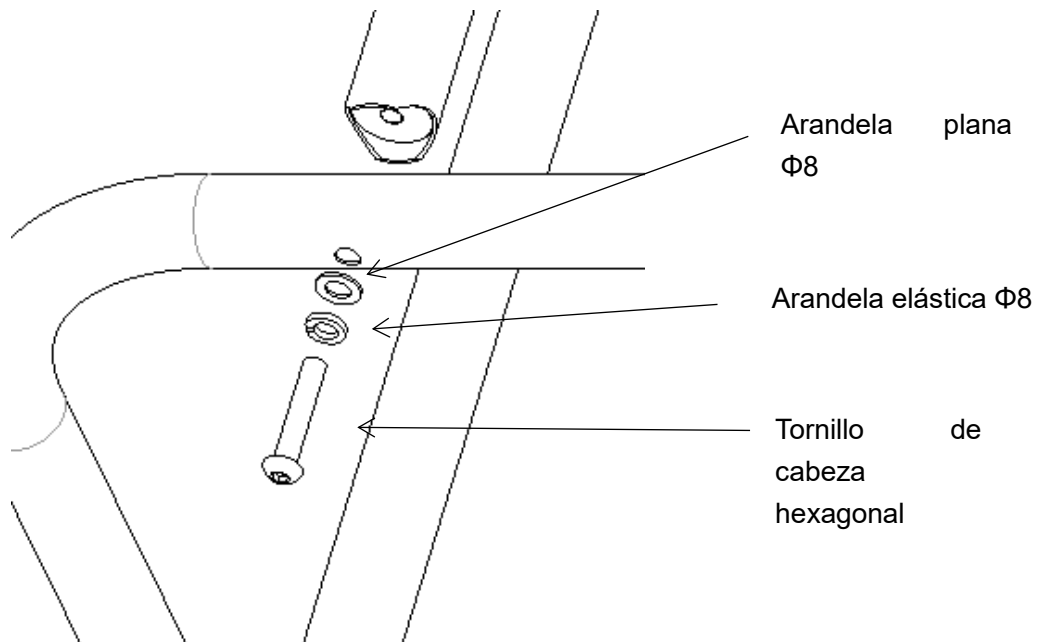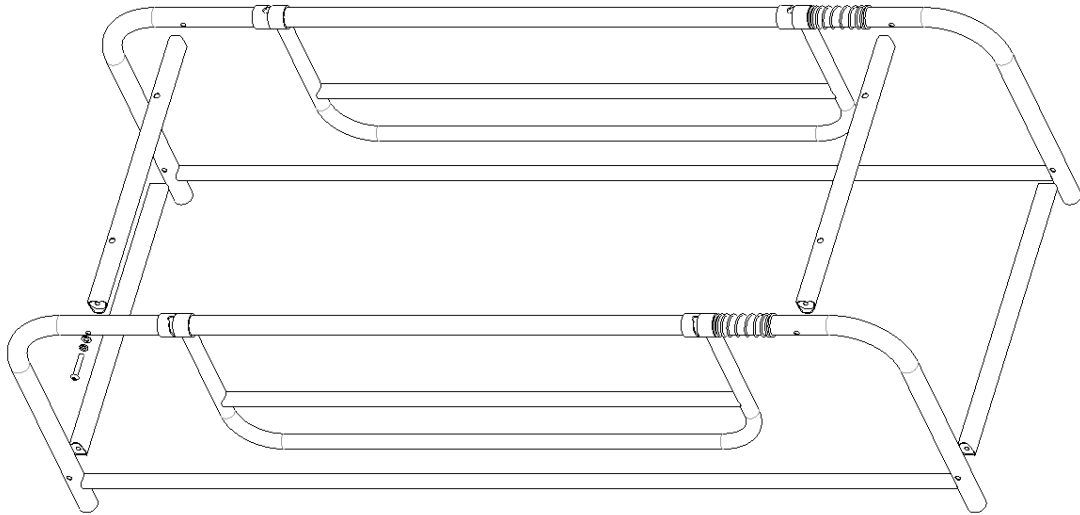


1.4 Instalar el tablero de la cama

Coloque la cama en posición vertical, levante el respaldo, retire los tornillos e instálela como se muestra.

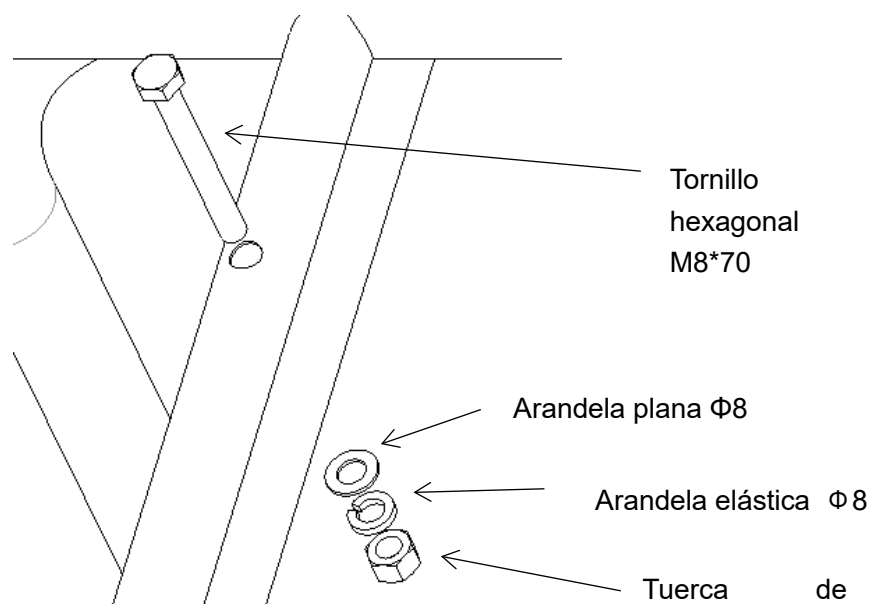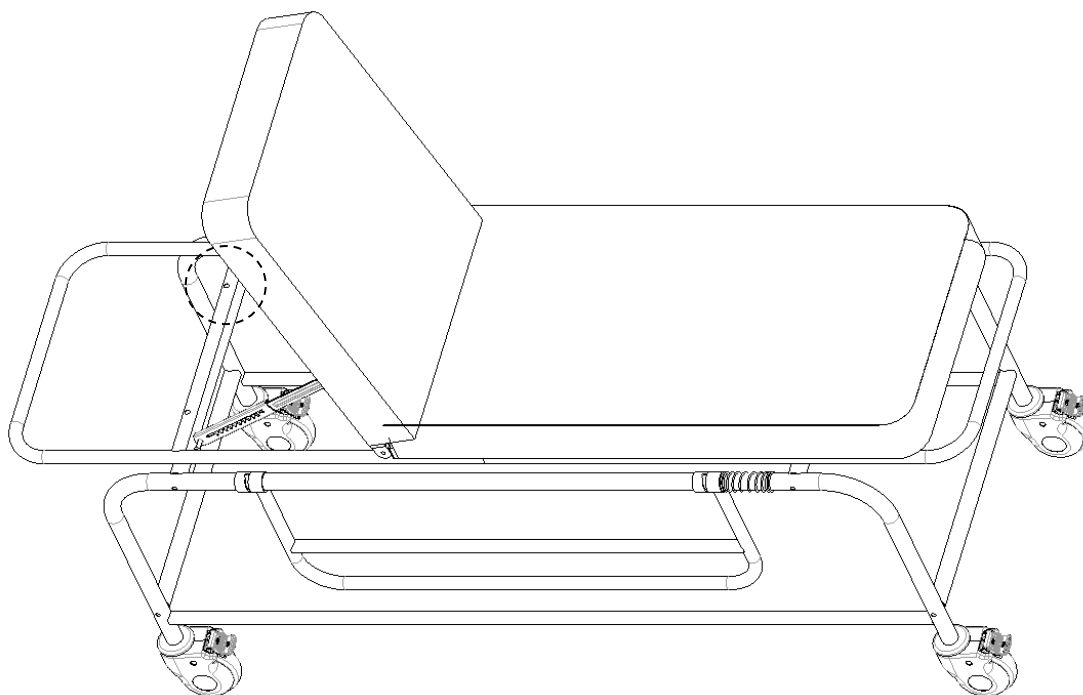


Coloque una capa de almohadillas protectoras y dé la vuelta al cuerpo principal de la cama; retire los tornillos e instálelos como se muestra.

(Para facilitar la observación, oculte temporalmente el tablero de la cama).

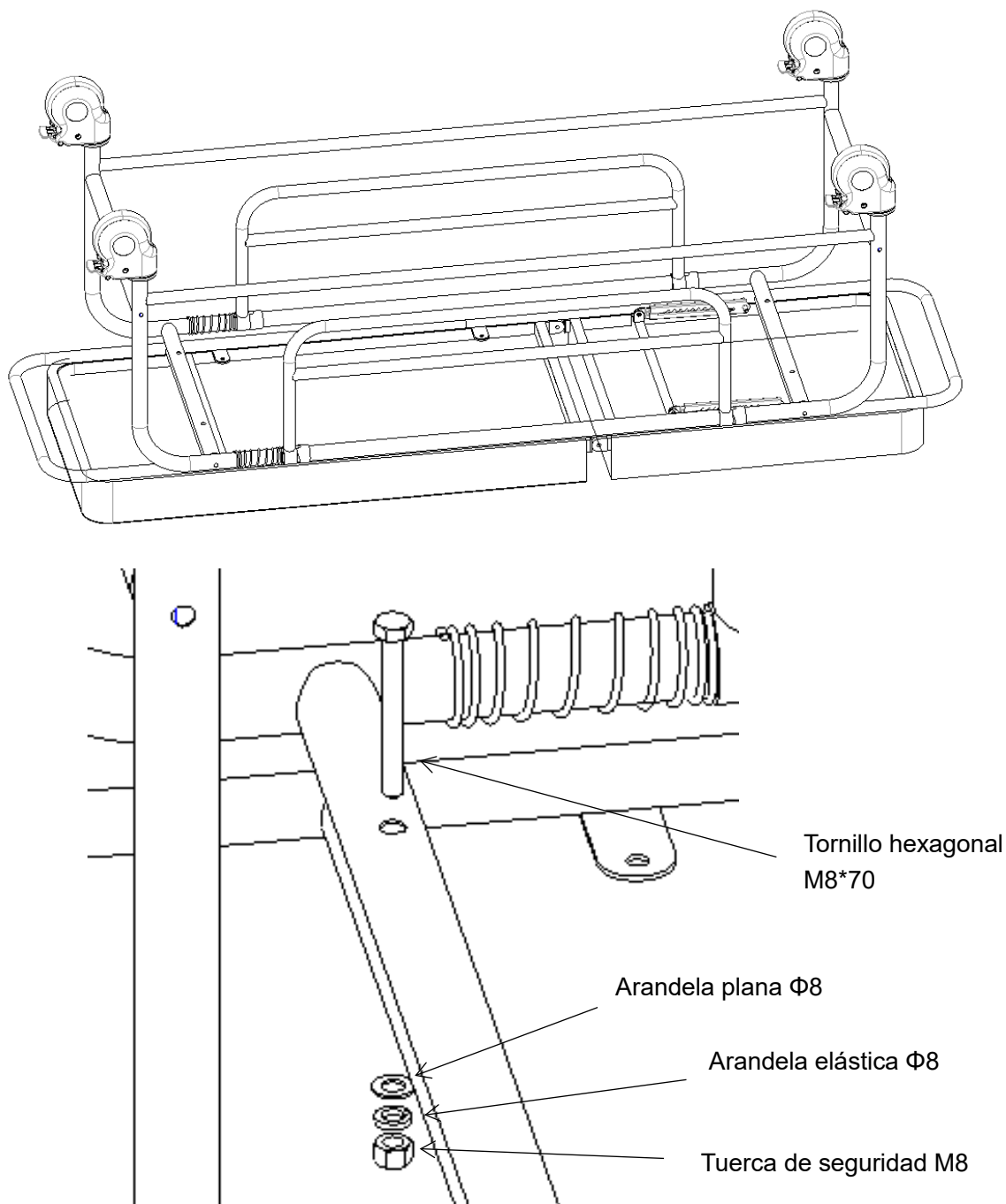


2. Instrucciones del producto

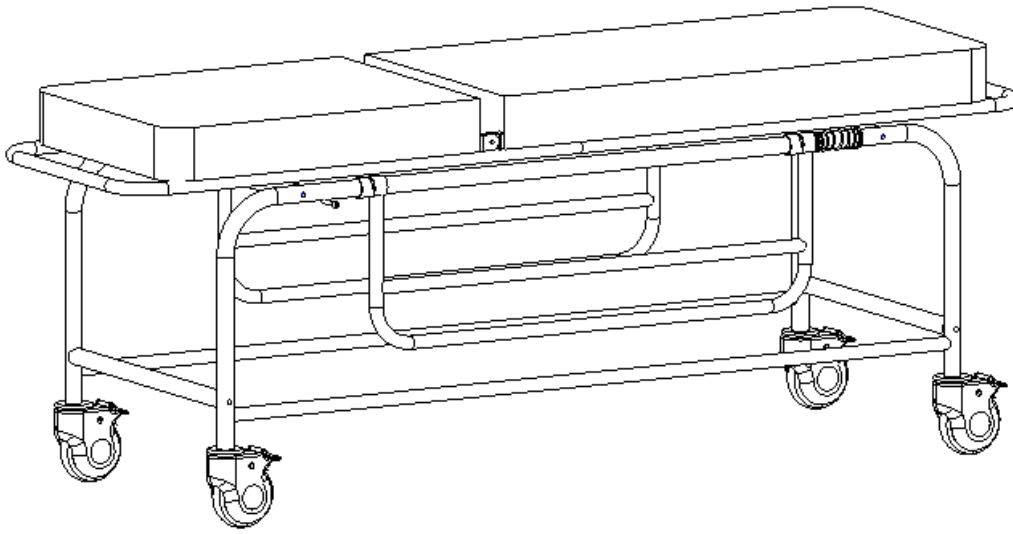


Dimensiones	Longitud	mm	1960
	Ancho		520
	Altura desde el suelo		770
Peso	Carga de trabajo segura	KG	170

2.1 Método de uso de las ruedas

Bloquee la rueda: después de empujar la cama hasta la posición deseada, pulse el botón ON con el pie y bloquee la rueda cuando oiga un «clic», tal y como se muestra en la figura siguiente.

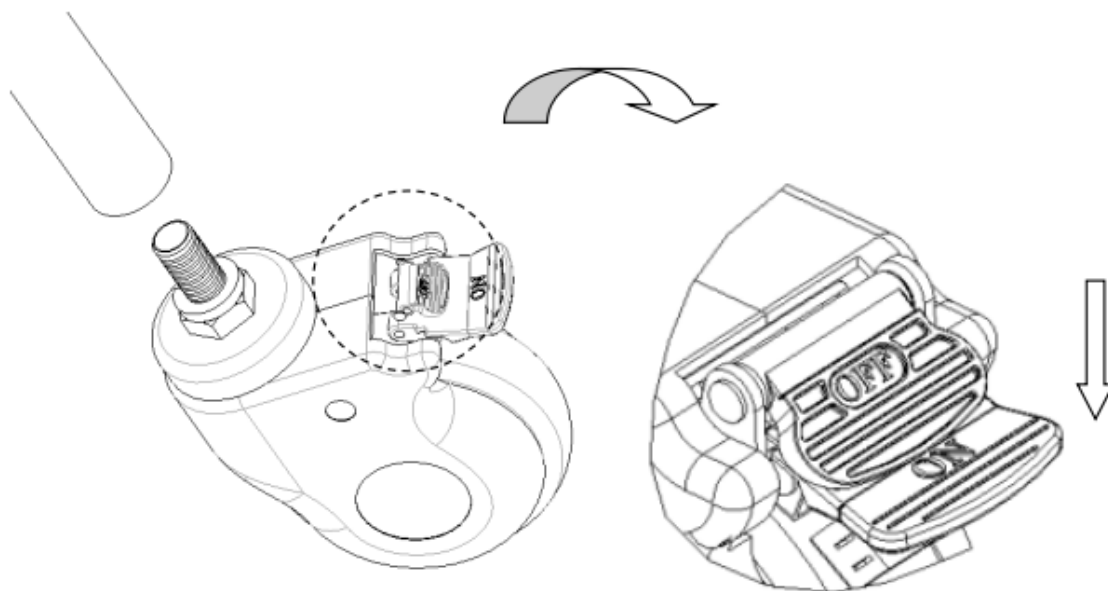


Desbloquee la rueda: presione el botón OFF con el pie y desbloquee la rueda cuando oiga un «clic».

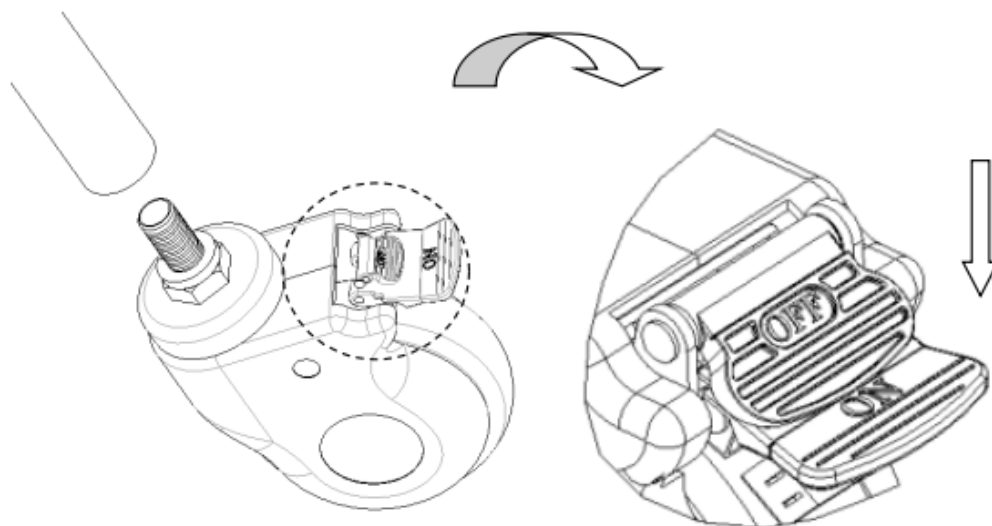


2.2 Método de uso de las barandillas

Levante la barandilla; cuando oiga un «clic», significa que la barandilla está bloqueada.

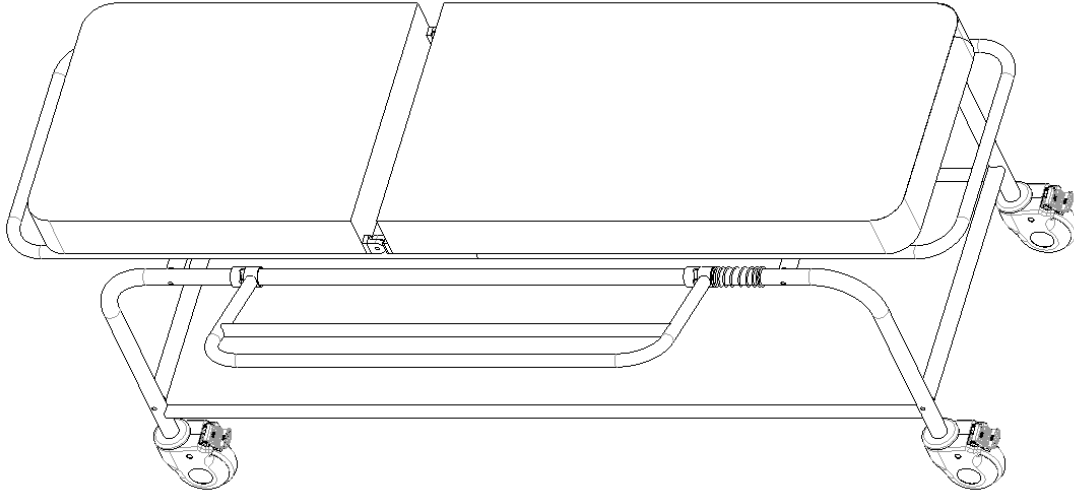


Baje la barandilla, tire de ella hacia atrás en la dirección del resorte, como se muestra en la figura, y luego bájela.

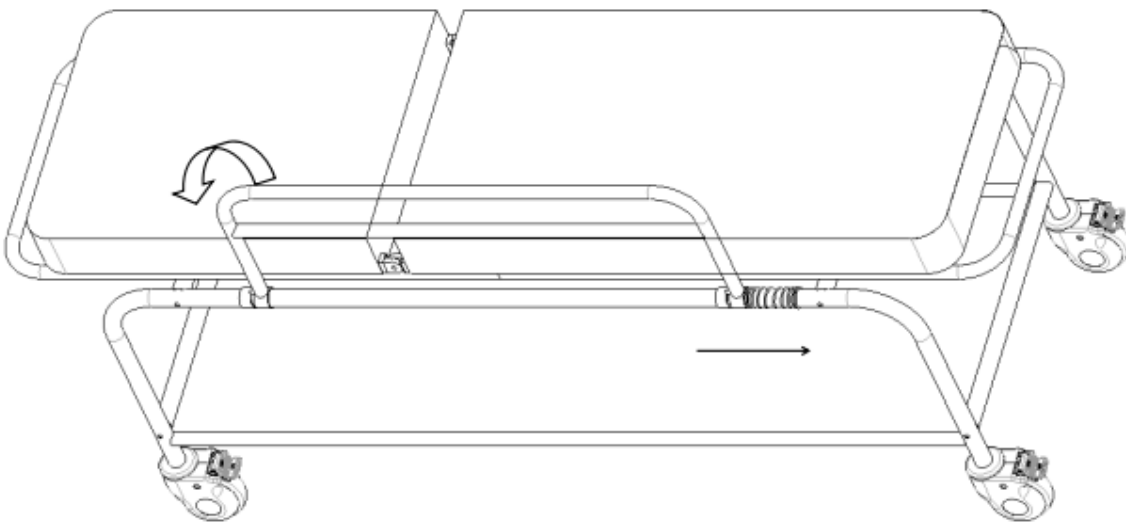



2.3 Instrucciones del tablero

Levante el tablero y suéltelo en la posición designada para fijar automáticamente la posición.

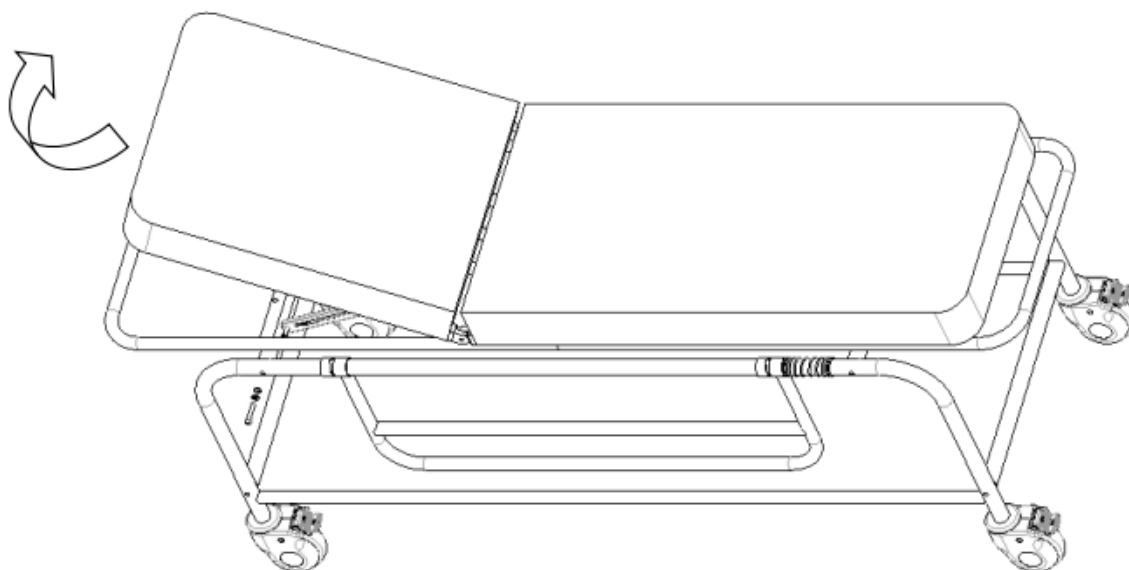

Levante el tablero hasta su altura máxima y, a continuación, bájelo para bajar la parte trasera.

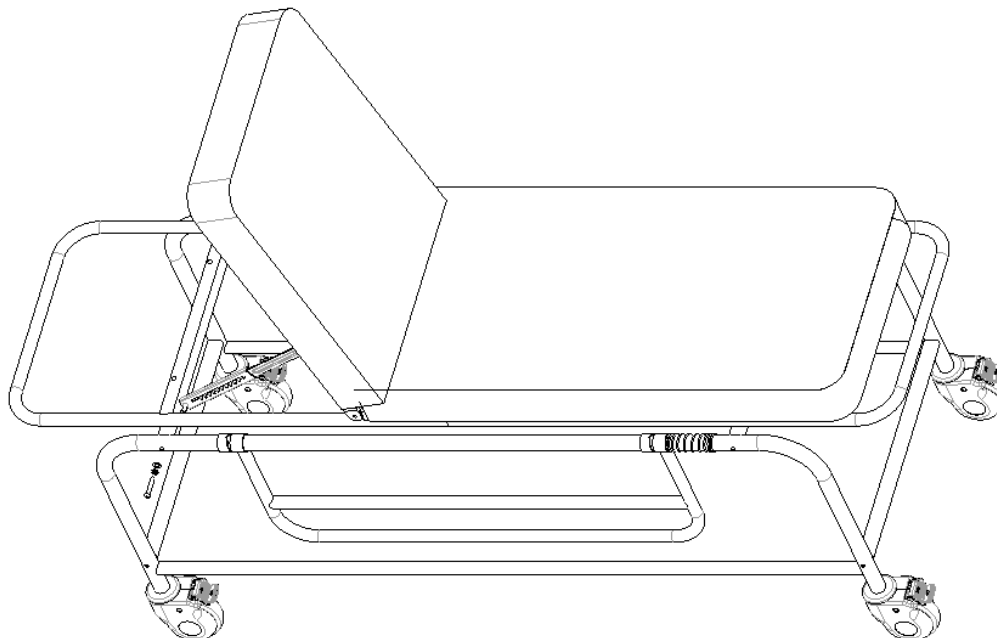

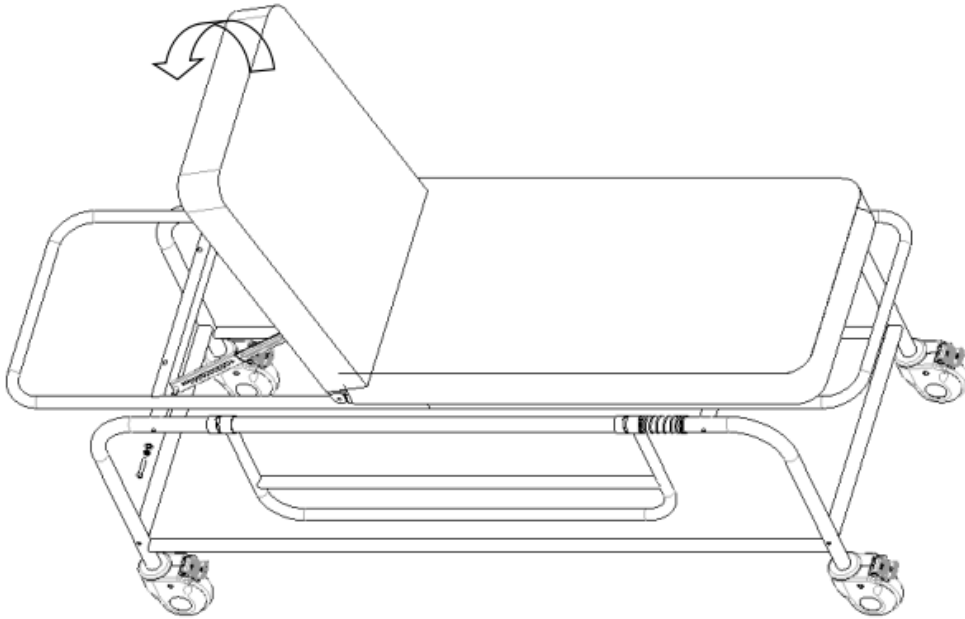


2.4 Instalación del soporte para suero

Instalación de la parte hembra: presione el gancho de plástico (parte hembra) hacia abajo sobre el tubo de acero inoxidable de $\Phi 16$ mm.

Instalación de la parte macho: Coloque el gancho de plástico (parte macho) directamente sobre la parte hembra en forma de cruz, luego alinee las hebillas de la parte macho con las ranuras de la parte hembra y presione hacia abajo. Después de escuchar un «clic», compruebe si el extremo de la hebilla está bien ajustado; si lo está, complete la instalación; si no, continúe presionando hacia abajo hasta que la hebilla quede bien ajustada.

Inserte el soporte para suero instalado verticalmente en la ranura prevista para ello. (La flecha de la imagen muestra la ranura prevista para el soporte para suero).

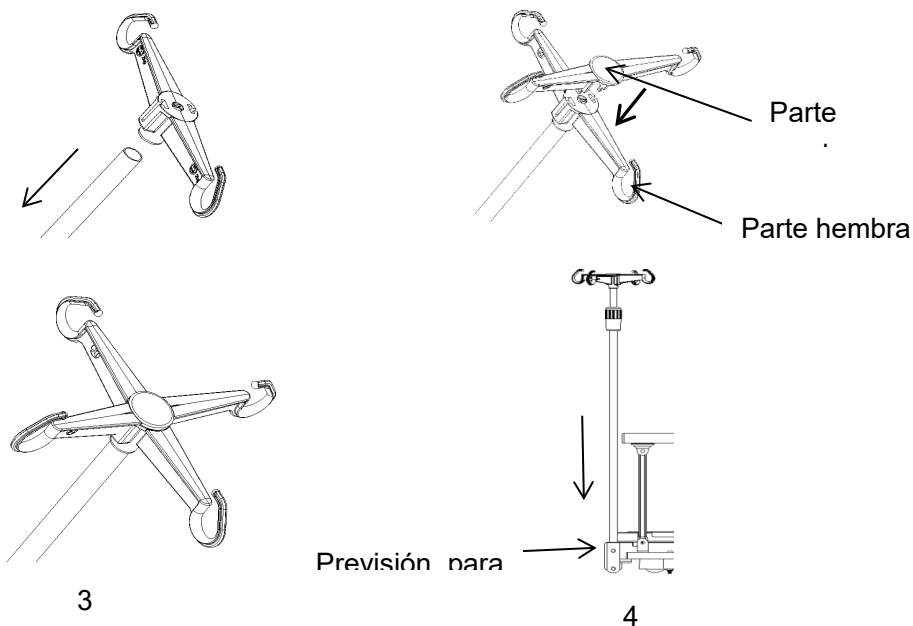


2.4. 2 Método de uso del soporte para suero

Ajuste de la altura del soporte para suero:

1. Afloje con cuidado el manguito exterior en sentido antihorario, inserte el tubo interior del soporte para suero en el manguito exterior y, a continuación, ajuste la longitud de la varilla extensible hacia arriba o hacia abajo.
2. Ajuste la longitud necesaria y, a continuación, apriete con cuidado el manguito exterior en sentido horario. La carga máxima de cada gancho es de 2 kg, con un total de 8 kg.

(Ajuste de altura: 890-1540 mm)

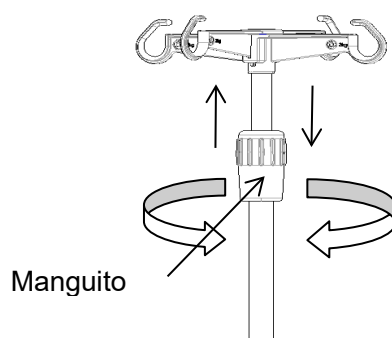

3. Exclusión de fallos

Fallos comunes	Causas probables	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro del paciente	1. La rueda está bloqueada sin soltar la palanca 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno, compruebe 2.1 2. Sustituya la rueda giratoria, compruebe 1.2

4. Mantenimiento de la camilla de acero inoxidable

1. Para utilizar la camilla de pacientes de forma segura, es necesario realizar inspecciones de

seguridad periódicas. Se recomienda comprobarla cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no están sueltas y que todas las operaciones son normales.

2. Cuando el bastidor de la camilla para pacientes envejece y alcanza un determinado tiempo de mantenimiento, las piezas metálicas y plásticas del bastidor de la camilla para pacientes pueden reciclarse.

3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulos afilados o cuchillos durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.

4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la camilla, ya que podrían oxidar la superficie de acero inoxidable.

5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, ya que podrían dañarlas.

6. Está prohibido forzar las ruedas para frenar, ya que esto podría dañar el sistema de frenos.

7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que haya hilos enredados y otras acumulaciones alrededor de la rueda; retire los pernos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Para determinar si la rueda debe sustituirse en función del tiempo de uso y el desgaste, puede sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas del eje estén bien colocados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.

9. En el caso de las ruedas con freno, es necesario comprobar periódicamente que los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de una camilla para pacientes equipada con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá probar y empujar la camilla para pacientes y comprobar también si el rendimiento de uno de los frenos de cada rueda es bueno. Si la función del freno falla debido al desgaste o al daño de las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a comprobar el sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con un distribuidor autorizado de nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se debe volver a comprobar el funcionamiento de los frenos de las ruedas.

5. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje de la camilla de acero inoxidable para pacientes se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las salidas precipitadas, las vibraciones violentas y la exposición a la luz solar y la lluvia durante el transporte de la camilla de acero inoxidable para pacientes.
3. La camilla de acero inoxidable para pacientes debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servicio posventa

1. Conserve adecuadamente los archivos que acompañan a la máquina y las facturas de este producto, ya que deberá presentarlos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a la mayor brevedad posible para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a una instalación y un uso correctos según las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y un servicio de mantenimiento de por vida con el «certificado» o la factura.
4. A partir de la fecha de compra, si el producto está realmente dañado o no funciona con normalidad debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKB037(B) | REF.: 319-SKB037(B)

CAMILLA / STRETCHER / Civière / BARELLA / MACA / TRAGEBRETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

N.º 35, Lehong Road, Modern Agriculture

Parque de demostración, ciudad de Zhangjiagang,

Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidad 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Países Bajos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, Valencia (España)

LOTE:
HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ACCIONES: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com