




Manuel de l'utilisateur

SKB037(B) Chariot de patient en acier inoxydable

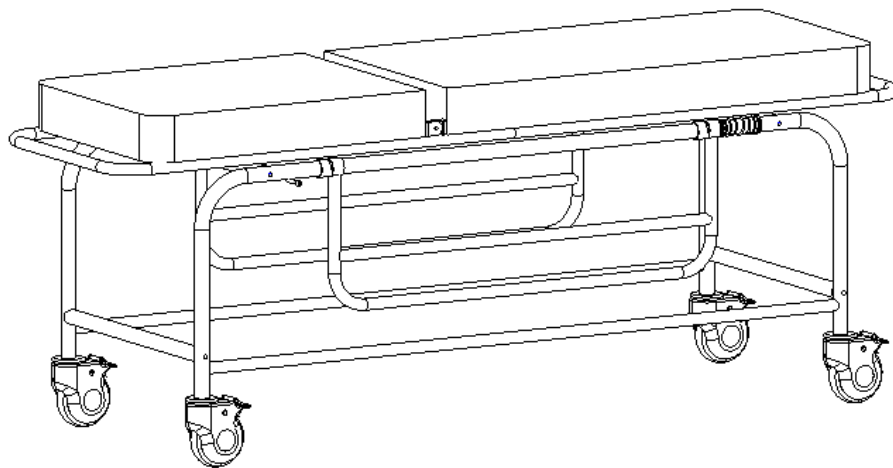

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSARE : 870098

Contenu

Introduction manuelle	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes.....	5
1.3 Installation des pieds.....	6
1.4 Installation du sommier	7
2. Instructions relatives au produit.....	9
2.1 Mode d'emploi des roulettes.....	10
2.2 Mode d'emploi des barrières de sécurité	11
2.3 Instructions relatives au panneau arrière	12
2.4 Installation du pied à perfusion	13
2.4.2 Utilisation du potence à perfusion	14
3. Exclusion des défauts	14
4. Entretien du chariot patient en acier inoxydable	14
5. Emballage, transport, stockage	16
6. Service après-vente	16

Introduction au manuel

Remarque :

Veillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les précautions.

► Ce manuel s'applique au chariot patient en acier inoxydable SKB037(B). Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.

► Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.

► Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, l'entretien et les paramètres techniques du produit.

► Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente ou le distributeur.

► Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit lire et respecter les présentes instructions.

► Sauf dans certaines situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions d'emploi.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

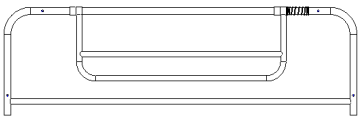
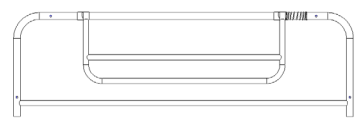
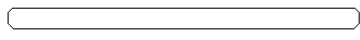
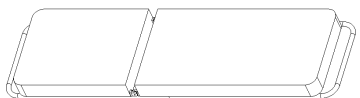
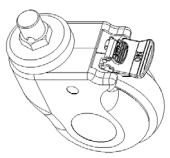
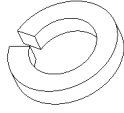
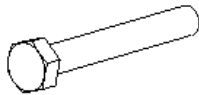
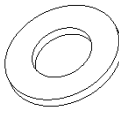
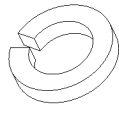
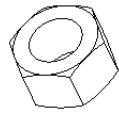
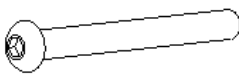
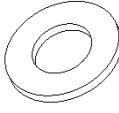
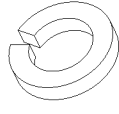
N°	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Pied droit		L1600*I485 mm	1	pc
2	Pied gauche		L1600*I485 mm	1	pc
3	Tube de raccordement du pied		Φ32*551-M8 mm	2	pcs
4	Le tube de raccordement au pied est muni de trous		Φ32*551-M8 mm	2	pièces
5	Cadre du lit		L1960*I520 mm	1	pc
6	Roulettes		Roue couverte de 5 pouces avec vis et frein	4	pièces
7	Poteau IV		Φ 16-19 mm/ blanc cassé	1	pc
8	Vis	/	Voir tableau a.1	1	jeu


Tableau a.1 :

N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Rondelle élastique		$\Phi 16 * \Phi 23,8 * H3,5$ mm	4	pièces
2	Vis à tête hexagonale		M8*70 mm	4	pièces
3	Rondelle plate		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2$ mm	4	pièces
4	Rondelle élastique		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5$ mm	4	pièces
5	Écrou de blocage		M8 mm	4	pièces
6	Vis à six pans creux		M8*45 mm	8	pièces
7	Rondelle plate		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2$ mm	8	pièces
8	Rondelle élastique		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5$ mm	8	pièces

1.2 Installer les roulettes



Placez un coussin de protection et retournez le corps du lit ;

Retirez la rondelle élastique $\Phi 16$ du paquet de vis, retirez la roue de protection, insérez-la dans le tube et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrez-la à l'aide d'une clé hexagonale.

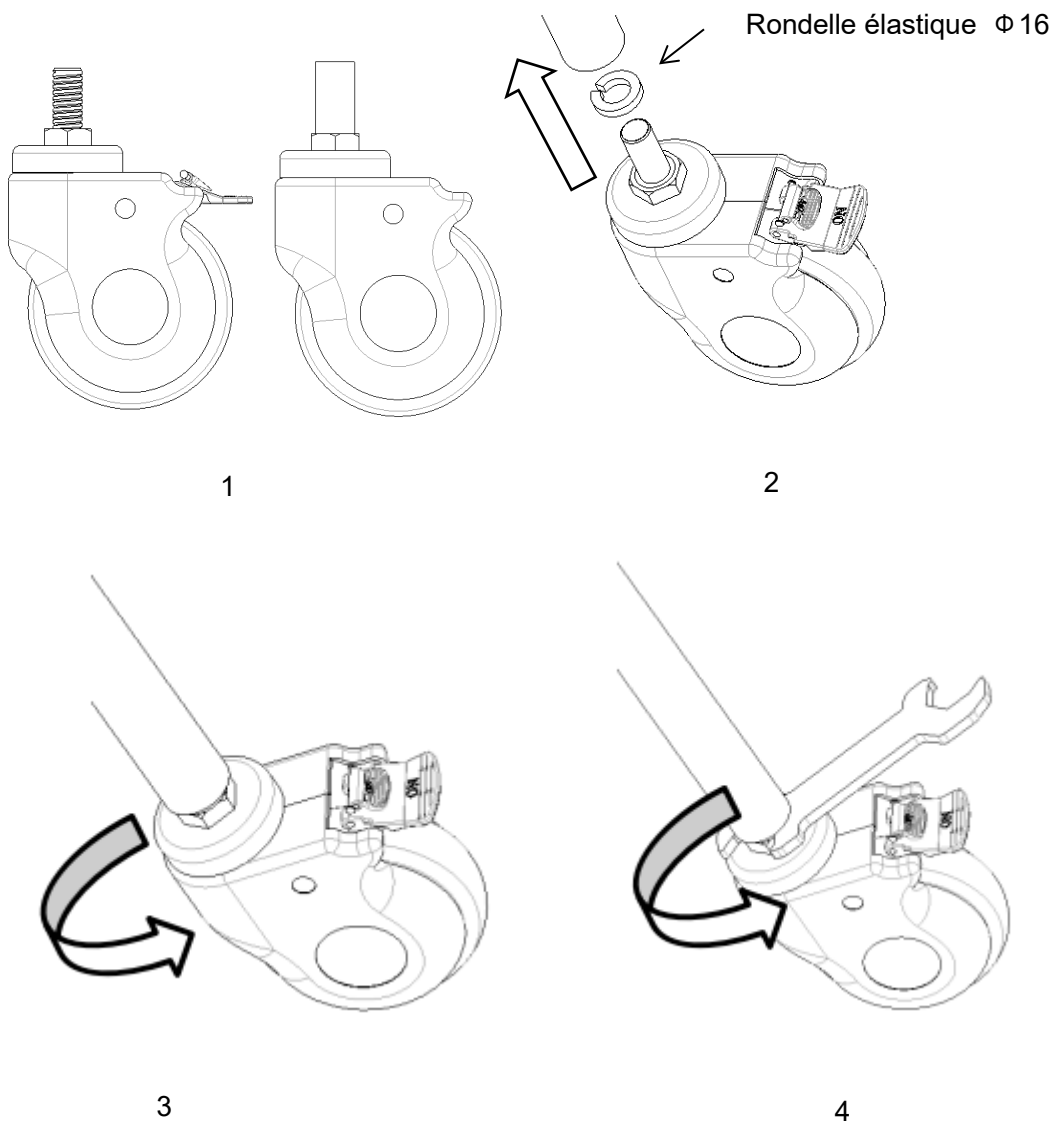



1.3 Installez les pieds

Fixez le pied à l'aide d'une clé Allen comme indiqué sur l'illustration.

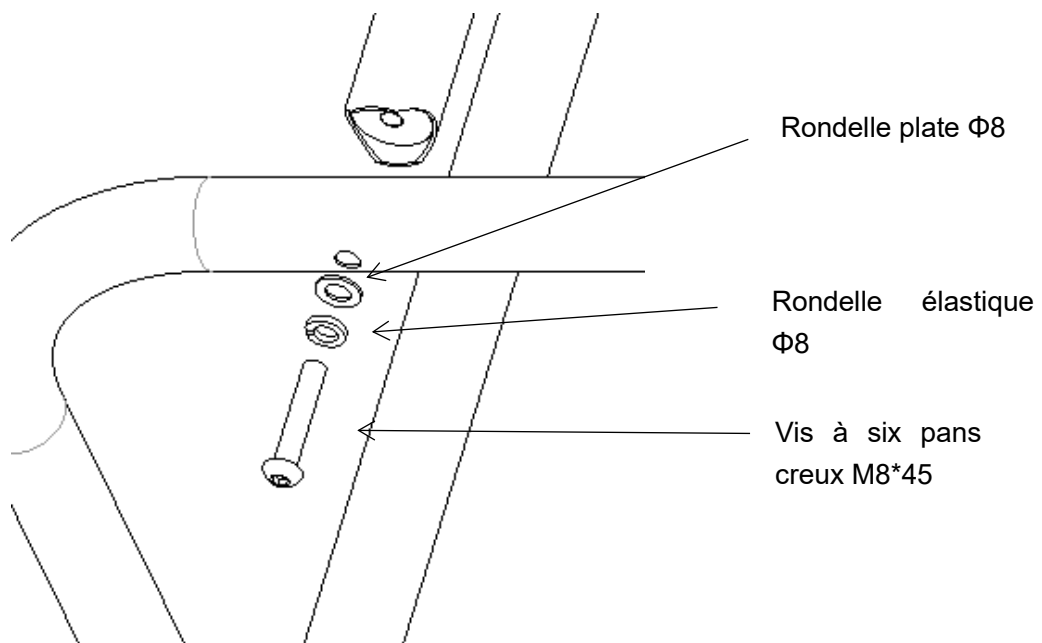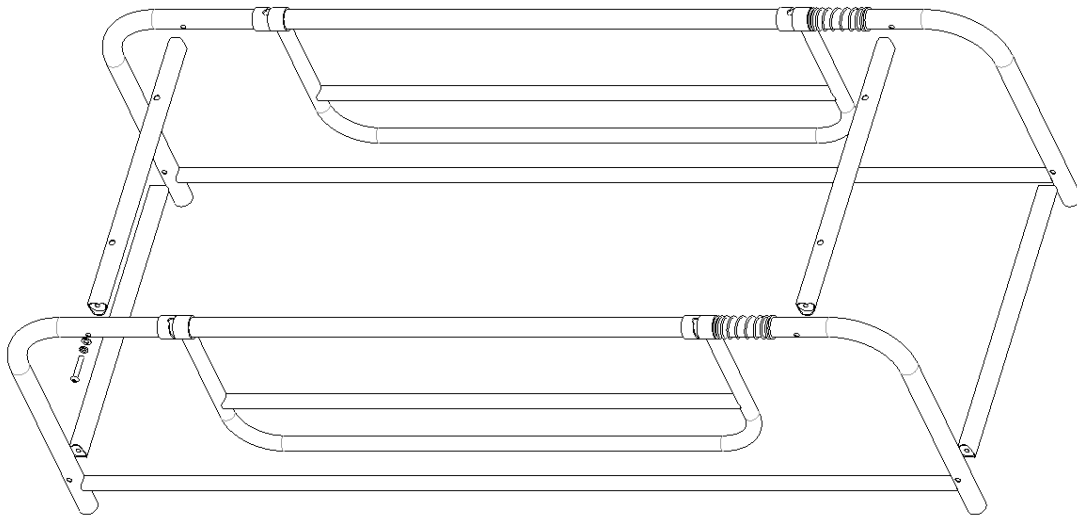



1.4 Installer le panneau du lit

Mettez le lit à la verticale, soulevez le panneau arrière, retirez les vis et installez-le comme indiqué.

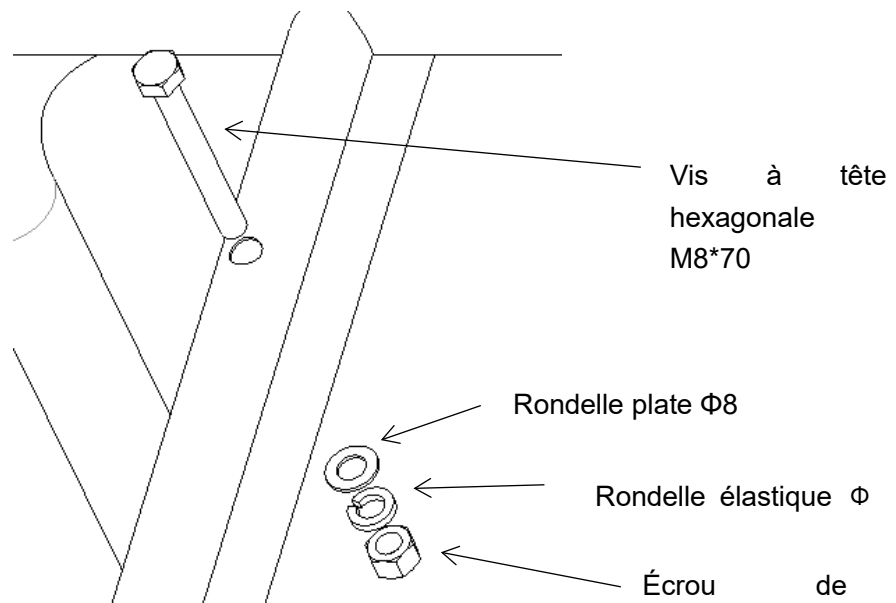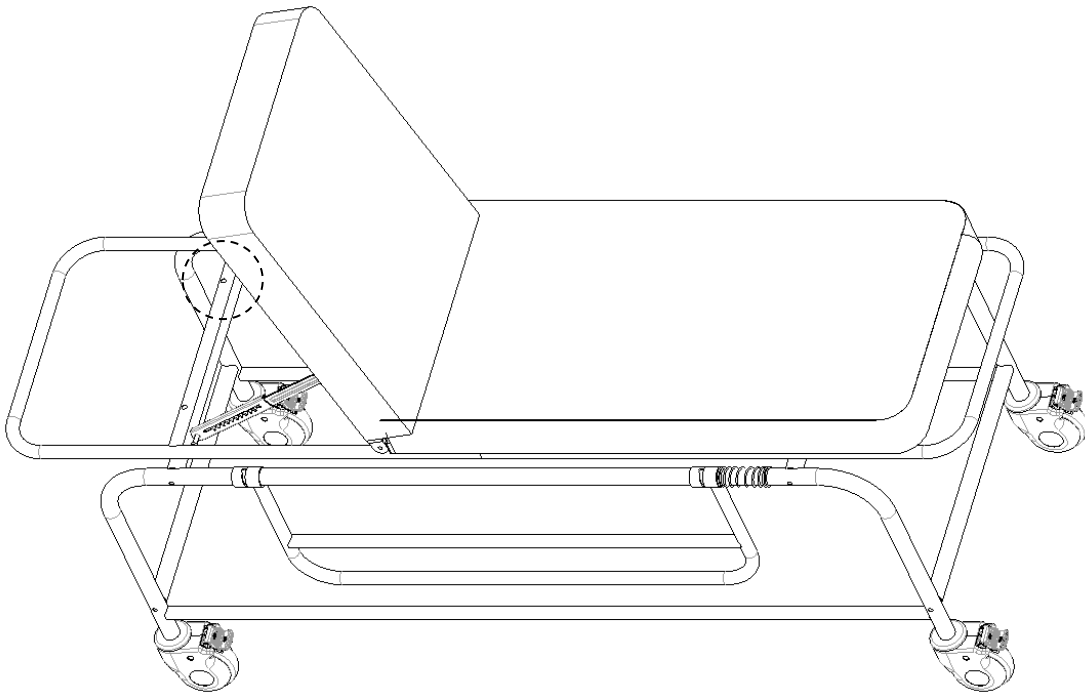


Posez une couche de coussins de protection et retournez le corps principal du lit ; retirez les vis et installez-les comme indiqué.

(Afin de faciliter l'observation, cachez temporairement le panneau du lit.)

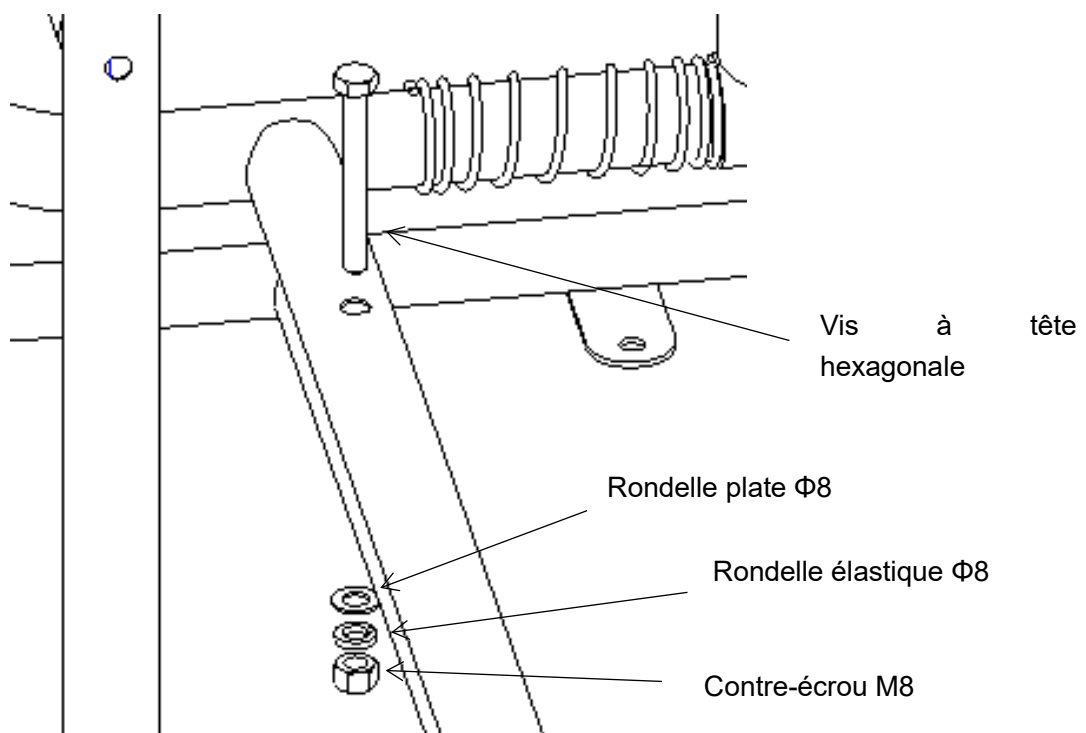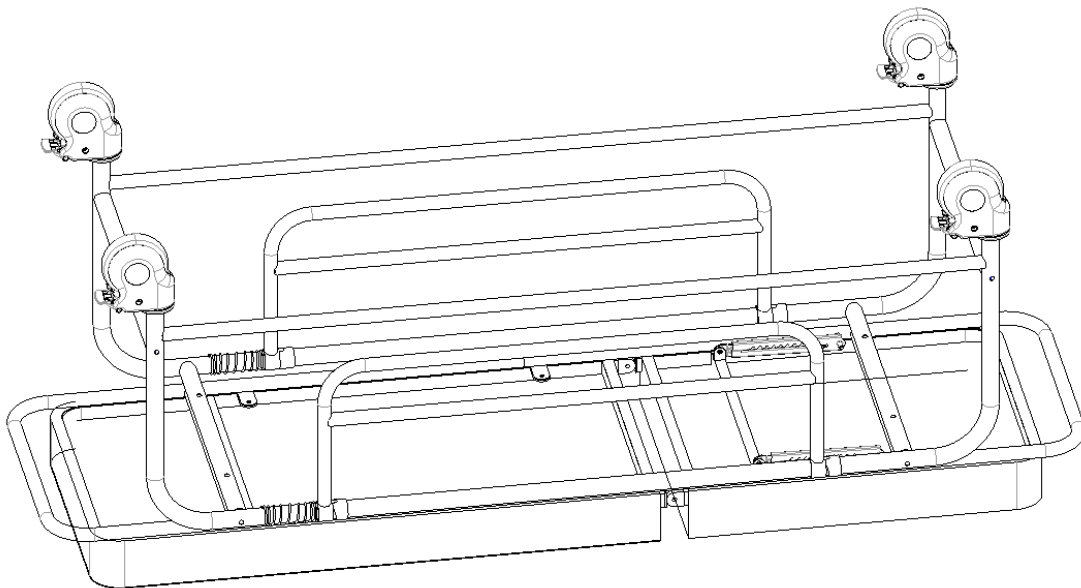


2. Instructions relatives au produit

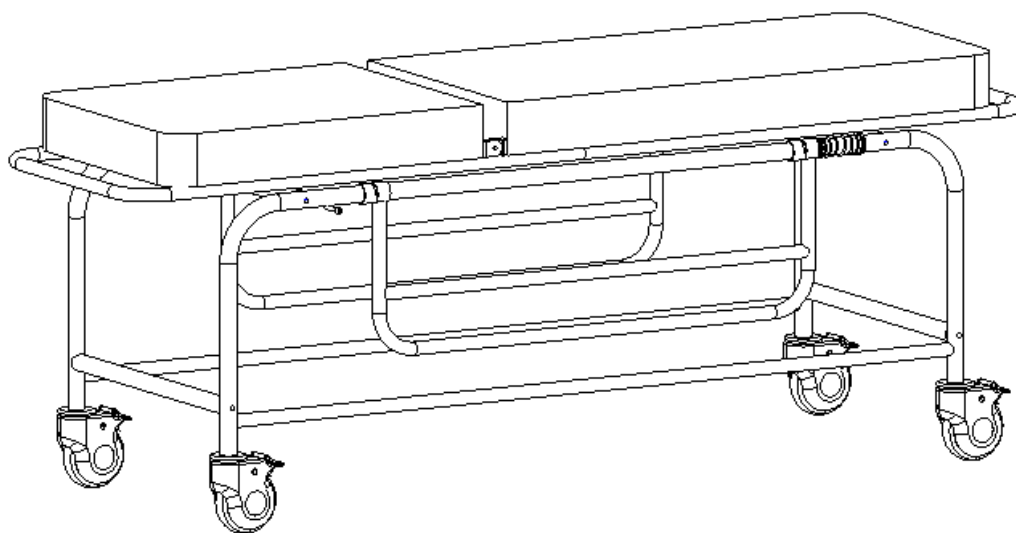


Dimensions	Longueur	mm	1960
	Largeur		520
	Hauteur à partir du sol		770
Poids	Charge maximale admissible	KG	17

2.1 Mode d'utilisation des roulettes

Verrouiller la roulette : après avoir poussé le lit dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

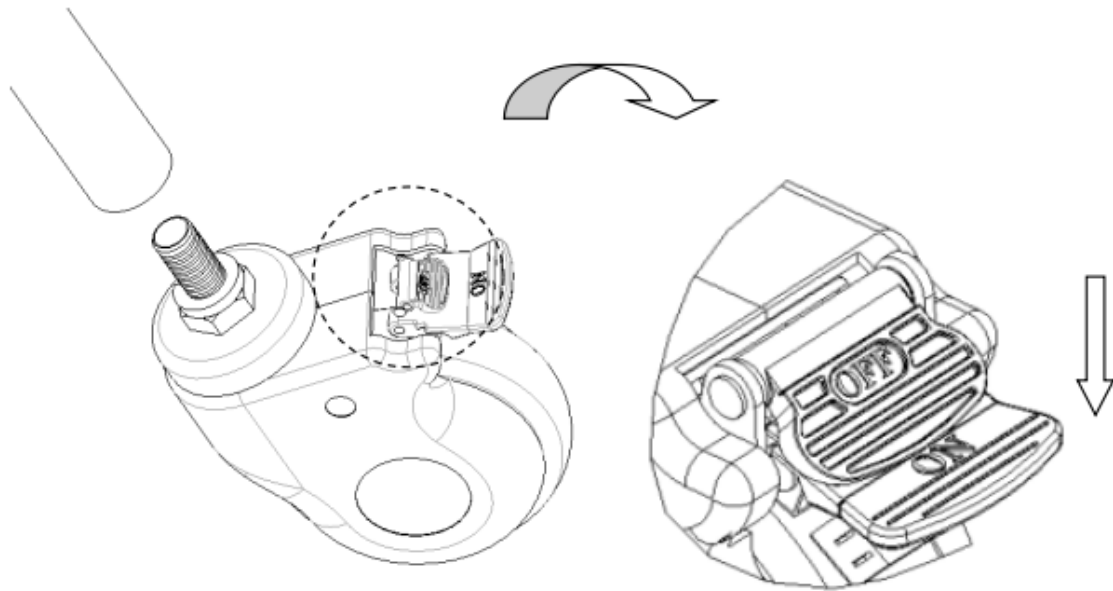


Déverrouillage des roulettes : appuyez avec le pied sur le bouton OFF et déverrouillez les roulettes lorsque vous entendez un « clic ».

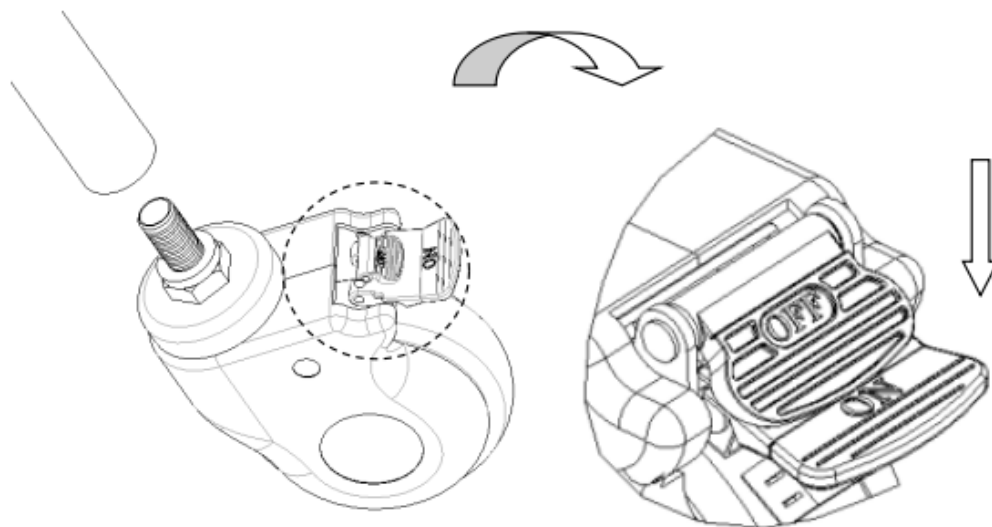


2.2 Utilisation des barrières de sécurité

Relevez la barrière de sécurité. Lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que la barrière est verrouillée.

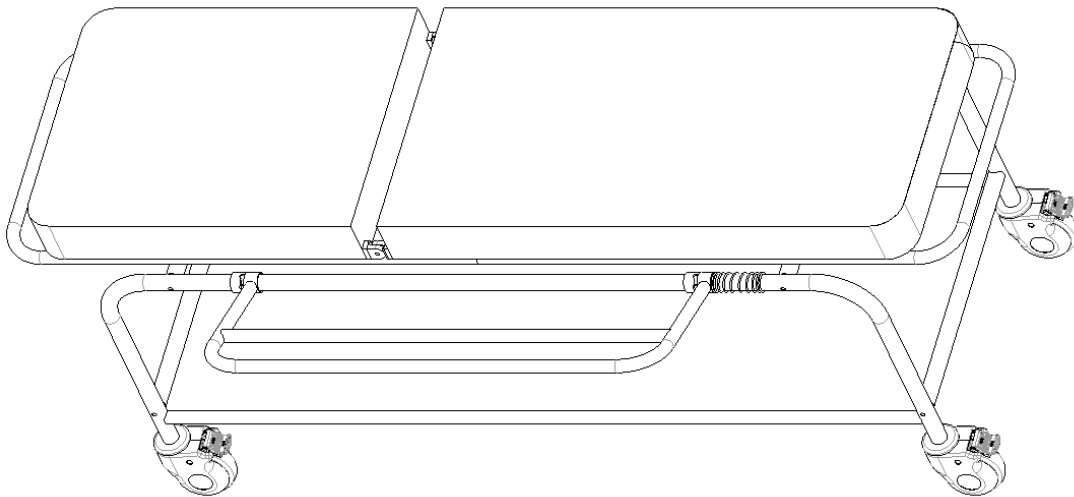


Abaissez la barrière de sécurité, tirez-la vers l'arrière dans le sens du ressort comme indiqué sur l'illustration, puis abaissez-la.

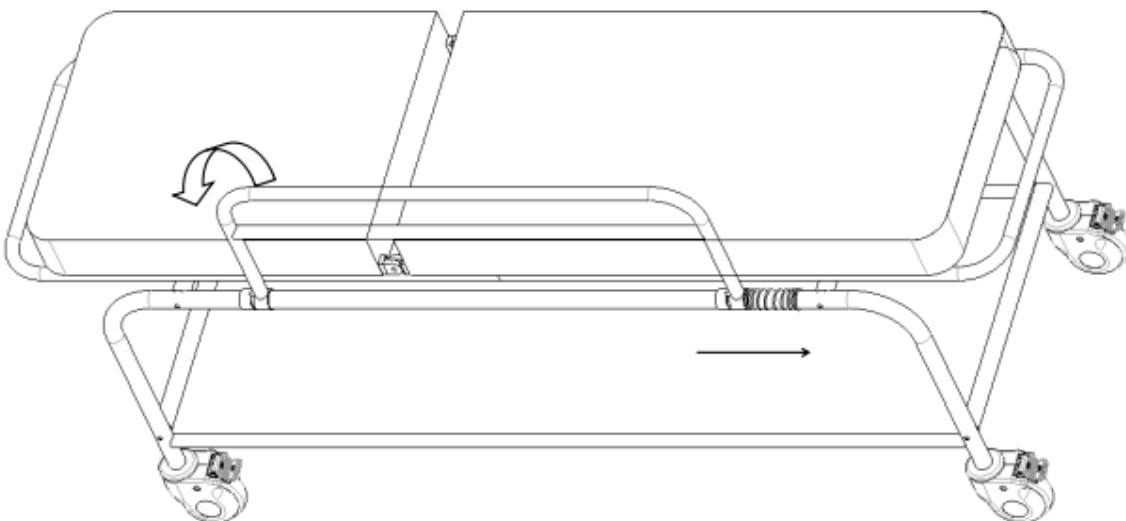



2.3 Instructions relatives au panneau arrière

Soulevez le panneau arrière et relâchez-le dans la position prévue pour le fixer automatiquement.

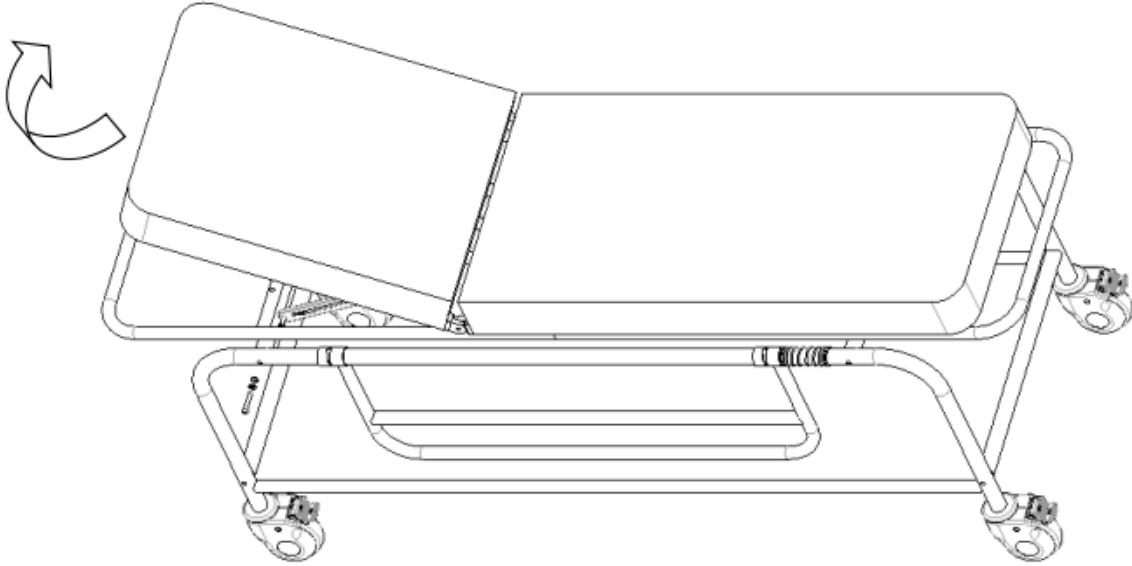

Relevez le panneau arrière à sa hauteur maximale, puis abaissez-le pour abaisser le dossier.

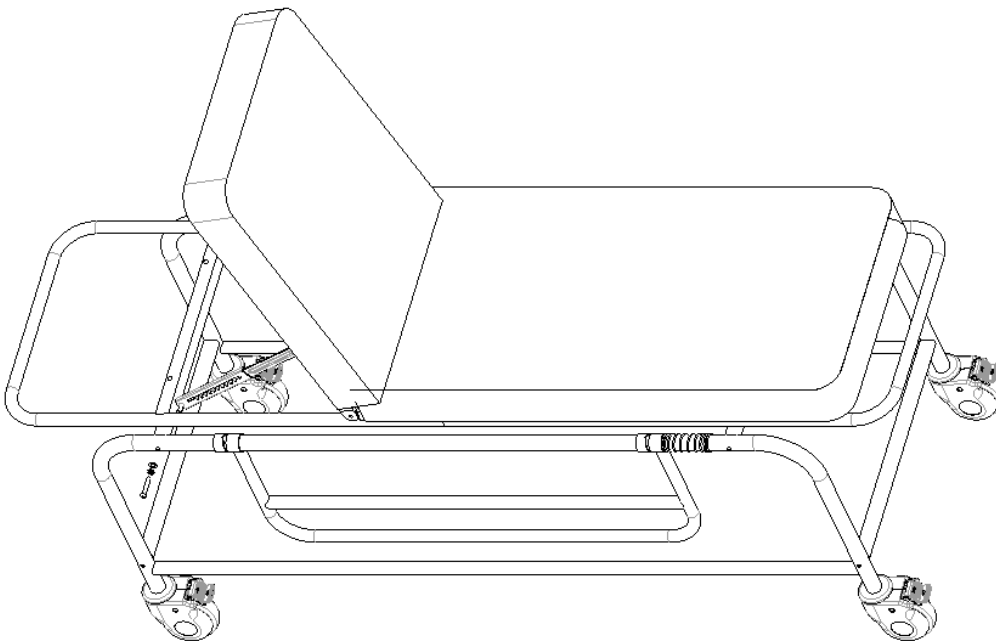

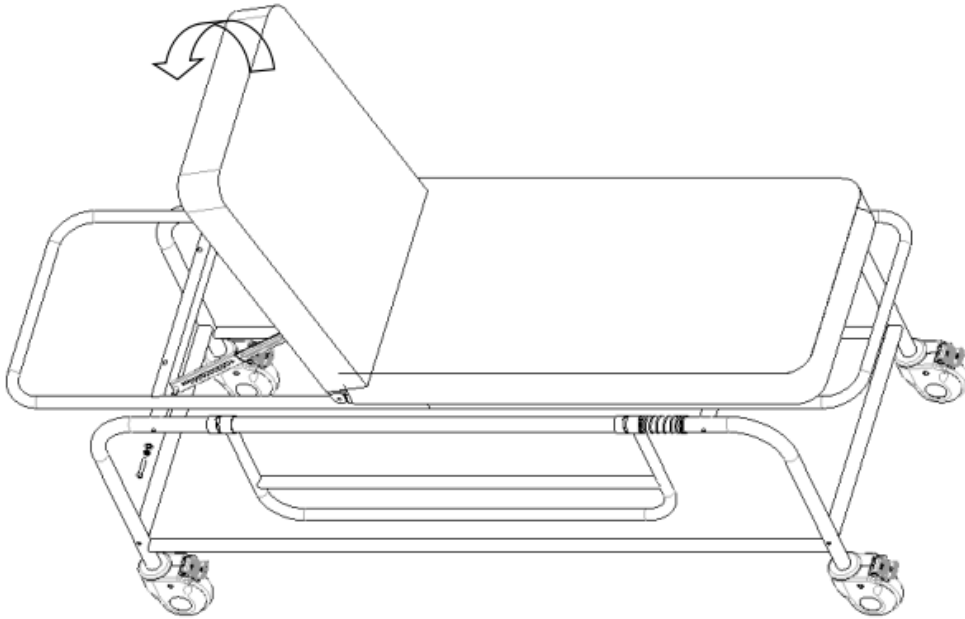


2.4 Installation du support pour potence à perfusion

Installation de la partie femelle : Appuyez sur le crochet en plastique (partie femelle) vers le bas sur le tube en acier inoxydable de $\Phi 16$ mm.

Installation de la partie mâle : placez le crochet en plastique (partie mâle) directement au-dessus de la partie femelle en forme de croix, puis alignez les boucles de la partie mâle avec les fentes de la partie femelle et appuyez vers le bas. Après avoir entendu un « clic », vérifiez si l'extrémité de la boucle est bien serrée. Si c'est le cas, l'installation est terminée. Sinon, continuez à appuyer vers le bas jusqu'à ce que la boucle soit bien serrée.


Insérez le pied à perfusion installé verticalement dans le logement prévu à cet effet. (La flèche sur l'image indique l'emplacement du pied à perfusion).

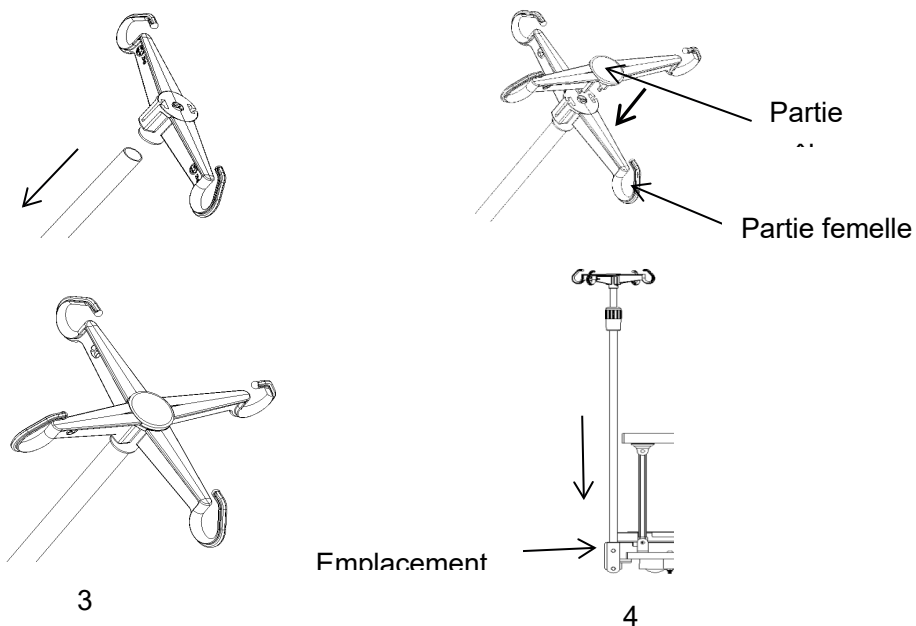

2.4. 2 Mode d'emploi de la potence à perfusion

Réglage de la hauteur du pied à perfusion :

1. Desserrez délicatement la douille extérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le tube intérieur du pied à perfusion dans la douille extérieure, puis ajustez la longueur de la tige d'extension vers le haut ou vers le bas.
2. Réglez la longueur requise, puis serrez délicatement le manchon extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. La charge maximale de chaque crochet est de 2 kg, pour un total de 8 kg.
(Réglage de la hauteur : 890-1540 mm)

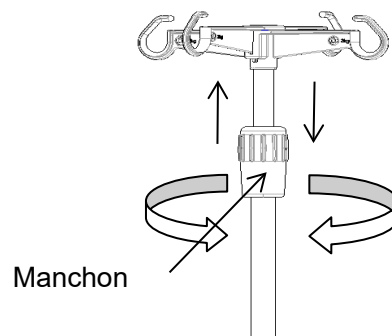

3. Exclusion des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot patient	1. La roulette est bloquée sans que le levier ait été relâché 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.2

4. Entretien du chariot patient en acier inoxydable

1. Afin d'utiliser le chariot pour patient en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des contrôles

de sécurité réguliers. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.

2. Lorsque le châssis du chariot pour patients vieillit et atteint une certaine durée d'utilisation, les parties métalliques et plastiques du chariot peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils ou des couteaux à angles vifs pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot patient, car cela pourrait provoquer la rouille de la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, ce qui pourrait les endommager.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui pourrait endommager le système de freinage.

7. L'usure de la surface des pneus peut être détectée par inspection visuelle. Des fils et autres accumulations peuvent s'enrouler autour des roues. Retirez les boulons et les écrous des roues, nettoyez les débris et vérifiez si les roulements sont endommagés. Si les pièces ne sont pas endommagées, vous pouvez les remonter et les réutiliser.

8. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son état d'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des axes sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans cette opération.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot de patient équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot de patient et de vérifier si l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, l'efficacité des freins des roulettes doit être testée à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot patient en acier inoxydable est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot pour patients en acier inoxydable de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot pour patients en acier inoxydable doit être stocké :
 - a) Température ambiante : -40°C ~ 70 °C.
 - b) Humidité relative : ≤ 95 %.
 - c) Pression atmosphérique : 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez les présenter lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie avec le « certificat » ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE : SKB037(B) | RÉF. : 319-SKB037(B)

CAMILLA / STRETCHER / Civière / BARELLA / MACA / TRAGEBRETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parc de démonstration, Zhangjiagang City,

Province du Jiangsu, Chine



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unité 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Pays-Bas



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, Valence (Espagne)

**LOT :
HW25xxx**



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSAIRE : 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com