




Utente manuale

SKB037(B) **Carrello paziente in acciaio inossidabile**

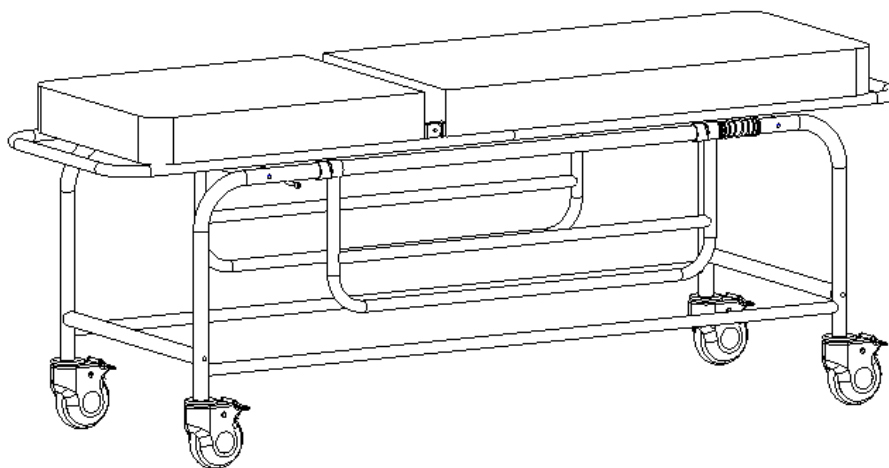

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098

Contenuto

Introduzione manuale.....	2
1. Guida all'installazione.....	3
1.1 Elenco degli accessori standard.....	3
1.2 Installazione delle rotelle.....	5
1.3 Installazione dei piedini.....	6
1.4 Installazione della rete.....	7
2. Istruzioni del prodotto.....	9
2.1 Modalità d'uso delle rotelle.....	10
2.2 Modalità d'uso delle sponde di protezione.....	11
2.3 Istruzioni per il pannello posteriore.....	12
2.4 Installazione del supporto per flebo.....	13
2.4.2 Utilizzo dell'asta portaflebo.....	14
3. Esclusione dei guasti.....	14
4. Manutenzione del carrello paziente in acciaio inossidabile.....	14
5. Imballaggio, trasporto, conservazione.....	15
6. Assistenza post-vendita.....	16

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente le istruzioni prima di procedere all'installazione e all'uso. Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere il manuale d'uso e tutte le precauzioni.

- ▶ Il presente manuale è applicabile al carrello paziente in acciaio inossidabile SKB037(B). Contiene le modalità di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo per la manutenzione.
- ▶ Le immagini contenute nel presente manuale sono solo a scopo illustrativo. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.
- ▶ Il presente manuale utente include la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- ▶ Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- ▶ Chiunque utilizzi o utilizzi questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.
- ▶ Salvo alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a familiarizzarsi con l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto la confezione, verificare che tutte le parti elencate di seguito siano presenti:

Tabella a:

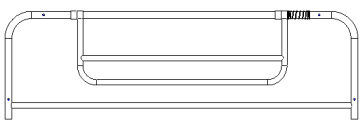
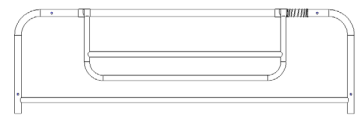
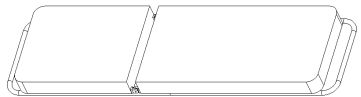
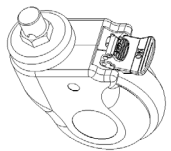
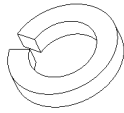
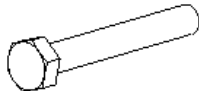
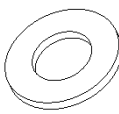
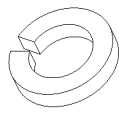
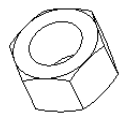
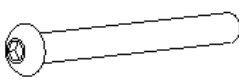
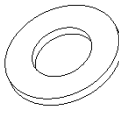
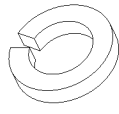
N	Nome	Immagine	Specifiche	Q	Unità
1	Piede destro		L1600*P485 mm	1	pz
2	Piede sinistro		L1600*P485 mm	1	pz
3	Tubo di collegamento piede		Φ32*551-M8 mm	2	pz
4	Il tubo di collegamento del piede presenta dei fori		Φ32*551-M8 mm	2	pz
5	Telaio del letto		L1960*P520 mm	1	pz
6	Rotelle		Ruota con copertura da 5 pollici con freno	4	pz
7	Palo IV		Φ 16-19 mm/ bianco sporco	1	pz
8	Vite	/	Fare riferimento alla tabella a.1	1	set


Tabella a.1:

N	Nome	Immagine	Specifiche	Q.	Unità
1	Rondella elastica		$\Phi 16 * \Phi 23,8 * H3,5 \text{ mm}$	4	pz
2	Vite esagonale		M8*70 mm	4	pezzi
3	Rondella piatta		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2 \text{ mm}$	4	pz
4	Rondella elastica		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5 \text{ mm}$	4	pz
5	Dado di bloccaggio		M8 mm	4	pz
6	Vite a testa esagonale		M8*45 mm	8	pz
7	Rondella piatta		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1,2 \text{ mm}$	8	pz
8	Rondella elastica		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2,5 \text{ mm}$	8	pz

1.2 Installare le rotelle



Posizionare un cuscinetto protettivo e capovolgere il corpo del letto;

Estraete la rondella elastica $\Phi 16$ dalla confezione delle viti, estraete la ruota di copertura, inserite la ruota di copertura nel tubo e serrate in senso orario, quindi serrate con una chiave esagonale.

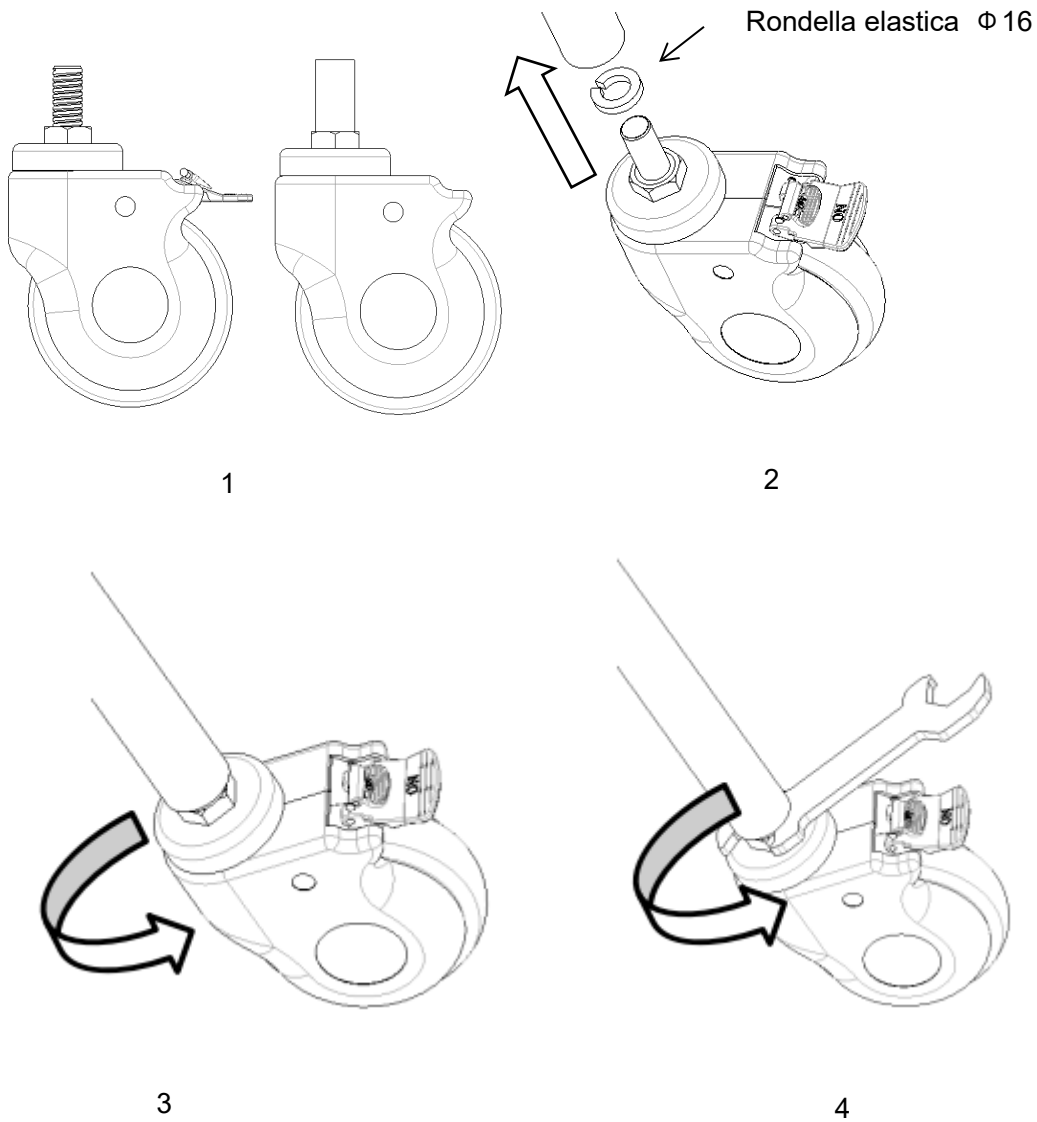



1.3 Installare i piedini

Fissare il piedino con una chiave a brugola come mostrato in figura.

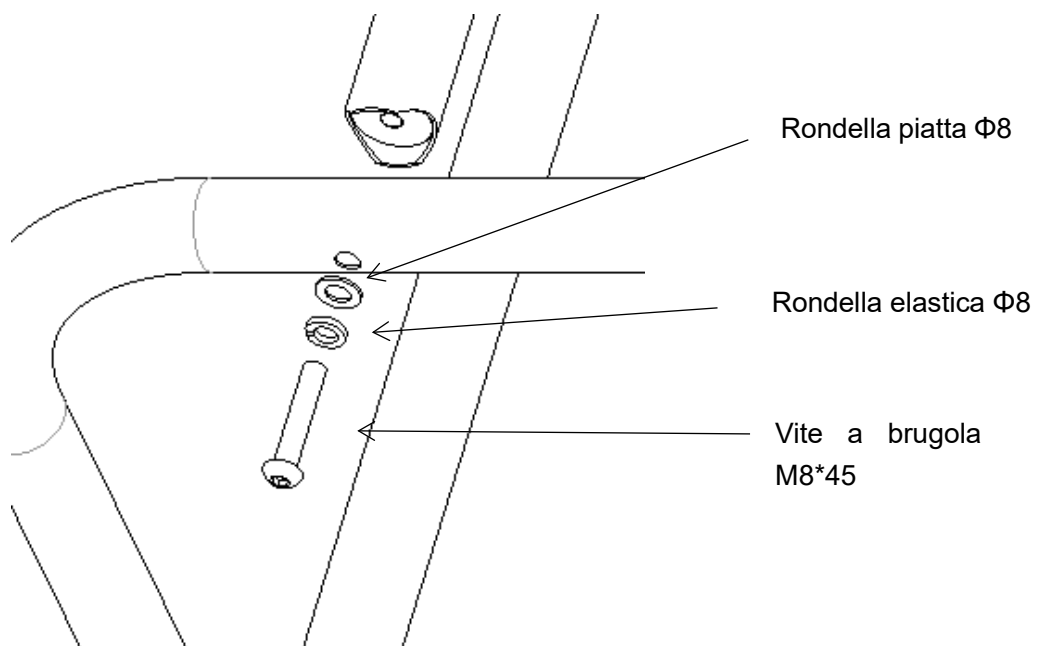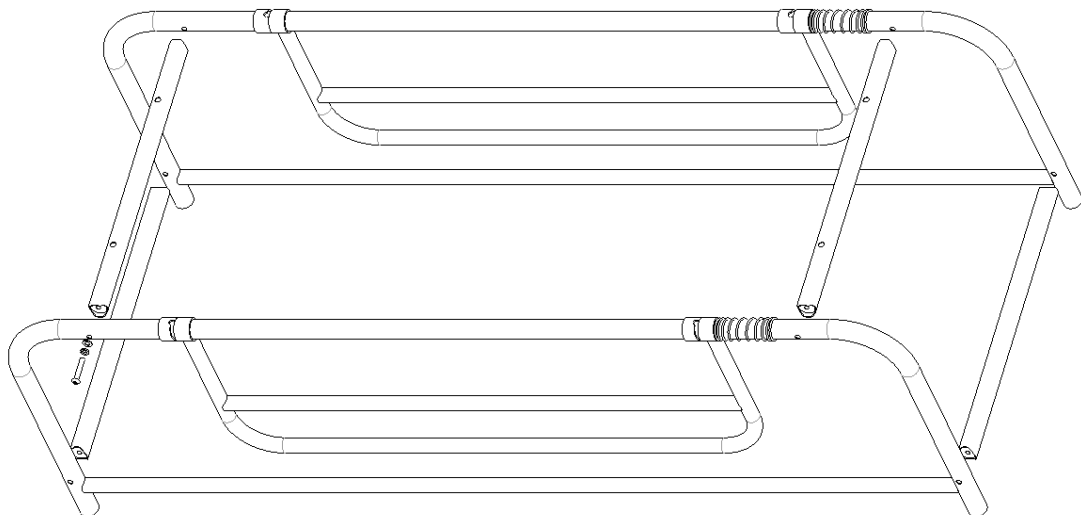



1.4 Installare la tavola del letto

Posizionare il letto in posizione verticale, sollevare la testiera, rimuovere le viti e installare come mostrato.

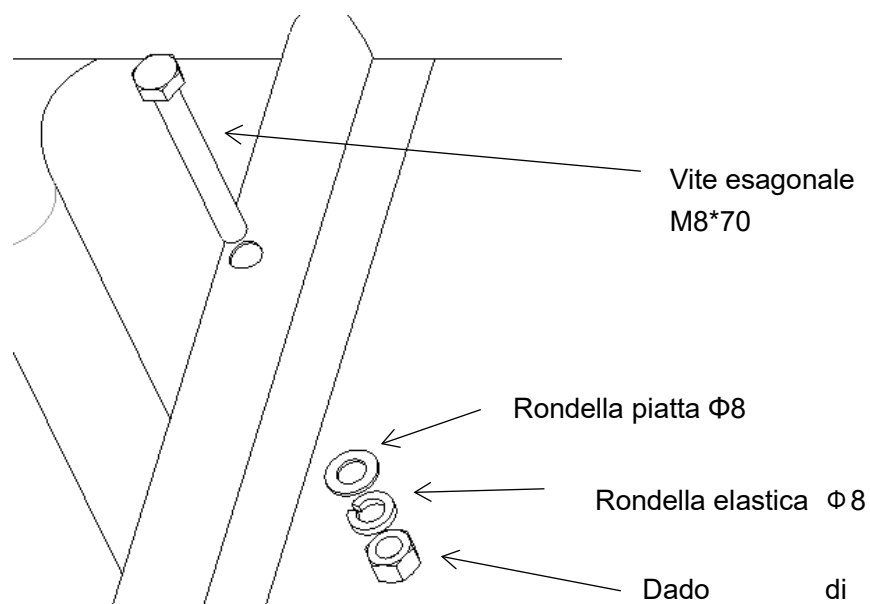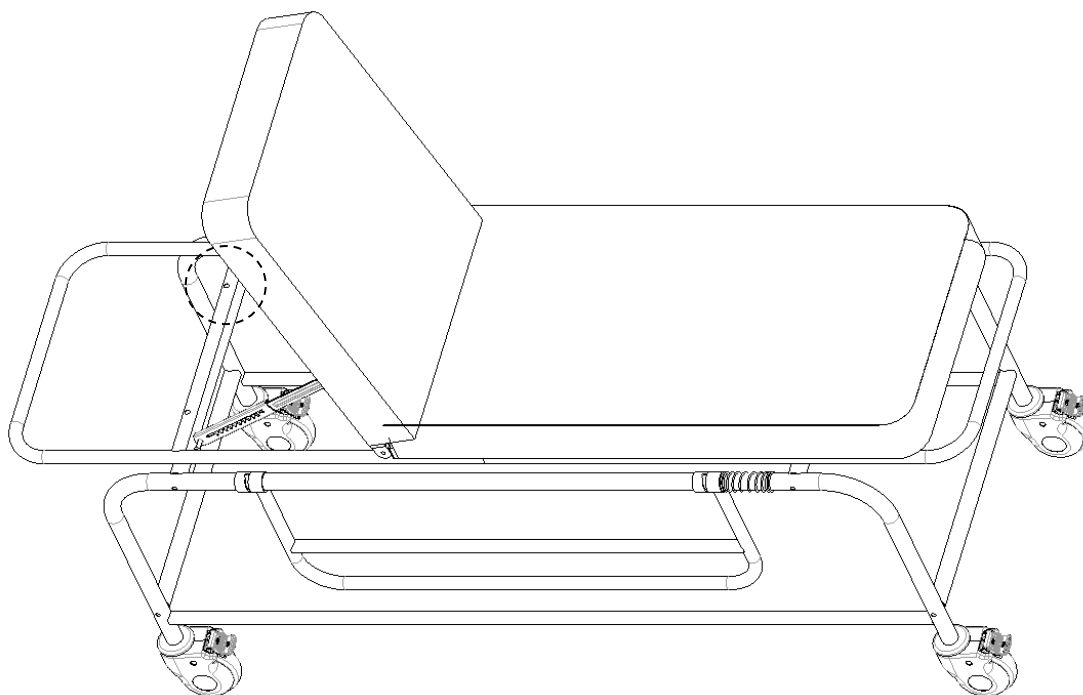


Stendere uno strato di cuscini protettivi e capovolgere il corpo principale del letto; rimuovere le viti e installare come mostrato.

(Per facilitare l'osservazione, nascondere temporaneamente il pannello del letto).

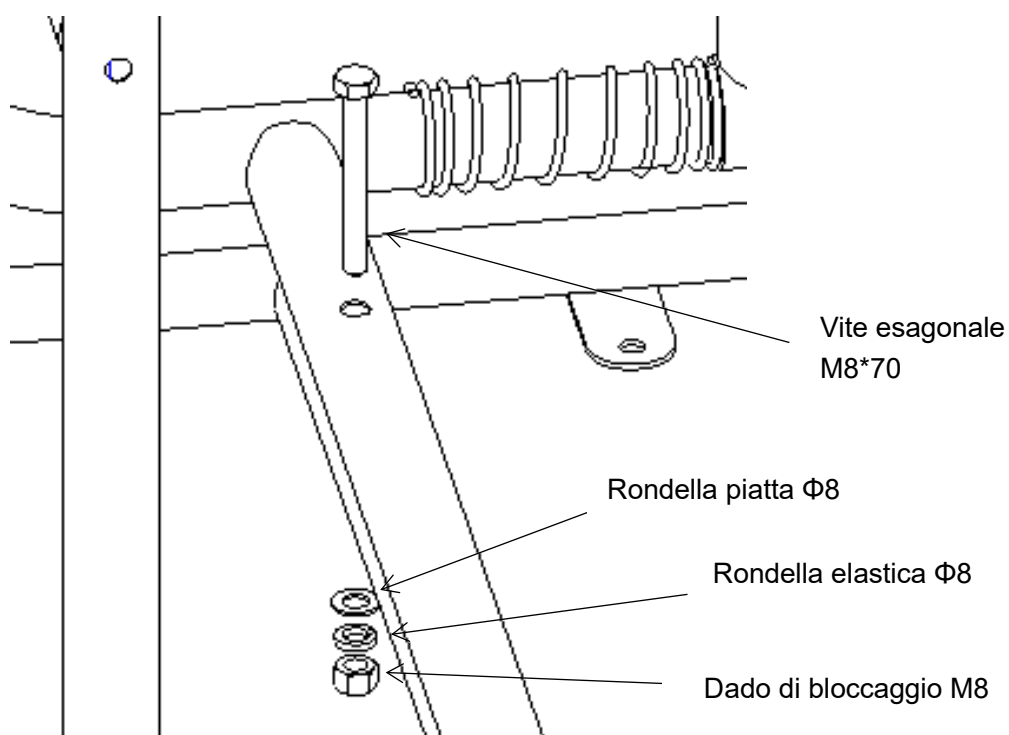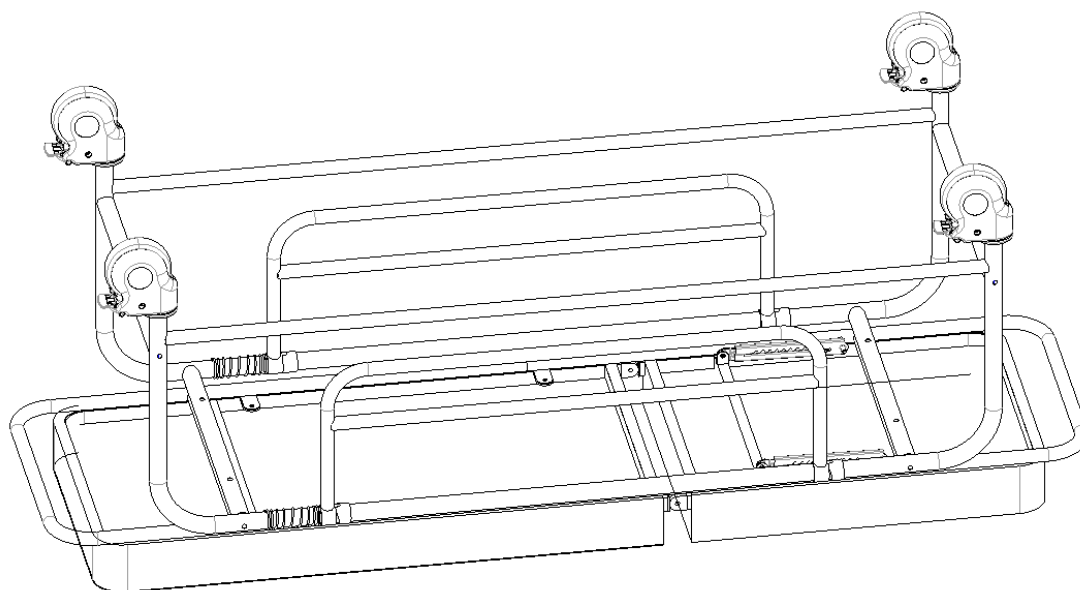


2. Istruzioni del prodotto

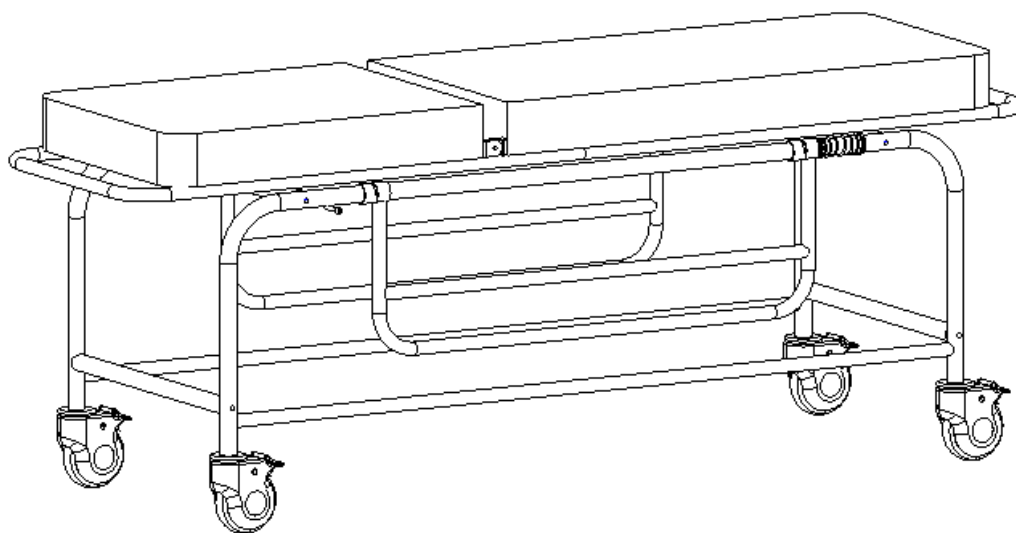


Dimensioni	Lunghezza	mm	1960
	Larghezza		520
	Altezza da terra		770
Peso	Carico di lavoro sicuro	KG	17

2.1 Modalità d'uso delle ruote

Bloccare la rotella: dopo aver spinto il letto nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura sottostante.

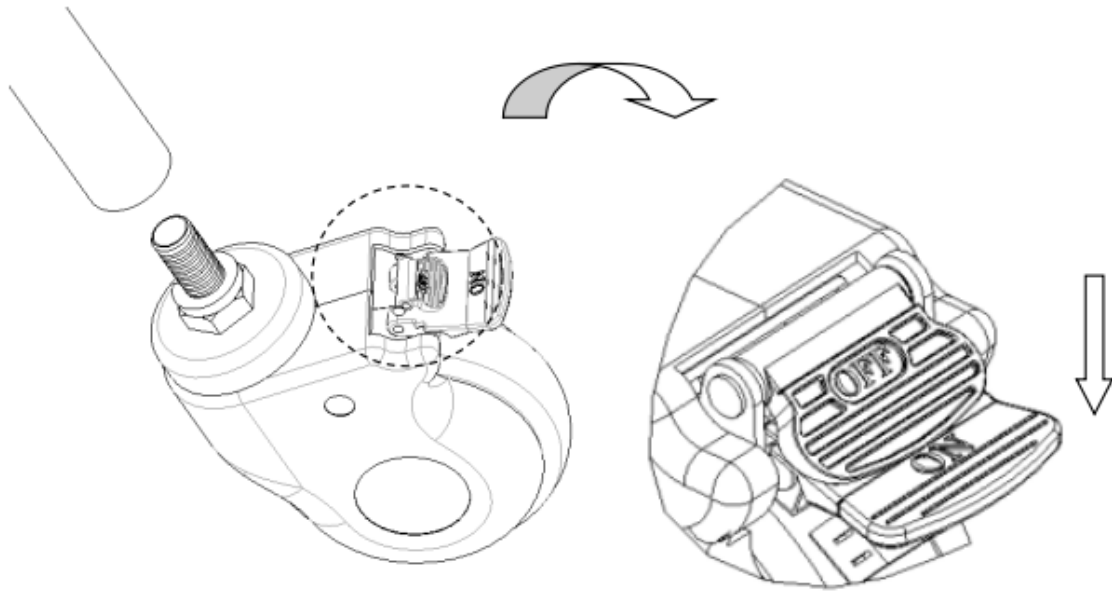


Sbloccare la rotella: premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "clic".

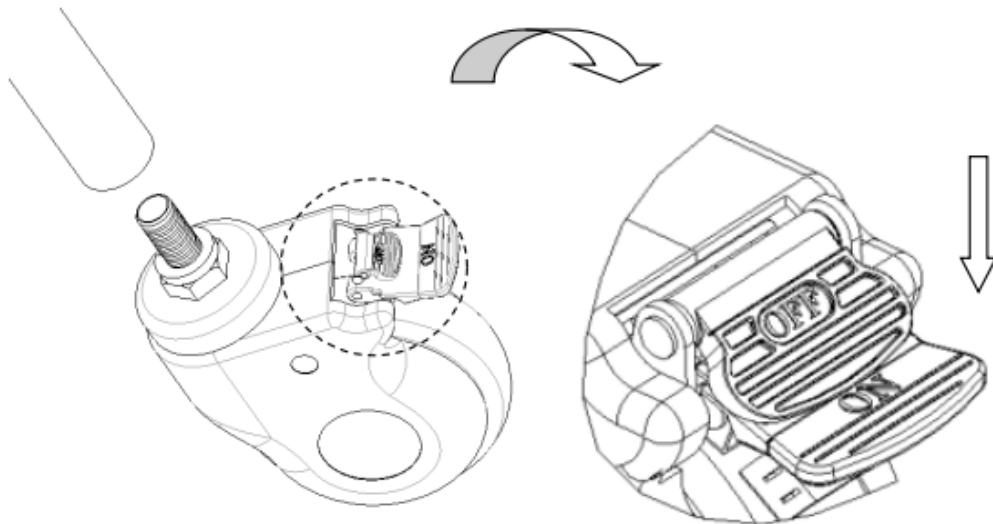


2.2 Modalità d'uso delle sponde di protezione

Sollevare il parapetto: quando si sente il clic, significa che il parapetto è bloccato.

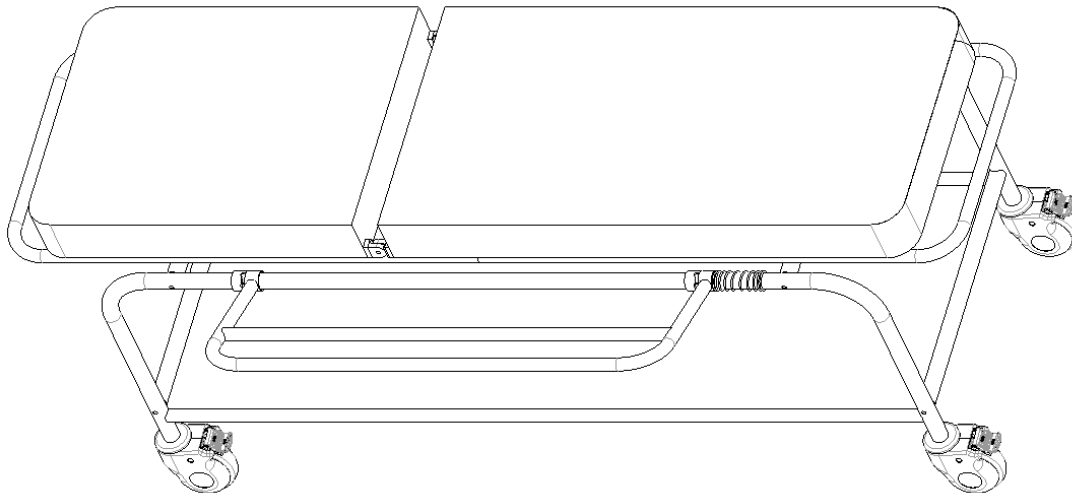


Abbassare il parapetto, tirarlo indietro nella direzione della molla come mostrato nella figura, quindi abbassarlo.

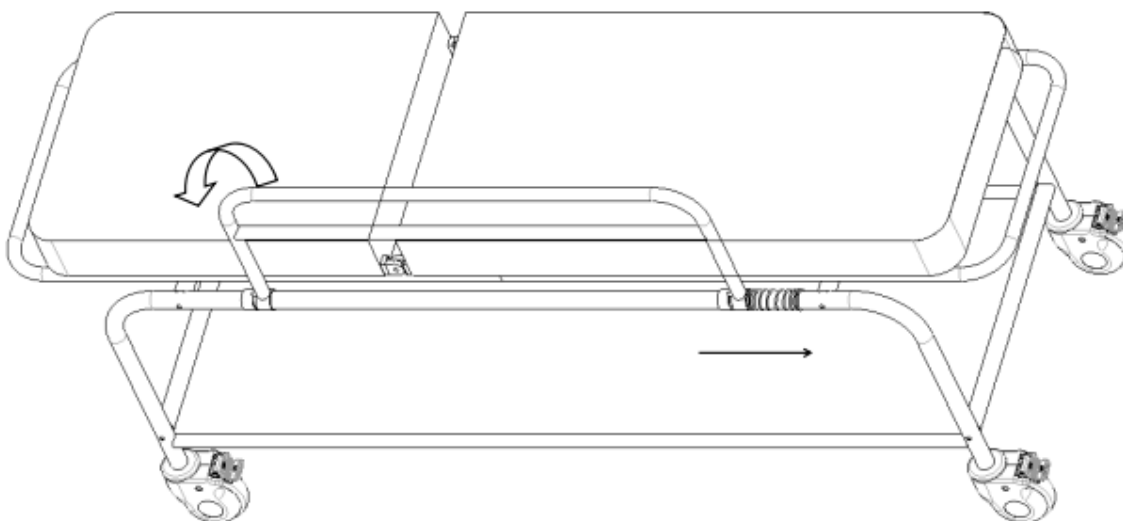



2.3 Istruzioni per il pannello posteriore

Sollevare il pannello posteriore e rilasciarlo nella posizione designata per fissarne automaticamente la posizione.

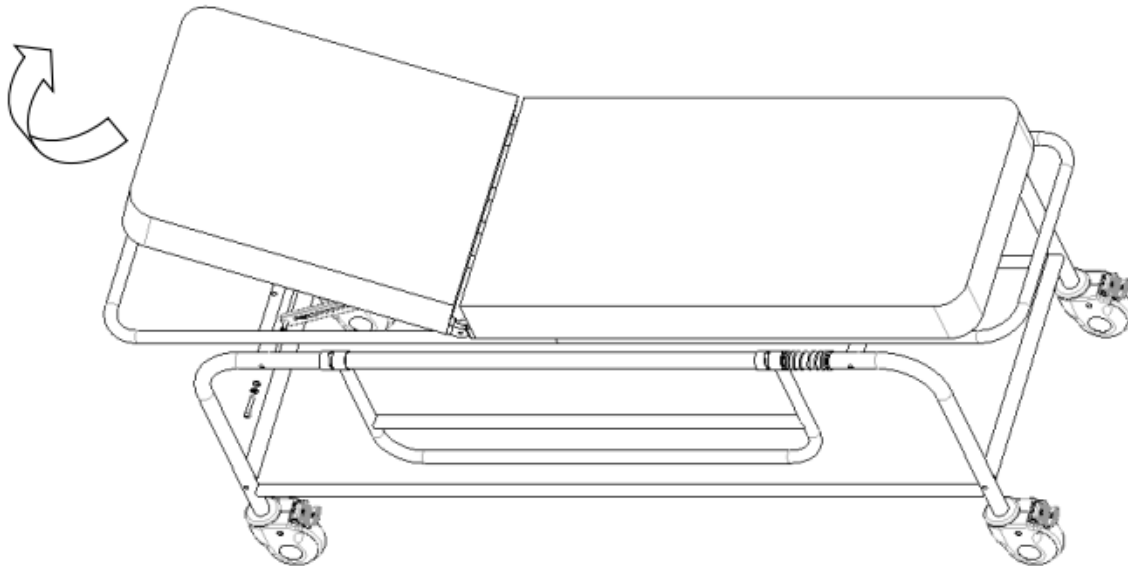

Sollevare il pannello posteriore alla massima altezza, quindi abbassarlo per abbassare la parte posteriore.

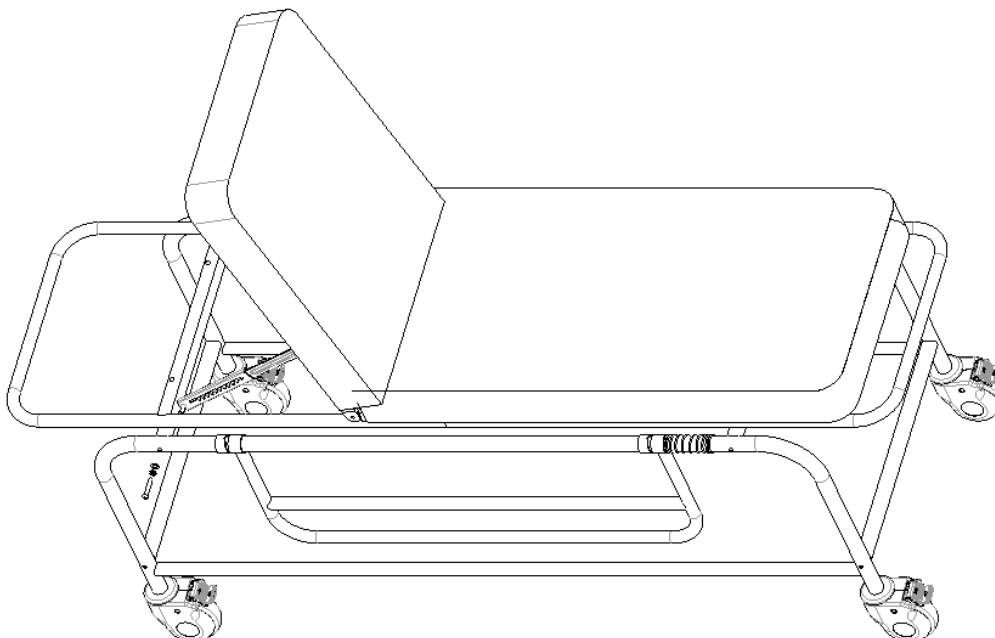

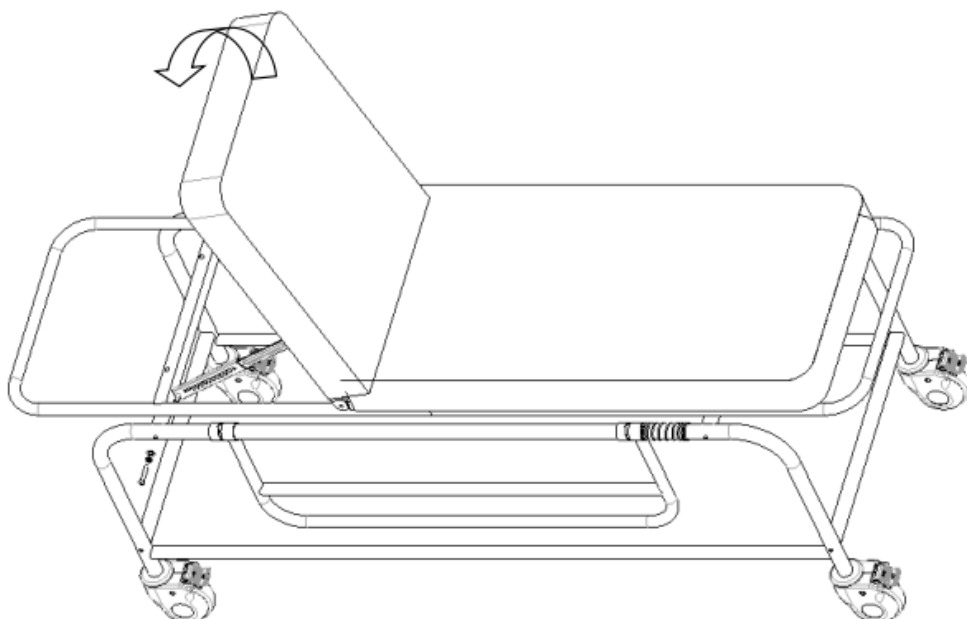


2.4 Installazione dell'asta portaflebo

Installazione della parte femmina: premere il gancio di plastica (parte femmina) sul tubo in acciaio inossidabile $\Phi 16$ mm.

Installazione della parte maschio: posizionare il gancio di plastica (parte maschio) direttamente sopra la parte femmina a forma di croce, quindi allineare le fibbie sulla parte maschio con le fessure sulla parte femmina e premere verso il basso. Dopo aver sentito un "clic", controllare che l'estremità della fibbia sia ben salda; se lo è, completare l'installazione, altrimenti continuare a premere verso il basso fino a quando la fibbia non è ben salda.

Inserire l'asta portaflebo installata verticalmente nell'apposito alloggiamento. (La freccia nella figura indica l'alloggiamento dell'asta portaflebo)

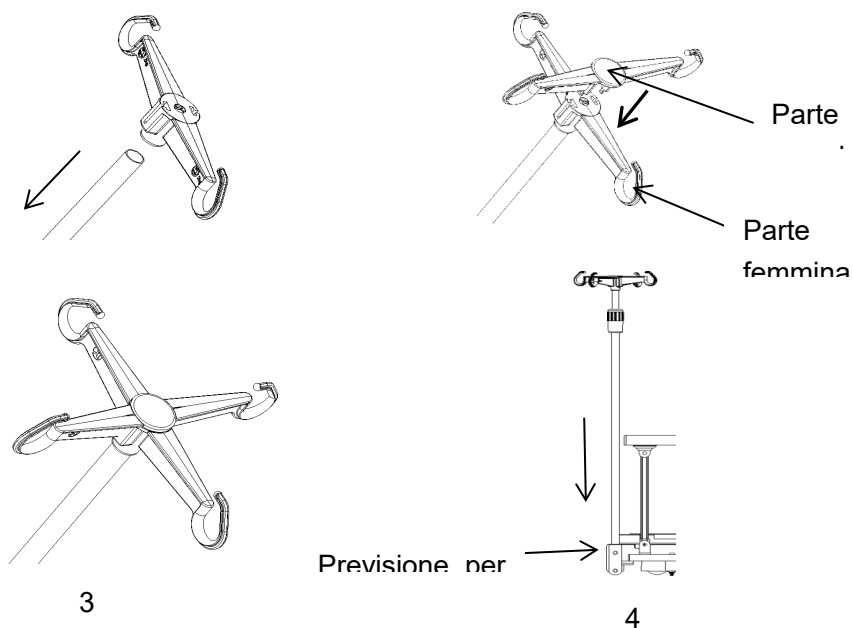


2.4. 2 Metodo di utilizzo dell'asta portaflebo

Regolazione dell'altezza dell'asta portaflebo:

1. Allentare con cautela il manicotto esterno in senso antiorario, inserire il tubo interno dell'asta per flebo nel manicotto esterno, quindi regolare la lunghezza dell'asta di prolungamento verso l'alto o verso il basso;
2. Regolare la lunghezza richiesta, quindi serrare con cautela il manicotto esterno in senso orario.

Il carico massimo di ciascun gancio è di 2 kg, per un totale di 8 kg.

(Regolazione dell'altezza: 890-1540 mm)

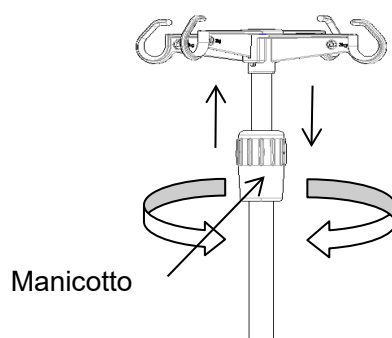

3. Esclusione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
Difficoltà nel muovere l'intero carrello del paziente	1. La rotella è bloccata senza aver rilasciato la leva 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione del carrello paziente in acciaio inossidabile

1. Per utilizzare il carrello per pazienti in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di

sicurezza sul carrello stesso. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello per pazienti è usurato e raggiunge un determinato periodo di manutenzione, le parti metalliche e plastiche del telaio possono essere riciclate.

3. Evitare di graffiare il pannello con oggetti appuntiti o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello paziente, poiché potrebbero causare la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le ruote per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le ruote durante la frenata, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata mediante ispezione visiva. Alcuni fili di filo ritorto e altri accumuli possono avvolgersi attorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Per valutare se la rotella deve essere sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzare rondelle di bloccaggio o dadi di bloccaggio per facilitare questa operazione.

9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello per pazienti dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello e verificare che il funzionamento di uno dei freni di ciascuna ruota sia corretto. Se il funzionamento del freno non è corretto a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi riprovare il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario verificare nuovamente il funzionamento dei freni delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello per pazienti in acciaio inossidabile viene effettuato in base al contratto

o allo standard del prodotto.

2. Evitare di trasportare il carrello per pazienti in acciaio inossidabile in modo affrettato, sottoponendolo a vibrazioni violente e proteggendolo dalla luce solare e dalla pioggia.

3. Il carrello per pazienti in acciaio inossidabile deve essere conservato:

a) Temperatura ambiente: da -40°C ~ 70°C .

b) Umidità relativa: $\leq 95\%$.

c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Assistenza post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, che dovranno essere presentati alla nostra azienda in caso di intervento in garanzia o di manutenzione del prodotto.

2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un'assistenza tecnica accurata e rapida e servizi di manutenzione in modo tempestivo.

3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa di un'installazione e un utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto godrà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.

4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona correttamente a causa di problemi di qualità entro un anno, la società fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.

5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO: SKB037(B) | RIF.: 319-SKB037(B)

CAMILLA / STRETCHER / Civière / BARELLA / MACA / TRAGEBRETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parco dimostrativo, città di Zhangjiagang,

Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Paesi Bassi



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, Valencia (Spagna)

**LOTTO:
HW25xxx**



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com