

Rollstuhl

Bedienungsanleitung
--elektrische Treppenauffahrt



INHALT

I. Übersicht über den elektrischen Treppensteiger	3
II. Aufbau des Rollstuhls	3
III. Leistungsdaten	4
IV. Betrieb im Treppenaufgang	4
V. Betrieb beim Treppenabfahren	5
VI. Bedienung der einzelnen Teile	6
a. Handgriff	6
b. Vorderer Hebegriff	6
c. Gummikettenrahmen	6
d. Zugstange	7
e. Klappbarer Rollstuhl	7
f. Handläufe	7
g. Pedal	7
h. Sicherheitsgurt, Kopfstütze und Gurte	8
i. Batterie	8
j. Spurverstellung	8
k. Bremsen	9
VII. Bedienungsanleitung	9
VIII. Tägliche Wartung	10
IX. Vorsichtsmaßnahmen für Lithium-Batterien	10
X. Vorsichtsmaßnahmen beim Laden	10
XI. Packliste	10
XII. Garantiezeitraum	11

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung dieses Produkts vertraut!

I. Übersicht über den elektrischen Treppensteiger-Rollstuhl

SKB1C10 Treppensteiger aus Aluminiumlegierung, leicht, einfach zusammenklappbar, leicht zu bedienen usw. Der Motor ist bürstenlos und in drei Gänge unterteilt, von hoch bis niedrig. Der Lithium-Akku ist leicht und einfach zu zerlegen. Der Stuhl nimmt nach dem Zusammenklappen wenig Stauraum ein und eignet sich zum Transport im PKW.

II. Rollstuhlkonstruktion



III. Leistungsparameter

Name	Technische Parameter
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor 24 V, 200 W
Batterie	29,4 V 13,2 Ah
Ladegerät	29,4 V 2 A
Geschwindigkeit oben	Hoch; Mittel; Niedrig;
Geschwindigkeit im Erdgeschoss	Hoch; Mittel; Niedrig;


IV. Betrieb im Obergeschoss



1. Öffnen Sie den Schienenrahmen und stellen Sie die Position der Stange ein. Ziehen Sie den Hebel mit beiden Händen, stellen Sie den rechten Fuß auf den Schienenrahmen über dem Querrohr und senken Sie den Stuhl ab.



2. Stellen Sie den Stuhl auf die Treppe, drücken Sie den Netzschalter an der Steuerbox und schalten Sie die Stromversorgung ein. Halten Sie die Taste „Obergeschoss“ gedrückt, und der Stuhl fährt nach oben.

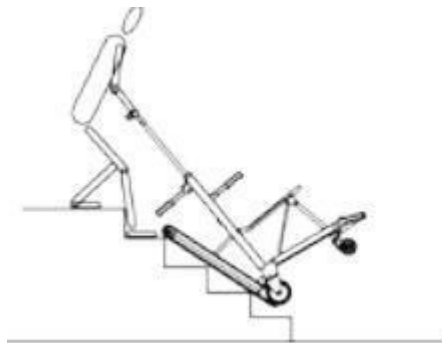

3. Wenn Sie auf halber Höhe anhalten möchten, lassen Sie den Knopf für die obere Etage los. Während des Aufstiegs müssen die Hände den Stuhl nicht nach oben ziehen. Er muss in einem vertikalen Winkel entlang der Treppe stehen. Sie müssen den Stuhl nur festhalten und etwas Druck ausüben.



4. Wenn Sie die letzte Stufe erreicht haben, ziehen Sie mit beiden Händen an der Zugstange und heben Sie den Stuhl langsam an, bis er den Boden berührt. Sie müssen die Treppe nicht hinaufsteigen, sodass die Bedienung keine große Anstrengung erfordert.



5. Wenn das Vorderrad die Treppe erreicht, senken Sie den Stuhl langsam mit dem rechten Fuß ab, bis er den Boden erreicht.



6. Fassen Sie den Griff, heben Sie den Stuhl an und gehen Sie zur nächsten Treppe.

V. Vorgang beim Herunterfahren




1. Schieben Sie den Treppensteigstuhl über den Boden, bis die Vorderräder auf der Kante der Treppe stehen.




2. Treten Sie mit dem rechten Fuß auf die untere Querstange, ziehen Sie die Zugstange mit beiden Händen zurück, um den Stuhl nach unten zu kippen. Drücken Sie dann den Knopf der Treppe nach unten.



3. Setzen Sie den Stuhl langsam auf die erste Kante und lehnen Sie sich die Treppe hinunter.

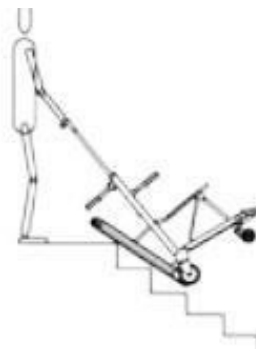

4. Lehnen Sie sich leicht in den Winkel zwischen dem Gurt und der Treppe.

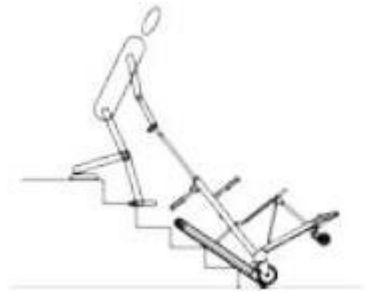

5. Legen Sie während des Abwärtsfahrens die Hände leicht auf die Stange, um Stöße zu vermeiden. Wenn Sie auf halber Höhe stehen bleiben, lösen Sie den Knopf.



6. Wenn die Schiene den Absatz erreicht hat, lassen Sie den Knopf los und heben Sie den Stuhl langsam an.

VI. Bedienung der einzelnen Teile

a. Griff



Öffnen: Drücken Sie den Knopf. Heben Sie den Griff dabei leicht an und lassen Sie den Knopf los, um ihn zu fixieren.

Verriegelung: Drücken Sie den Knopf, heben Sie den Griff nach oben und lassen Sie den Knopf los. Dann ist er verriegelt.

b. Vorderer Hebegriff



Drücken Sie den roten Knopf, um die Verriegelung zu lösen und den Griff auszuklappen. Lassen Sie den Knopf los, um den Griff zu fixieren.

c. Gummikettenrahmen



Öffnen: Treten Sie auf das Fußpedal, dann öffnet sich der Kettenrahmen automatisch durch sein Gasfedersystem.

Verriegelung: Heben Sie den Evakuierungsstuhl mit beiden Händen an und halten Sie ihn fest, drücken Sie die Stützstange des Raupenbands

nach unten, bis das Pedal ihn wieder verriegelt.

d. Zugstange



Drücken Sie die Stange nach innen, um das Verriegelungssystem zu entriegeln. Sobald es entriegelt ist, ziehen Sie die Einstellstange nach oben oder unten, um sie auf die gewünschte Höhe einzustellen.

e. Klappbarer Rollstuhl



Fassen Sie die Stützstange und ziehen Sie sie nach unten. Wenn die Verriegelung aus der gebogenen Aussparung gleitet, drehen Sie das Rohr der Sitzfläche, um die Sitzfläche einzuklappen.

f. Handläufe



g. Pedal



h. Sicherheitsgurt, Kopfstütze und Gurte



i. Batterie



Demontieren: Öffnen Sie den Schlüssel, halten Sie die Batterie fest und ziehen Sie sie seitlich heraus. Überprüfen Sie die Stromversorgung: Halten Sie das Batteriesymbol gedrückt.

Aufladen: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss der Batterie und schließen Sie das andere Ende an eine Wechselstromquelle an.

j. Spurverstellung



k. Bremsen



VII. Bedienfeldanweisungen



Stromversorgung: Sobald Sie den Netzschalter drücken, sind alle anderen Tasten funktionsfähig. Nach dem Drücken des Netzschalters leuchten die Anzeige und das LCD-Display auf.

Beleuchtung: Die Lichttaste steuert die Beleuchtung. Wenn Sie sie einmal drücken, schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn Sie sie zweimal drücken, schaltet sie sich aus. Wenn die Lichttaste gedrückt wird, leuchten die Tasten für die obere und untere Etage.

VIII. Tägliche Wartung

Wenn die Vorrichtung zum Einfahren der Raupen und die Vorrichtung zum Zusammenklappen des Stuhls nicht leichtgängig sind, müssen sie geschmiert werden. Reinigen Sie die Stühle rechtzeitig, um eine ordnungsgemäße Wartung zu gewährleisten.

IX. Hinweise zur Lithium-Batterie

Lithium-Batterien sind Verbrauchsmaterialien, deren Kapazität nach einer gewissen Nutzungsdauer (Lade-Entlade-Zyklus) allmählich abnimmt. Mit der Zeit verringert sich die Lebensdauer der Batterie aufgrund normaler Abnutzung. Innerhalb der Garantiezeit ist die Batterie jedoch nach einem Test, bei dem die Batteriekapazität auf den werkseitigen Standardwert von 50 % oder weniger gesunken ist, ungültig und wird von der Herstellergarantie abgedeckt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.

Vermeiden Sie eine Tiefentladung, wenn die Batterieleistung unzureichend ist oder andere Ursachen für eine Unterspannung vorliegen: Denken Sie daran, die Batterie rechtzeitig aufzuladen und nicht wiederholt zu starten.

X. Vorsichtsmaßnahmen beim Laden

Ziehen Sie nach dem Laden zuerst den 220-V-Wechselstromstecker des Ladegeräts und dann den Ausgangsstecker. Ihre Hände müssen trocken sein, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn die Temperatur zu hoch oder ungewöhnlich ist, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab und wenden Sie sich zur Reparatur an den Lieferanten.

XI. Packliste

Name	Menge
Treppensteiger-Rollstuhl	1
Lithium-Batterie	1
Kopfstütze	1
Ladegerät	1
Inbusschlüssel	1
Anleitung	1

XII. Garantiezeit

Name	Laufzeit
Treppensteiger-Rollstuhl	Zwei Jahre
Lithium-Batterie	Ein Jahr
Motor	Zwei Jahre
Ladegerät	Sechs Monate
Spur	Ein Jahr
Leiterplatte	Ein Jahr



MODEL:SKB1C10 | REF.: 319-SKB1C10

SILLA DE EVACUACION Y RESCATE ELECTRICA/ELECTRIC EVAC CHAIR / FAUTEUIL D' EVACUATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE/ SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER EVACUAZIONE DEMERGENZA / EVACUACAO ELETRICA E CADEIRA DE RESGATE/ ELEKTRISCHER EVAKUIERUNGS-UND RETTUNGSSTUHL



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)



LOT:

