

Silla de
ruedas

Manual de funcionamiento
--escalera eléctrica



CONTENIDO

I. Descripción general de la silla de ruedas eléctrica para subir escaleras	3
II. Estructura de la silla de ruedas	3
III. Parámetros de rendimiento	4
IV. Funcionamiento en escaleras ascendentes	4
V. Funcionamiento en bajada	5
VI. Funcionamiento de cada pieza	6
a. Manilla	6
b. Asa de elevación delantera	6
c. Bastidor de goma	6
d. Varilla de tracción	7
e. Silla de ruedas plegable	7
f. Barandillas	7
g. Pedal	7
h. Cinturón de seguridad, reposacabezas y correas	8
i. Batería	8
j. Ajuste de las ruedas	8
k. Frenos	9
VII. Instrucciones del panel de control	9
VIII. Mantenimiento diario	10
IX. Precauciones con la batería de litio	10
X. Precauciones de carga	10
XI. Lista de embalaje	10
XII. Periodo de garantía	11

¡Gracias por utilizar nuestros productos!

¡Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto y aprenda a utilizarlo correctamente!

I. Descripción general de la silla de ruedas eléctrica para subir escaleras

SKB1C10 Sillas escaladoras fabricadas en aleación de aluminio, ligeras, fáciles de plegar, fáciles de manejar, etc. El motor es sin escobillas y se divide en tres marchas, de alta a baja velocidad. La batería de litio es ligera y fácil de desmontar. La silla ocupa poco espacio una vez plegada, por lo que es ideal para transportarla en un coche particular.

II. Estructura de la silla de ruedas



III. Parámetros de rendimiento

Nombre	Parámetros técnicos
Motor	Sin escobillas, 24 V, 200 W
Batería	29,4 V, 13,2 Ah
Cargador	29,4 V 2 A
Velocidad en la planta superior	Alta; Media; Baja;
Velocidad en bajada	Alta; Media; Baja;

IV. Funcionamiento en el piso superior



1. Abra el bastidor de la guía y ajuste la posición de la varilla. Tire de la palanca con ambas manos, coloque el pie derecho en el bastidor de la guía por encima del tubo transversal y baje la silla.



2. Coloque la silla en las escaleras, pulse el botón de encendido de la caja de control y conecte la fuente de alimentación. Mantenga pulsado el botón de subida y la silla se desplazará hacia arriba.



3. Si necesita detenerse a mitad de camino, suelte el botón de subida. Durante la subida, no es necesario que las manos tiren de la silla hacia arriba. Debe mantenerse en ángulo vertical a lo largo de las escaleras. Solo tiene que sujetar la silla y ejercer una ligera presión.



4. Al llegar al último escalón, tire de la barra de unión con ambas manos y levante lentamente la silla hasta el suelo. No es necesario subir las escaleras, por lo que la operación no requiere un gran esfuerzo.



5. Cuando la rueda delantera entre en las escaleras, baje lentamente la silla con el pie derecho hasta que toque el suelo.



6. Agarre el asa, levante la silla y diríjase a otra escalera.

V. Operación para bajar escaleras




1. Empuje la silla salvaescaleras por el suelo hasta colocar las ruedas delanteras en el borde de las escaleras.



2. Pise el tubo transversal inferior con el pie derecho, tire de la barra de unión hacia atrás con ambas manos para inclinar la silla hacia abajo. A continuación, presione la tecla de las escaleras.



3. Baje lentamente la silla hasta el primer borde e inclínese hacia las escaleras.

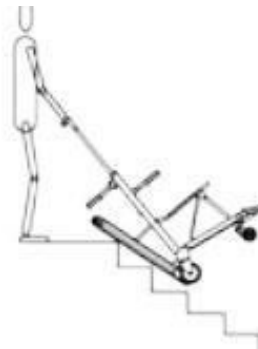

4. Inclínese ligeramente hacia el ángulo del cinturón y las escaleras.



5. Durante el descenso, coloque las manos ligeramente hacia abajo de la barra para no producir golpes. Cuando se detenga a mitad de camino, suelte la tecla.



6. Cuando la guía llegue al rellano, suelte el botón y levante lentamente la silla.

VI. Funcionamiento de cada parte

a. Manija



Abrir: pulse el botón. Mientras lo mantiene pulsado, levante ligeramente el mango y, a continuación, suelte el botón para fijarlo.

Bloqueo: pulse el botón, levante el asa y suelte el botón. Entonces, quedará bloqueado.

b. Manija de elevación delantera



Presione el botón rojo para desbloquear el orificio y extender el mango. Suelte el botón para fijar el mango.

c. Bastidor de goma



Abrir: Pise el pedal y el bastidor con orugas se abrirá automáticamente gracias a su sistema de elevación por gas.

Bloqueo: Levante la silla de evacuación con ambas manos y manténgala baja, presione la barra de soporte de la cinta de oruga

hacia abajo hasta que el pedal la bloquee de nuevo.

d. Barra de tracción



Empuje la barra hacia dentro para desbloquear el sistema de bloqueo. Una vez desbloqueado, tire de la barra de ajuste hacia arriba o hacia abajo para ajustarla a la altura necesaria.

e. Silla de ruedas plegable



Sujete la barra de apoyo y tire de ella hacia abajo. Cuando el bloqueo se deslice fuera de la ranura curvada, gire el tubo de la superficie de la silla para plegarla.

f. Barras de apoy



g. Pedal



h. Cinturón de seguridad, reposacabezas y correas



i. Batería



Desmontaje: abra la llave, sujete la batería y tire de ella lateralmente. Compruebe la alimentación: mantenga pulsado el símbolo de alimentación de la batería.

Carga: el enchufe del cargador se inserta en el puerto de carga de la batería y el otro extremo se conecta a la corriente alterna.

j. Ajuste de las ruedas



k. Frenos



VII. Instrucciones del panel de control



Fuente de alimentación: una vez que se pulsa el botón de encendido, las demás teclas ya funcionan.

Después de pulsar el botón de encendido, se encenderá la luz y la pantalla LCD.

Iluminación: el botón de luz controla las luces. Si se pulsa una vez, se encienden; si se pulsa dos veces, se apagan. Cuando se pulsa el botón de iluminación, se encienden las luces de los botones de arriba y abajo.

VIII. Mantenimiento diario

Cuando el dispositivo de retracción del rastreador y el dispositivo de plegado de la silla no funcionan con flexibilidad, es necesario lubricarlos. Limpie las sillas con regularidad para un mantenimiento adecuado.

IX. Precauciones con las baterías de litio

Las baterías de litio son consumibles, tras un periodo de uso (ciclo de carga y descarga de la batería), su capacidad disminuirá gradualmente. Con el tiempo, la vida útil de la batería se reducirá gradualmente debido al desgaste normal. Sin embargo, dentro del periodo de garantía, tras comprobar que la capacidad de la batería ha descendido al valor estándar de fábrica del 50 % o menos, la batería no es válida y está cubierta por la garantía de la empresa. En este caso, póngase en contacto con su proveedor a la mayor brevedad posible.

Evite la descarga profunda, cuando la energía de la batería sea insuficiente o por otros medios que provoquen una subtensión: recuerde cargarla a tiempo y no encenderla repetidamente.

X. Precauciones de carga

Después de la carga, desconecte primero el enchufe de 220 V CA del cargador y, a continuación, desconecte el enchufe de salida. Las manos deben estar secas cuando se enchufa la alimentación. Si la temperatura anómala es demasiado alta o inusual, detenga inmediatamente la carga y póngase en contacto con el proveedor para repararla.

XI. Lista de embalaje

Nombre	Cant
Silla de ruedas para subir escaleras	
Batería de litio	1
Reposacabezas	1
Cargador	1
Llave Allen	1
Instrucciones	1 unidad

XII. Periodo de garantía

Nombre	Término
Silla de ruedas para subir escaleras	Dos años
Batería de litio	Un año
Motor	Dos años
Cargador	Seis meses
Pista	Un año
Placa de circuito	Un año



MODEL:SKB1C10 | REF.: 319-SKB1C10

SILLA DE EVACUACION Y RESCATE ELECTRICA/ELECTRIC EVAC CHAIR / FAUTEUIL D' EVACUATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE/ SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER EVACUAZIONE DEMERGENZA / EVACUACAO ELETRICA E CADEIRA DE RESGATE/ ELEKTRISCHER EVAKUIERUNGS-UND RETTUNGSSTUHL



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)



LOT:

