

Sedia a
rotelle

Manuale d'uso
--saliscale elettrico



INDICE

I. Panoramica della sedia a rotelle elettrica per salire le scale.....	3
II. Struttura della sedia a rotelle	3
III. Parametri prestazionali.....	4
IV. Funzionamento in salita	4
V. Funzionamento in discesa.....	5
VI. Funzionamento di ciascuna parte.....	6
a. Maniglia	6
b. Maniglia di sollevamento anteriore	6
c. Telaio con cingoli in gomma.....	6
d. Asta di trazione	7
e. Sedia a rotelle pieghevole	7
f. Corrimano	7
g. Pedale.....	7
h. Cintura di sicurezza, poggiatesta e cinghie.....	8
i. Batteria.....	8
j. Regolazione dei binari	8
k. Freni.....	9
VII. Istruzioni del pannello di controllo	9
VIII. Manutenzione quotidiana	10
IX. Precauzioni relative alla batteria al litio	10
X. Precauzioni per la ricarica	10
XI. Lista di imballaggio	10
XII. Periodo di garanzia	11

Grazie per aver scelto i nostri prodotti!

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e acquisire dimestichezza con il funzionamento del prodotto!

I. Panoramica della sedia a rotelle elettrica per salire le scale

SKB1C10 Sedie saliscala realizzate in lega di alluminio, leggere, facili da piegare, facili da usare, ecc. Il motore è senza spazzole ed è suddiviso in tre marce, da alta a bassa velocità. La batteria al litio è leggera e facile da smontare. Una volta piegata, la sedia occupa poco spazio ed è adatta per essere trasportata in un'auto privata.


II. Struttura della sedia a rotelle




III. Parametri prestazionali

Nome	Parametri tecnici
Motore	Brushless DC24V 200W
Batteria	29,4 V 13,2 Ah
Caricabatteria	29,4 V 2 A
Velocità al piano superiore	Alta; Media; Bassa;
Velocità al piano inferiore	Alta; Media; Bassa;

IV. Funzionamento al piano superiore

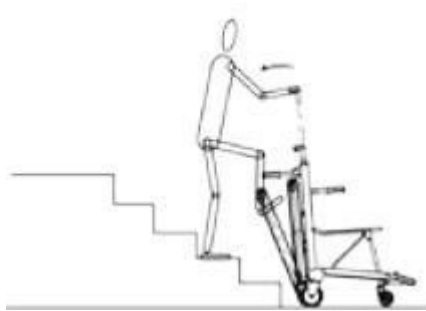

1. Aprire il telaio del binario e regolare la posizione dell'asta. Tirare la leva con entrambe le mani, posizionare il piede destro sul telaio del binario sopra il tubo trasversale e abbassare la sedia.

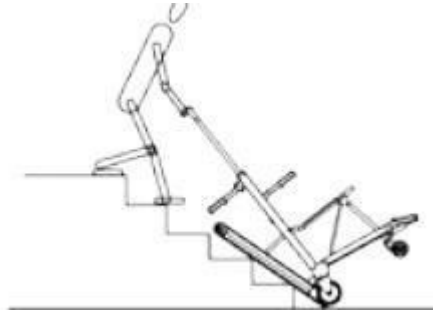

2. Posizionare la sedia sulle scale, premere il pulsante di accensione sul quadro di comando e attivare l'alimentazione. Tenere premuto il pulsante "al piano superiore" e la sedia si sposterà verso l'alto.



3. Se è necessario fermarsi a metà strada, rilasciare il pulsante del piano superiore. Durante la salita, non è necessario che le mani tirino la sedia verso l'alto. Deve rimanere in posizione verticale lungo le scale. È sufficiente tenere la sedia e applicare una leggera pressione.



4. Quando si raggiunge l'ultimo gradino, tirare il tirante con entrambe le mani e sollevare lentamente la sedia da terra. Non è necessario salire le scale, quindi l'operazione non richiede un grande sforzo.



5. Quando la ruota anteriore entra nella scala, abbassare lentamente la sedia con il piede destro fino a raggiungere il pavimento.



6. Afferrare la maniglia, sollevare la sedia e spostarsi su un'altra rampa di scale.

V. Operazione al piano inferiore




1. Spingere la sedia saliscala attraverso il pavimento fino a posizionare le ruote anteriori sul bordo delle scale.



2. Calpestare il tubo trasversale inferiore con il piede destro, tirare indietro il tirante con entrambe le mani per inclinare la sedia verso il basso. Quindi, premere il tasto delle scale.



3. Abbassare lentamente la sedia sul primo bordo e inclinarla verso le scale.

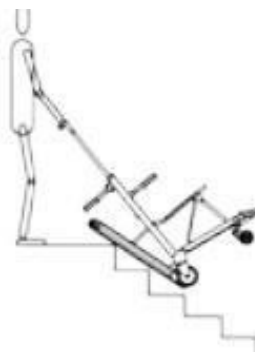

4. Inclina leggermente il corpo in direzione dell'angolo formato dalla cintura e dalla scala.



5. Durante la discesa, posizionare le mani leggermente più in basso sull'asta per evitare urti. Quando ci si ferma a metà strada, allentare il tasto.



6. Quando il binario raggiunge il pianerottolo, rilasciare il pulsante e sollevare lentamente la sedia.

VI. Funzionamento di ciascuna parte

a. Maniglia



Apertura: premere il pulsante. Mentre lo si preme, sollevare leggermente la maniglia, quindi rilasciare il pulsante per bloccarla.

Blocco: premere il pulsante, sollevare la maniglia e rilasciare il pulsante. A questo punto, il blocco sarà attivato.

b. Maniglia di sollevamento anteriore



Premere il pulsante rosso per sbloccare il foro ed estendere la maniglia. Rilasciare il pulsante per fissare la maniglia.

c. Telaio con cingoli in gomma



Apertura: premere il pedale; il telaio dei cingoli si aprirà automaticamente grazie al sistema di sollevamento a gas.

Blocco: sollevare la sedia di evacuazione con entrambe le mani e tenerla ferma, premere la barra di supporto del cingolo

fino a quando il pedale non la blocca nuovamente.

d. Aprire il telaio



Spingere la barra verso l'interno per sbloccare il sistema di bloccaggio. Una volta sbloccata, tirare la barra di regolazione verso l'alto o verso il basso per regolarla all'altezza desiderata.

e. Sedia a rotelle pieghevole



Afferrare l'asta di supporto e tirarla verso il basso. Quando il blocco scivola fuori dalla fessura curva, ruotare il tubo della superficie della sedia per ripiegare la superficie della sedia.

f. Corrimano



g. Pedale



h. Cintura di sicurezza, poggiatesta e cinghie



i. Batteria



Smontaggio: aprire la chiave, tenere ferma la batteria e tirarla lateralmente. Controllare l'alimentazione: tenere premuto il simbolo di alimentazione della batteria.

Ricarica: inserire la spina del caricatore nella porta di ricarica della batteria e collegare l'altra estremità a una presa di corrente alternata.

j. Regolazione dei binari



k. Freni



VII. Istruzioni del pannello di controllo



Alimentazione: una volta premuto il pulsante di accensione, gli altri pulsanti sono già funzionanti. Dopo aver premuto il pulsante di accensione, si accenderanno la luce e il display LCD.

Illuminazione: il pulsante della luce controlla le luci. Se lo si preme una volta, le luci si accendono; se lo si preme due volte, le luci si spengono. Quando si preme il pulsante dell'illuminazione, si accendono le luci dei pulsanti del piano superiore e inferiore.

VIII. Manutenzione quotidiana

Quando il dispositivo di retrazione del cingolo e il dispositivo di piegatura della sedia non sono flessibili, è necessario lubrificarli. Pulire le sedie tempestivamente per una corretta manutenzione.

IX. Precauzioni relative alla batteria al litio

Le batterie al litio sono materiali di consumo, dopo un periodo di utilizzo (ciclo di carica-scarica della batteria), la loro capacità diminuirà gradualmente. Con il tempo, la durata della batteria si ridurrà gradualmente a causa della normale usura. Tuttavia, entro il periodo di garanzia, dopo aver verificato che la capacità della batteria è scesa al valore standard di fabbrica del 50% o meno, la batteria non è più valida ed è coperta dalla garanzia dell'azienda. In questo caso, contattare tempestivamente il fornitore.

Evitare scariche profonde, quando la carica della batteria è insufficiente o altri mezzi che causano sottotensione: ricordarsi di ricaricare tempestivamente e di non avviare ripetutamente l'alimentazione.

X. Precauzioni per la ricarica

Dopo la ricarica, scollegare prima la spina del caricabatterie da 220 V CA, quindi scollegare la spina di uscita. Le mani devono essere asciutte quando si collega l'alimentazione. Se la temperatura anomala è troppo alta o insolita, interrompere immediatamente la ricarica e contattare il fornitore per la riparazione.

XI. Lista di imballaggio

Nome	Q
Sedia a rotelle saliscale	
Batteria al litio	1
Poggiatesta	1
Caricabatterie	1
Chiave a brugola	1
Istruzioni	1

XII. Periodo di garanzia

Nome	Durata
Sedia a rotelle per salire le scale	Due anni
Batteria al litio	Un anno
Motore	Due anni
Caricabatterie	Sei mesi
Traccia	Un anno
Scheda	Un anno



MODEL:SKB1C10 | REF.: 319-SKB1C10

SILLA DE EVACUACION Y RESCATE ELECTRICA/ELECTRIC EVAC CHAIR / FAUTEUIL D' EVACUATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE/ SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER EVACUAZIONE DEMERGENZA / EVACUACAO ELETRICA E CADEIRA DE RESGATE/ ELEKTRISCHER EVAKUIERUNGS-UND RETTUNGSSTUHL



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)



LOT:

