

Cadeira de  
rodas

Manual de funcionamento  
--subida de escadas eléctricas



## CONTEÚDO

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Descrição geral da cadeira de rodas eléctrica para subir escadas ..... | 3  |
| II. Estrutura da cadeira de rodas .....                                   | 3  |
| III. Parâmetros de desempenho .....                                       | 4  |
| IV. Funcionamento no andar de cima .....                                  | 4  |
| V. Funcionamento no andar de baixo .....                                  | 5  |
| VI. Funcionamento de cada peça .....                                      | 6  |
| a. Pega .....                                                             | 6  |
| b. Pega de elevação frontal .....                                         | 6  |
| c. Estrutura da calha de borracha .....                                   | 6  |
| d. Haste de tração .....                                                  | 7  |
| e. Cadeira de rodas dobrável .....                                        | 7  |
| f. Corrimões .....                                                        | 7  |
| g. Pedal .....                                                            | 7  |
| h. Cinto de segurança, apoio de cabeça e correias .....                   | 8  |
| i. Bateria .....                                                          | 8  |
| j. Ajuste da via .....                                                    | 8  |
| k. Travões .....                                                          | 9  |
| VII. Instruções do painel de controlo .....                               | 9  |
| VIII. Manutenção diária .....                                             | 10 |
| IX. Precauções relativas à bateria de lítio .....                         | 10 |
| X. Precauções de carregamento .....                                       | 10 |
| XI. Lista de embalagem .....                                              | 10 |
| XII. Período de garantia .....                                            | 11 |

# Obrigado por utilizar os nossos produtos!

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto e domine os conhecimentos necessários para o utilizar!

## I. Visão geral da cadeira de rodas eléctrica para subir escadas

Cadeiras de escalada SKB1C10 feitas de material de liga de alumínio, leves, fáceis de dobrar, fáceis de operar, etc. O motor é sem escovas e está dividido em três velocidades, de alto a baixo grau. A bateria de lítio é leve e fácil de desmontar. A cadeira ocupa pouco espaço de arrumação depois de dobrada, e é adequada para ser transportada num automóvel particular.

## II. Estrutura da cadeira de rodas



### III. Parâmetros de desempenho

| Designação                   | Parâmetros técnicos    |
|------------------------------|------------------------|
| Motor                        | Sem escovas DC24V 200W |
| Bateria                      | 29.4V 13.2Ah           |
| Carregador                   | 29,4V 2A               |
| Velocidade no andar de cima  | Alta; Média; Baixa;    |
| Velocidade no andar de baixo | Alta; Média; Baixa;    |


### IV. Funcionamento no andar de cima



1. Abra a estrutura da calha e ajuste a posição da haste. Puxe a alavanca com as duas mãos, coloque o pé direito na estrutura da calha acima do tubo transversal e recue a cadeira.



2. Coloque a cadeira nas escadas, prima o botão de alimentação na caixa de controle e ligue a fonte de alimentação. Mantenha premido o botão para cima e a cadeira move-se para cima.

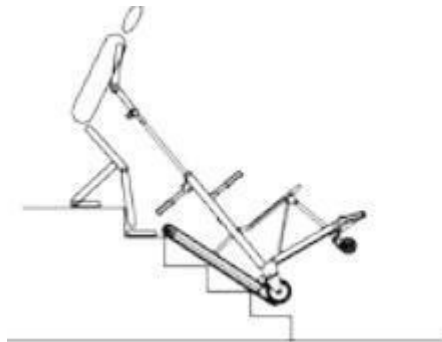

3. Se for necessário parar a meio do percurso, solte o botão de subida. Na subida, as mãos não precisam de puxar a cadeira para cima. Tem de estar num ângulo vertical ao longo das escadas. Basta segurar a cadeira e exercer uma ligeira pressão.



4. Ao chegar ao último degrau, puxar o tirante com as duas mãos e, lentamente, puxar para cima e levantar a cadeira no chão. Não é necessário subir as escadas, pelo que a operação não exige grande esforço.



5. Quando a roda dianteira entrar nas escadas, baixe lentamente a cadeira com o pé direito até chegar ao chão.



6. Agarre na pega, levante a cadeira e desloque-se para outra escada.

## V. Funcionamento no andar de baixo




1. Empurre a cadeira de subir escadas através do chão até colocar as rodas dianteiras no rebordo das escadas.



2. Pisar o tubo transversal inferior com o pé direito, puxar o tirante para trás com as duas mãos para inclinar a cadeira para baixo. Em seguida, premir a tecla da escada.



3. Lentamente, pousar a cadeira no primeiro bordo e inclinar-se para baixo.

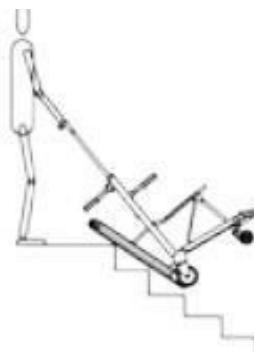

4. Inclinarse ligeiramente para o ângulo do cinto e da escada.



5. Durante a descida, colocar as mãos ligeiramente para baixo da barra para não produzir solavancos. Quando parar a meio do percurso, soltar a chave.



6. Quando o tapete chegar ao patamar, soltar o botão e levantar lentamente a cadeira.

## VI. Funcionamento de cada peça

### a. Pega



Abrir: Premir o botão. Enquanto o pressiona, levante ligeiramente a pega e, em seguida, solte o botão para a fixar.

Bloqueio: Prima o botão, levante a pega e solte o botão. Em seguida, fica bloqueada.

### b. Pega de elevação frontal



Prima o botão vermelho para desbloquear o orifício e estender a pega. Solte o botão para fixar a pega.

### c. Estrutura da calha de borracha



Abrir: Carregue no pedal; em seguida, a estrutura de lagartas abre-se automaticamente através do seu sistema de elevação a gás.

Bloquear: Levantar a cadeira de evacuação com as duas mãos e mantê-la em baixo, pressionar a barra de suporte do tapete rolante

para baixo até o pedal a bloquear novamente.

**d. Barra de  
tração**



Empurrar a barra para dentro para desbloquear o sistema de bloqueio. Quando estiver desbloqueada, puxe a barra de regulação para cima ou para baixo para a ajustar à altura necessária.

**e. Cadeira de rodas  
dobrável**



Agarre na barra de suporte e puxe-a para baixo. Quando o fecho deslizar para fora da ranhura curva, rode o tubo da superfície da cadeira para a dobrar.

**f. Corrimão**



**g. Pedal**



#### **h. Cinto de segurança, apoio de cabeça e correias**



#### **i. Bateria**



Desmontar: abrir a chave, segurar a bateria e puxar a bateria lateralmente. Verificar a alimentação: manter premido o símbolo de alimentação da bateria.

Carregamento: a ficha do carregador de ar é inserida na porta de carregamento da bateria e a outra extremidade é ligada com corrente alternada.

#### **j. Ajuste da via**



## k. Travões



## VII. Instruções do painel de controlo



Alimentação: uma vez premido o botão de alimentação, as outras teclas já podem funcionar. Depois de premir o botão de alimentação, a luz acende-se, bem como o LCD.

Iluminação: o botão de luz controla as luzes. Se premir uma vez, a luz acende-se; se premir duas vezes, a luz apaga-se. Quando o botão de iluminação é premido, as luzes dos botões do andar de cima e do andar de baixo acendem-se.

## VIII. Manutenção diária

Quando o dispositivo de retração do tapete rolante e o dispositivo de dobragem da cadeira não são flexíveis, é necessário lubrificá-los. Limpe as cadeiras atempadamente para uma manutenção adequada.

## IX. Precauções relativas à bateria de lítio

As baterias de lítio são consumíveis, após um período de utilização (ciclo de carga-descarga da bateria), a sua capacidade irá diminuir gradualmente. Com o tempo, a vida útil da bateria reduzir-se-á gradualmente devido ao desgaste normal. No entanto, dentro do período de garantia, após o teste, a capacidade da bateria desceu para o valor padrão de fábrica de 50% ou menos, a bateria é inválida e está coberta pela garantia da empresa. Neste caso, contacte atempadamente o seu fornecedor.

Evitar a descarga profunda, quando a energia da bateria é insuficiente ou outros meios que subtenção: lembrá-lo para carregar no tempo e não para iniciar repetidamente a energia.

## X. Precauções de carregamento

Após o carregamento, desligar primeiro a ficha de 220V AC do carregador e, em seguida, desligar a ficha de saída. As mãos devem estar secas quando o carregador está ligado à corrente. Se a temperatura anormal for demasiado elevada ou invulgar, pare imediatamente o carregamento e contacte o fornecedor para o reparar.

## XI. Lista de embalagem

| Nome da embalagem                   | QTD.      |
|-------------------------------------|-----------|
| Cadeira de rodas para subir escadas | 1         |
| Bateria de lítio                    | 1         |
| Apoio de cabeça                     | 1         |
| Carregador                          | 1 unidade |
| Chave Allen                         | 1 unidade |
| Instruções de utilização            | 1 unidade |

## **XII. Período de garantia**

| Nome                                | Prazo      |
|-------------------------------------|------------|
| Cadeira de rodas para subir escadas | Dois anos  |
| Bateria de lítio                    | Um ano     |
| Motor                               | Dois anos  |
| Carregador                          | Seis meses |
| Pista                               | Um ano     |
| Placa de circuitos                  | Um ano     |



**MODEL:SKB1C10 | REF.: 319-SKB1C10**

**SILLA DE EVACUACION Y RESCATE ELECTRICA/ELECTRIC EVAC CHAIR / FAUTEUIL D' EVACUATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE/ SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER EVACUAZIONE DEMERGENZA / EVACUACAO ELETRICA E CADEIRA DE RESGATE/ ELEKTRISCHER EVAKUIERUNGS-UND RETTUNGSSTUHL**



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture  
Demonstration Park, Zhangjiagang City,  
Jiangsu Province, China



**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



**QuirumedS.L.U.** CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,  
46980, Valencia(Spain)



**LOT:**

