




Bedienung sanleitung

A3k

Manuelles Krankenhausbett

Registrierungscode: SK-CD1

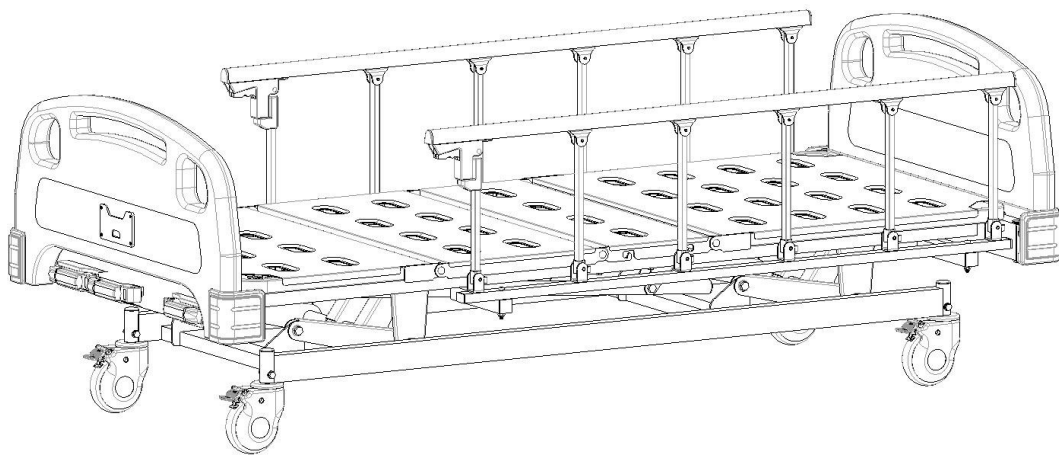

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098

Inhalt

Einführung in die Bedienungsanleitung	2
1. Installationsanleitung	2
1.1 Liste des Standardzubehörs	5
1.2 Montage der Rollen	5
1.3 Montage der Seitenschutzbügel	6
1.4 Montage der PP-Matratzenhalter	7
1.5 Montage von Kopf- und Fußteil	8
1.6 Montage der Infusionsständer	9
2. Verwendungsmethode	10
2.1 Verwendungsmethode der Rollen	11
2.2 Verwendungsmethode für Geländer	12
2.3 Verwendungsmethode für Abflussklauen	12
2.4 Verwendung der Infusionsständer	14
2.5 Verwendung von Kurbelgriffen	15
3. Ersatzteilwechsel und Wartung	16
4. Fehlerbehebung	16
5. Wartung des Bettes	17
6. Reinigung des Bettes	18
7. Matratzenreinigung und -pflege	18
8. Rollenprüfung und Wartung	19
9. Wartung der Schutzgeländer	20
10. Ersatzteilliste	20
11. Verpackung, Transport, Lagerung	22
12. Kundendienst	22

Handbuch unter t roduction

Krankenhausbetten sind unverzichtbare Ausstattungsgegenstände für das Wohlbefinden, die Behandlung und die Genesung bettlägeriger Patienten. Krankenhausbetten ermöglichen es Patienten, bequemere Positionen einzunehmen, darunter auch solche, die manchmal von Ärzten empfohlen werden und in einem normalen Bett nur sehr schwer zu erreichen wären, da dort ständig Stützen angebracht oder entfernt werden müssten. Krankenhausbetten können manuell oder automatisch bedient werden. Die Funktionen des automatischen Krankenhausbettes werden über Tasten an den Seitenwänden des Bettes oder über eine Fernbedienung gesteuert. Das manuelle Krankenhausbett verfügt über zwei durch Kurbeln ausgelöste Bewegungen, mit denen das Kopfteil angehoben werden kann, was das Füttern erleichtert, Reflux verhindert und die Atmung erleichtert. Außerdem kann der Fußteil angehoben werden, was die Durchblutung der unteren Gliedmaßen verbessert, da der Patient lange Zeit liegen muss. Andererseits ist die Sicherheit des Patienten in dieser Zeit der Genesung sehr wichtig, daher sind alle unsere Betten mit Seitenschutzgittern ausgestattet, die verhindern, dass der Patient nachts aufsteht und stürzt.

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Inbetriebnahme genau. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheitshinweisen vertraut sind.

- ▶ Diese Anleitung gilt für das manuelle Krankenhausbett A3k. Sie enthält die Installationsmethode, die Bedienungsanleitung und die Wartungs- und Inspektionspunkte.
- ▶ Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für den Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.
- ▶ Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technische Parameter des Produkts.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.
- ▶ Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.
- ▶ Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:

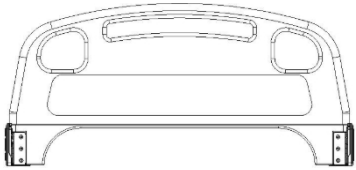
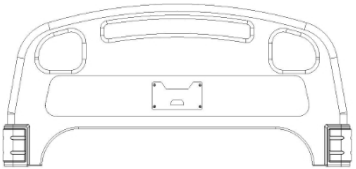
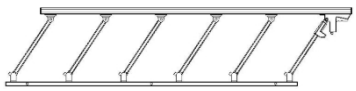
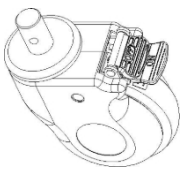
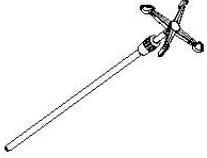
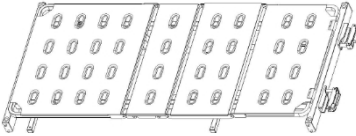
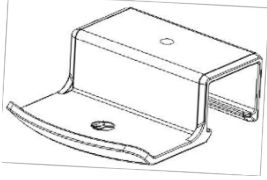
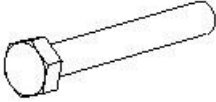
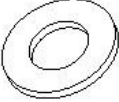
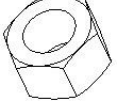
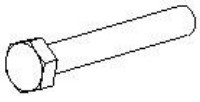
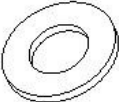
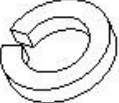
Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Kopfteil		Hakenabstand: L910*H55 mm	1	Stück
2	Fußteil		Hakenabstand: L910*H55 mm	1	Stück
3	Seitenschiene		Sechsteilige Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	2	Stück
4	Lenkrolle		5-Zoll-Rollen mit Abdeckung	4	Stück
5	Infusionsständer		Φ16-19 mm/cremefarbener Haken	1	Stück
6	Bettplattform		L1925*B820 mm	1	Stück
7	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Satz



Tabelle a. 1:

Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	PP-Matratzenhalter		PP	2	Stück
2	Sechskantschraube		M8*70 mm	4	Stück
3	Flache Unterlegscheibe		$\Phi 8*\Phi 16*H1,2$ mm	4	Stück
4	Federscheibe		$\Phi 8*\Phi 14*H2,5$ mm	4	Stück
5	Mutter		M8 mm	4	Stück
6	Sechskantschraube		M8*16 mm	8	Stück
7	Flache Unterlegscheibe		$\Phi 8*\Phi 16*H1,2$ mm	8	Stück
8	Federscheibe		$\Phi 8*\Phi 14*H2,5$ mm	8	Stück

1.2 Montage der Rollen



Legen Sie eine Schutzunterlage unter und drehen Sie den Bettrahmen um.

Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskantschlüssel.

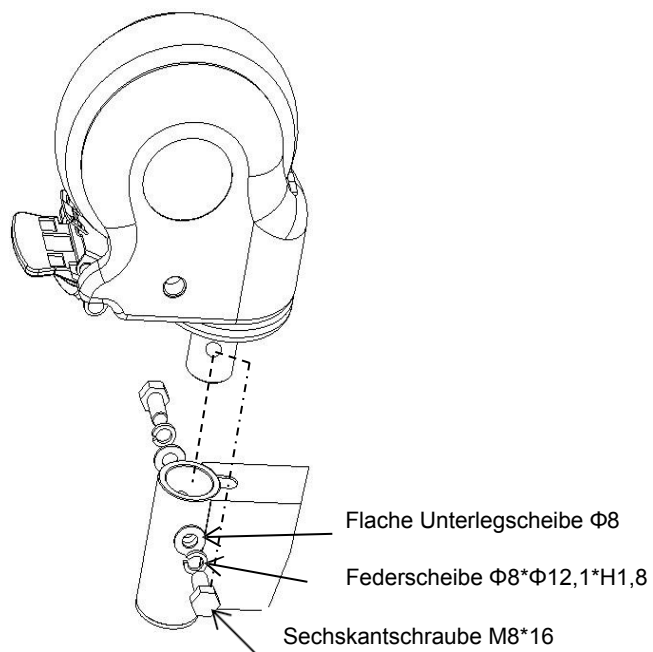
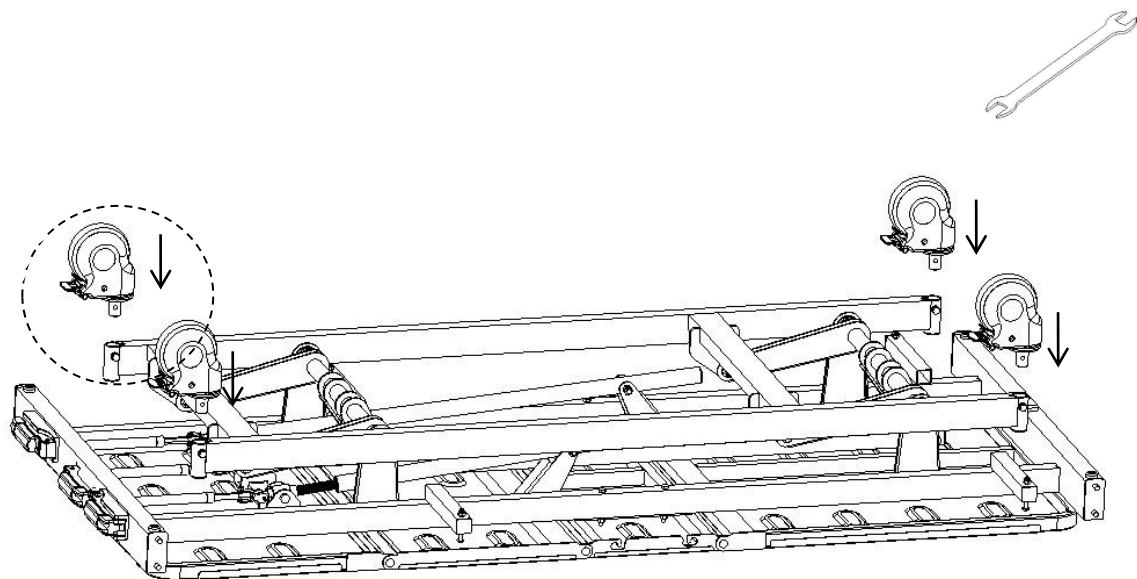


1.3 Montage der seitlichen Schutzgeländer


Stellen Sie das Bett aufrecht und montieren Sie die Schutzleiste. (Das Bild entspricht möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt, es dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung.)
Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskantschlüssel.

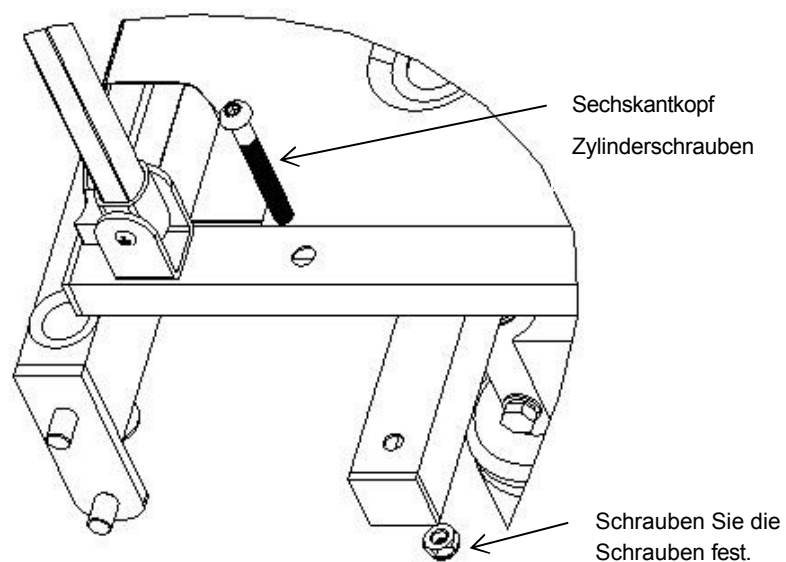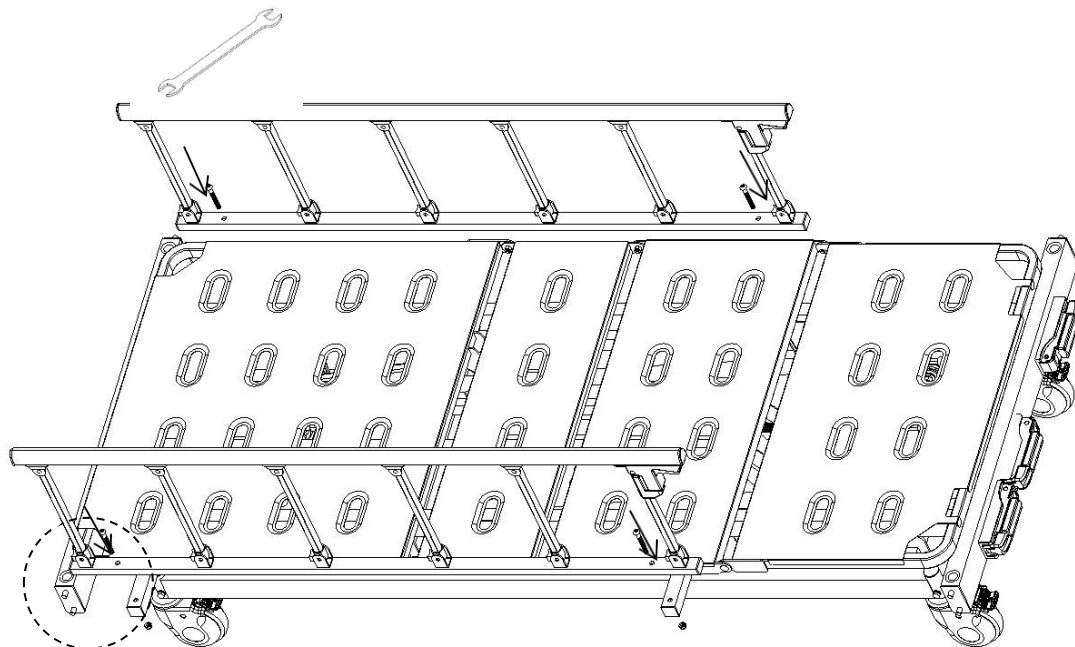


1.4 Montage der PP-Matratzenhalterung

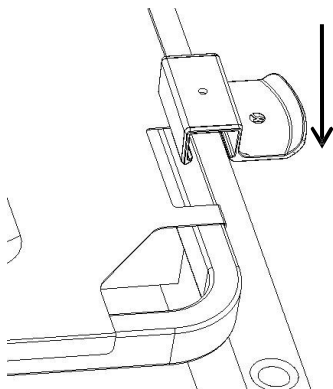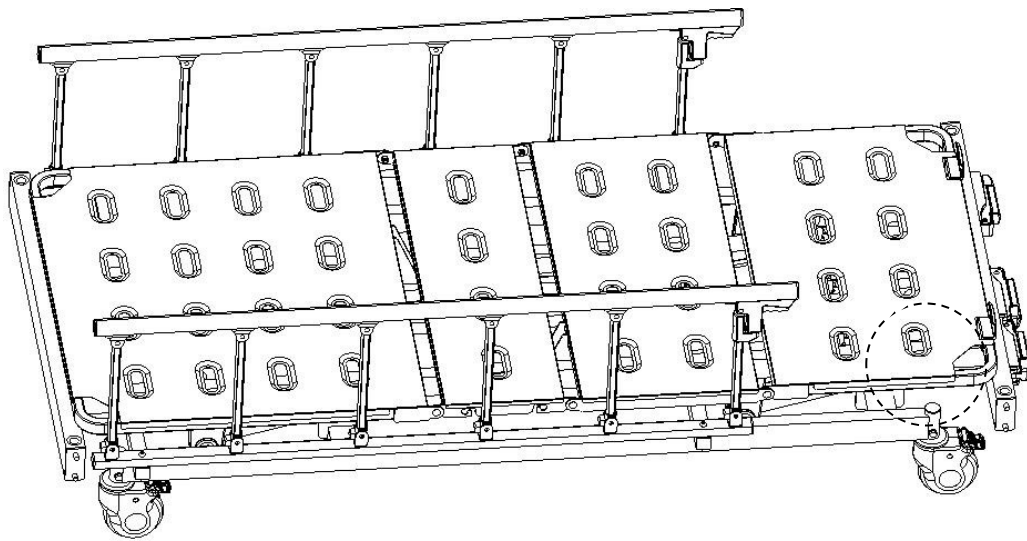


1

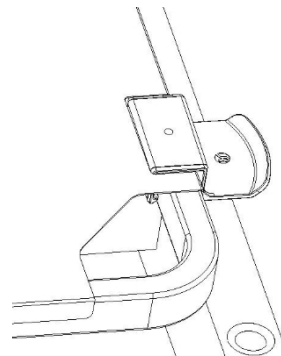

2

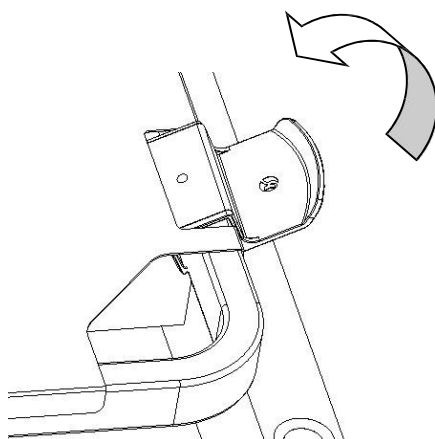




3

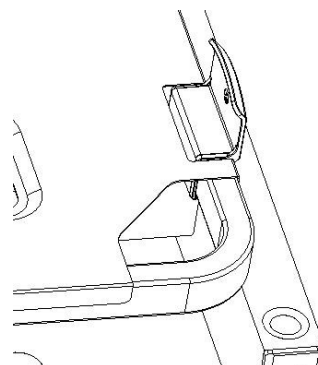

4

1.5 Montage von Kopf- und Fußteil

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung)

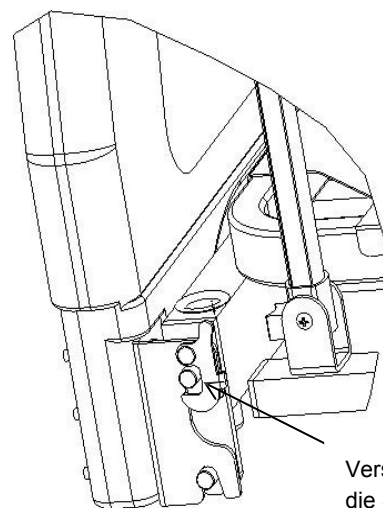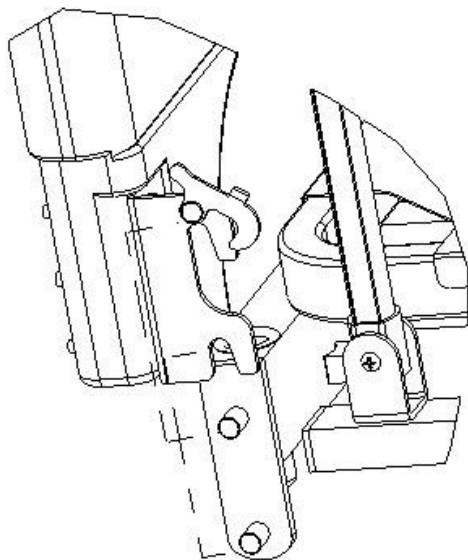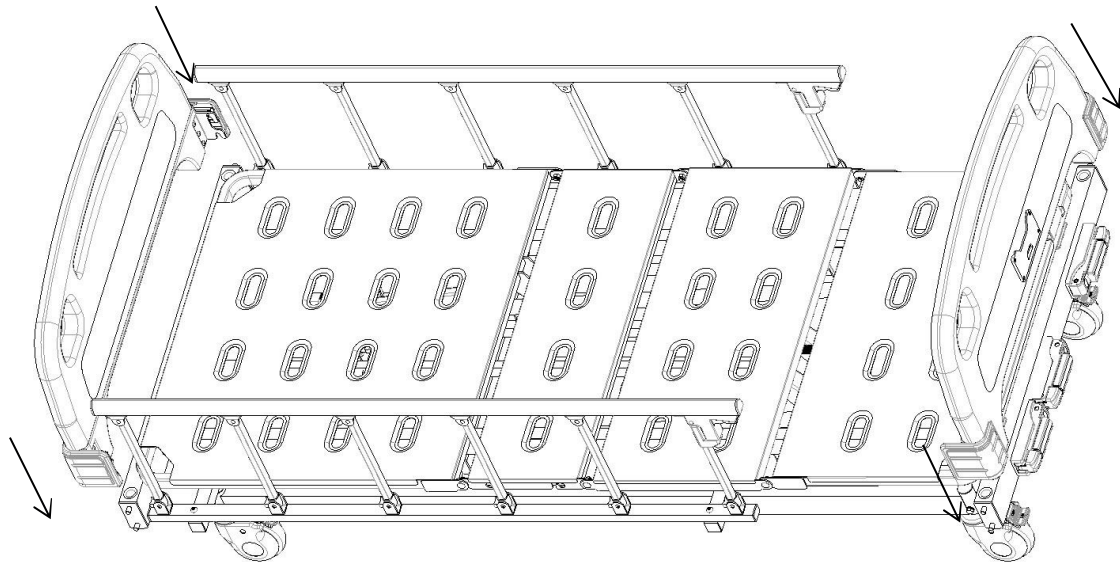


Verschließen Sie
die Schnalle

1.6 IV-Ständer-Montage


Montage des weiblichen Teils: Drücken Sie den Kunststoffhaken (weiblicher Teil) auf das Φ 16 mm Edelstahlrohr.

Montage des männlichen Teils: Setzen Sie den Kunststoffhaken (männlicher Teil) kreuzförmig direkt über den weiblichen Teil, richten Sie dann die Schnallen am männlichen Teil an den Schlitz an weiblichen Teil aus und drücken Sie sie nach unten. Nachdem Sie ein „Klicken“ hören, überprüfen Sie, ob das Ende der Schnalle fest sitzt. Ist dies der Fall, ist die Montage abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie weiter nach unten, bis die Schnalle fest sitzt.

Setzen Sie den montierten Infusionsständer senkrecht in die Infusionsständerhalterung ein. (Der Pfeil in der Abbildung zeigt die Infusionsständerhalterung.)

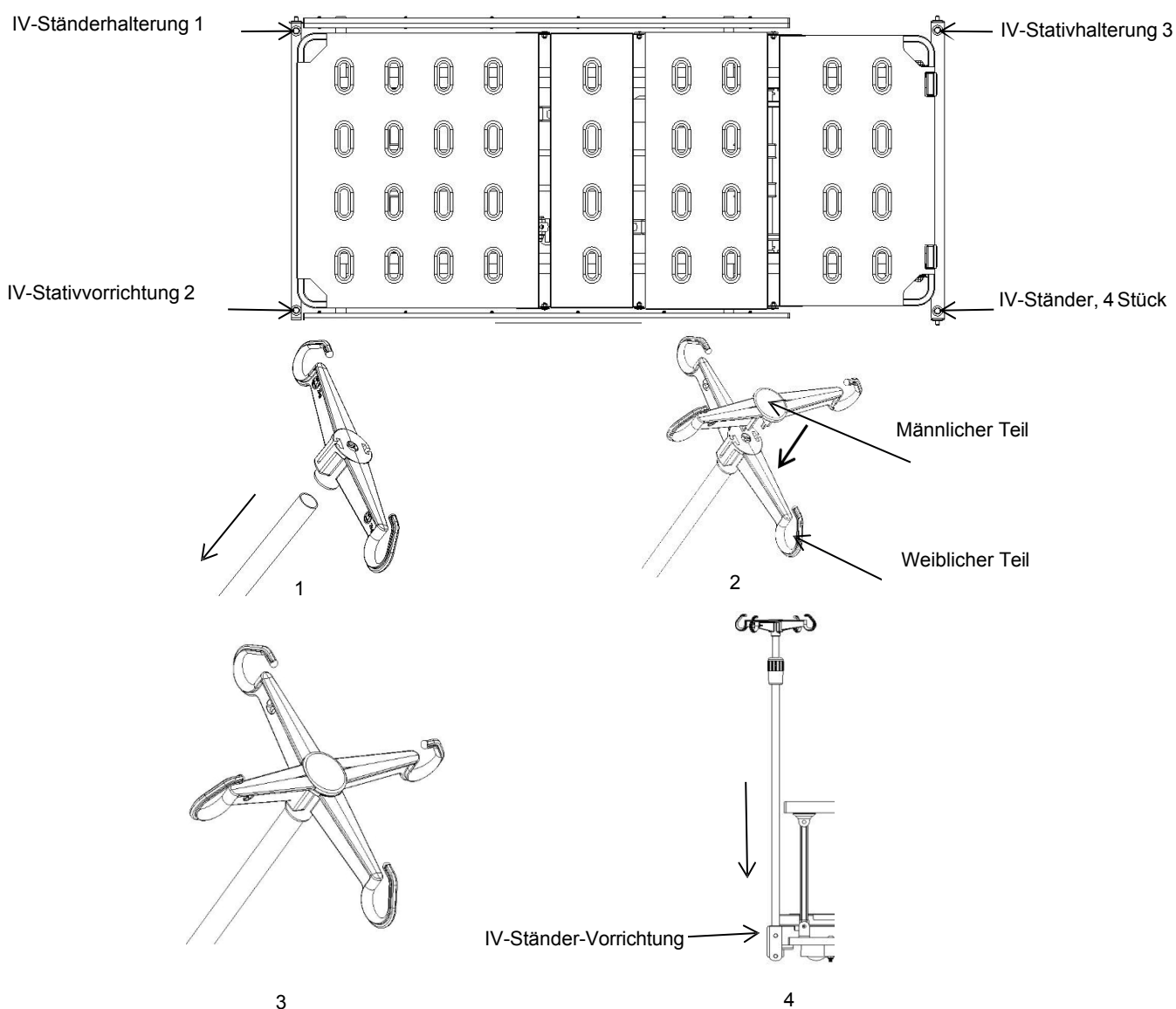

2. Verwendungsmethode

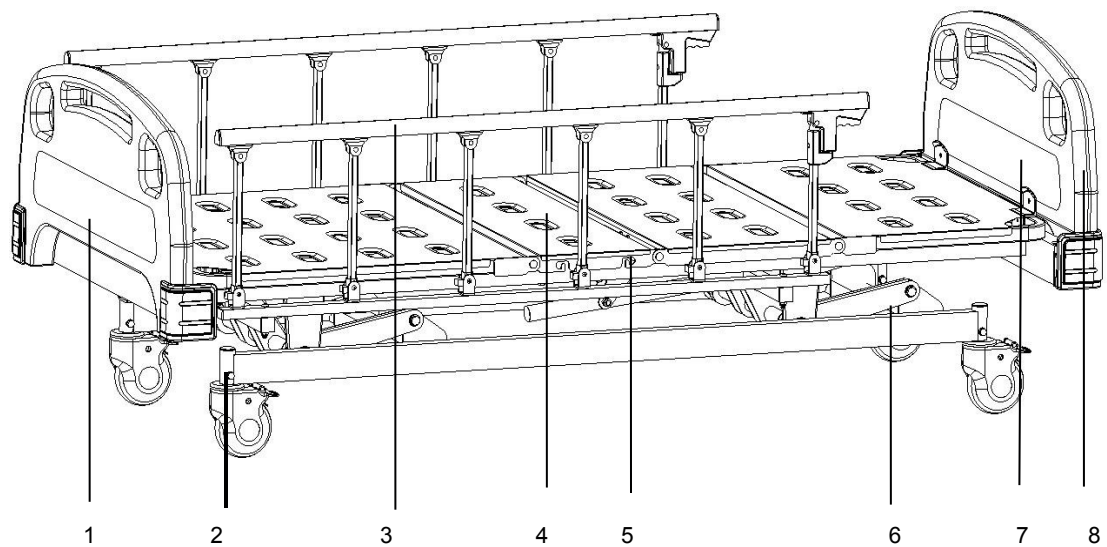

1 Kopfteil 2-Rollen 3-Schutzgitter 4-Bettboden 5-
Ablaufhaken 6-Bettrahmen 7-Matratzenhalter 8-Fußbrett


Liegefläche	Länge	mm	1925±10
	Breite		820±10
	Die Höhe des Bettes über dem Boden		40
Abmessungen	Länge	mm	2110±10
	Breite		960±10
	Höhe		400-710±10
Neigungsbereich	Rückwand	/	0-75±10
	Beinbrett		0-35±10°
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	200

2.1 Verwendung der Rollen


 Wenn sich ein Patient auf dem Bett befindet, muss die Seitensicherung vor dem Bewegen des Bettes angehoben werden.

 Außer wenn das Bett bewegt werden muss, muss die Feststellbremse während der restlichen Zeit betätigt werden. Alle vier Radbremsen müssen betätigt werden.

2.1.1 Rolle arretieren: Nachdem Sie das Bett in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste „ON“ und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

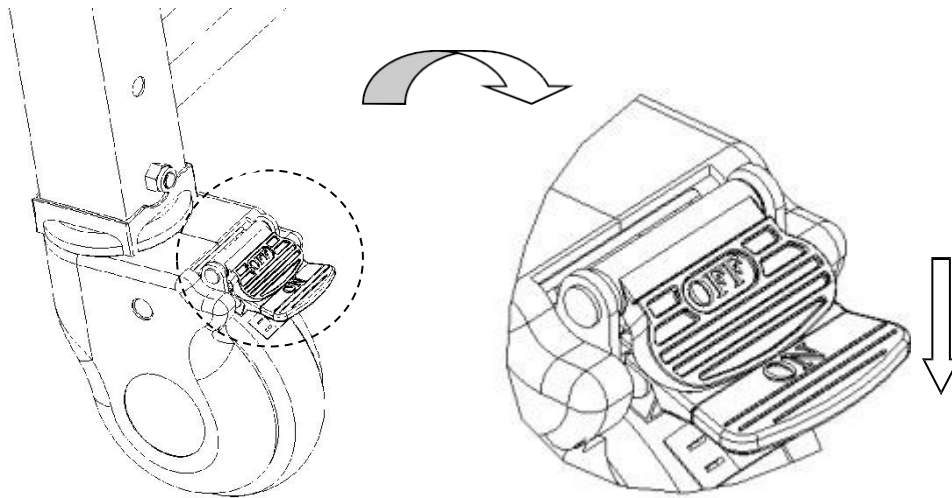



2.1.2 Rollen entriegeln: Drücken Sie mit dem Fuß auf den OFF-Knopf und entriegeln Sie die Rollen, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

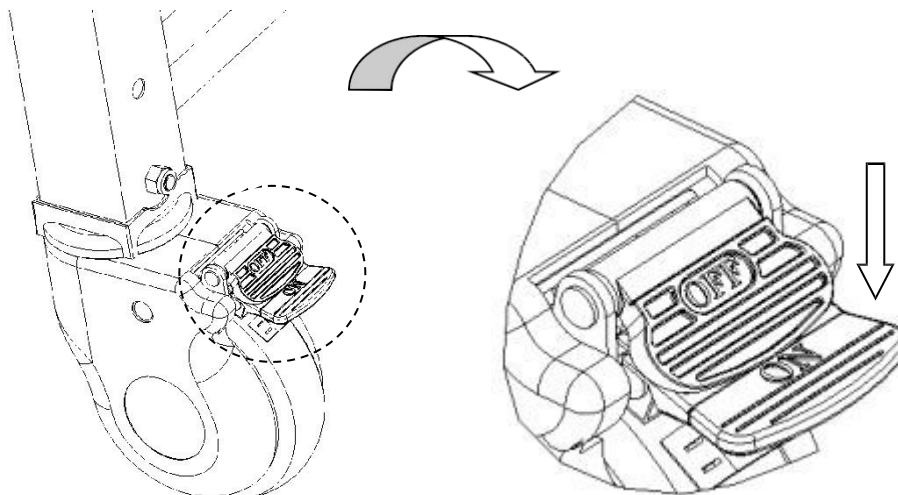



2.2 Verwendung der Schutzgeländer

2.2.1 Anheben und Absenken der Schutzgeländer

Anheben der Schutzleiste: Halten Sie den roten Griff der Schutzleiste fest und heben Sie sie an. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, ist die Schutzleiste verriegelt.

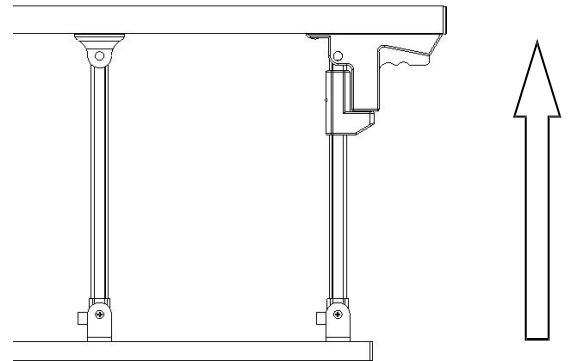
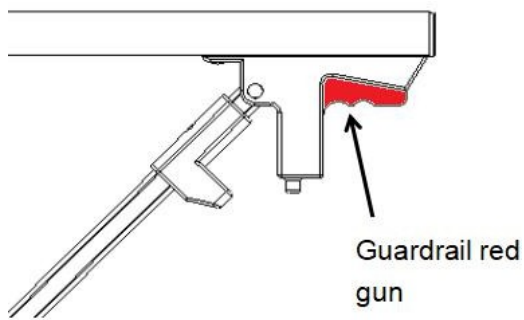


Absenken der Schutzleiste: Halten Sie den roten Griff der Schutzleiste fest und legen Sie sie langsam ab.

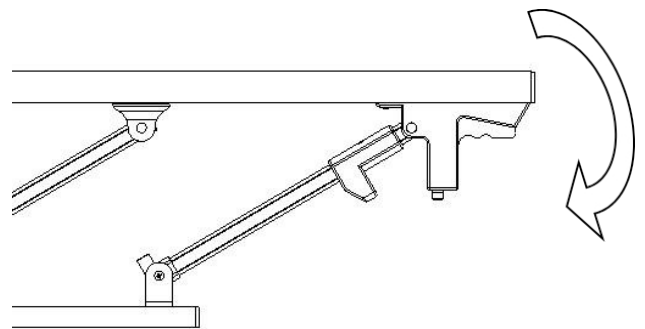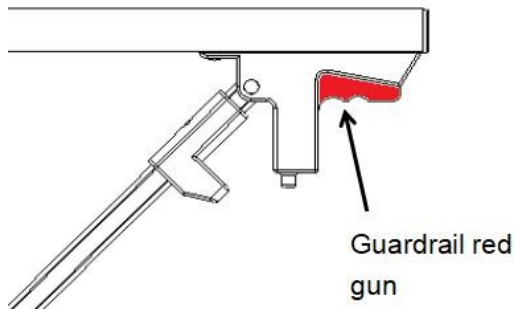

2.3 Verwendung der Abflussklauen


Die Entwässerungshaken sind in der Abbildung dargestellt.

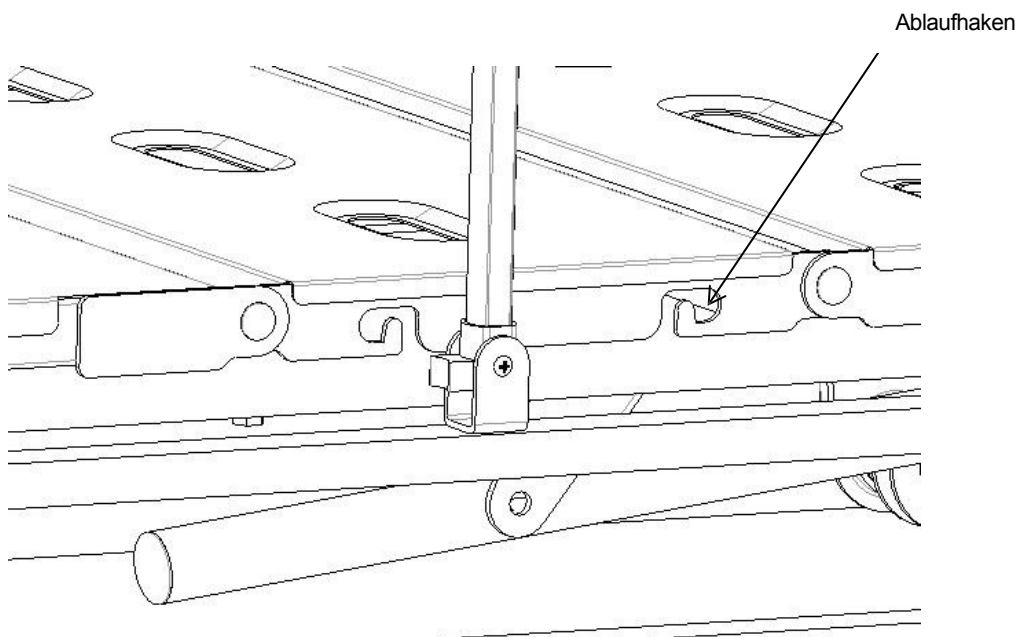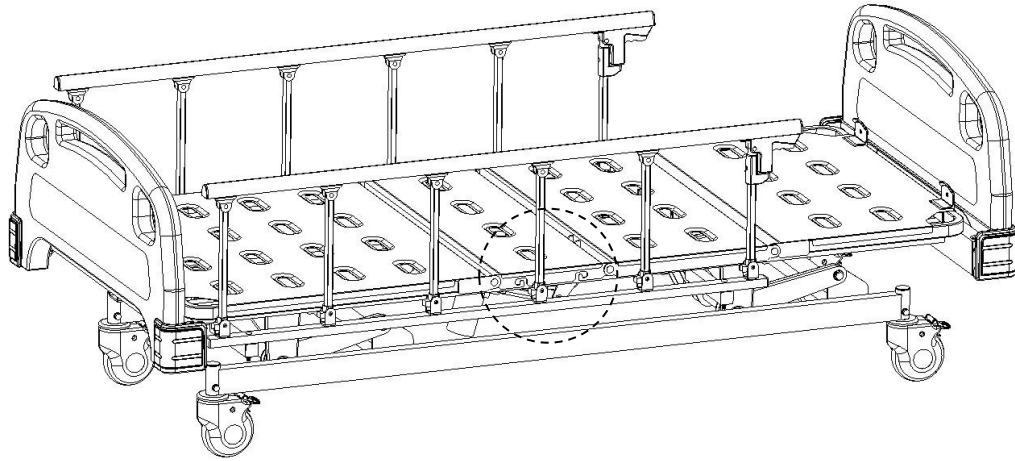


2.4 Verwendungsmethode des Infusionsständers

Einstellen der Höhe des Infusionsständers:


1. Lösen Sie die äußere Hülse vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, führen Sie das Innenrohr des Infusionsständers in die äußere Hülse ein und stellen Sie dann die Länge der Verlängerungsstange nach oben oder unten ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Länge ein und ziehen Sie die äußere Hülse vorsichtig fest. Die maximale Tragkraft jedes Hakens beträgt 2 kg, insgesamt 8 kg.
(Höhenverstellung: 890–1540 mm)

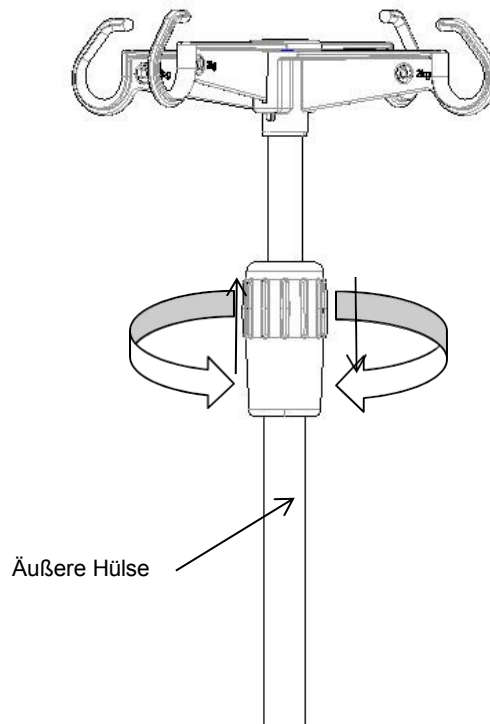


2.5 Verwendung der Kurbelgriffe

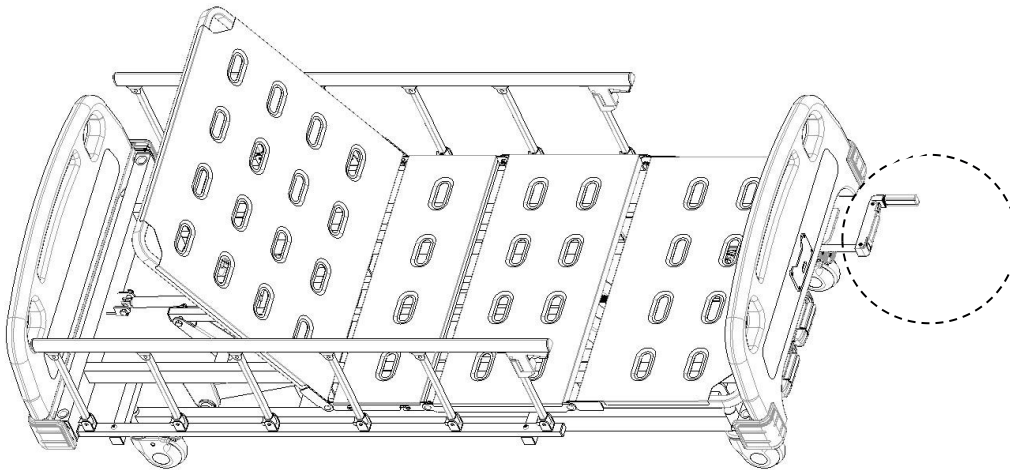

Nach oben und unten: Ziehen Sie den Handkurbelgriff heraus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Rückseite anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.

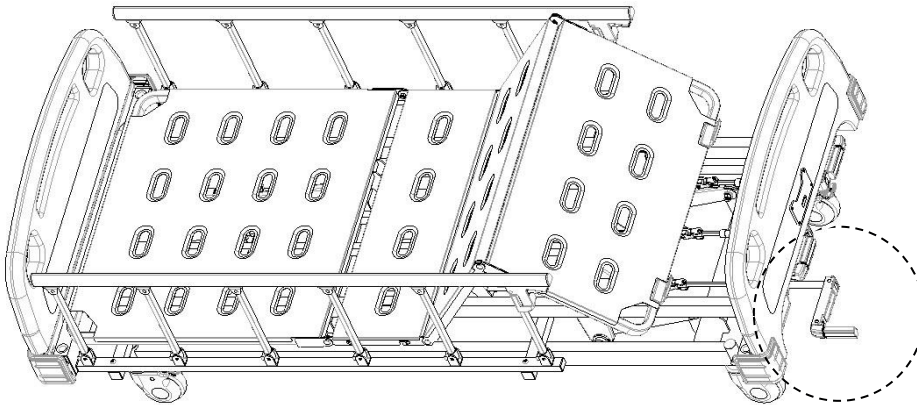



Bein hoch und runter: Ziehen Sie den Handkurbelgriff heraus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um das Bein anzuheben, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das Bein abzusenken.

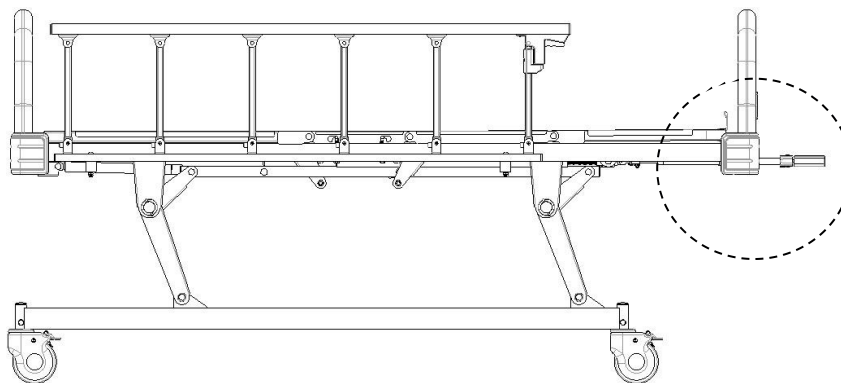

Heben des gesamten Bettes: Ziehen Sie den mittleren Kipphebel heraus und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um das gesamte Bett anzuheben, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das gesamte Bett abzusenken.

3. Ersatzteilaustausch und Wartung

Verwenden Sie 2 Stück 17-Zoll-Inbusschlüssel (), um die Teleskop-Kipphebelverbindung zu lösen, den Bolzen herauszunehmen und den Kipphebel auszutauschen. Nach dem Austausch setzen Sie die Bolzen in in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge wieder ein und ziehen Sie die Knoten mit dem Schraubenschlüssel fest.

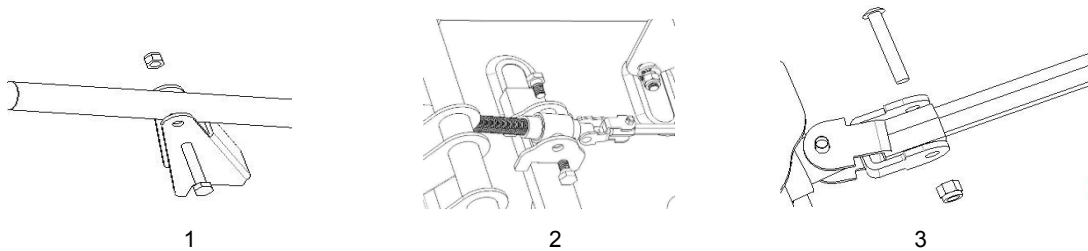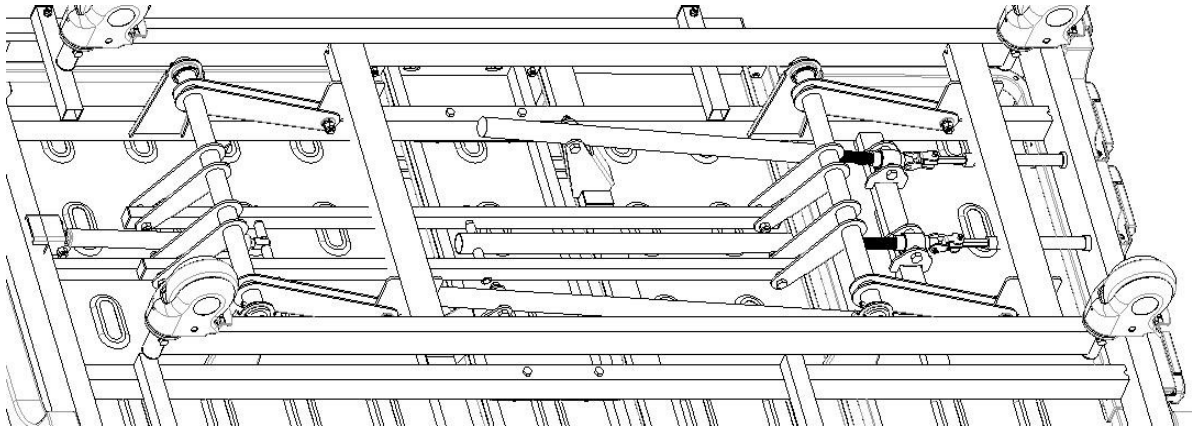


4. Fehlerausschluss

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Ausschlussmethoden
Das gesamte Bett lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Rolle austauschen
Die Schutzleiste lässt sich leicht lösen	Die Schutzleiste sitzt nicht fest	Heben Sie die Leitplanke wieder nach oben und lassen Sie die Hand los, sobald Sie ein „Klicken“ hören
Lautes Geräusch beim Auf- und Abbewegen der Bettplatte	Die beweglichen Teile sind verrostet und nicht ausreichend geschmiert	Geben Sie die richtige Menge Schmieröl an die Gelenkstellen der beweglichen Teile
Ein Teil des Bettes funktioniert nicht	Defekt der Teleskopwippe	Teleskopische Wippe ersetzen

5. Bettwartung

1. Um das Bett sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile fest sitzen und die Auf- und Abwärtsbewegung des Bettes normal funktioniert.
2. An den Verbindungsstellen der häufig bewegten Teile des Bettes muss bei der täglichen Inspektion eine angemessene Menge Schmieröl hinzugefügt werden. Bei starker Abnutzung sollte das Öl aus Sicherheitsgründen sofort ausgetauscht werden. Fügen Sie die Schmierstellen wie abgebildet hinzu.

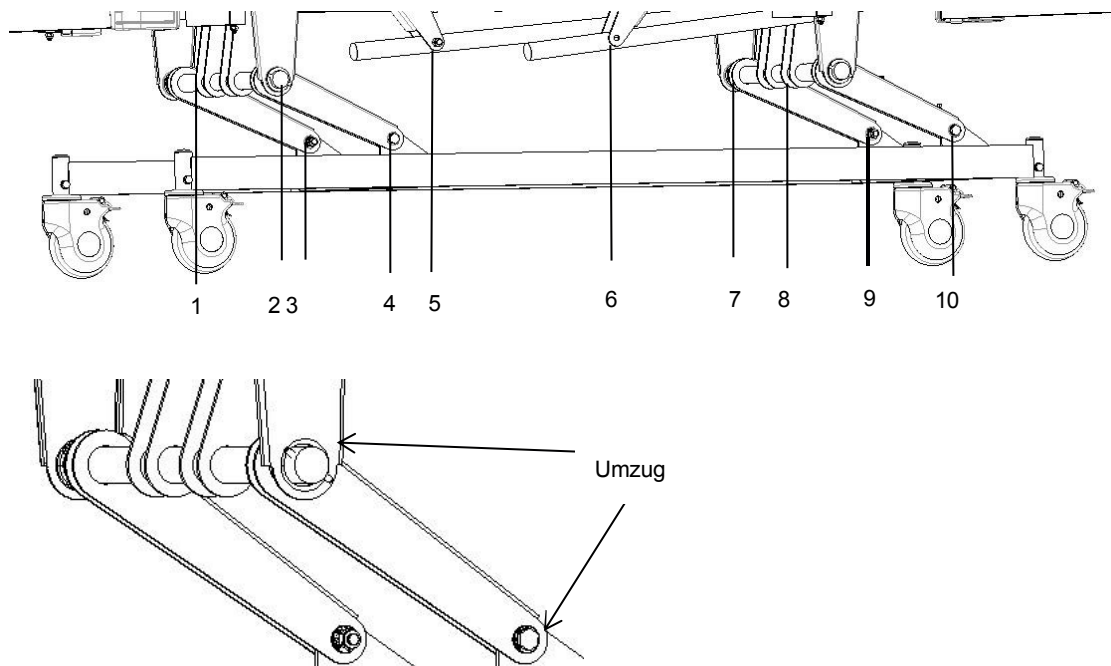

3. Vermeiden Sie Stöße gegen das Bett und Kratzer an der Beschichtung des Bettes durch scharfe Gegenstände.
4. Bitte vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in das Bett und die Matratze eindringt, da dies zu Rost, ungewöhnlichen Geräuschen und Bakterienbildung führen kann. Wenn Wasser eindringt, wischen Sie es sofort ab.
5. Wenn das Bettgestell altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht hat, können die Metallteile des Bettes und die Kunststoffteile des Kopf- oder Fußteils sowie die Schutzgitter recycelt werden.

6. Bettreinigung

1. Bei der Reinigung wringen Sie bitte das mit einem neutralen Reinigungsmittel verdünnten Tuch aus und wischen Sie damit die Oberfläche ab. Wringen Sie anschließend das mit Wasser getränkte Tuch aus, um die restlichen Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, und trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch.
2. Verwenden Sie keine flüchtigen Substanzen (Verdünner, Lösungsmittel, Benzin usw.), da diese chemische Reaktionen hervorrufen und das Bett beschädigen können.
3. Wenn Sie zur Reinigung ein Desinfektionsmittel verwenden, verdünnen Sie es vor der Verwendung unbedingt gemäß der angegebenen Konzentration. Je nach Zusammensetzung des Desinfektionsmittels kann es Metallteile, Kunststoffteile usw. angreifen und unerwünschte Erscheinungen wie Verfärbungen und Verformungen verursachen. Daher wird folgende Dosierung des Desinfektionsmittels empfohlen:

0,05 ~ 0,2 % Ammoniumchlorid-Desinfektionsmittel

0,05 ~ 0,2 % chloriertes Phenol-Desinfektionsmittel

0,05 % Diclofenac-Ethan-Lösung 0,05 ~ 0,2 %

Natriumhypochlorit-Desinfektionsmittel

Verwenden Sie keine Rauchsterilisatoren, Autoklaven und kein Methyl (Phenol) zur Reinigung des

Kopf- und Fußteil des Bettes zu reinigen. Dies kann zu Korrosion, Verfärbungen und Beschädigungen führen.

Hinweis: Achten Sie beim Reinigen des Bettes oder beim Wechseln der Bettwäsche auf die Ecken, Kanten und Schrauben des Rahmens, um Kratzer zu vermeiden.

7. Matratzenreinigung und Pflege von Matratzen

1. Vermeiden Sie bei der Verwendung Kratzer durch scharfkantige Werkzeuge oder Messer, decken Sie die Matratze mit Laken oder Reinigungspads ab und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie vor Austrocknung zu schützen.
2. Reinigen Sie die Matratze regelmäßig mit einem Staubsauger. Der Matratzenbezug kann bei 100 °C gewaschen werden.
3. Legen Sie die Matratze regelmäßig auf, damit sie frisch und bequem bleibt, aber achten Sie darauf, dass die Matratze zu lange der Luft ausgesetzt.
4. Bei versehentlichen Flecken auf dem Stoff befolgen Sie bitte die entsprechenden Reinigungsempfehlungen in der Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Stoffes.
5. Wenn versehentlich Kaugummi oder andere klebrige Substanzen auf den Stoff gelangen, wischen Sie diese nicht mit Gewalt ab. Verwenden Sie einen Eisbeutel, um sie zu verhärten, und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.
6. Wenn Sie aufgrund von Abnutzung lose Fäden entdecken, ziehen Sie diese nicht mit der Hand heraus, sondern schneiden Sie sie mit einer Schere ab.

* Wenn Ihre Bestellung keine Matratze enthält, beachten Sie bitte die Vertragsbedingungen.



8. Rollenerkennung und Wartung


1. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen können.
2. Fetten Sie die Rollen oder Räder regelmäßig, wobei die Häufigkeit der Nachschmierung von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt. Im Allgemeinen wird alle sechs Monate Schmierfett aufgetragen.
3. Achten Sie nach der Reinigung der Rollen auf das Nachfetten. Die Auswahl des Schmierfetts sollte sich nach der tatsächlichen Einsatzumgebung richten, wobei besondere hohe oder niedrige Temperaturen zu berücksichtigen sind.
4. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
5. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Es können sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
6. Um zu beurteilen, ob die Rolle aufgrund der Nutzungsdauer oder Abnutzung ausgetauscht werden muss, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.
7. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Krankenhausbett mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, das Bett zu schieben, und überprüfen Sie, ob die Bremsleistung jeder Rolle einwandfrei ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.
8. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut überprüft werden.

9. Wartung der Seitensicherung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Seitenschienen korrekt montiert sind, um zu verhindern, dass der liegende Patient verrutscht und herunterrollt.
2. Bitte überprüfen Sie immer die Schrauben der Gesamtposition der Schutzschiene und des Drahtes, um ein Lösen und Herunterfallen zu verhindern.
3. Bitte verwenden Sie die roten Kunststoffteile des Geländerschalters korrekt und wenden Sie keine Gewalt an, um eine Beschädigung des Geländers zu vermeiden.

10. Ersatzteilliste

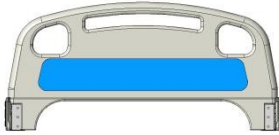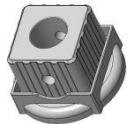Nr	Bezeichnung	Modell	Abbildung	Spezifikation
1	A900/PP/Kopf- und Fußteil	S0FJBT010019		Hakenabstand: 910*55 mm
2	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105931		Linke Seite
3	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105932		Rechte Seite
4	IV-Stange	S0FJSY010003		Φ16-19/cremefarben
5	5-Zoll-Lenkrolle	LGPLU101TS014		φ24
6	Rollen-Viererset	GPSL101TS297		50*50 mm
7	Teleskopische Rückenkurbel	LGPSG10101002		950-150 mm
8	Bein-Teleskopkurbel	LGPSG10101001		650-95 mm

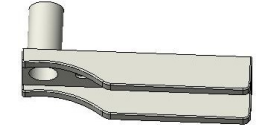9	Höhen- Teleskopkurbel	LGPSG10101003		600-200 mm
10	Luftfeder	LGPQT101TS010		27-250-620-1200N
11	Teleskop- Kurbelgriff	GPSL1012524S		Cremefarben/250*220 mm
12	Kurbelgriff-Basis	GPSL1012525S		Off-white/p2142c
13	Namenskarte	GPSL101TS184		/

Hinweis: Aufgrund von Produktaktualisierungen sind Teile des Originalprodukts möglicherweise nicht mehr auf Dauer verfügbar. (Das Unternehmen garantiert, dass für die verkauften Produkte innerhalb von 6 Jahren nach Ende ihrer Produktion die erforderlichen Ersatzteile geliefert werden können.)

11. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des manuellen Bettes erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des manuellen Bettes überstürztes Handeln, starke Erschütterungen und schützen Sie es vor Sonnenlicht und Regen.
3. Das manuell verstellbare Bett sollte wie folgt gelagert werden:
 - a) Umgebungstemperatur: +5 ° °C ~ +40 °°C .
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.
 - c) Luftdruck: 70 kPa~ 106 kPa. Erklärung der

Symbole:



Hinweis! Überprüfen Sie die mit dem Bett mitgelieferte Datei.



Sichere Arbeitslast beträgt 2000 N

12. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf. Diese Unterlagen müssen vorgelegt werden, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten für das Produkt erbringt.
2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Demontieren Sie das Innere des Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Ab dem Kaufdatum gewährt das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts, wenn es innerhalb eines Jahres aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: A3k / REF.: 319-SKCD1

CAMA DE HOSPITAL MANUAL / MANUAL HOSPITAL BED / LIT D ' HOPITAL /

LETTO OSPEDALIERO / CAMA DE HOSPITAL / KRANKENHAUSBETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Nr. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Jiangsu-Provinz, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



Quirumed S.L.U. CIF B97267405C/
Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spanien)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com