




Benutzer Handbuch

SKH004 **Instrumenten-Wagen**

Registrierungscode: SKM-A

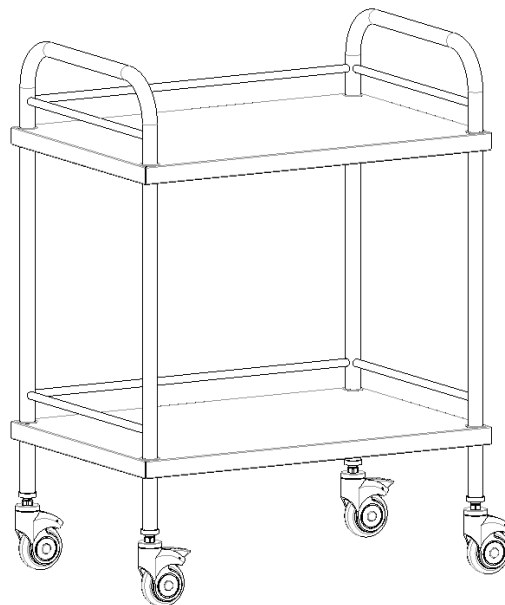

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

STOCK CODE: 870098

Inhalt

Handbuch Einführung.....	2
1. Leitfaden für die Installation.....	3
1.1 Liste des Standardzubehörs	3
1.2 Einbau von Rollen	4
2. Methode verwenden	5
2.1 Art der Verwendung der Rollen.....	6
3. Ausschluss von Fehlern.....	7
4. Instrumentenwagen-Wartung	7
5. Verpackung, Transport, Lagerung	<u>8</u>
6. Kundendienst	<u>8</u>

Handbuch Einführung

Anmerkung:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und der Verwendung genau. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer das Benutzerhandbuch und alle Vorsichtshinweise kennen.

Dieses Handbuch gilt für den Gerätewagen SKH004. Sie enthält die Installationsmethode, die Betriebsanweisungen und die Kontrollpunkte für die Wartung.

► Die Grafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz für die Benutzer. Für den tatsächlichen Gebrauch beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

► Dieses Benutzerhandbuch enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technischen Parameter des Produkts.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum oder den Händler.

► Jeder, der dieses Produkt benutzt oder bedient, sollte es lesen und beachten.




► Abgesehen von einigen unerwarteten Situationen ist es erforderlich, dass die Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind.

1. Leitfaden für die Installation

1.1 Liste des Standardzubehörs


Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung sind:

Tabelle a:

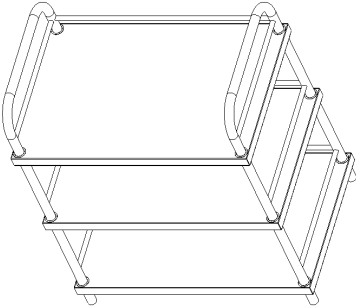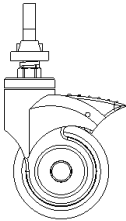
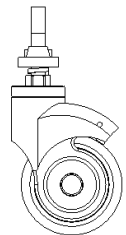
NEIN.	Name	Bild	Spezifikation	QTY	Einheit
1	Hauptteil		L670*B450*H780mm	1	pc
2	Lenkrolle mit Bremse		3-Zoll-Laufrolle mit Bremse	2	Stück
3	Lenkrolle ohne Bremse		3-Zoll-Laufrolle ohne Bremse	2	Stück

1.2 Lenkrollen installation


Legen Sie eine Schutzunterlage aus und stellen Sie den Instrumentenwagenkörper auf den Kopf; Entfernen Sie die Rollen, indem Sie die Rolle zunächst in die richtige Position bringen, sie dann in das Rohr einführen und mit einem Innensechskantschlüssel festziehen.

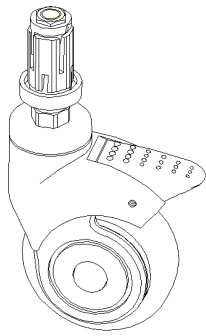


1

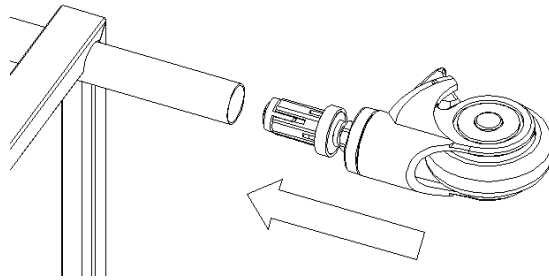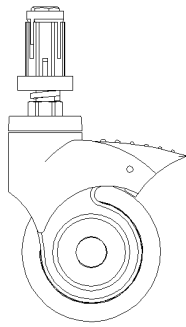

2

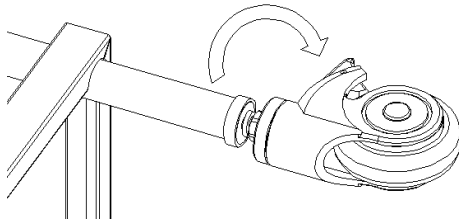


3

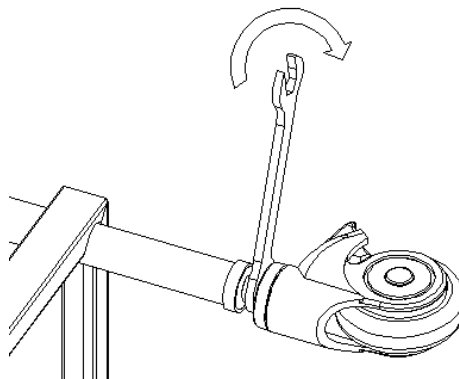

4

2. Methode verwenden

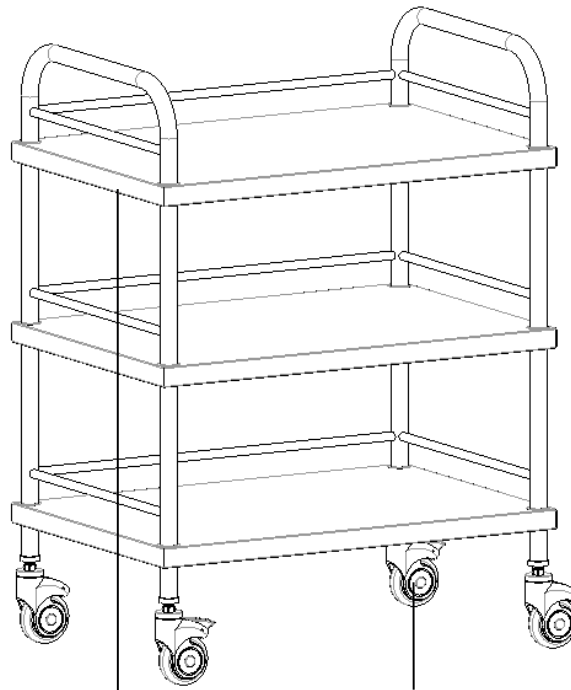


1 2

1-Hauptkörper 2-Rollen


Größe des Instrumentenwagens	Länge	mm	670
	Breite		450
	Die Höhe des Wagens über dem Boden		900
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	50

2.1 Art der Verwendung der Rollen

2.1.1 Verriegeln Sie die Lenkrolle: Nachdem Sie den Wagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie den Knopf und verriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein "Klicken" hören, wie in der Abbildung unten dargestellt.

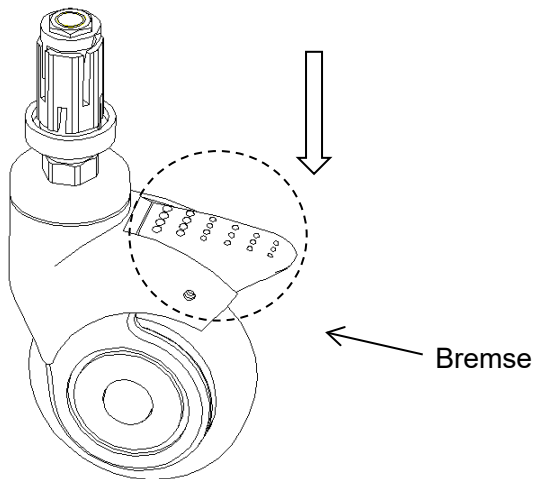

2.1.2 Entriegeln Sie die Lenkrolle: Heben Sie den Knopf mit dem Fuß an und entriegeln Sie die Lenkrolle, wenn Sie ein "cli c k" hören.

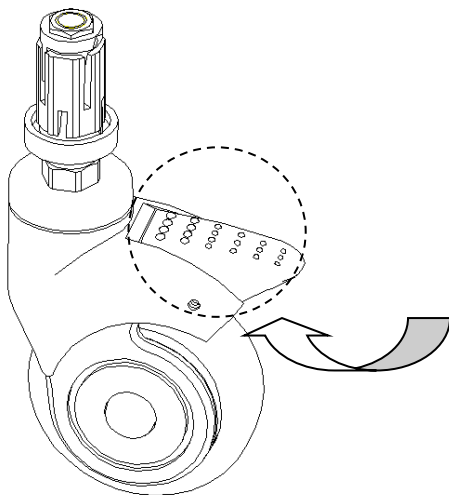

3. Ausschluss von Fehlern

Häufige Ausfälle	Wahrscheinliche Gründe	Methoden ausschließen
Schwierig, den ganzen Wagen zu bewegen	1. Der Nachlauf wird blockiert, ohne dass die Bremse gelöst wird 2. Der Nachlauf ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Ersetzen Sie die Lenkrolle

4. Instrumentenwagen-Wartung

1. Um den Wagen sicher verwenden zu können, müssen regelmäßig Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile nicht gelockert sind und normal betrieben werden können.

2. Wenn der Instrumentenwagen seine maximale Nutzungsdauer erreicht hat, können die Metall- und Kunststoffteile der Krippe recycelt werden.

3. Vermeiden Sie es, mit scharfen Gegenständen gegen das Kinderbett zu stoßen und das Rohr am Kinderbett zu zerkratzen.

4. Wenn die Struktur mit Flecken, empfehlen wir, es mit Wasser zu reinigen, verwenden Sie keine alkalischen, ätzende Chemikalien zu reinigen, um Rost auf Edelstahl-Oberfläche zu vermeiden.

5. Prüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastungen zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen.

6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam abzubremesen, was zu Schäden an der Bremsanlage führt.

7. Die Abnutzung der Reifenoberfläche des Rades kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, säubern Sie die Verunreinigungen und prüfen Sie, ob das Radlager beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

8. Beurteilung, ob die Rolle durch die gesamte Rolle ersetzt wird, je nach Abnutzung und Verschleiß. Nach dem Austausch oder Einbau des Rades ist darauf zu achten, dass die Achsschraube und die Mutter zuverlässig verbunden sind. Wenn möglich, verwenden Sie eine Sicherungsscheibe oder eine Sicherungsmutter.

9. Bei den mit Bremsen ausgestatteten Rollen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen Sie die Bremsen einmal am Tag oder vor jeder Benutzung. Bei einem Gerätewagen, der mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils

nur eine Bremsrolle blockiert werden, um zu versuchen, den Wagen zu schieben und zu prüfen, ob die Bremsleistung der einzelnen Rollen gut ist. Wenn die Funktion der Rollenbremsen aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder versagt, müssen die Räder sofort ausgetauscht und das Bremssystem erneut getestet werden.

10. wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Jedes Mal, wenn die Bremsen ersetzt werden, muss die Bremsleistung der Rollen erneut getestet werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Instrumentenwagens erfolgt entsprechend dem Vertrag oder der Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Instrumentenwagens Eile, starke Vibrationen und Schutz vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Instrumentenwagen sollte aufbewahrt werden:
 - a) Umgebungstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
 - c) Atmosphärischer Druck: $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. Service nach dem Verkauf

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen für dieses Produkt ordnungsgemäß auf. Sie müssen diese Unterlagen vorlegen, wenn das Unternehmen die Garantie und Wartung für das Produkt durchführt.
2. Wenn es irgendwelche Probleme im Prozess der Verwendung, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen in der Zeit, so dass unser Unternehmen können Sie mit genauen und schnellen technischen Support und Wartung Dienstleistungen in einer fristgerechten Weise.
3. Nehmen Sie das Innenleben dieses Produkts nicht selbst auseinander, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Nutzung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Ab dem Kaufdatum, wenn es tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert aufgrund von Qualitätsproblemen innerhalb eines Jahres, wird das Unternehmen das Produkt für die Nutzer kostenlos zu reparieren.

5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL:SKH004 | REF.: 319-SKH004

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

Nr. 35 Lehong Road, Moderne Landwirtschaft

Demonstrationspark, Zhangjiagang City,

Provinz Jiangsu, **China**



SUNGO Europa B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Einheit 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Die Niederlande



Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

Valencia(Spanien)

LOT:HW25036



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

STOCK CODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com