




Manuel de l'utilisateur manuel

SKH004 **Chariot à instruments**

Code d'enregistrement : SKM-A

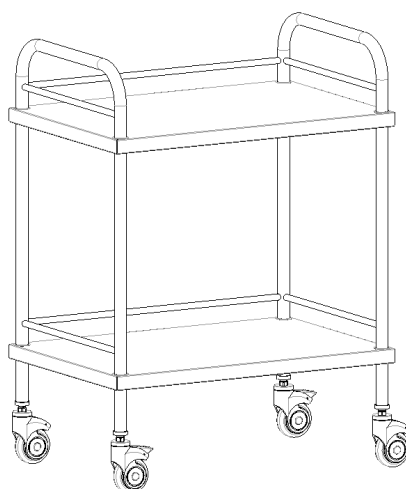

SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

Contenu

Introduction au manuel	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes	4
2. Utiliser la méthode	5
2.1 Méthode d'utilisation des roulettes	6
3. Exclusion des défauts	7
4. Chariot d'instruments - Entretien	7
5. Emballage, transport, stockage	8
6. Service après-vente	8

Introduction au manuel

Remarque :

Veillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de connaître le manuel de l'utilisateur et toutes les précautions à prendre.




- ▶ Ce manuel s'applique au chariot d'instruments SKH004. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle de la maintenance.
- ▶ Les graphiques de ce manuel sont uniquement destinés à servir de référence aux utilisateurs. En cas d'utilisation réelle, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, l'instruction, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou faisant fonctionner ce produit doit le lire et s'y conformer.
- ▶ À l'exception de certaines situations inattendues, les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec l'utilisation et les précautions.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard


Après avoir ouvert la boîte d'emballage, vérifiez si les pièces suivantes sont complètes dans la boîte d'emballage :

Tableau a :

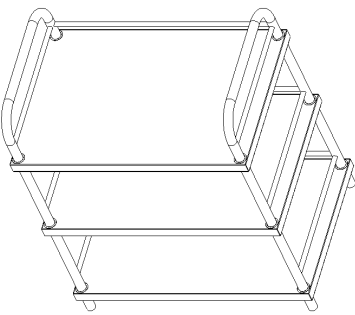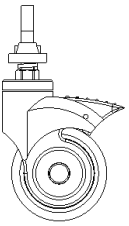
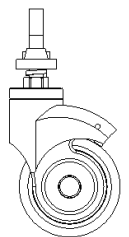
NON.	Nom	Photo	Spécifications	QTÉ	Unité
1	Corps principal		L670*L450*H780mm	1	pc
2	Roulettes avec frein		Roulette de 3 pouces avec frein	2	pcs
3	Roulette sans frein		Roulette de 3 pouces sans frein	2	pcs

1.2 Roulettes installation


Posez un coussin de protection et mettez le corps du chariot d'instruments à l'envers ;
Pour retirer les roulettes, il faut d'abord desserrer la roulette pour la positionner correctement, puis l'insérer dans le tube et la serrer à l'aide d'une clé hexagonale intérieure.

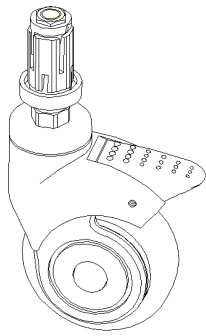


1

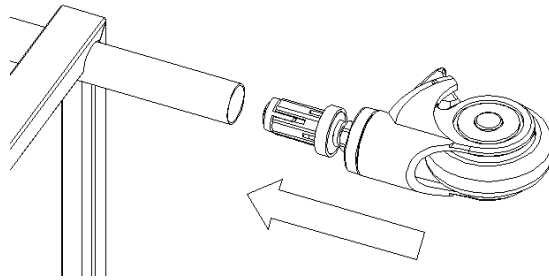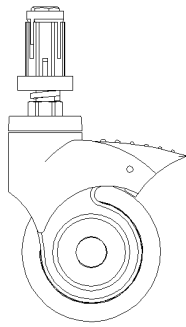

2

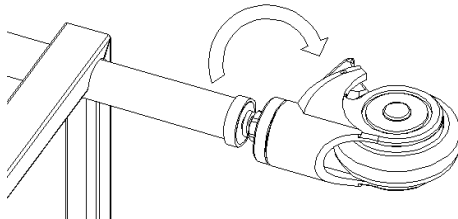


3

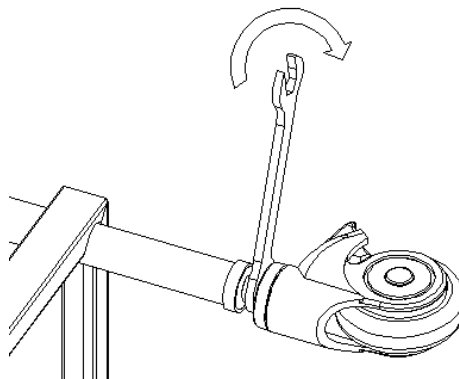

4

2. Utiliser la méthode

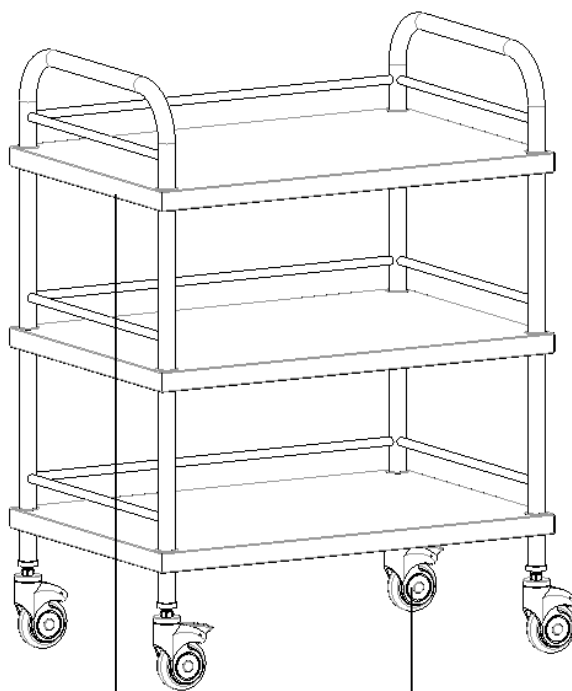


1 2

1-Corps principal 2-catalyseurs


Taille du chariot d'instruments	Longueur	mm	670
	Largeur		450
	La hauteur du chariot par rapport au sol		900
Poids	Charge de travail sûre	KG	50

2.1 Méthode d'utilisation des roulettes

2.1.1 Verrouiller la roulette : Après avoir poussé le chariot dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un "clic", comme le montre la figure ci-dessous.

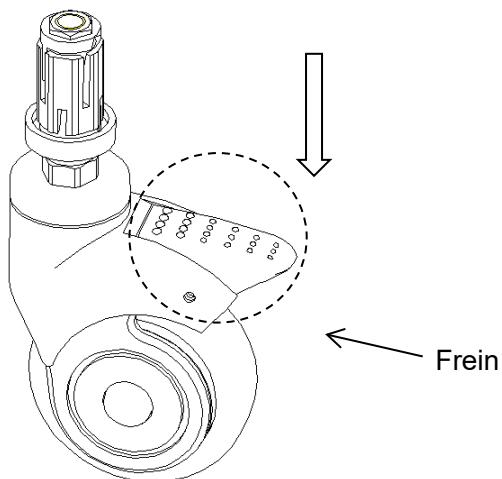

2.1.2 Déverrouiller la roulette : Soulevez le bouton avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un "cli c k".

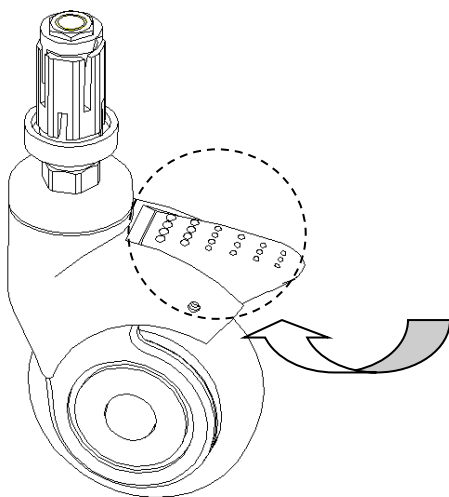

3. Exclusion des défauts

Défaillances courantes	Raisons probables	Méthodes d'exclusion
Difficile de déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ne soit desserré. 2. La roulette est endommagée	1. Desserrer le frein 2. Remplacer la roulette

4. Chariot d'instruments - Entretien

1. Afin d'utiliser le chariot en toute sécurité, des inspections de sécurité doivent être effectuées régulièrement. Effectuer une inspection complète tous les six mois, afin de s'assurer que les pièces de connexion ne sont pas desserrées et qu'elles peuvent être utilisées normalement.

2. Lorsque le chariot d'instruments a atteint sa durée de vie maximale, les parties métalliques et plastiques du berceau peuvent être recyclées.

3. Évitez de heurter le berceau et de rayer le tube du berceau avec des objets pointus.

4. Si la structure présente des taches, il est conseillé de la nettoyer à l'eau, sans utiliser de produits chimiques alcalins ou corrosifs, afin d'éviter la rouille sur la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter les chocs ou les surcharges, qui endommageraient les roulettes.

6. Il est interdit de forcer le freinage des roulettes lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.

7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par une inspection visuelle. Certains fils et autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue, retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

8. Juger si la roulette est remplacée par l'ensemble de la roulette en fonction de l'usure. Après le remplacement ou l'installation de la roue, assurez-vous que le boulon et l'écrou de l'essieu sont bien fixés. Si possible, utilisez une rondelle de blocage ou un écrou de blocage.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des freins. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Dans le cas d'un chariot équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois pour essayer de pousser le chariot afin de vérifier si les freins de chaque roulette fonctionnent correctement. Si les freins des roulettes ne fonctionnent pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le

système de freinage.

10. si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot d'instruments est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Éviter les sorties brusques, les vibrations violentes et la protection contre les rayons du soleil et la pluie pendant le transport du chariot porte-instruments.
3. Le chariot d'instruments doit être rangé :
 - a) Température ambiante : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. Service après-vente

1. Conservez soigneusement les fichiers fournis avec l'appareil et les factures de ce produit. Vous devez présenter ces documents lorsque l'entreprise assure la garantie et l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société à temps, afin qu'elle puisse vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides.
3. Ne démontez pas vous-même le dispositif interne de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise le réparera gratuitement pour les utilisateurs.
5. Service à vie assuré par le fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE:SKH004 | RÉF. : 319-SKH004

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parc de démonstration, ville de Zhangjiagang,

Province de Jiangsu, **Chine**



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unité 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Les Pays-Bas



Importador : Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

Valence (Espagne)

LOT:HW25036



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com