




Utente manuale

SKH004

Carrello porta strumenti

Codice di registrazione: SKM-A

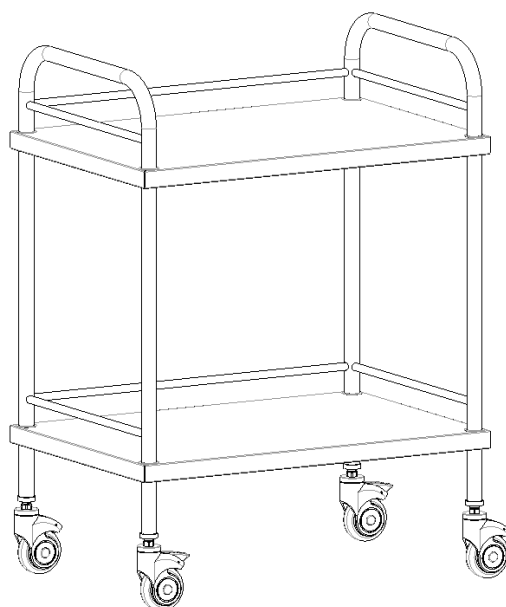

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098

Contenuti

Introduzione al manuale	2
1. Guida all'installazione	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione delle rotelle	4
2. Utilizzare il metodo	5
2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle.....	6
3. Esclusione dei guasti.....	7
4. Manutenzione del carrello degli strumenti.....	7
5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	8
6. Servizio post-vendita	8

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Tutti gli utenti devono essere a conoscenza del manuale d'uso e di tutte le avvertenze.

Questo manuale è applicabile al carrello portastrumenti SKH004. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni operative e i punti di controllo della manutenzione.

► La grafica di questo manuale è solo un riferimento per gli utenti. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

► Questo manuale d'uso comprende la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.

► Chiunque utilizzi o faccia funzionare questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.




► Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscere l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard


Dopo aver aperto la confezione, verificare che i seguenti componenti siano completi nella confezione:

Tabella a:

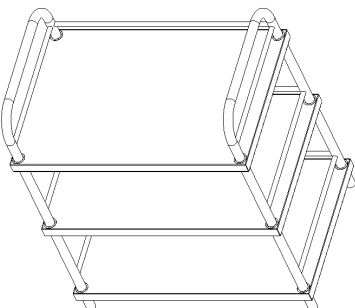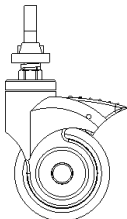
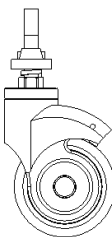
NO.	Nome	Immagine	Specifiche	QTÀ	Unità
1	Corpo principale		L670*W450*H780 mm	1	pc
2	Rotelle con freno		Rotelle da 3 pollici con freno	2	pz
3	Rotelle senza freno		Rotelle da 3 pollici senza freno	2	pz

1.2 Rotelle installazione


Stendere un cuscinetto di protezione e mettere il corpo del carrello portastrumenti sottosopra;
Per rimuovere le rotelle, allentare prima la rotella in posizione corretta, quindi inserirla nel tubo e serrarla con una chiave esagonale interna.

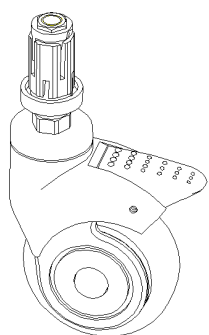


1

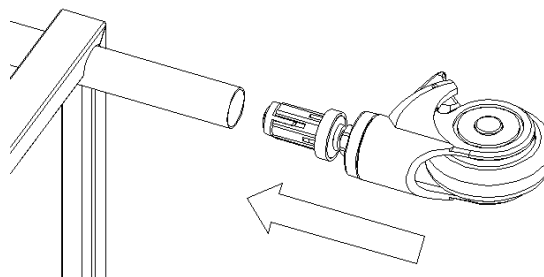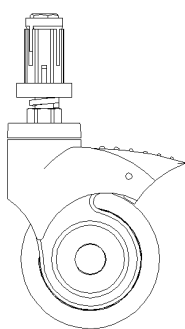

2

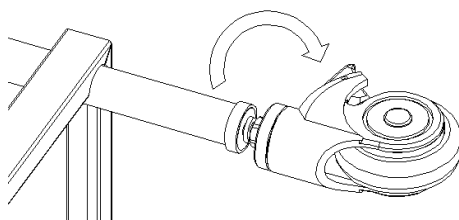


3

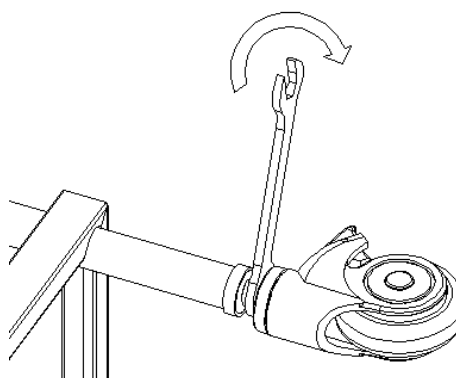

4

2. Metodo di utilizzo

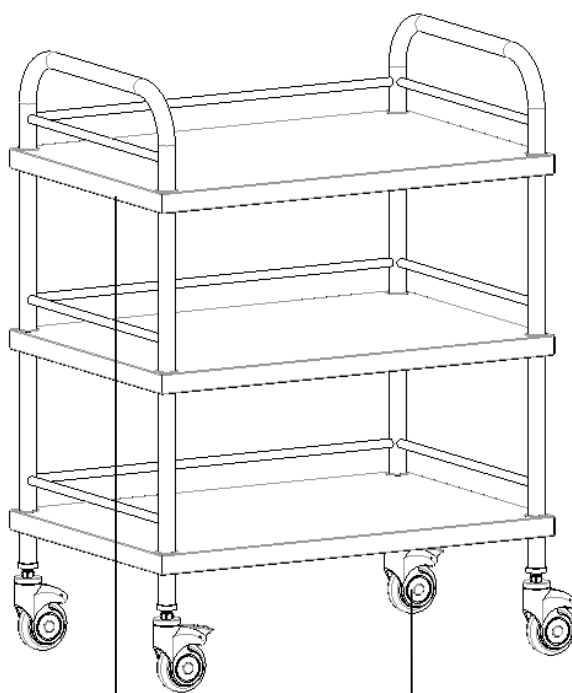


1 2

1-Corpo principale 2-caster


Dimensioni del carrello porta strumenti	Lunghezza	mm	670
	Larghezza		450
	L'altezza del carrello dal suolo		900
Peso	Carico di lavoro sicuro	KG	50

2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle

2.1.1 Bloccare la rotella: Dopo aver spinto il carrello nella posizione desiderata, premere il pulsante e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura seguente.

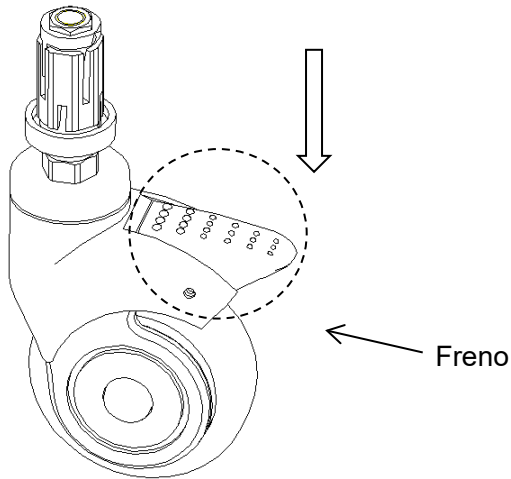

2.1.2 Sbloccare la rotella: Sollevare il pulsante con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "cli c k".

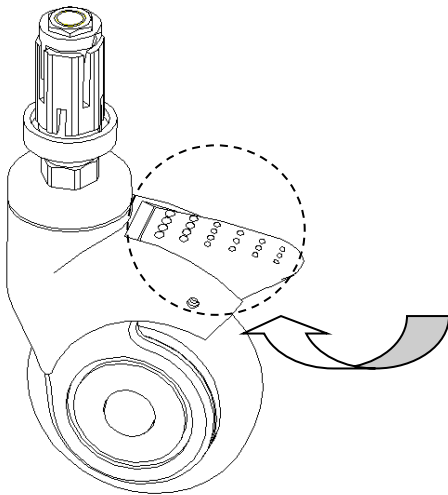

3. Esclusione dei guasti

Fallimenti comuni	Probabili ragioni	Metodi di esclusione
Difficile spostare l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

4. Manutenzione del carrello degli strumenti

1. Per utilizzare il carrello in modo sicuro, è necessario eseguire regolarmente ispezioni di sicurezza. Eseguire un'ispezione completa ogni sei mesi, per assicurarsi che non vi siano allentamenti nelle parti di collegamento e che il carrello possa funzionare normalmente.

2. Quando il carrello portastrumenti raggiunge la sua durata massima, le parti metalliche e plastiche della culla possono essere riciclate.

3. Evitare di colpire la culla e di graffiare il tubo della culla con oggetti appuntiti.

4. Se la struttura presenta macchie, si consiglia di pulirla con acqua, non utilizzare prodotti chimici alcalini e corrosivi per la pulizia, evitando la ruggine sulla superficie dell'acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'impianto frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata con un'ispezione visiva. Alcuni fili filati e altri accumuli possono essere avvolti intorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Giudicare la sostituzione dell'intera ruota in base all'usura. Dopo la sostituzione o l'installazione della ruota, accertarsi che il bullone e il dado dell'asse siano collegati in modo affidabile. Se possibile, utilizzare una rondella o un dado di bloccaggio.

9. Per le ruote dotate di freno, è necessario controllare regolarmente il corretto funzionamento dei freni. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di un carrello portastrumenti dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota con freno alla volta per cercare di spingere il carrello e verificare se le prestazioni dei freni di ciascuna ruota sono buone. Se il funzionamento dei freni delle rotelle si guasta a causa dell'usura o di danni alle ruote, sostituire immediatamente le ruote e testare nuovamente il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della ruota è danneggiato e il freno deve essere riparato

o sostituito, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario testare nuovamente le prestazioni dei freni delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello portastrumenti viene eseguito in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello portastrumenti, evitare di sottoporlo a forti vibrazioni e di proteggerlo dalla luce solare e dalla pioggia.
3. Il carrello porta strumenti deve essere riposto:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Umidità relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressione atmosferica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i documenti forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto; è necessario presentare questi materiali quando l'azienda esegue la garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante il processo di utilizzo, si prega di contattare la nostra azienda in tempo, in modo che la nostra azienda possa fornire un supporto tecnico accurato e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Non smontare da soli il dispositivo interno di questo prodotto per evitare danni inutili. Se l'uso è compromesso da problemi di qualità, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il nostro rivenditore autorizzato.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda lo riparerà gratuitamente per gli utenti.
5. Servizio a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO:SKH004 | RIF.: 319-SKH004

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CARRO MEDICO / CARRELO SANITARIO /
CARRO MEDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Agricoltura moderna
Parco dimostrativo, città di Zhangjiagang,
Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Paesi Bassi



Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Spagna)

LOTTO:HW25036



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com