



Benutzer Handbuch

SKH103-1 Instrumentenwagen



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098

Inhalt

Manuelle Einführung	2
1. Installationsanleitung	3
1.1 Liste des Standardzubehörs	3
1.2 Montage der Rollen	4
2. Verwendung	5
2.1 Verwendung der Rollen	6
3. Fehlerbehebung	7
4. Wartung des Instrumentenwagens	7
5. Verpackung, Transport, Lagerung	<u>8</u>
6. Kundendienst	<u>8</u>

Manuelle Einführung

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte genau, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheitshinweisen vertraut sind.



- ▶ Diese Anleitung gilt für den Gerätetrolley SKH103-1. Sie enthält die Installationsmethode, die Bedienungsanleitung und die Wartungs- und Kontrollpunkte.
- ▶ Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für den Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.
- ▶ Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technische Parameter des Produkts.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.
- ▶ Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, muss diese Anleitung lesen und befolgen.
- ▶ Außer in unerwarteten Situationen müssen die Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs


Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:

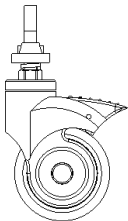
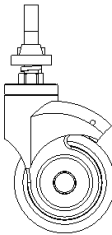
Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Hauptteil		L620 × B480 × H960 mm	1	Stück
2	Lenkrolle mit Bremse		5-Zoll-Rolle mit Bremse	2	Stück
3	Lenkrolle ohne Bremse		5-Zoll-Lenkrolle ohne Bremse	2	Stück

1,2 Rollen e Montage


Legen Sie eine Schutzunterlage und stellen Sie den Instrumentenwagen auf den Kopf.
Entfernen Sie die Rollen, indem Sie sie zunächst in die richtige Position lösen, dann in das Rohr einsetzen und mit einem Innensechskantschlüssel festziehen.

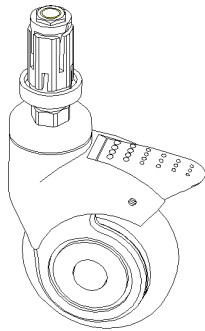


1

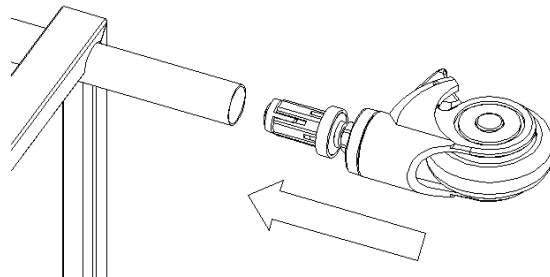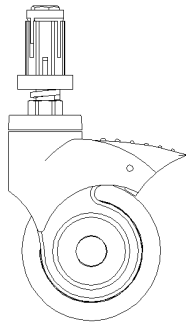

2

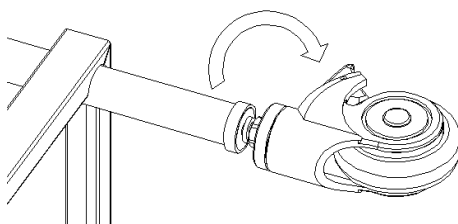

3

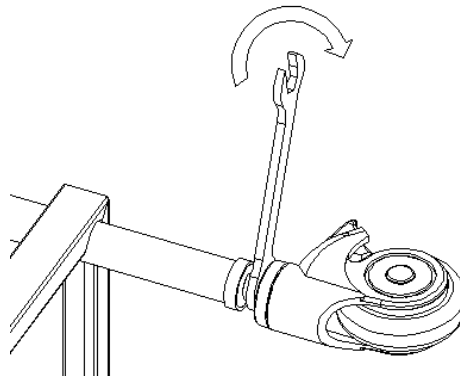

4

2. Verwendungsmethode





1-Hauptteil 2-Rollen

Größe des Instrumentenwagens	Länge	mm	620
	Breite		480
	Die Höhe des Wagens über dem Boden		96
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	100

2.1 Verwendung der Rollen

2.1.1 Rolle arretieren: Nachdem Sie den Wagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie den Knopf und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

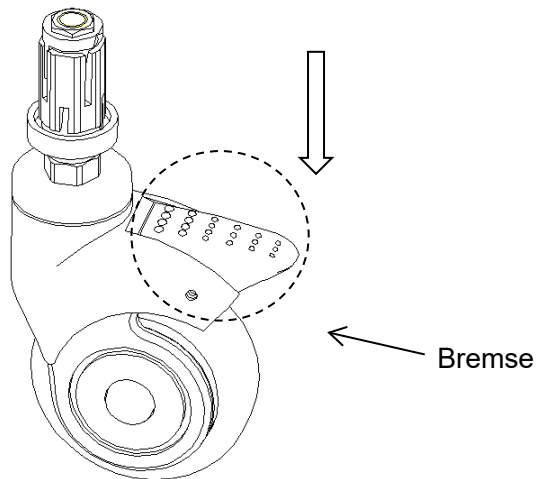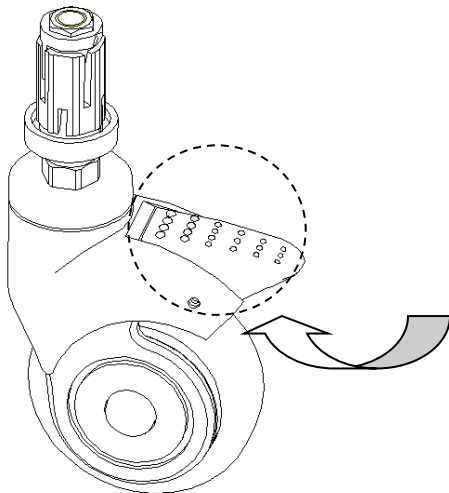[illegible]

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Der gesamte Wagen lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Rollen austauschen

4. Wartung des Instrumentenwagens

1. Um den Wagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile fest sitzen und normal funktionieren.
2. Wenn der Instrumentenwagen das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, können die Metall- und Kunststoffteile des Kinderbetts recycelt werden.
3. Vermeiden Sie Stöße gegen den Ständer und Kratzer an den Rohren durch scharfe Gegenstände.
4. Bei Verschmutzungen empfehlen wir, diese mit Wasser zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, um Rost auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Rollen, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen können.
6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
7. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Es können sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
8. Entscheiden Sie anhand des Verschleißes, ob die Rolle komplett ausgetauscht werden muss. Stellen Sie nach dem Austausch oder der Montage des Rades sicher, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern.
9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Instrumentenwagen mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden,

um den Wagen zu schieben und die Bremsleistung jeder Rolle zu überprüfen. Wenn die Funktion der Rollenbremsen aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Instrumentenwagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Instrumentenwagens überstürztes Herausnehmen, starke Erschütterungen und schützen Sie ihn vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Instrumentenwagen sollte wie folgt gelagert werden:
 - a) Umgebungstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
 - c) Luftdruck: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten am Produkt durchführt.
2. Bei Problemen während des Gebrauchs wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Zerlegen Sie das Innere des Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, repariert das Unternehmen das Produkt für den Benutzer kostenlos.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: SKH103-1 | REF.: 319-SKH103-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

Nr. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Einheit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spanien)

LOT:HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

LAGER-CODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com