



Manuale d'uso

SKH103-1 **Carrello per strumenti**



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE AZIONARIO: 870098

Contenuto

Manuale introduttivo	2
1. Guida all'installazione	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione delle rotelle	4
2. Modalità.....	5
2.1 Modalità d'uso delle rotelle.....	6
3. Esclusione dei guasti.....	7
4. Manutenzione del carrello portastrumenti	7
5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	8
6. Assistenza post-vendita.....	8

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente le istruzioni prima di procedere all'installazione e all'uso. Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere il manuale d'uso e tutte le precauzioni.



- ▶ Il presente manuale è applicabile al carrello portastrumenti SKH103-1. Contiene le modalità di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di controllo per la manutenzione.
- ▶ Le immagini contenute nel presente manuale sono solo a scopo illustrativo. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.
- ▶ Il presente manuale utente include la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- ▶ Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- ▶ Chiunque utilizzi o utilizzi questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.
- ▶ Salvo situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a familiarizzarsi con l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto la confezione, verificare che tutti i componenti elencati nella tabella seguente siano presenti nella confezione:


Tabella a:

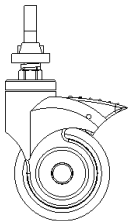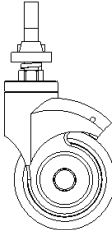N	Nome	Immagine	Specifiche	Q	Unità
1	Corpo principale		L620*P480*H960 mm	1	pz
2	Ruota con freno		Ruota da 5 pollici con freno	2	pz
3	Rotella senza freno		Ruota da 5 pollici senza freno	2	p



1.2 Rotelle Installazione dell'

Posizionare un cuscinetto protettivo e capovolgere il carrello dello strumento;


Rimuovere le rotelle, prima allentandole nella posizione corretta, quindi inserirle nel tubo e serrarle con una chiave esagonale interna.

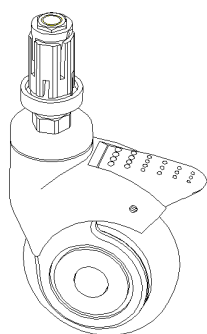


1

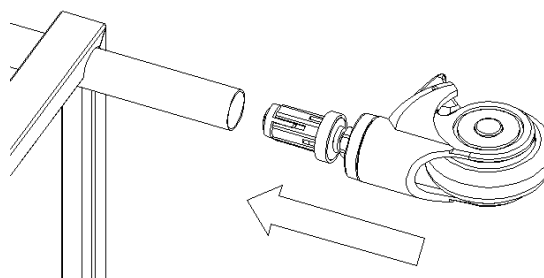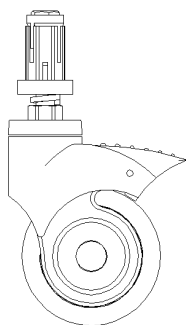

2

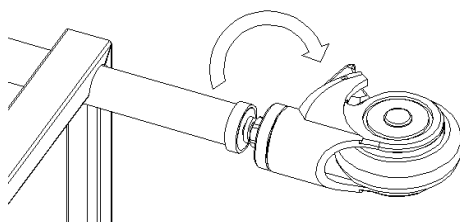

3

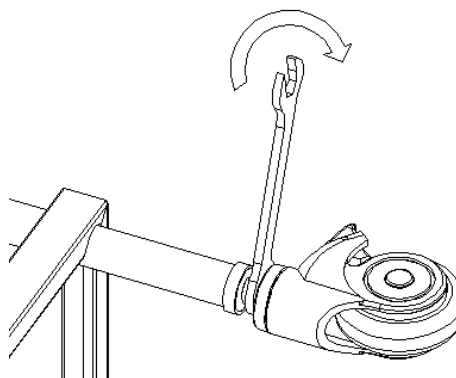

4

2. Metodo di utilizzo




1-Corpo principale 2 rotelle


Dimensioni carrello portastrumenti	Lunghezza	mm	620
	Larghezza		480
	Altezza del carrello dal suolo		960
Peso	Carico di lavoro sicuro	KG	100

2.1 Modalità d'uso delle ruote

2.1.1 Blocco delle ruote: dopo aver spinto il carrello nella posizione desiderata, premere il pulsante e bloccare la ruota quando si sente un "clic", come mostrato nella figura sottostante.

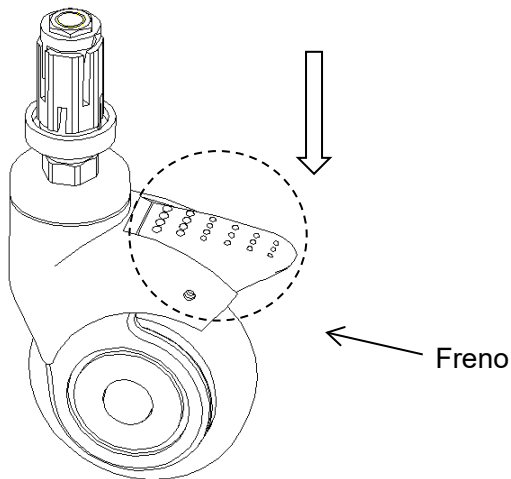

2.1.2 Sbloccare la rotella: sollevare il pulsante con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "cli c k".

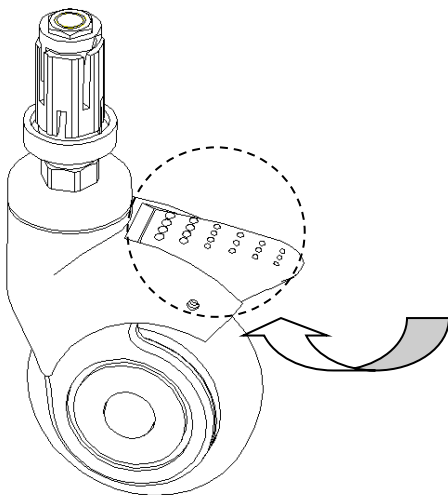

3. Esclusione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
Difficoltà nel muovere l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza aver rilasciato il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

4. Carrello portastrumenti - Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello in sicurezza, è necessario eseguire regolarmente controlli di sicurezza. Effettuare un'ispezione completa ogni sei mesi per assicurarsi che non vi siano parti allentate e che il carrello funzioni correttamente.

2. Quando il carrello porta strumenti raggiunge la fine della sua vita utile, le parti in metallo e plastica della culla possono essere riciclate.

3. Evitare di urtare la culla e di graffiare il tubo con oggetti appuntiti.

4. Se la struttura presenta macchie, si consiglia di pulirla con acqua, evitando l'uso di prodotti chimici alcalini o corrosivi per evitare la formazione di ruggine sulla superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle durante la frenata, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata mediante ispezione visiva. Alcuni fili di filo ritorto e altri accumuli possono avvolgersi attorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere rimontate e utilizzate.

8. Valutare se la rotella deve essere sostituita completamente in base al grado di usura. Dopo aver sostituito o installato la ruota, assicurarsi che il bullone e il dado dell'asse siano collegati in modo affidabile. Se possibile, utilizzare una rondella di sicurezza o un dado di bloccaggio.

9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello portastrumenti dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota alla volta per provare a spingere il carrello e verificare che il funzionamento dei freni di ciascuna ruota sia corretto. Se il funzionamento dei freni delle ruote non è corretto a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi riprovare il sistema

frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante delle ruote è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario verificare nuovamente il funzionamento dei freni delle ruote.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello portastrumenti viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.

2. Evitare di trasportare il carrello portastrumenti in modo affrettato, sottoponendolo a vibrazioni violente e proteggendolo dalla luce solare e dalla pioggia.

3. Il carrello portastrumenti deve essere conservato:

a) Temperatura ambiente: da -40°C ~ 70°C.

b) Umidità relativa: ≤ 95%.

c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Assistenza post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, che dovranno essere presentati alla nostra azienda in caso di richiesta di assistenza o manutenzione in garanzia.

2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un'assistenza tecnica e un servizio di manutenzione accurati e rapidi.

3. Non smontare il dispositivo interno di questo prodotto per evitare danni inutili. Se si riscontrano problemi di qualità che compromettono il funzionamento, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato.

4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona correttamente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda riparerà il prodotto gratuitamente per gli utenti.

5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO: SKH103-1 | RIF.: 319-SKH103-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Parco dimostrativo, città di Zhangjiagang,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Paesi Bassi



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia (Spagna)

**LOTTO:
HW25xxx**



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com