



Manual do utilizador

SKH103-1 **Carrinho para instrumentos**



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098

Índice

Introdução manual.....	2
1. Guia de instalação.....	3
1.1 Lista de acessórios padrão.....	3
1.2 Instalação dos rodízios.....	4
2. Método	5
2.1 Método de utilização	6
3. Exclusão de falhas	7
4. Manutenção do carrinho do instrumento	7
5. Embalagem, transporte, armazenamento.....	8
6. Serviço pós-venda.....	8

Introdução manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente os passos antes de instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.



- ▶ Este manual é aplicável ao carrinho de instrumentos SKH103-1. Ele contém o método de instalação, instruções de operação e pontos de verificação de manutenção.
- ▶ Os gráficos neste manual são apenas para referência dos utilizadores. Na utilização real, consulte o objeto real.
- ▶ Este manual do utilizador inclui a descrição, instruções, manutenção e parâmetros técnicos do produto.
- ▶ Em caso de dúvidas, entre em contacto com o centro de assistência pós-venda ou com o distribuidor.
- ▶ Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve ler e cumprir este manual.
- ▶ Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com a utilização e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão


Após abrir a caixa de embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa:

Tabela a:

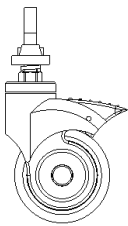
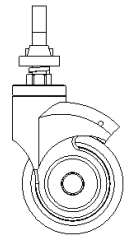
N.	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Corpo principal		L620*W480*H960mm	1	pc
2	Rodízio com travão		Rodízio de 5 polegadas com travão	2	pcs
3	Rodízio sem travão		Rodízio de 5 polegadas sem travão	2	unidades

1.2 Rodízios para instalação e e


Coloque uma almofada protetora e vire o corpo do carrinho do instrumento de cabeça para baixo;
Remova os rodízios, primeiro solte-os até a posição correta, depois insira-os no tubo e aperte-os com uma chave hexagonal interna.

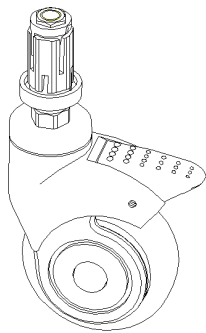


1

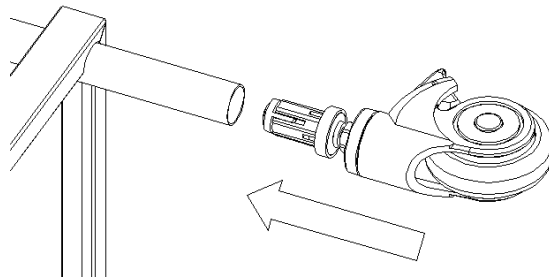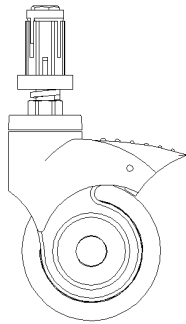

2

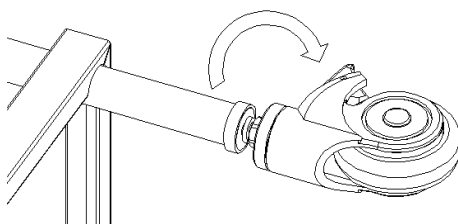

3

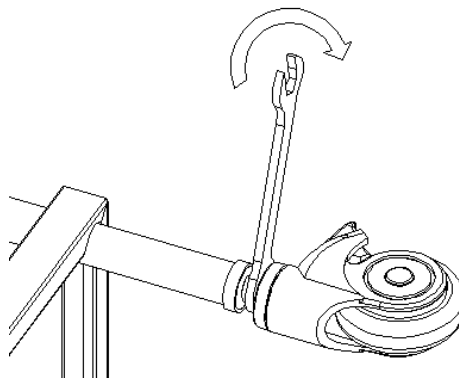

4

2. Método de utilização




1-Corpo principal 2 rodízios


Tamanho do carrinho para instrumentos	Comprimento	mm	62
	Largura		480
	Altura do carrinho acima do solo		96
Peso	Carga de trabalho segura	KG	10

2.1 Método de utilização dos rodízios

2.1.1 Travar o rodízio: Após empurrar o carrinho para a posição desejada, pressione o botão e trave o rodízio quando ouvir um "clique", conforme mostrado na figura abaixo.

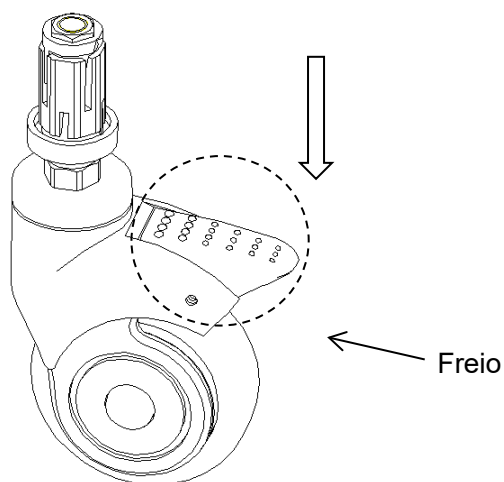

2.1.2 Desbloquear o rodízio: Levante o botão com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um "clique".

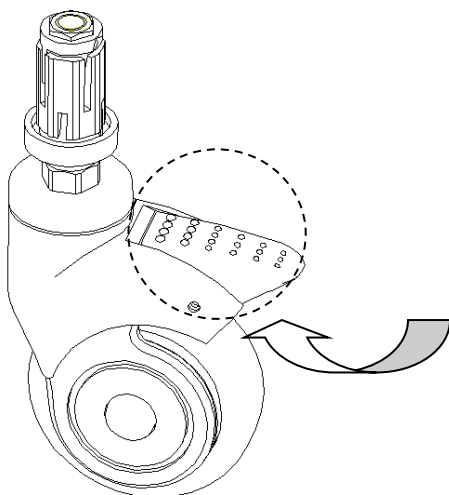

3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Dificuldade em mover todo o carrinho	1. O rodízio está bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Solte o travão 2. Substitua o rodízio

4. Manutenção do carrinho de instrumentos

1. Para utilizar o carrinho com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regularmente. Realize uma inspeção completa a cada seis meses para garantir que não há peças soltas nas conexões e que o carrinho funciona normalmente.

2. Quando o carrinho de instrumentos atingir o fim da sua vida útil, as peças metálicas e plásticas do berço podem ser recicladas.

3. Evite bater no berço e riscar o tubo do berço com objetos pontiagudos.

4. Se a estrutura apresentar manchas, sugerimos limpá-la com água, não use produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar, evitando ferrugem na superfície de aço inoxidável.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar batidas ou sobrecargas, o que pode causar danos aos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a travagem, pois isso causará danos ao sistema de travagem.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de tecido e outros acúmulos podem estar enrolados na roda, remova os parafusos e porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Julgue se o rodízio deve ser substituído por um novo de acordo com o desgaste. Após a substituição ou instalação da roda, certifique-se de que o parafuso e a porca do eixo estão bem fixados. Se possível, use uma arruela de pressão ou porca de segurança.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. Para um carrinho de instrumentos equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez para tentar empurrar o carrinho e verificar se o desempenho do travão de cada rodízio está bom. Se a função dos travões do rodízio falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e teste novamente o

sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travão do rodízios estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios precisa de ser testado novamente.

5. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho de instrumentos é feita de acordo com o contrato ou a norma do produto.

2. Evite pressa, vibrações violentas e proteja do sol e da chuva durante o transporte do carrinho de instrumentos.

3. O carrinho de instrumentos deve ser armazenado:

a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.

b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.

c) Pressão atmosférica: 500 hPa $\sim$ 1060 hPa.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde os ficheiros que acompanham a máquina e as faturas deste produto de forma adequada, pois será necessário apresentá-los quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.

2. Se houver algum problema durante a utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que possamos prestar-lhe um serviço de assistência técnica e manutenção rápido e preciso.

3. Não desmonte o dispositivo interno deste produto por conta própria para evitar danos desnecessários. Se verificar que a utilização está a ser afetada devido a problemas de qualidade, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou o nosso revendedor autorizado.

4. A partir da data de compra, se estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa reparará o produto gratuitamente para os utilizadores.

5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKH103-1 | REF.: 319-SKH103-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

N.º 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Província de Jiangsu, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Países Baixos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, València (Espanha)

**LOTE:
HW25xxx**



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com