



Bedienung sanleitung

SKR-AT670 Farbig lackiert Anästhesiewagen

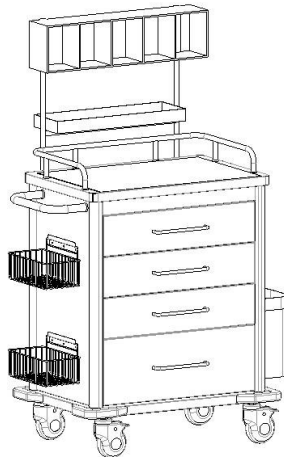






Bild nur zur Referenz

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:

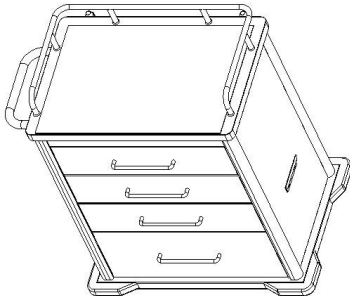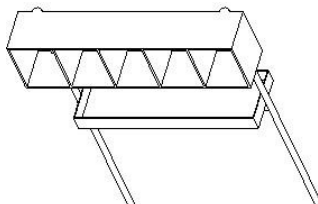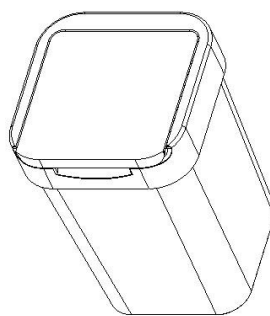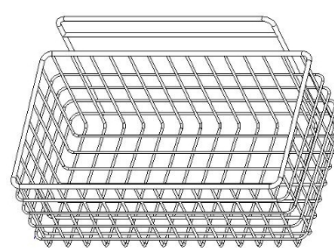Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Hauptteil		L670 × B450 × H880 mm	1	Stück
2	Anästhesiebox		Länge 600 mm/Gesamt 5 Gitter	1	Stück
3	Abfallbehälter (mit Deckel)		L180*B180*H265 mm	1	Stück
4	Drahtkorb		L180 × B180 × H265 mm	2	Stück








5	Lenkrolle mit Bremse		4-Zoll-Lenkrolle mit Bremse	2	Stück
6	Lenkrolle ohne Bremse		4-Zoll-Lenkrolle ohne Bremse	2	Stück
7	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Set

Tabelle a.1

Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Federscheibe		$\Phi 12 * \Phi 19,72 * H3,54$ mm	4	Stück

1.2 Montage der Rollen




Legen Sie eine Schutzunterlage auf und stellen Sie den Wagen auf den Kopf.
Nehmen Sie die $\Phi 12$ -Federscheibe aus der Schraubenverpackung, nehmen Sie die Rollen heraus, setzen Sie sie in das Rohr ein und ziehen Sie sie mit einem Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn fest.

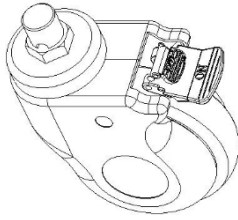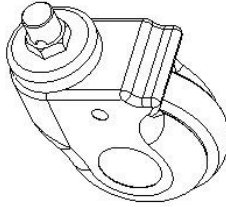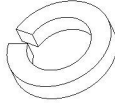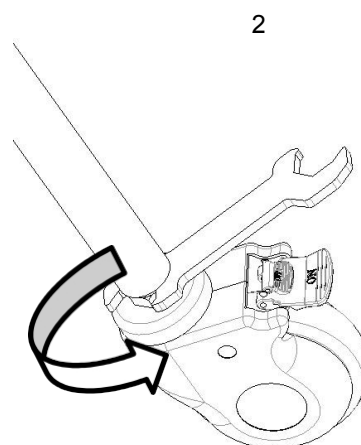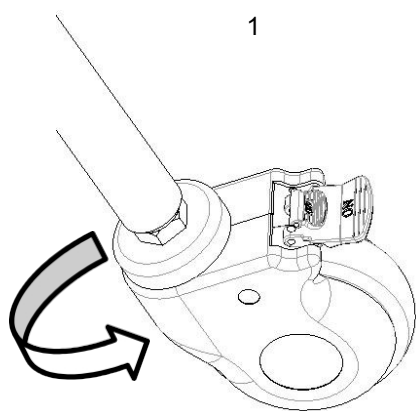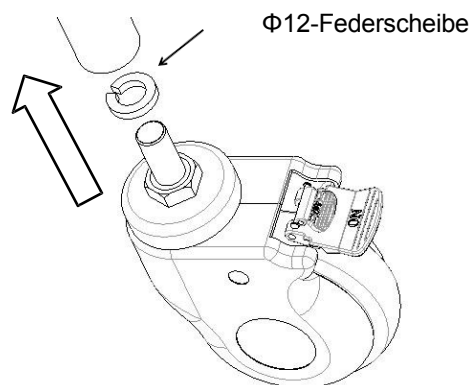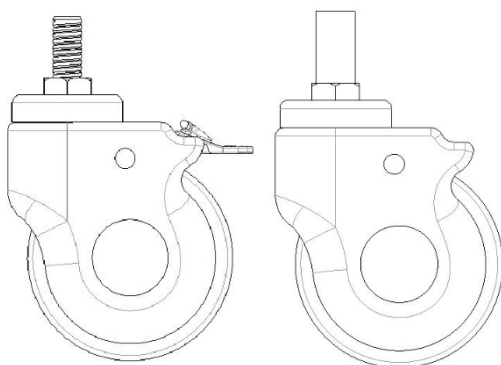




3

4


1.3 Einbau eines Drahtkorbs

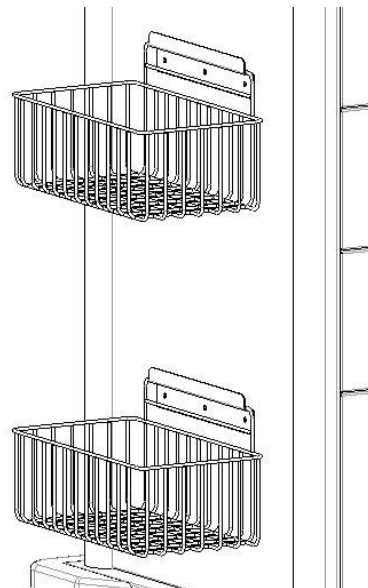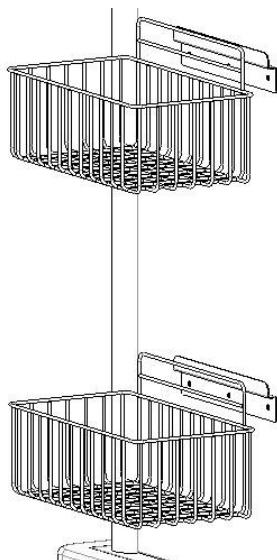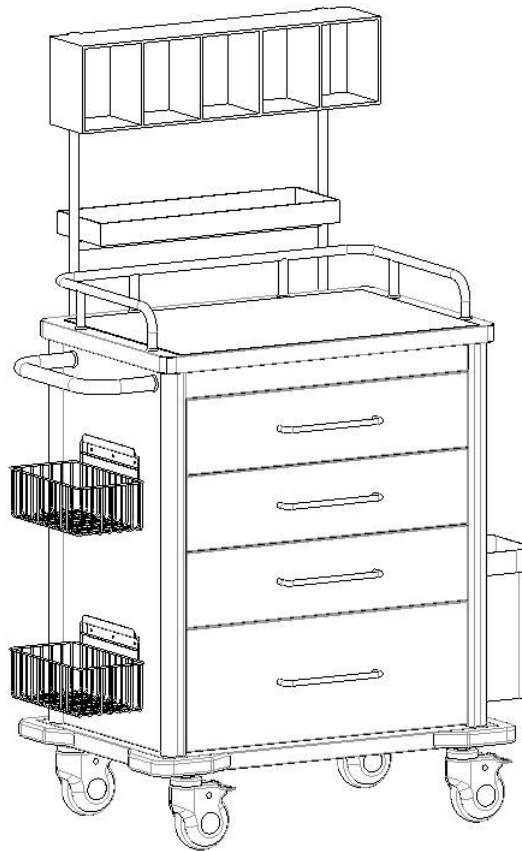

1.4 Installation des Abfallbehälters

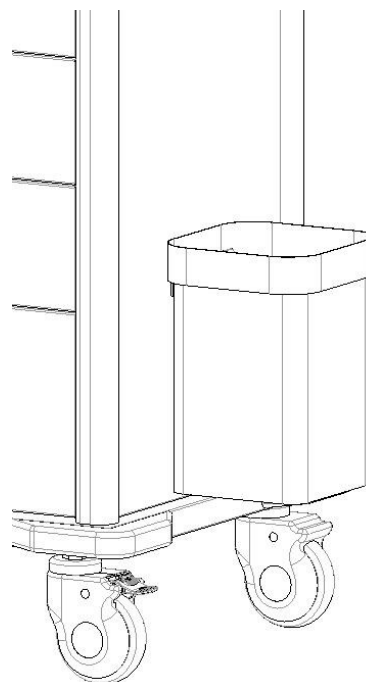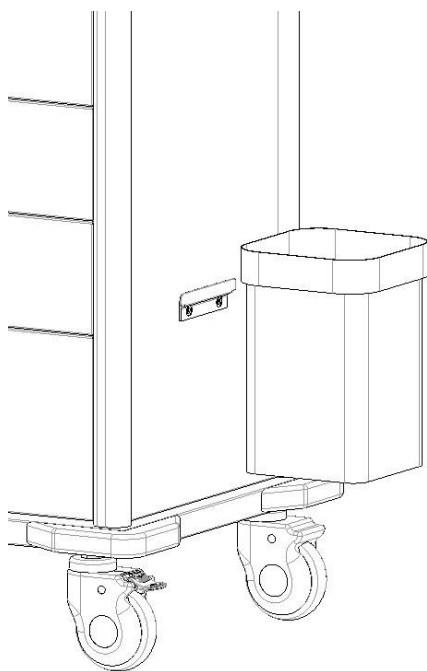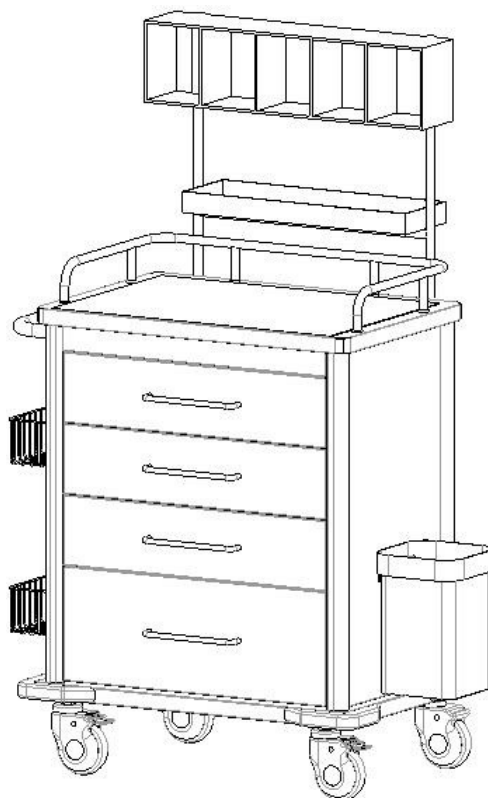

1. Verwendungsmethode

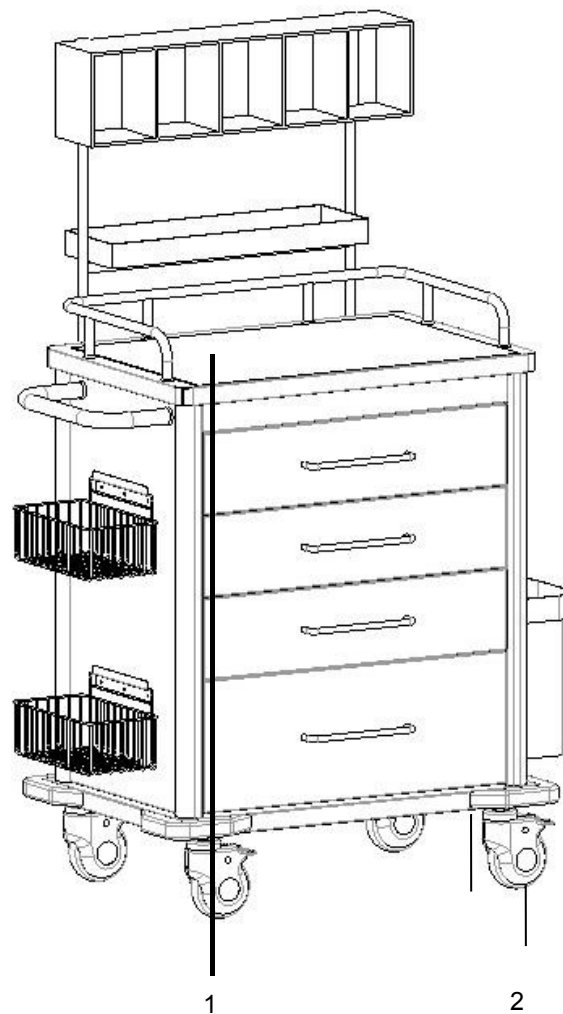


1-farbig lackierter Anästhesiewagen 2 Rollen


Wagenabmessungen	Länge	mm	670
	Breite		450
	Die Höhe des Wagens über dem Boden		960
Gewicht	Sichere Arbeitslast	kg	50

2.1 Verwendung der Rollen

Rolle arretieren: Nachdem Sie den Anästhesiewagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf den ON-Knopf und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

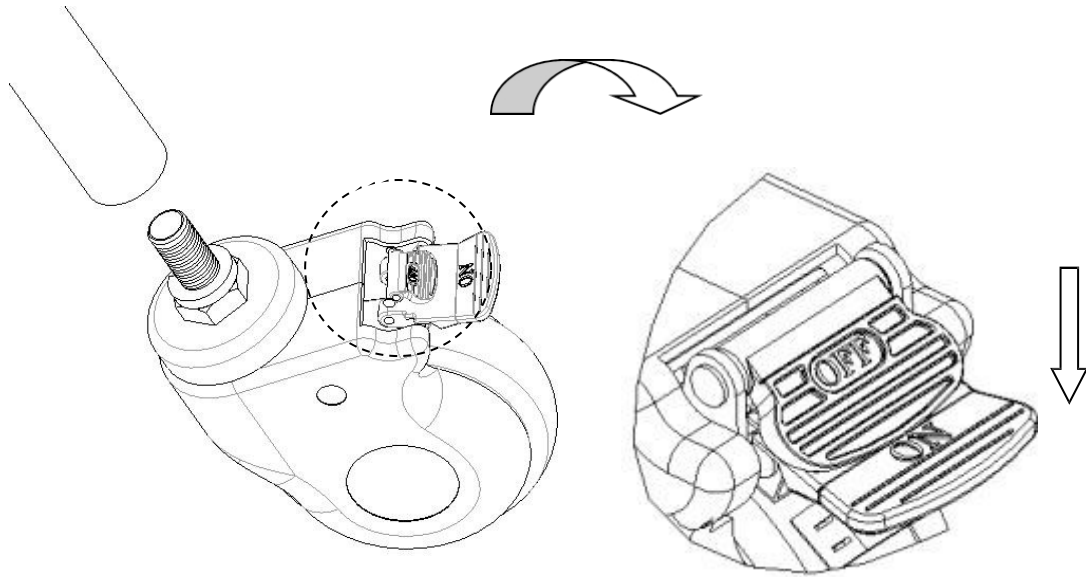

Rolle entriegeln: Drücken Sie mit dem Fuß auf den OFF-Knopf und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

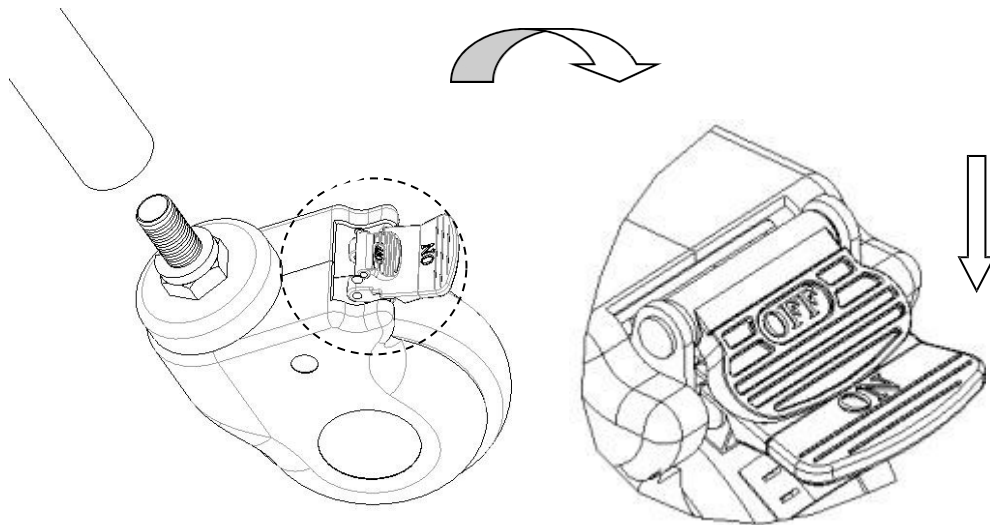

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Der gesamte Wagen lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1 2. Rolle austauschen, 1.2 überprüfen

4. Wartung

1. Um den Anästhesiewagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen am Anästhesiewagen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal funktionieren.
2. Wenn der Rahmen des Anästhesiewagens altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht ist, können die Metallteile des Anästhesiewagens und die Kunststoffteile des Rahmens recycelt werden.
3. Vermeiden Sie während des Gebrauchs Kratzer an der Blende durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.
4. Wenn die Verkleidung versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Anästhesiewagens keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.
5. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, da dies zu Schäden an den Rollen führen kann.
6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zu bremsen, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
7. Der Verschleiß der Reifenoberfläche kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Es können sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
8. Je nachdem, ob die Rollen aufgrund der Nutzungsdauer oder aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssen, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen und gut verbunden sind. Verwenden Sie dazu nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern.
9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Anästhesiewagen mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, den Anästhesiewagen zu schieben, und gleichzeitig überprüfen können, ob die Bremsleistung jeder Rolle einwandfrei ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Wagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie hastiges Herausziehen, heftige Erschütterungen und schützen Sie den Wagen während des Transports vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Wagen sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
 - c) Atmosphärischer Druck: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen und Wartungsarbeiten für das Produkt durchführt.
2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung, wenn das Produkt aufgrund der korrekten Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen defekt oder beschädigt ist.
4. Ab dem Kaufdatum wird das Produkt bei tatsächlicher Beschädigung oder Funktionsstörung aufgrund von Qualitätsproblemen innerhalb eines Jahres vom Unternehmen kostenlos repariert.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-AT670 | REF.: 319-SKR-AT670

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

STOCK CODE: 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com