

Bedienungs anleitung

SKR-CT232 Medizinischer Rollwagen



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098

1. Montage der Rollen

Richten Sie die Radschraube an der Befestigungsöffnung an der Unterseite des Wagens aus und setzen Sie das Rad ein. Setzen Sie die Schraube in die Befestigungsöffnung ein und ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.



1




2




3

2. Verwendung der Rollen

Rolle arretieren: Nachdem Sie den Anästhesiewagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf den ON-Knopf und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

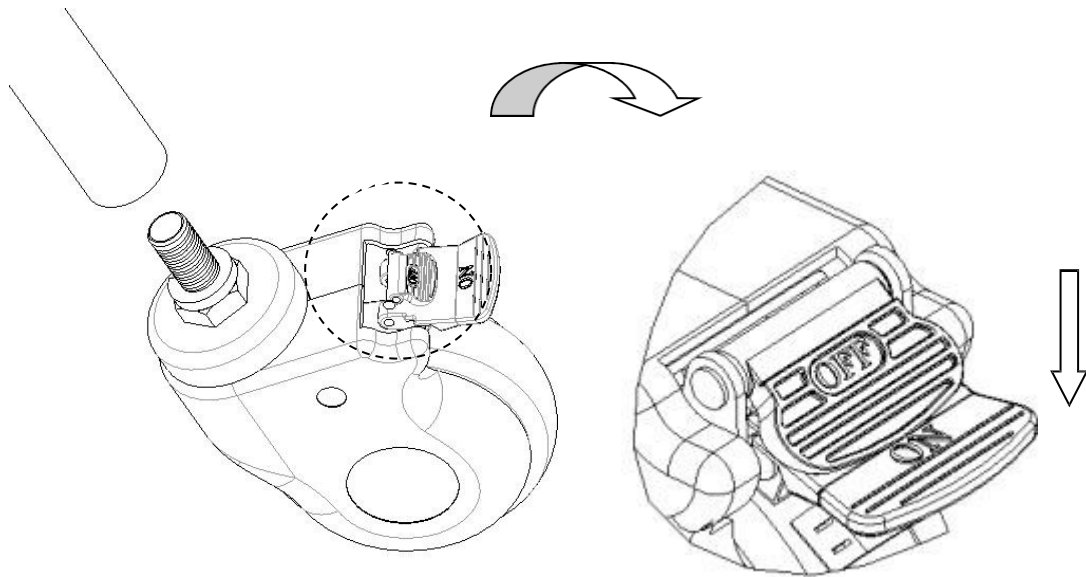

Entriegeln der Rollen: Drücken Sie mit dem Fuß auf den OFF-Knopf und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

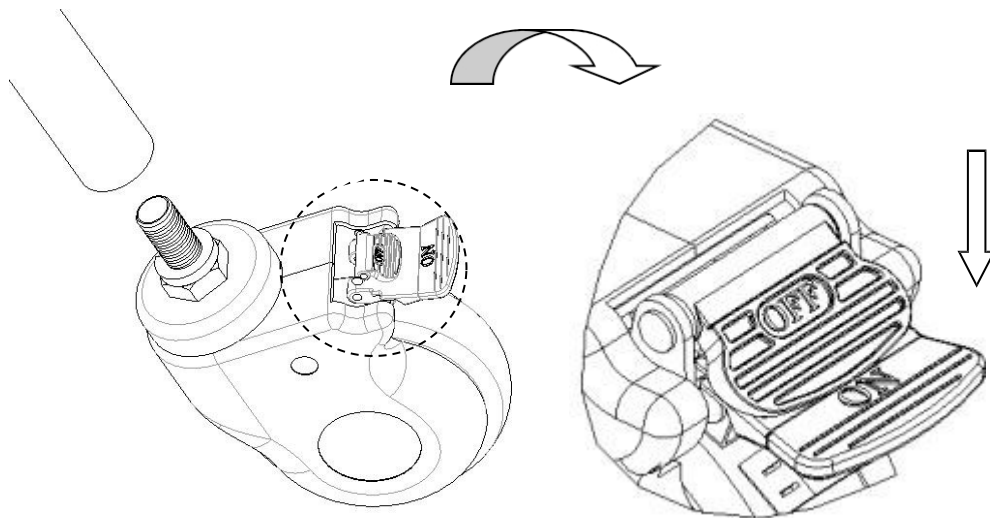

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Behebungsmaßnahmen
Schwierigkeiten beim Bewegen des gesamten Wagens	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1 2. Rolle austauschen, 1.2 überprüfen

4. Wartung

1. Um den Anästhesiewagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen am Anästhesiewagen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal funktionieren.

2. Wenn der Rahmen des Anästhesiewagens altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht ist, können die Metallteile des Anästhesiewagens und die Kunststoffteile des Rahmens recycelt werden.

3. Vermeiden Sie während des Gebrauchs Kratzer an der Blende durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.

4. Wenn die Verkleidung versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Anästhesiewagens keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.

5. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, da dies zu Schäden an den Rollen führen kann.

6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zu bremsen, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.

7. Der Verschleiß der Reifenoberfläche kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Es können sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

8. Je nachdem, ob die Rollen aufgrund der Nutzungsdauer oder aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssen, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen und gut verbunden sind. Verwenden Sie dazu nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern.

9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Anästhesiewagen mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, den Anästhesiewagen zu schieben, um zu überprüfen, ob die Bremsleistung jeder Rolle einwandfrei ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Wagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie hastiges Herausziehen, heftige Erschütterungen und schützen Sie den Wagen während des Transports vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Wagen sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: +5 °C ~ +40 °C .
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.
 - c) Atmosphärischer Druck: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten für das Produkt erbringt.
2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung, wenn das Produkt aufgrund der korrekten Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen defekt oder beschädigt ist.
4. Ab dem Kaufdatum wird das Produkt bei tatsächlicher Beschädigung oder Funktionsstörung aufgrund von Qualitätsproblemen innerhalb eines Jahres vom Unternehmen kostenlos repariert.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-CT232 | REF.: 319-SKR-CT232

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





MODEL:SKR-CT232 | REF.: 319-SKR-CT232

CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /

CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:HW26xxx



2026-xx-xx