

SAIKANG MEDICAL /
DEKII IT7EDUANIDBI I/LI



Benutzerhandbuch

SKR-CT600 Medizin-Wagen



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

STOCK CODE: 870098

1. Einbau von Rollen

Richten Sie den Radbolzen auf das Montageloch an der Unterseite des Wagens aus und setzen Sie das Rad ein. Setzen Sie die Schraube in das Montageloch ein und ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.



1




2




3

2. Art der Verwendung der Rollen

Verriegeln Sie das Fahrgestell: Nachdem Sie den Anästhesiewagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf den EIN-Knopf und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein "Klick" hören, wie in der Abbildung unten dargestellt.

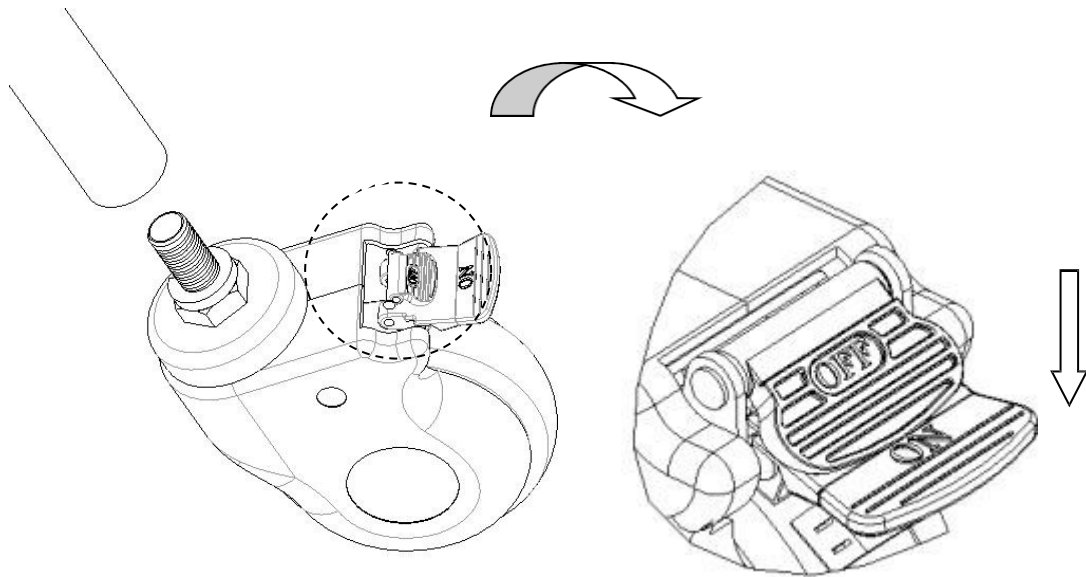

Entriegeln Sie die Lenkrolle: Drücken Sie mit dem Fuß auf den AUS-Knopf und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein "Klick" hören.

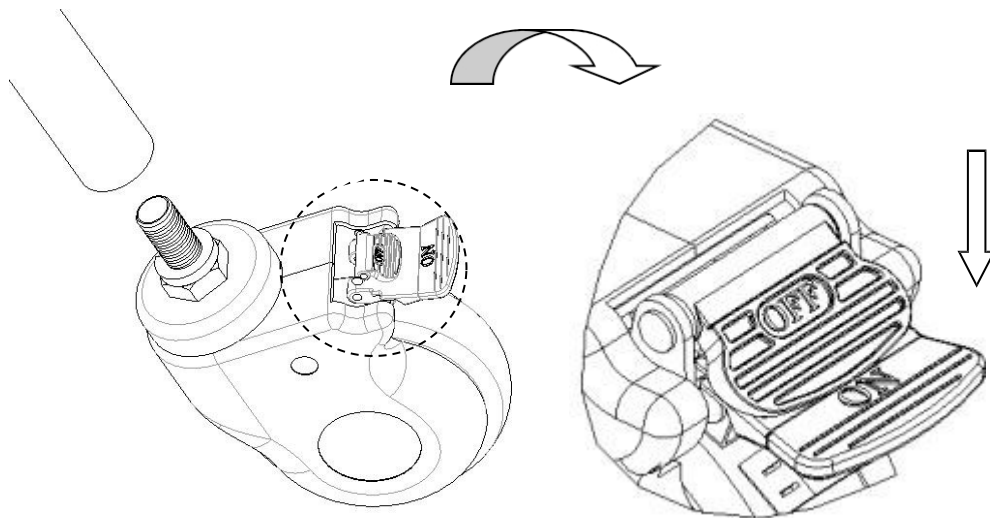

3. Ausschluss von Fehlern

Häufige Ausfälle	Wahrscheinliche Gründe	Methoden ausschließen
Schwierig, den ganzen Wagen zu bewegen	1. Der Nachlauf wird blockiert, ohne dass die Bremse gelöst wird 2. Der Werfer ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, prüfen Sie 2.1 2. Ersetzen Sie die Lenkrolle, prüfen Sie 1.2

4. Wartung

1. Um den Anästhesiewagen sicher zu benutzen, ist es notwendig, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen am Anästhesiewagen durchzuführen. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal sind.
2. Wenn der Anästhesiewagenrahmen altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht, können die Metallteile des Anästhesiewagens und die Kunststoffteile des Anästhesiewagenrahmens recycelt werden.
3. Vermeiden Sie es, die Platte während des Gebrauchs mit scharfkantigen Geräten oder Messern zu zerkratzen, und reinigen Sie sie häufig, um sie sauber und trocken zu halten.
4. Sollte die Platte versehentlich mit Flecken verschmutzt sein, empfiehlt es sich, sie zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Anästhesiewagens keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, da diese die Oberfläche aus rostfreiem Stahl rosten lassen würden.
5. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastungen zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen.
6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen mit Gewalt abzubremsen, da dies zu Schäden an der Bremsanlage führt.
7. Die Abnutzung der Reifenoberfläche des Rades kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, säubern Sie die Verunreinigungen und prüfen Sie, ob das Radlager beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
8. Je nach Nutzungsdauer und Abnutzung der Rolle können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsschrauben und -muttern richtig zusammengesetzt und verbunden sind. Wenn möglich, verwenden Sie eine Sicherungsscheibe oder Sicherungsmuttern, um Ihnen bei diesem Prozess zu helfen.
9. Bei Rollen, die mit Bremsen ausgestattet sind, muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen richtig funktionieren. Prüfen Sie die Bremsen einmal am Tag oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Anästhesiewagen, der mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils nur eine Bremsrolle blockiert werden, so dass Sie versuchen können, den Anästhesiewagen zu schieben und zu prüfen, ob eine der Bremsen der einzelnen Rollen funktioniert. Sollte die Funktion der Bremse aufgrund von Abnutzung oder Beschädigung der Räder nicht mehr gegeben sein, tauschen Sie die Räder sofort aus und prüfen Sie anschließend erneut das Bremssystem.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung oder an einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Jedes Mal, wenn die Bremsen ersetzt werden, muss die Bremsleistung der Rollen erneut getestet werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Wagens erfolgt gemäß dem Vertrag oder der Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Wagens überstürzte Bewegungen, starke Vibrationen und schützen Sie ihn vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Wagen sollte gelagert werden:
 - a) Umgebungstemperatur: +5 °C~ +40 .°C
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85%.
 - c) Atmosphärischer Druck: 70 kPa~ 106 kPa.

6. Service nach dem Verkauf

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen für dieses Produkt ordnungsgemäß auf. Sie müssen diese Unterlagen vorlegen, wenn das Unternehmen die Garantie und Wartung für das Produkt durchführt.
2. Sollte es bei der Nutzung Probleme geben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen, damit wir Ihnen rechtzeitig genaue und schnelle technische Unterstützung und Wartungsdienste anbieten können.
3. Wenn das Produkt ab dem Verkaufsdatum aufgrund der korrekten Installation und Verwendung gemäß der Spezifikation kaputt oder beschädigt ist, erhält das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und einen lebenslangen Wartungsservice mit dem "Zertifikat" oder der Rechnung.
4. Sollte das Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf beschädigt werden oder aufgrund von Qualitätsproblemen nicht normal funktionieren, bietet das Unternehmen den Nutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SKR-CT600 | REF.: 319-SKR-CT600

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spain)

LOT:

