



Benutzer handbu ch

SKR-CT670-1 Farbig lackiert Transportwagen



Bild nur zur Veranschaulichung

Inhalt

Manuelle Einführung.....	2
1. Installationsanleitung.....	3
1.1 Liste des Standardzubehörs.....	3
1.2 Montage der Rollen	5
2. Verwendungsmethode	6
2.1 Verwendungsmethode der Rollen.....	7
2.2 Verwendungsmethode für Eimer.....	8
3. Fehlerausschluss.....	9
4. Wartung	9
5. Verpackung, Transport, Lagerung	10
6. Kundendienst.....	10

Manuelle Einführung

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Verwendung genau. Wir verlangen von allen Benutzern, dass sie mit der Bedienungsanleitung und allen Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind.





- ▶ Diese Anleitung gilt für den farbig lackierten Behandlungswagen SKR-CT670-1. Sie enthält die Installationsmethode, Bedienungsanweisungen und Wartungs-Checkpunkte.
- ▶ Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für die Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.
- ▶ Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technischen Parameter des Produkts.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler.
- ▶ Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.
- ▶ Abgesehen von einigen unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs


Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind:

Tabelle a:

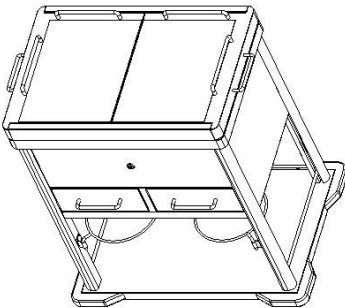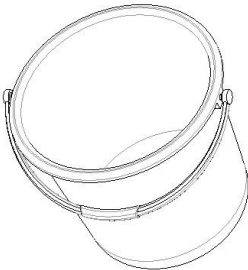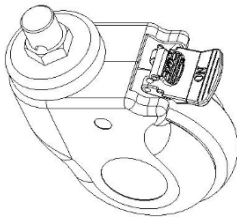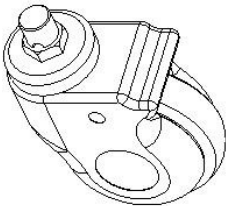Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Hauptteil		L 670 × B 450 × H 920 mm	1	Stück
2	Schaufel		φ233*205 mm	2	Stück
3	Lenkrolle mit Bremse		4-Zoll-Rolle mit Bremse	2	Stück
4	Lenkrolle ohne Bremse		4-Zoll-Lenkrolle ohne Bremse	2	Stück




4	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Set
---	----------	---	-------------------	---	-----

Tabelle a.1

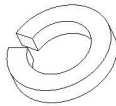
Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Federscheibe		$\Phi 12 \times \Phi 19,72 \times H3,54 \text{ mm}$	4	Stück

1.2 Montage der Rollen

Legen Sie eine Schutzunterlage aus und stellen Sie den Wagenkörper auf den Kopf.
Nehmen Sie die $\Phi 12$ -Federscheibe aus der Schraubenpackung, nehmen Sie die Rollen heraus,
setzen Sie sie in das Rohr ein und ziehen Sie sie mit einem Innensechskantschlüssel im
Uhrzeigersinn fest.

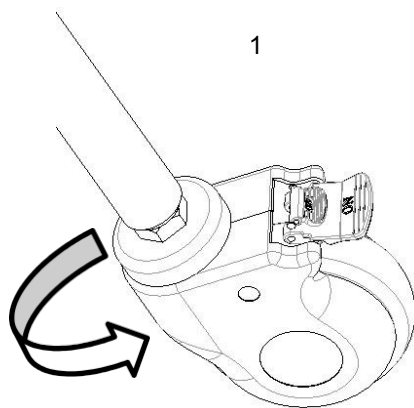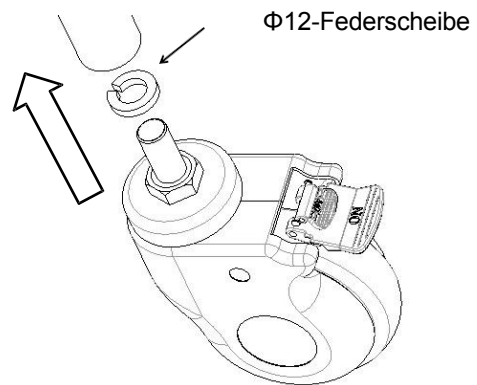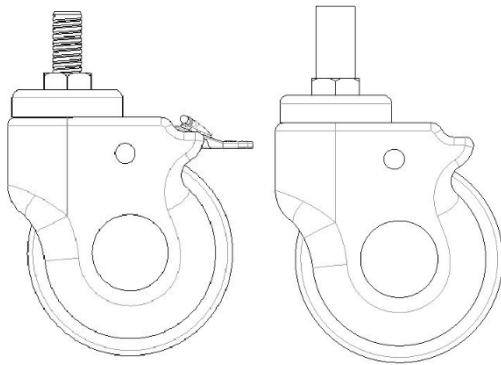

1

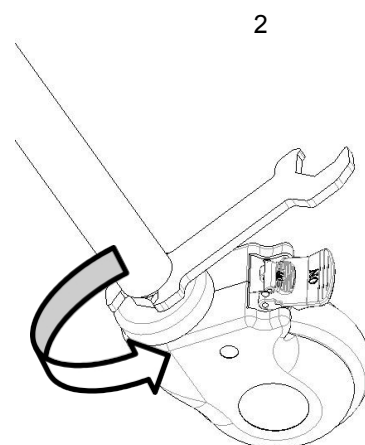

2

3

4

2. -Methode verwenden




1-farbig lackierter Behandlungswagen 2-Rollen


Wagen-Größe	Länge	mm	670
	Breite		450
	Die Höhe des Wagens über dem Boden		950
Gewicht	Sichere Arbeitslast	kg	50

2.1 Verwendungsmethode der Rollen von

Feststellen der Rolle: Nachdem Sie den Behandlungswagen an die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste „ON“ und stellen Sie die Rolle fest, sobald Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

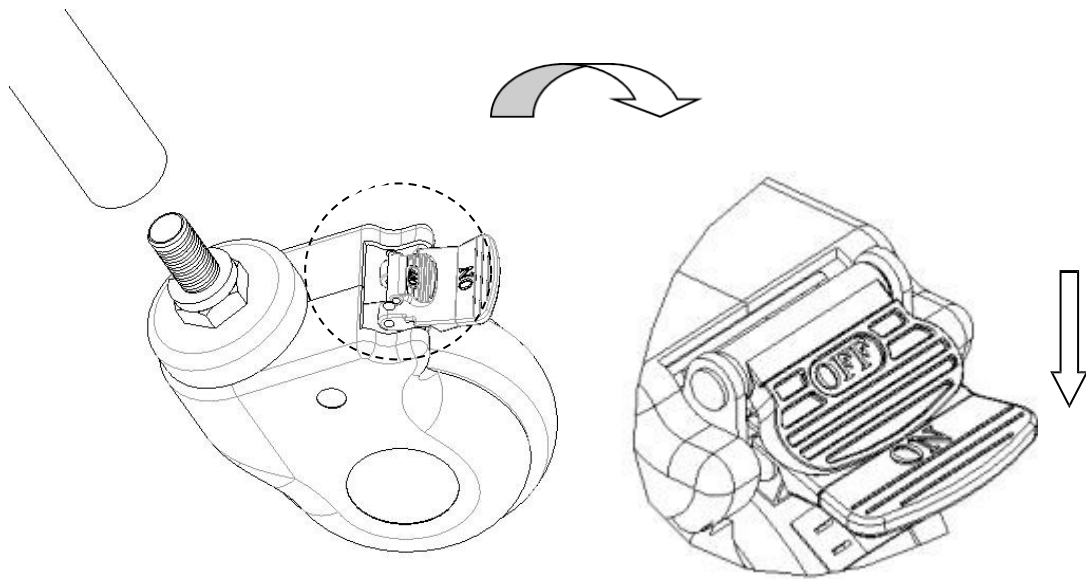


Entriegeln der Rolle: Drücken Sie mit dem Fuß auf die OFF-Taste und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

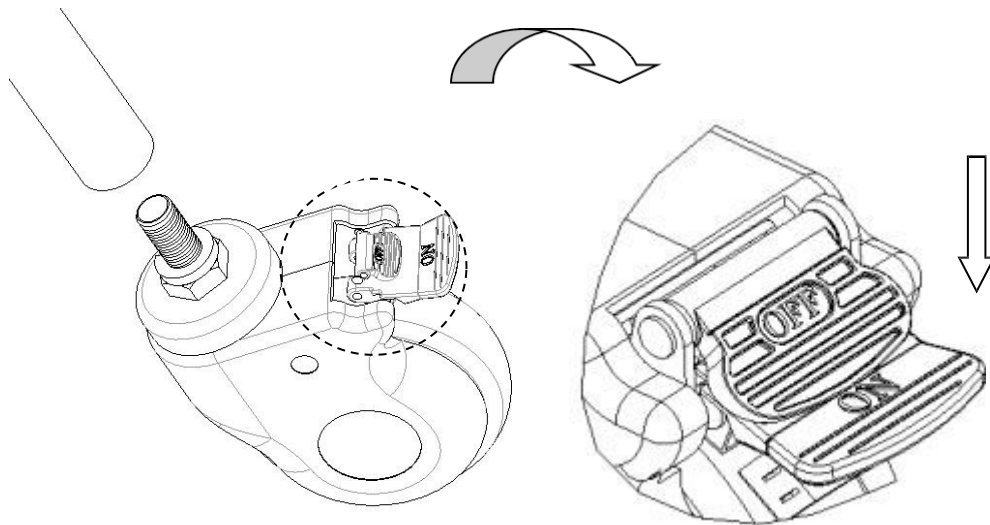

2.1 Verwendung der Eimer

Drehen Sie den Kielbügel und setzen Sie die Eimer ein.

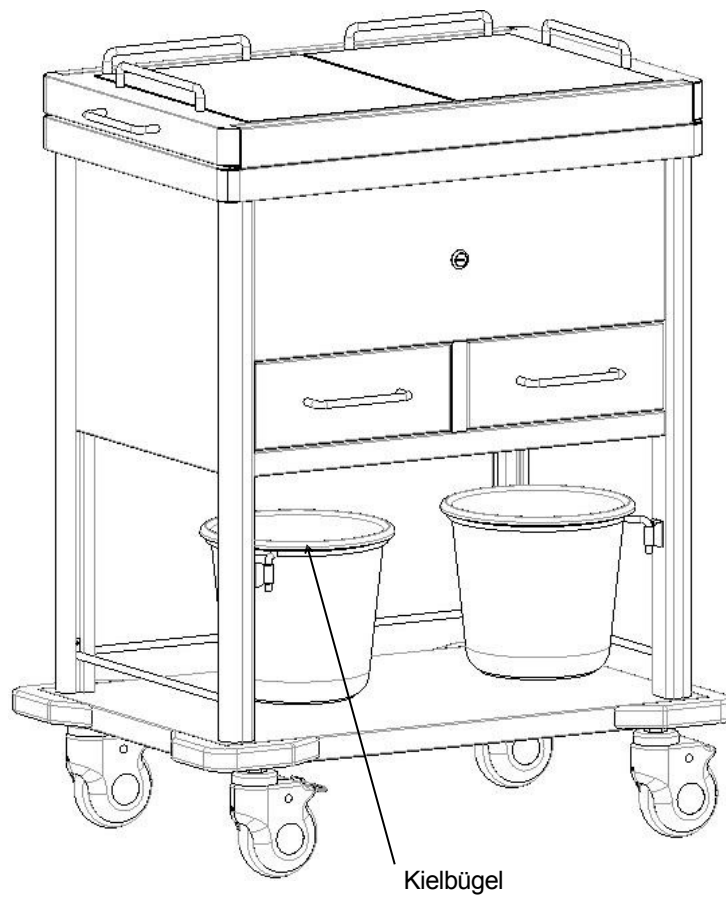

3.Fehler ausschluss

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Ausschlussmethoden
Schwierigkeiten beim Bewegen des gesamten Wagens	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1 2. Rolle austauschen, siehe 1.2

4. Wartung

- 1.Um den Behandlungswagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßige Sicherheitsinspektionen am Behandlungswagen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal arbeiten.
- 2.Wenn der Rahmen des Behandlungswagens altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht ist, können die Metallteile des Behandlungswagens und die Kunststoffteile des Rahmens recycelt werden.
- 3.Vermeiden Sie während des Gebrauchs Kratzer auf der Verkleidung durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.
- 4.Wenn das Bedienfeld versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, es zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Behandlungswagens, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.
- 5.Überprüfen Sie regelmäßig die Rollen, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, da dies zu Schäden an den Rollen führen kann.
- 6.Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
- 7.Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Es kann vorkommen, dass sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad gewickelt haben. Entfernen Sie in diesem Fall die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie es von den Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
- 8.Um zu beurteilen, ob die Rolle aufgrund der Nutzungsdauer und Abnutzung ausgetauscht werden muss, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern gut zusammenpassen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.
- 9.Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Behandlungswagen mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, den Behandlungswagen zu schieben, und gleichzeitig überprüfen können, ob die Bremsleistung jeder Rolle gut ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt,

ersetzen Sie die Räder sofort und testen Sie das Bremssystem erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Bei jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung von

1. Die Verpackung des Wagens erfolgt gemäß dem Vertrag oder der Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Wagens Stürze, starke Erschütterungen und setzen Sie ihn keiner Sonneneinstrahlung und keinem Regen aus.
3. Der Wagen sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: -40 °C bis +70 °C.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 %.
 - c) Atmosphärischer Druck: 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Kundendienst service

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf, da Sie diese vorlegen müssen, wenn das Unternehmen Garantieleistungen und Wartungsarbeiten für das Produkt durchführt.
2. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support sowie Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Ab dem Kaufdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung, wenn das Produkt aufgrund der korrekten Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen defekt oder beschädigt ist.
4. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, bietet das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: SKRCT670-1 | REF.: 319-SKRCT670-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO
/ MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Nr. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Provinz Jiangsu, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Einheit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,
46980, Paterna, Valencia (Spanien)



LOS: HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com