



Bedienungsanleitung

SKR-ET085 Notfallwagen



Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

ARTIKELNUMMER: 870098

1. Montage der Rollen

Richten Sie die Radschraube auf die Befestigungsbohrung an der Unterseite des Wagens aus und setzen Sie das Rad ein. Führen Sie die Schraube in die Befestigungsbohrung ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.



1




2




3

2. Verwendung der Rollen

Feststellen der Rolle: Nachdem Sie den Anästhesiewagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß die ON-Taste und stellen Sie die Rolle fest, sobald Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

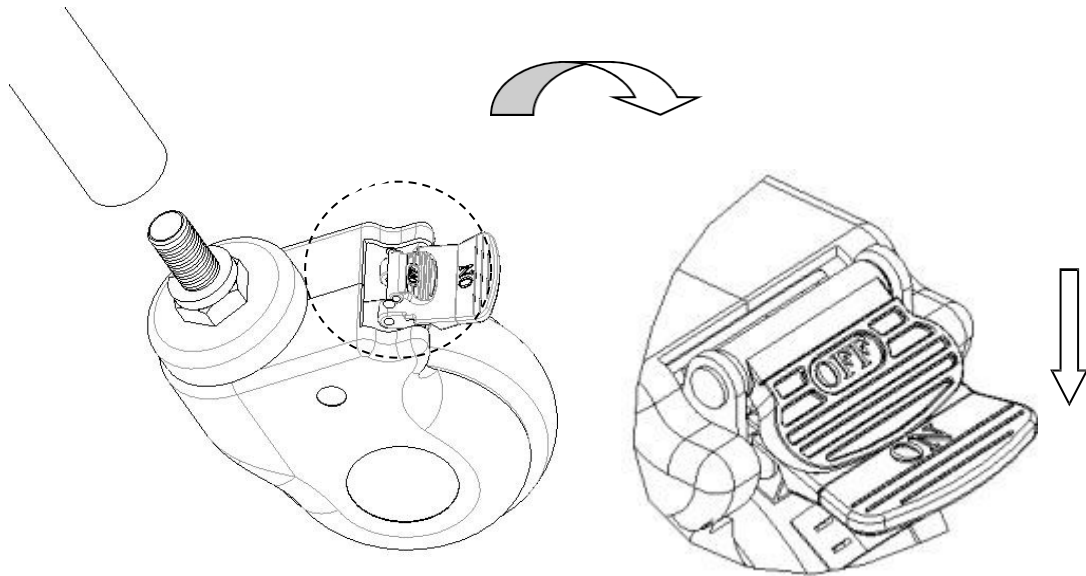

Entriegeln der Rolle: Drücken Sie die OFF-Taste mit dem Fuß und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

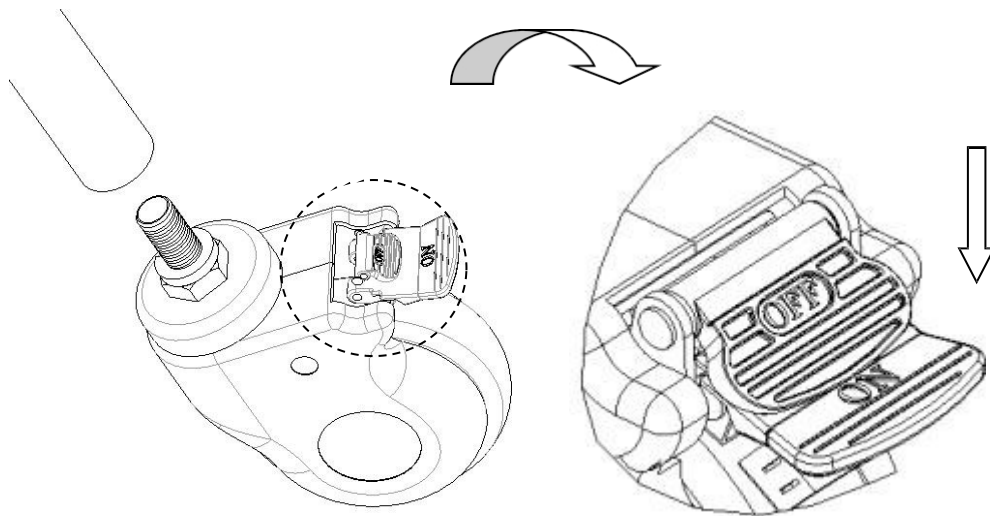

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Methoden zur Fehlerbehebung
Es ist schwierig, den gesamten Wagen zu bewegen	1. Die Rolle ist blockiert, ohne dass die Bremse gelöst wurde 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, siehe 2.1 2. Ersetzen Sie die Rolle, siehe 1.2

4. Wartung

1. Um den Anästhesiewagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsinspektionen am Anästhesiewagen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, ihn alle sechs Monate zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen nicht locker sind und alle Funktionen normal arbeiten.
2. Wenn der Rahmen des Anästhesiewagens altert und eine bestimmte Nutzungsdauer erreicht hat, können die Metallteile des Anästhesiewagens und die Kunststoffteile des Anästhesiewagenrahmens recycelt werden.
3. Vermeiden Sie es, die Verkleidung während des Gebrauchs mit spitzen Gegenständen oder Messern zu zerkratzen, und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.
4. Sollte die Oberfläche versehentlich verschmutzt werden, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Anästhesiewagens keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.
5. Überprüfen Sie regelmäßig die Rollen, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, da dies zu Schäden an den Rollen führen kann.
6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zu bremsen, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
7. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades lässt sich durch eine Sichtprüfung feststellen. Da sich unter Umständen Fadenreste und andere Ablagerungen um das Rad gewickelt haben, sollten Sie die Schrauben und Muttern des Rades lösen, die Rückstände entfernen und prüfen, ob das Radlager beschädigt ist. Sind die Teile unbeschädigt, können sie wieder zusammengebaut und weiterverwendet werden.
8. Entscheiden Sie anhand der Nutzungsdauer und des Verschleißes, ob die Rolle ausgetauscht werden muss. Sie können die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsen, Schrauben und Muttern fest angezogen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.
9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Anästhesiewagen, der mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, wodurch Sie versuchen können, den Anästhesiewagen zu schieben, und gleichzeitig überprüfen können, ob die Bremsleistung jeder einzelnen Rolle einwandfrei ist. Sollte die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigungen an den Rädern ausfallen, ersetzen Sie die Räder unverzüglich und testen Sie das Bremssystem anschließend erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Bei jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Transportwagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie beim Transport des Wagens Stöße, starke Erschütterungen sowie Sonneneinstrahlung und Regen.
3. Der Wagen sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.
 - c) Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Unterlagen und Rechnungen für dieses Produkt sorgfältig auf. Sie müssen diese Unterlagen vorlegen, wenn das Unternehmen Garantie- und Wartungsarbeiten am Produkt durchführt.
2. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah präzisen und schnellen technischen Support sowie Wartungsleistungen anbieten können.
3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie sowie lebenslanger Wartungsservice, sofern es bei korrekter Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen defekt oder beschädigt ist und Sie das „Zertifikat“ oder die Rechnung vorlegen können.
4. Sollte das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsmängeln tatsächlich beschädigt sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, bietet das Unternehmen den Nutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-ET085 | REF.: 319-SKR-ET085

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIFB97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com