



# Manual do utilizador

## SKR-ET085 Carrinho de emergência



Imagem apenas para referência

## 1. Instalação dos rodízios

Alinhe o parafuso da roda com o orifício de montagem na parte inferior do carrinho e insira a roda. Insira o parafuso no orifício de montagem e aperte-o no sentido horário.



1




2




3

## 2. Método de utilização dos rodízios

**Bloqueie o rodízio:** Depois de empurrar o carrinho de anestesia para a posição desejada, pressione o botão ON com o pé e bloqueie o rodízio quando ouvir um “clique”, conforme mostrado na figura abaixo.

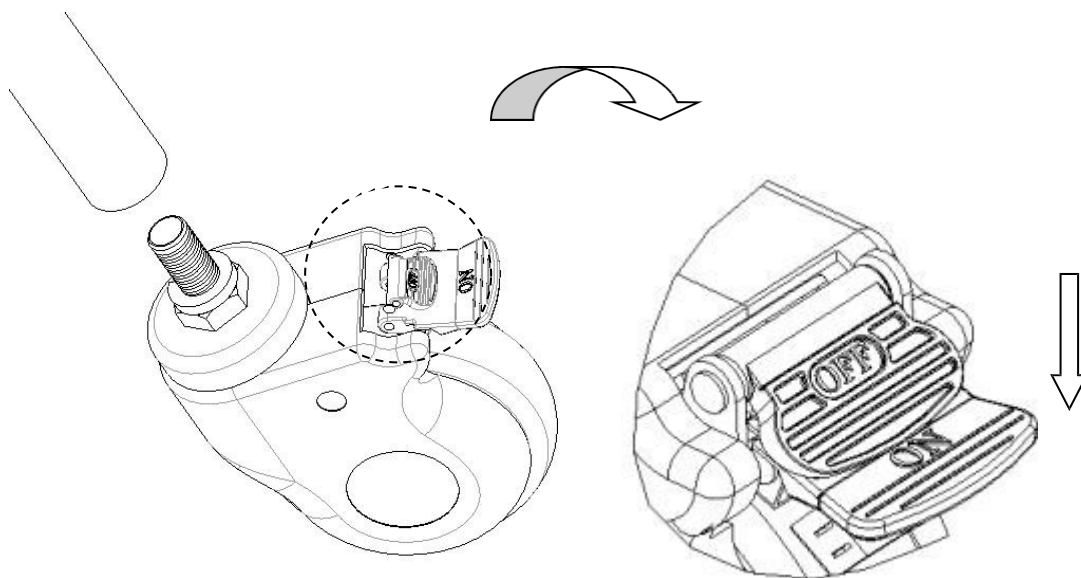

**Desbloquear o rodízio:** Pressione o botão OFF com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um “clique”.

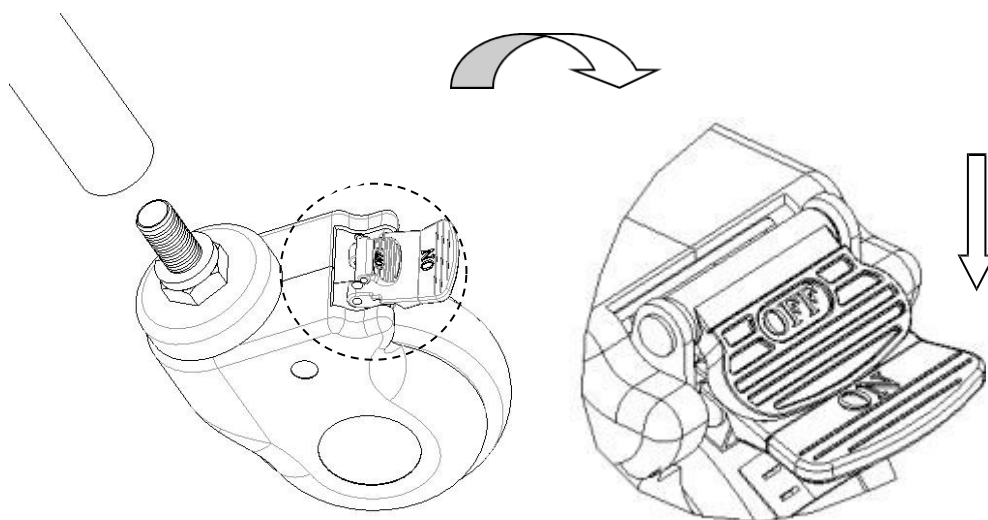

### 3. Resolução de avarias

| Falhas comuns                      | Causas prováveis                                                                                  | Métodos de resolução                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| É difícil mover o carrinho inteiro | 1. O rodízio está bloqueado sem que o travão tenha sido libertado<br>2. O rodízio está danificado | 1. Solte o travão, verifique 2.1<br>2. Substitua o rodízio, verifique 1.2 |

### 4. Manutenção

1. Para utilizar o carrinho de anestesia com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regulares no carrinho de anestesia. Recomenda-se verificá-lo a cada seis meses para garantir que as ligações não estão soltas e que todas as operações estão normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de anestesia envelhece e atinge um determinado tempo de serviço, as peças metálicas e as peças de plástico da estrutura do carrinho de anestesia podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com utensílios de ângulos agudos ou facas durante a utilização e limpe-o frequentemente para o manter limpo e seco.

4. Se o painel ficar acidentalmente manchado, recomenda-se limpá-lo. Não utilize produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de anestesia, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar choques ou sobrecargas, o que causará danos nos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a travagem, o que causará danos ao sistema de travagem.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detetado através de uma inspeção visual. Podem existir fios de tecido e outros resíduos enrolados na roda; retire os parafusos e as porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Para determinar se o rodízio deve ser substituído com base no tempo de utilização e no desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem apertados e ligados. Se possível, utilize anilhas de segurança ou contraporcas para o ajudar neste processo.

9. No caso dos rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. No caso de um carrinho de anestesia equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de anestesia e verificar se o desempenho do travão de cada rodízio é bom. Se o funcionamento do travão falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e, em seguida, volte a testar o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travões do rodízio estiver danificado e for necessário reparar ou substituir o travão, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios deve ser testado novamente.

## 5. Embalagem, Transporte, Armazenamento

1. A embalagem do carrinho é realizada de acordo com o contrato ou com a norma do produto.
2. Evite movimentos bruscos e vibrações violentas, e proteja-o da luz solar e da chuva durante o transporte do carrinho.
3. O carrinho deve ser armazenado:
  - a) Temperatura ambiente: +5 °C ~ +40 °C.
  - b) Humidade relativa: ≤ 85%.
  - c) Pressão atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

## 6. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente a documentação fornecida com a máquina e as faturas deste produto, e deverá apresentar esses documentos quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Caso surja algum problema durante a utilização, entre em contacto com a nossa empresa atempadamente, para que possamos prestar-lhe um apoio técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos, de forma oportuna.
3. A partir da data de venda, se o produto se avariar ou ficar danificado devido a uma instalação e utilização corretas, de acordo com as especificações, o produto terá direito a um ano de garantia gratuita e a um serviço de manutenção vitalício, mediante a apresentação do «certificado» ou da fatura.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver efetivamente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade no prazo de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



**MODEL:SKR-ET085 | REF.: 319-SKR-ET085**

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO  
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture  
Demonstration Park, Zhangjiagang City,  
Jiangsu Province, China



**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



**Quirumed S.L.U.** CIFB97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,  
46980, Valencia(Spain)

**LOT:**





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE AÇÕES: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

[sales@chinasaikang.com](mailto:sales@chinasaikang.com)

[www.saikangmedical.com](http://www.saikangmedical.com)