



Manuale d'uso

SKR-ET625 Carrello d'emergenza



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

STOCK CODE: 870098

1.Installazione dei rotelle

Allineare il perno della ruota con il foro di montaggio sul fondo del carrello e inserire la ruota. Inserire la vite nel foro di montaggio e stringere la vite in senso orario.



1




2




3

2. Utilizzare il metodo dei rulli

Bloccare il rullo: Dopo aver spinto il carrello dell'anestesia nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare il rullo quando si sente un "click", come mostrato nella figura di seguito.

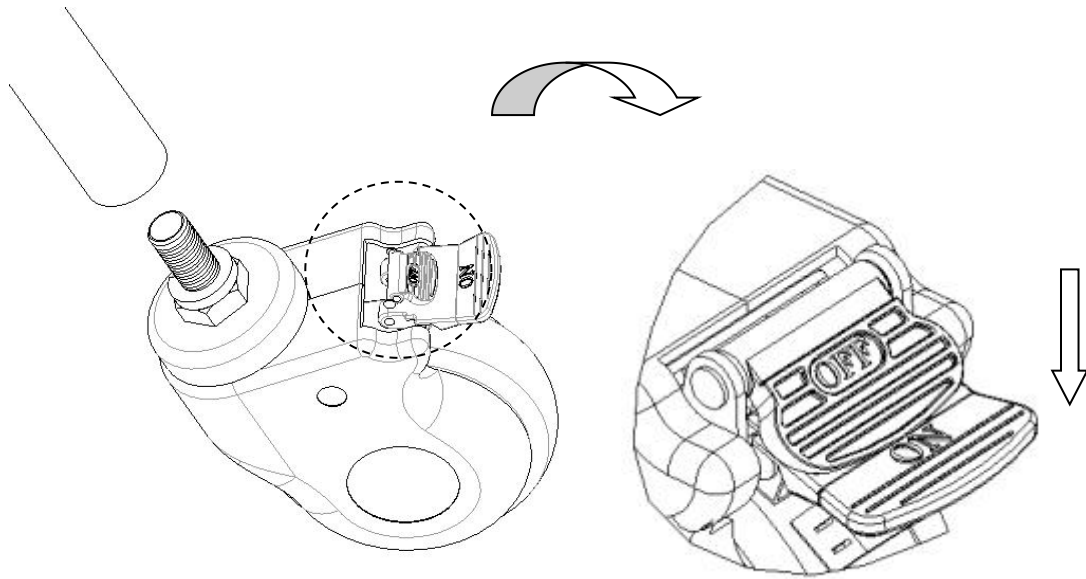

Sblocca il rotellino: premi il pulsante OFF con il piede e sblocca il rotellino quando senti un "click".

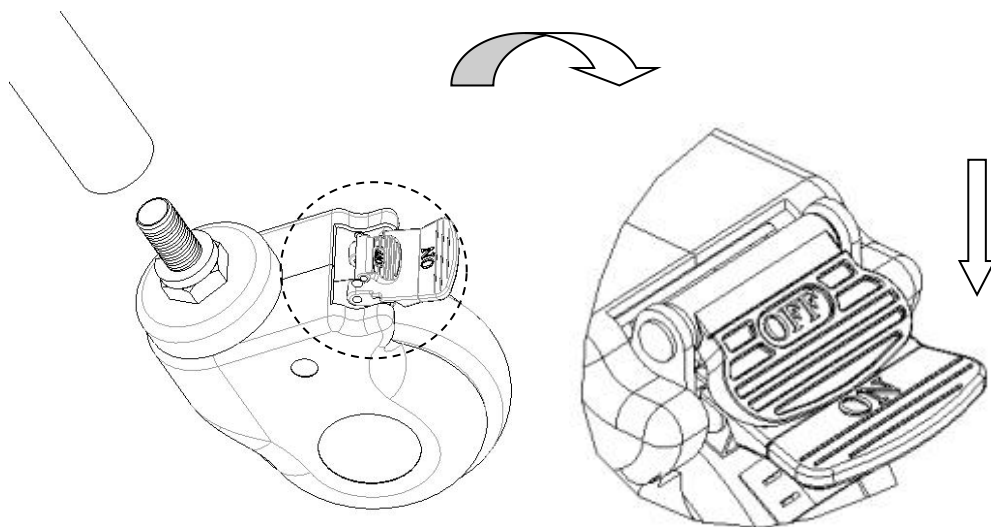

3. Esclusione dei difetti

Guasti comuni	Probabili motivi	Metodi di esclusione
Difficoltà nel movimento dell'intero carrello	La ruota pivottante è bloccata senza aver rilasciato il freno 2. La ruota pivottante è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare il punto 2.1 2. Sostituire la ruota pivottante, controllare il punto 1.2

4. Manutenzione

1. Per utilizzare il carrello dell'anestesia in sicurezza, è necessario effettuare regolari controlli di sicurezza sul carrello dell'anestesia. Si consiglia di verificarlo ogni sei mesi per garantire che le connessioni non siano allentate e che tutte le operazioni siano normali.

2. Quando il telaio del carrello dell'anestesia invecchia e raggiunge un certo tempo di servizio, le parti metalliche del carrello dell'anestesia e le parti in plastica del telaio del carrello dell'anestesia possono essere riciclate.

3. Evitare di graffiare il pannello con elettrodomestici o coltelli ad angolo acuto durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello dell'anestesia, poiché ciò provocherà la ruggine sulla superficie in acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le ruote per evitare urti o sovraccarichi, che potrebbero danneggiare le ruote.

6. È vietato forzare le ruote a frenare quando si frenano, ciò causerà danni al sistema frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata tramite ispezione visiva. Alcuni fili di filato e altre accumulazioni possono essere avvolti intorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e verificare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Giudicare se il supporto è da sostituire in base al tempo d'uso, all'usura e al deterioramento, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi dell'asse siano ben fissati e connessi. Se possibile, utilizzare una rondella di sicurezza o dadi autobloccanti per aiutare in questo processo.

9. Per i supporti dotati di freni, è necessario controllare regolarmente se i freni funzionano correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni uso. Per un carrello anestesia dotato di più supporti frenanti, è possibile bloccare solo uno dei supporti frenanti alla volta, il che consentirà di provare a spingere il carrello anestesia e verificare anche se la prestazione del freno

di ciascun supporto è buona. Se la funzione del freno fallisce a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi riprovare il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante del supporto è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, la prestazione del freno dei supporti deve essere riprovata.

5. Imballaggio, Trasporto, Conservazione

1. L'imballaggio del carrello viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.

2. Evitare di correre, vibrazioni violente e proteggere dalla luce solare e dalla pioggia durante il trasporto del carrello.

Il carrello dovrebbe essere conservato:

a) Temperatura ambiente: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.

b) Umidità relativa: $\leq 85\%$.

c) Pressione atmosferica: $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$.

6. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i documenti forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto, e sarà necessario presentare questi documenti quando l'azienda effettuerà la garanzia e la manutenzione del prodotto.

2. Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo, si prega di contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possiamo fornirvi supporto tecnico e servizi di manutenzione precisi e veloci.

A partire dalla data di vendita, se il prodotto si rompe o viene danneggiato a causa dell'installazione e dell'utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto avrà un anno di garanzia gratuita e servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.

4. Dalla data di acquisto, se effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.

5. Servizio a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.



MODEL:SKR-ET625 | REF.: 319-SKR-ET625

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIFB97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

