

SAIKANG MEDICAL /
BEIJING JINCAI EITING



Benutzer handbuch

SKR-MT606 Medizinwagen



Bild nur zur
Veranschaulichung

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098

1. Montage der Rollen

Richten Sie die Radschraube auf die Befestigungsbohrung an der Unterseite des Wagens aus und setzen Sie das Rad ein. Setzen Sie die Schraube in die Befestigungsbohrung ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.



1




2




3

2. Verwendung der Rollen

Feststellen der Rollen: Nachdem Sie den Anästhesiewagen an die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf die EIN-Taste und stellen Sie die Rolle fest, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

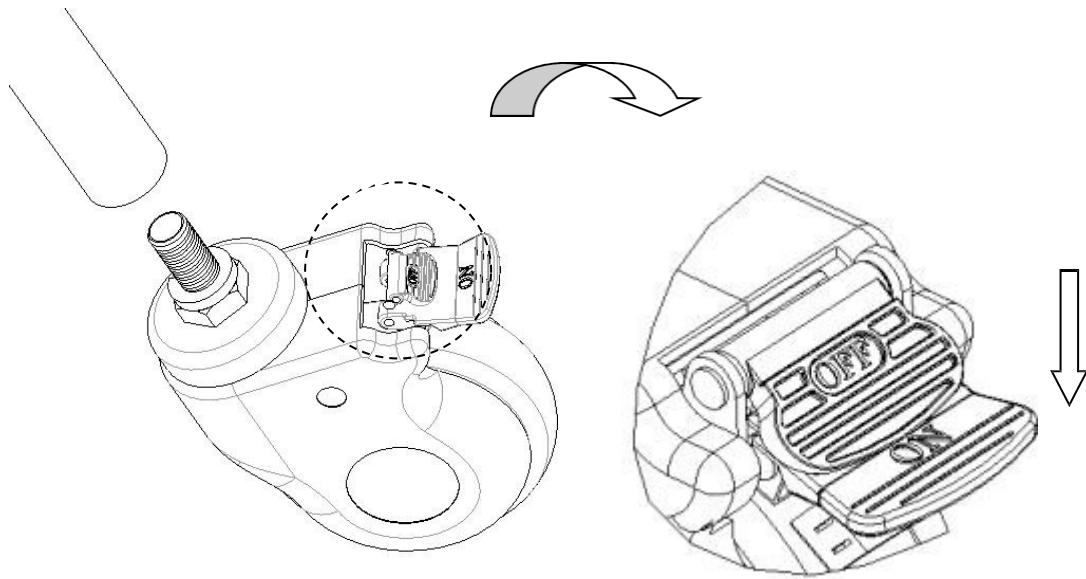

Entriegeln der Rollen: Drücken Sie mit dem Fuß auf die OFF-Taste und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

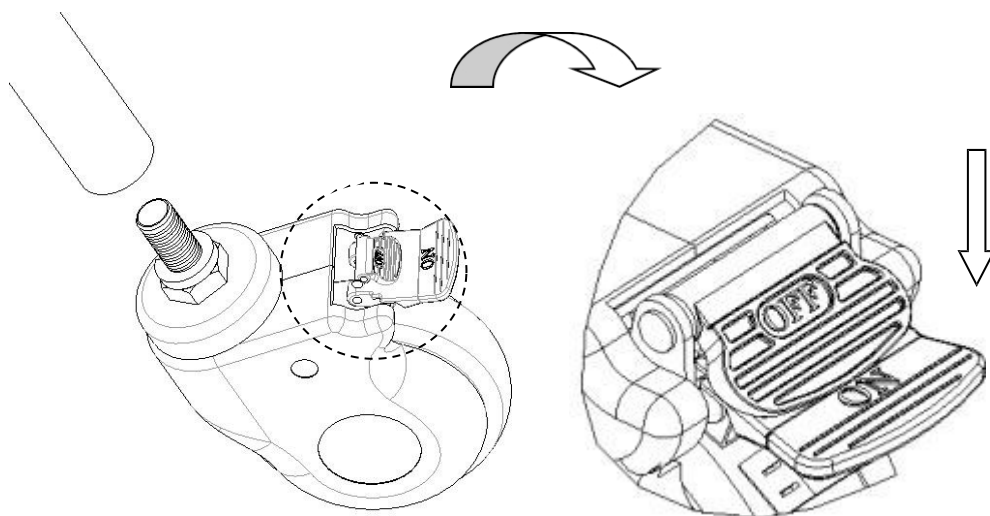

3. Fehlerbehebung

Häufige Störungen	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Schwierigkeiten beim Bewegen des gesamten Wagens	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1 2. Ersetzen Sie die Rolle, überprüfen Sie 1.2

4. Wartung

1. Um den Anästhesiewagen sicher zu verwenden, müssen regelmäßige Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, alle sechs Monate zu überprüfen, ob die Verbindungen fest sitzen und alle Funktionen normal arbeiten.

2. Wenn der Rahmen des Anästhesiewagens altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht ist, können die Metallteile des Anästhesiewagens und die Kunststoffteile des Rahmens recycelt werden.

3. Vermeiden Sie während des Gebrauchs Kratzer auf der Verkleidung durch scharfkantige Geräte oder Messer und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie sauber und trocken zu halten.

4. Wenn die Verkleidung versehentlich verschmutzt wird, wird empfohlen, sie zu reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen oder ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Anästhesiewagens, da diese die Edelstahloberfläche rosten lassen.

5. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen können.

6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.

7. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Es kann sein, dass sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad gewickelt haben. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie es von den Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

8. Um zu beurteilen, ob die Rolle aufgrund der Nutzungsdauer und des Verschleißes ausgetauscht werden muss, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern gut zusammenpassen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.

9. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Anästhesiewagen, der mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, den Anästhesiewagen zu schieben. Überprüfen Sie auch, ob die Bremsleistung jeder einzelnen Rolle gut ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie die Räder sofort und testen Sie das Bremssystem erneut.

10. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Bei jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut getestet werden.

5. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Transportwagens erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Wagens Stürze, starke Erschütterungen und setzen Sie ihn weder Sonnenlicht noch Regen aus.
3. Der Wagen sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %.
 - c) Atmosphärischer Druck: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf, da Sie diese vorlegen müssen, wenn das Unternehmen Garantieleistungen und Wartungsarbeiten für das Produkt durchführt.
2. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah präzise und schnelle technische Unterstützung und Wartungsdienste bieten können.
3. Ab dem Kaufdatum gilt für das Produkt bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung.
4. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, bietet das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-MT606 | REF.: 319-SKR-MT606

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

