



Manual do utilizador

SKR-MT606
Carrinho para medicamentos



Imagem apenas para
referência

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE AÇÕES: 870098

1. Instalação dos rodízios

Alinhe o parafuso da roda com o orifício de montagem na parte inferior do carrinho e insira a roda. Insira o parafuso no orifício de montagem e aperte-o no sentido horário.



1




2




3

2. Método de utilização dos rodízios

Trave o rodízio: após empurrar o carrinho de anestesia para a posição desejada, pressione o botão ON com o pé e trave o rodízio quando ouvir um «clique», conforme mostrado na figura abaixo.

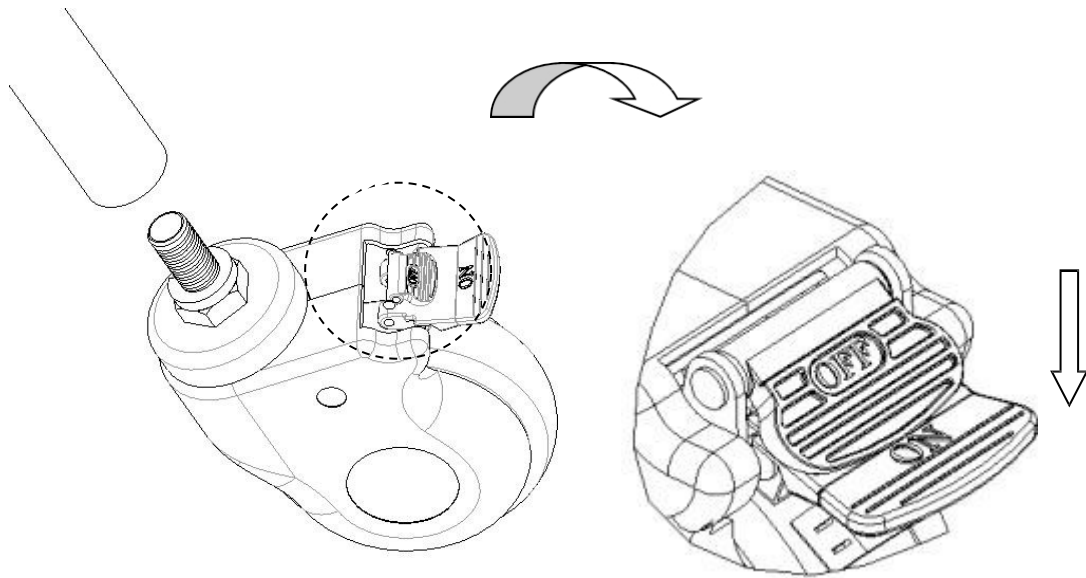

Desbloqueie o rodízio: Pressione o botão OFF com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um «clique».

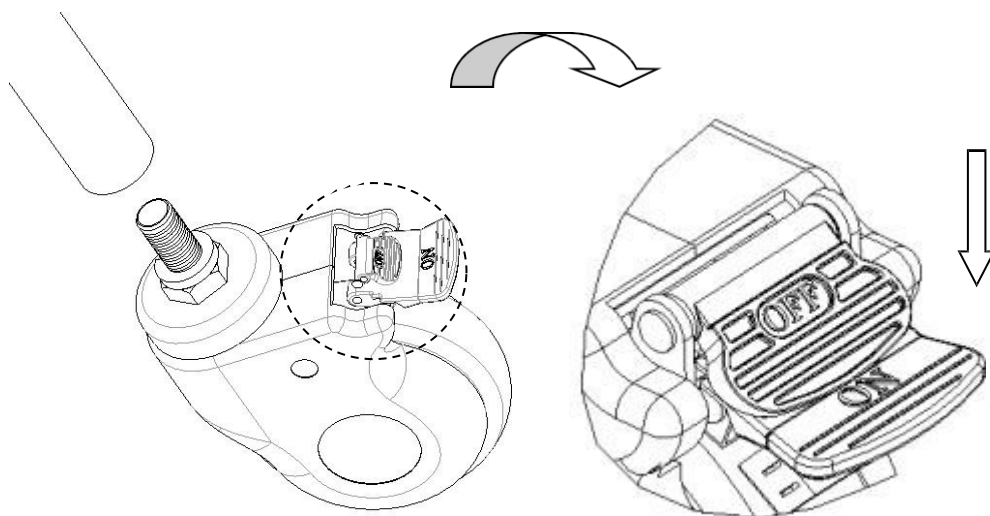

3.Exclusão de falhas

Falhas comuns	Possíveis causas	Métodos de exclusão
Dificuldade em mover todo o carrinho	1. O rodízio está bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Solte o travão, verifique 2.1 2. Substitua o rodízio, verifique 1.2

4. Manutenção

1. Para utilizar o carrinho de anestesia com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regulares no carrinho de anestesia. Recomenda-se verificá-lo a cada seis meses para garantir que as conexões não estejam soltas e que todas as operações estejam normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de anestesia envelhecer e atingir um determinado tempo de manutenção, as peças metálicas e plásticas da estrutura do carrinho de anestesia podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante o uso e limpe-o frequentemente para mantê-lo limpo e seco.

4. Se o painel for acidentalmente manchado, recomenda-se limpá-lo. Não use produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de anestesia, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar batidas ou sobrecargas, o que causará danos aos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a frenagem, pois isso causará danos ao sistema de freios.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de tecido e outros acúmulos podem estar enrolados na roda. Remova os parafusos e porcas da roda, limpe os detritos e verifique se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser remontadas e utilizadas.

8. Para determinar se o rodízio deve ser substituído de acordo com o tempo de uso e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem encaixados e conectados. Se possível, use arruelas de pressão ou contraporcas para ajudar nesse processo.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. Para um carrinho de anestesia equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de anestesia e verificar se o desempenho do travão de cada rodízio está bom. Se a função do travão falhar devido ao desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e volte a testar o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de assistência pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios deve ser testado novamente.

5. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho é feita de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evite pressas, vibrações violentas e proteja do sol e da chuva durante o transporte do carrinho.
3. O carrinho deve ser armazenado:
 - a) Temperatura ambiente: +5 °C ~ +40 °C.
 - b) Humidade relativa: ≤ 85%.
 - c) Pressão atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os ficheiros que acompanham a máquina e as faturas deste produto, pois terá de os apresentar quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema durante a utilização, entre em contacto com a nossa empresa atempadamente, para que possamos fornecer-lhe assistência técnica e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver avariado ou danificado devido à instalação e utilização corretas de acordo com as especificações, o produto terá garantia gratuita de um ano e serviço de manutenção vitalício com o «certificado» ou fatura.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores um reparo gratuito do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-MT606 | REF.: 319-SKR-MT606

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



QuirumedS.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

