



Benutzer Handbuch

SKR002-4.640
ABS-Wagen



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

STOCK CODE: 870098

Inhalt

Handbuch Einführung.....	2
1. Leitfaden für die Installation.....	Error! Marcador no definido.
2. Methode verwenden.....	6
2.1 Art der Verwendung der Rollen.....	7
3. Ausschluss von Fehlern.....	8
4. Instrumentenwagen-Wartung	8
5. Verpackung, Transport, Lagerung	<u>9</u>
6. Kundendienst	<u>9</u>

Handbuch Einführung

Anmerkung:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und der Verwendung genau. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer das Benutzerhandbuch und alle Vorsichtshinweise kennen.

Dieses Handbuch gilt für den Gerätewagen SKR002-4. Sie enthält die Installationsmethode, die Betriebsanweisungen und die Kontrollpunkte für die Wartung.

► Die Grafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz für die Benutzer. Für den tatsächlichen Gebrauch beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

► Dieses Benutzerhandbuch enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technischen Parameter des Produkts.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum oder den Händler.

► Jeder, der dieses Produkt benutzt oder bedient, sollte es lesen und beachten.

► Abgesehen von einigen unerwarteten Situationen ist es erforderlich, dass die Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind.

1. Installationsanleitung

ABS-Wagen

Bild



Technische Parameter

Vielseitiger Mehrzweckwagen für den Einsatz in mehreren Abteilungen

Modell: SKR002-4 Abmessungen: 640 x 456 x 860 mm

1. Die Arbeitsfläche ist aus ABS-Material im Spritzgussverfahren aus einem Stück gefertigt und verfügt über drei Ebenen, eine Seite mit Handlauf und zwei Schubladen;

2. Ausgestattet mit leisen 3-Zoll-Rollen, von denen zwei eine Bremsfunktion haben;

3. Der Wagen kann einer Belastung von 30-50 kg standhalten und arbeitet leise und ohne ungewöhnliche Geräusche, was ihn ideal für Krankenhäuser macht, um die Störung der Patienten zu minimieren.



Verpackung

Abmessungen der Verpackung: 690 x 305 x 485 mm

Volumen der Verpackung: 0,1 m³

Bruttogewicht: 9,9 kg



Installationsanleitung

Warme Erinnerung :

Achten Sie bitte darauf, dass der Wagen gemäß der Anleitung korrekt installiert ist.

Komponenten



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Handgriff*1 | ⑤ Kurzer Deckel*2 |
| ② Panel*1 | ⑥ Schublade*2 |
| ③ Vertikale | ⑦ Rollen*4 |
| Pfosten*8 | ⑧ Mittelwand*1 |
| ④ Grundplatte*1 | |

Einrichtung



1: Setzen Sie die Rückseite der Blende auf die Schublade und drücken Sie mit der Hand auf die kleinen Säulen der Blende, bis diese in die Schublade eingeführt werden können.



2: Setzen Sie die Platte mit der Schublade ein.



3. Bringen Sie den Griff auf der rechten Seite an, wie in der Abbildung gezeigt, und setzen Sie zwei kurze Kappen auf die linke Seite.



4. Drehen Sie die Platte um und ziehen Sie die vier vertikalen Pfosten fest.



5. Bringen Sie an den vier vertikalen Pfosten doppelköpfige Schraubverbinder an.



6. Decken Sie die mittlere Platte ab.



7. Bringen Sie die vier vertikalen Pfosten an und ziehen Sie sie fest.



8. Decken Sie die Bodenplatte



9. Sichern Sie die vier Lenkrollen. Für den diagonalen Einbau werden zwei Rollen mit Bremsen empfohlen.



10. Vollständiger Montageplan.

Anmeldung

Produktanwendungen: Krankenhäuser, Medikamentenabgabe, Behandlung, Überwachungsgeräte, Elektrokardiogramm-Geräte; Schönheitssalons, Pflegeheime, Wohlfahrtseinrichtungen, Sanatorien, Hotels, Tierhandlungen, Schulen, 4S-Geschäfte, usw.;

2. Methode verwenden




1-Hauptkörper 2-Rollen


Größe des Instrumentenwagens	Länge	mm	640
	Breite		456
	Die Höhe des Wagens über dem Boden		860
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	50

2.1 Art der Verwendung der Rollen

2.1.1 Verriegeln Sie die Lenkrolle: Nachdem Sie den Wagen in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie den Knopf und verriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein "Klicken" hören, wie in der Abbildung unten dargestellt.

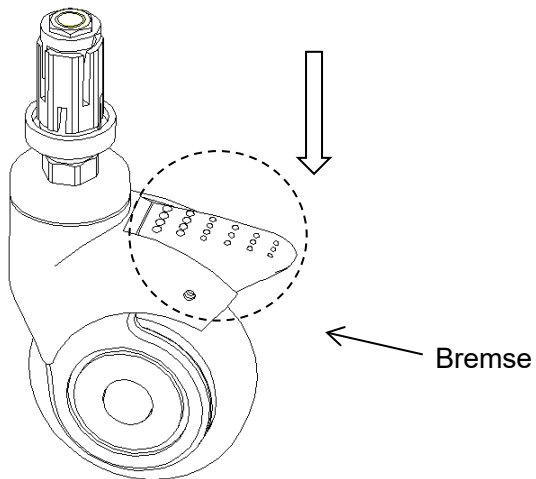

2.1.2 Entriegeln Sie die Lenkrolle: Heben Sie den Knopf mit dem Fuß an und entriegeln Sie die Rolle, wenn Sie ein "cli c k" hören.

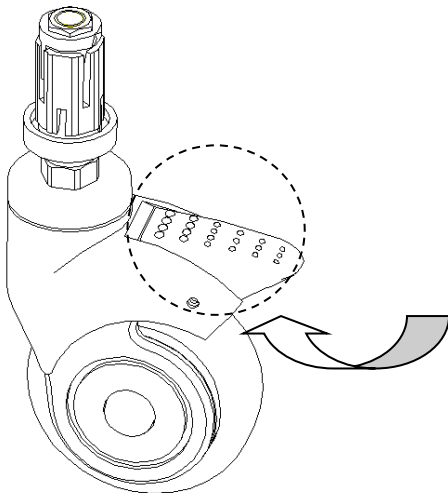

3. Fehlerausschluss

Häufige Ausfälle	Wahrscheinliche Gründe	Methoden ausschließen
Schwierig, den ganzen Wagen zu bewegen	1. Der Nachlauf wird blockiert, ohne dass die Bremse gelöst wird 2. Der Nachlauf ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Ersetzen Sie die Lenkrolle

4. Instrument Wagen-Wartung

1. Um den Wagen sicher verwenden zu können, müssen regelmäßig Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile nicht gelockert sind und normal betrieben werden können.
2. Wenn der Instrumentenwagen seine maximale Nutzungsdauer erreicht hat, können die Metall- und Kunststoffteile der Krippe recycelt werden.
3. Vermeiden Sie es, mit scharfen Gegenständen gegen das Kinderbett zu stoßen und das Rohr am Kinderbett zu zerkratzen.
4. Wenn die Struktur mit Flecken, empfehlen wir, es mit Wasser zu reinigen, verwenden Sie keine alkalischen, ätzende Chemikalien zu reinigen, Rost auf Edelstahl-Oberfläche zu vermeiden.
5. Prüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastungen zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen.
6. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam abzubremsen, was zu Schäden an der Bremsanlage führt.
7. Die Abnutzung der Reifenoberfläche des Rades kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, säubern Sie die Verunreinigungen und prüfen Sie, ob das Radlager beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
8. Beurteilung, ob die Rolle durch die gesamte Rolle ersetzt wird, je nach Abnutzung und Verschleiß. Nach dem Austausch oder Einbau des Rades ist darauf zu achten, dass die Achsschraube und die Mutter zuverlässig verbunden sind. Wenn möglich, verwenden Sie eine Sicherungsscheibe oder eine Sicherungsmutter.
9. Bei den mit Bremsen ausgestatteten Rollen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen Sie die Bremsen einmal am Tag oder vor jeder Benutzung. Bei einem Gerätewagen, der mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils

nur eine Bremsrolle blockiert werden, um zu versuchen, den Wagen zu schieben und zu prüfen, ob die Bremsleistung der einzelnen Rollen gut ist. Wenn die Funktion der Rollenbremsen aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder nicht mehr gegeben ist, müssen die Räder sofort ausgetauscht und das Bremssystem erneut getestet werden.

10. wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Jedes Mal, wenn die Bremsen ersetzt werden, muss die Bremsleistung der Rollen erneut getestet werden.

5) Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des Instrumentenwagens erfolgt entsprechend dem Vertrag oder der Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des Gerätewagens Eile, starke Vibrationen und Schutz vor Sonnenlicht und Regen.
3. Der Instrumentenwagen sollte aufbewahrt werden:
 - a) Umgebungstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
 - c) Atmosphärischer Druck: $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. der Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen für dieses Produkt ordnungsgemäß auf. Sie müssen diese Unterlagen vorlegen, wenn das Unternehmen die Garantie und Wartung für das Produkt durchführt.
2. Wenn es irgendwelche Probleme im Prozess der Verwendung, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen in der Zeit, so dass unser Unternehmen können Sie mit genauen und schnellen technischen Support und Wartung Dienstleistungen in einer fristgerechten Weise.
3. Nehmen Sie das Innenleben dieses Produkts nicht selbst auseinander, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Nutzung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Ab dem Kaufdatum, wenn es tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert aufgrund von Qualitätsproblemen innerhalb eines Jahres, wird das Unternehmen das Produkt für die Nutzer kostenlos zu reparieren.

5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL:SKR002-4.640 | REF.: 319-SKR002-4.640

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

Nr. 35 Lehong Road, Moderne Landwirtschaft
Demonstrationspark, Zhangjiagang City,
Provinz Jiangsu, **China**



SUNGO Europa B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Einheit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Die Niederlande



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spanien)

LOT:HW25036



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

STOCK CODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com