



Usuario manual

SKR002-4.640
Carro ABS



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098

Contenido

Manual de introducción	2
1. Guía de instalación.....	¡Error! Marcador no definido.
2. Utilizar el método.....	6
2.1 Método de uso de las ruedas	7
3. Exclusión de fallos.....	8
4. Trolley de instrumentos-mantenimiento	8
5. Embalaje, transporte, almacenamiento	9
6. Servicio postventa	9

Manual de introducción

Nota:

Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar. Exigimos a todos los usuarios que conozcan el manual de usuario y todas las precauciones.

► Este manual es aplicable al carro para instrumentos SKR002-4. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación de mantenimiento.

Los gráficos de este manual son sólo para referencia del usuario. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.

► Este manual de usuario incluye la descripción, instrucciones, mantenimiento y parámetros técnicos del producto.

► Cualquier duda, póngase en contacto con el centro de servicio postventa o el distribuidor.

► Cualquier persona que utilice o maneje este producto debe leerlo y cumplirlo.

► Salvo en algunas situaciones imprevistas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

Carro ABS

Fotografía



Parámetros técnicos

Carro multiusos versátil adecuado para su uso en varios departamentos

Modelo: SKR002-4 Dimensiones: 640 x 456 x 860 mm

1. La superficie de trabajo está fabricada en material ABS mediante tecnología de moldeo por inyección en una sola pieza; cuenta con tres niveles, un lateral con pasamanos y dos cajones;
2. Equipada con ruedas silenciosas de 3 pulgadas, dos de ellas con función de frenado;
3. El carro soporta una carga de 30-50 kg y funciona silenciosamente sin ruidos extraños, por lo que es ideal para que los hospitales minimicen las molestias a los pacientes.



Embalaje

Dimensiones del paquete: 690 x 305 x 485 mm

Volumen del envase: 0,1 m³

Peso bruto: 9,9 kg



Guía de instalación

Cálido recordatorio :

Asegúrese de que el carro está correctamente instalado de acuerdo con el manual.

Componentes



- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ① Asa*1 | ⑤ Capuchón corto*2 |
| ② Panel*1 | ⑥ Cajón*2 |
| ③ Postes verticales*8 | ⑦ Torre*4 |
| ④ Placa base*1 | ⑧ Panel central*1 |

Instalación



1. Instale la parte posterior del panel en el cajón y presione con la mano los pequeños pilares del panel hasta que puedan introducirse en el cajón.



2: Coloque el panel con el cajón en su sitio.



3. Instale el asa en el lado derecho como se muestra en la imagen, y coloque dos tapones cortos en el lado izquierdo.



4. Dé la vuelta al panel y apriete los cuatro postes verticales.



5. Instale conectores roscados de doble cabeza en la parte superior de los cuatro postes verticales.



6. Cubra el panel central.



7. Instale y apriete los cuatro postes verticales.



8. Cubra el panel inferior.



9. Fije las cuatro ruedas. Se recomiendan dos ruedas con freno para la instalación en diagonal.



10. Esquema de montaje completo.

Aplicación

Aplicaciones del producto: hospitales, suministro de medicamentos, tratamiento, dispositivos de monitorización, máquinas de electrocardiograma; salones de belleza, residencias de ancianos, instituciones de asistencia social, sanatorios, hoteles, tiendas de mascotas, escuelas, tiendas 4S, etc;

2. Método de uso




1-Cuerpo principal 2-Casters


Tamaño del carro de instrumental	Longitud	mm	640
	Anchura		456
	La altura del carro sobre el suelo		860
Peso	Carga de trabajo segura	KG	50

2.1 Método de uso de las ruedas giratorias

2.1.1 Bloqueo de la rueda giratoria: Después de empujar el carro hasta la posición deseada, pulse el botón y bloquee la rueda giratoria cuando oiga un "clic", como se muestra en la figura siguiente.

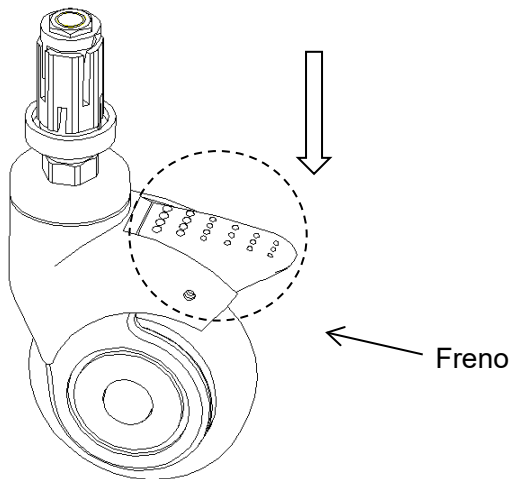

2.1.2 Desbloquee la rueda giratoria: Levante el botón con el pie y desbloquee la rueda giratoria cuando oiga un "cli c k".

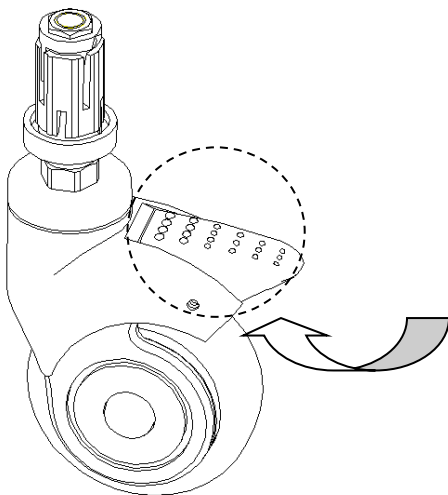

3. Exclusión de fallos

Fallos comunes	Razones probables	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro	1. La rueda se bloquea sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Vuelva a colocar la rueda

4. Instrumento carro-mantenimiento

1. Para utilizar el carro de forma segura, deben realizarse inspecciones de seguridad con regularidad. Realice una inspección exhaustiva cada seis meses, para asegurarse de que no hay ninguna holgura en las piezas de conexión puede funcionar con normalidad.

2. Cuando el carro de instrumentos alcanza su vida útil máxima, las piezas metálicas y de plástico de la cuna pueden reciclarse.

3. Evite golpear la cuna y arañar el tubo de la cuna con objetos punzantes.

4. Si la estructura con manchas, le sugerimos para limpiar con agua, no utilice alcalinos, productos químicos corrosivos para limpiar, evitar la oxidación en la superficie de acero inoxidable.

5. Compruebe periódicamente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas que puedan dañarlas.

6. Está prohibido forzar las ruedas para que frenen al frenar, ya que se dañaría el sistema de frenos.

7. El desgaste de la superficie de rodadura de la rueda puede detectarse mediante inspección visual. Algunos hilos de rosca y otras acumulaciones pueden estar enrollados alrededor de la rueda, retire los tornillos y tuercas de la rueda, limpie los restos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Juzgar si se sustituye toda la rueda según el desgaste. Después de reemplazar o instalar la rueda, asegúrese de que el perno del eje y la tuerca están conectados de forma fiable. Si es posible, utilice una arandela de seguridad o una tuerca de seguridad.

9. En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar periódicamente si los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro equipado con varias ruedas con freno, sólo se puede bloquear una rueda con freno a la vez para intentar empujar el carro y comprobar si el funcionamiento de los frenos de cada rueda es bueno. Si el funcionamiento de los frenos de las ruedas giratorias falla debido al desgaste o daño de las ruedas, reemplace inmediatamente las ruedas y luego vuelva a probar el

sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de freno de la rueda está dañado, y el freno necesita ser reparado o reemplazado, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta o con un distribuidor autorizado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyen los frenos, es necesario volver a comprobar el rendimiento de frenado de las ruedas.

5. Embalaje, transporte, almacenamiento

1. El embalaje del carro de instrumental se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y protéjase de la luz solar y la lluvia durante el transporte del carro porta instrumentos.
3. El carro de instrumental debe guardarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servicio postventa

1. Por favor, mantenga los archivos vienen con la máquina y las facturas de este producto correctamente, y usted necesita presentar estos materiales cuando la empresa realiza la garantía y el mantenimiento para el producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda proporcionarle soporte técnico y servicios de mantenimiento precisos y rápidos de manera oportuna.
3. No desmonte usted mismo el dispositivo interno de este producto para evitar daños innecesarios. Si observa que el uso se ve afectado debido a problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con nuestro distribuidor autorizado.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa reparará el producto para los usuarios de forma gratuita.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO:SKR002-4.640 | REF.: 319-SKR002-4.640

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment S.L.

Nº 35 Lehong Road, Agricultura Moderna
Parque de Demostraciones, ciudad de Zhangjiagang,
Provincia de Jiangsu, **China**



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidad 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Países Bajos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(España)

LOTE:HW25036



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com