



Manuel de l'utilisateur

SKR002-4.640 **Chariot en ABS**



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

Contenu

Introduction au manuel	2
1. Guide d'installation	Error! Marcador no definido.
2. Utiliser la méthode.....	6
2.1 Méthode d'utilisation des roulettes.....	7
3. Exclusion des défauts.....	8
4. Chariot d'instruments - Entretien	8
5. Emballage, transport, stockage	<u>9</u>
6. Service après-vente	<u>9</u>

Introduction au manuel

Remarque :

Veillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de connaître le manuel de l'utilisateur et toutes les précautions à prendre.

► Ce manuel s'applique au chariot d'instruments SKR002-4. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle de la maintenance.

► Les graphiques de ce manuel sont uniquement destinés à servir de référence aux utilisateurs. En cas d'utilisation réelle, veuillez vous référer à l'objet réel.

► Ce manuel d'utilisation comprend la description, l'instruction, l'entretien et les paramètres techniques du produit.

► Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.

► Toute personne utilisant ou faisant fonctionner ce produit doit le lire et s'y conformer.

► À l'exception de certaines situations inattendues, les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec l'utilisation et les précautions.

1. Guide d'installation

Chariot en ABS

Photo



Paramètres techniques

Chariot polyvalent convenant à plusieurs services

Modèle : SKR002-4 Dimensions : 640 x 456 x 860 mm

1. Le plan de travail est fabriqué en ABS par injection en une seule pièce ; il comporte trois niveaux, un côté avec une barre de maintien et deux tiroirs ;

2. Équipé de roulettes silencieuses de 3 pouces, dont deux avec fonction de freinage ;

3. Le chariot peut supporter une charge de 30 à 50 kg et fonctionne silencieusement, sans bruit inhabituel, ce qui le rend idéal pour les hôpitaux afin de minimiser la gêne occasionnée aux patients.



Emballage

Dimensions de l'emballage : 690 x 305 x 485 mm

Volume de l'emballage : 0,1 m³

Poids brut : 9,9 kg



Guide d'installation

Rappel chaleureux :

Veillez à ce que le chariot soit installé correctement, conformément au manuel.

Composants



- | | |
|--------------------------|------------------|
| ① Poignée*1 | ⑤ Short cap*2 |
| ② Panel*1 | ⑥ Tiroir*2 |
| ③ Poteaux
verticaux*8 | ⑦ Caster*4 |
| ④ Plaque de base*1 | ⑧ Middle panel*1 |

Installation



1. installez l'arrière du panneau sur le tiroir et appuyez sur les petits piliers du panneau avec votre main jusqu'à ce qu'ils puissent être insérés dans le tiroir.



2 : Placez le panneau avec le tiroir en place.



3. Installer la poignée sur le côté droit comme indiqué sur l'image, et placer deux capuchons courts sur le côté gauche.



4. Retourner le panneau et serrer les quatre montants verticaux.



5. Installer les connecteurs filetés à double tête sur les quatre poteaux verticaux.



6. Couvrir le panneau central.



7. Installer et serrer les quatre montants verticaux.



8. Couvrir le panneau inférieur.



9. Fixez les quatre roulettes. Deux roulettes avec frein sont recommandées pour une installation en diagonale.



10. Schéma d'assemblage complété.

Application

Applications du produit : hôpitaux, délivrance de médicaments, traitement, appareils de surveillance, machines à électrocardiogramme ; salons de beauté, maisons de soins infirmiers, institutions sociales, sanatoriums, hôtels, animaleries, écoles, magasins 4S, etc ;

2. Utiliser la méthode




1-Corps principal 2-catalyseurs


Taille du chariot d'instruments	Longueur	mm	640
	Largeur		456
	La hauteur du chariot par rapport au sol		860
Poids	Charge de travail sûre	KG	50

2.1 Méthode d'utilisation des roulettes

2.1.1 Verrouiller la roulette : Après avoir poussé le chariot dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un "clic", comme le montre la figure ci-dessous.

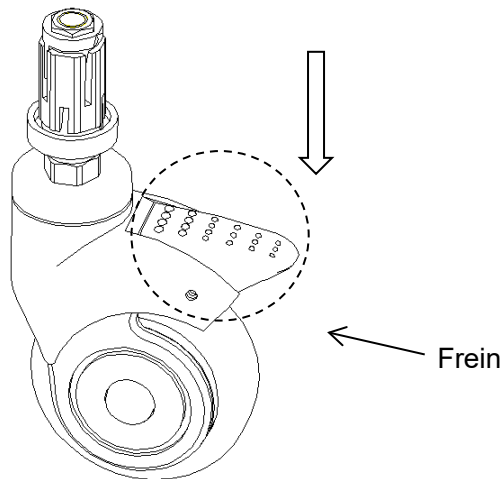

2.1.2 Déverrouiller la roulette : Soulevez le bouton avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un "cli c k".

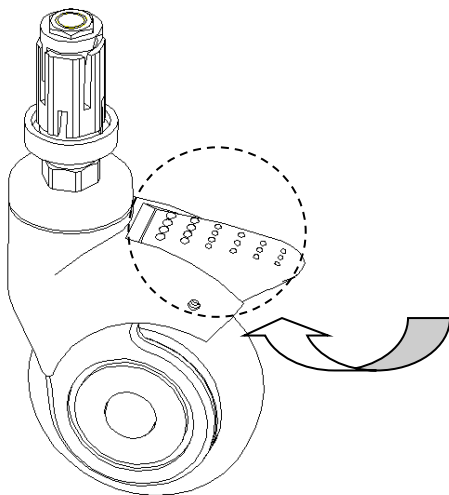

3. Exclusion des défauts

Défaillances courantes	Raisons probables	Méthodes d'exclusion
Difficile de déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ne soit desserré. 2. La roulette est endommagée	1. Desserrer le frein 2. Remplacer la roulette

4. Instrument - chariot - entretien

1. Afin d'utiliser le chariot en toute sécurité, des contrôles de sécurité doivent être effectués régulièrement. Effectuer une inspection complète tous les six mois, afin de s'assurer que les pièces de connexion ne sont pas desserrées et qu'elles peuvent être utilisées normalement.

2. Lorsque le chariot d'instruments a atteint sa durée de vie maximale, les parties métalliques et plastiques du berceau peuvent être recyclées.

3. Évitez de heurter le berceau et de rayer le tube du berceau avec des objets pointus.

4. Si la structure présente des taches, il est conseillé de la nettoyer à l'eau, sans utiliser de produits chimiques alcalins ou corrosifs, afin d'éviter la rouille sur la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter les chocs ou les surcharges, qui endommageraient les roulettes.

6. Il est interdit de forcer le freinage des roulettes lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.

7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par une inspection visuelle. Certains fils et d'autres accumulations peuvent être enroulés autour de la roue, retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

8. Juger si la roulette est remplacée par l'ensemble de la roulette en fonction de l'usure. Après le remplacement ou l'installation de la roue, assurez-vous que le boulon et l'écrou de l'essieu sont bien fixés. Si possible, utilisez une rondelle de blocage ou un écrou de blocage.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des freins. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Dans le cas d'un chariot équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois pour essayer de pousser le chariot afin de vérifier si les freins de chaque roulette fonctionnent correctement. Si les freins des roulettes ne fonctionnent pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le

système de freinage.

10. si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot d'instruments est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Éviter les sorties brusques, les vibrations violentes et la protection contre les rayons du soleil et la pluie pendant le transport du chariot porte-instruments.
3. Le chariot d'instruments doit être rangé :
 - a) Température ambiante : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. service après-vente

1. Conservez soigneusement les fichiers fournis avec l'appareil et les factures de ce produit. Vous devez présenter ces documents lorsque l'entreprise assure la garantie et l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société à temps, afin qu'elle puisse vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides.
3. Ne démontez pas vous-même le dispositif interne de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise le réparera gratuitement pour les utilisateurs.
5. Service à vie assuré par le fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE:SKR002-4.640 | RÉF. : 319-SKR002-4.640

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parc de démonstration, ville de Zhangjiagang,

Province de Jiangsu, **Chine**



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unité 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Les Pays-Bas



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, Valence (Espagne)

LOT:HW25036



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com