



Utente manuale

SKR002-4.640
Carrello in ABS



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098

Contenuti

Introduzione al manuale	2
1. Guida all'installazione	¡Error! Marcador no definido.
2. Utilizzare il metodo	6
2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle.....	7
3. Esclusione dei guasti.....	8
4. Manutenzione del carrello degli strumenti.....	8
5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	<u>9</u>
6. Servizio post-vendita	<u>9</u>

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Tutti gli utenti devono essere a conoscenza del manuale d'uso e di tutte le precauzioni.

► Questo manuale è applicabile al carrello portastrumenti SKR002-4. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni operative e i punti di controllo della manutenzione.

► La grafica di questo manuale è solo un riferimento per gli utenti. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

► Questo manuale d'uso comprende la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.

► Chiunque utilizzi o faccia funzionare questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.

► Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscere l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

Carrello in ABS

Immagine



Parametri tecnici

Carrello multiuso versatile, adatto all'uso in più reparti

Modello: SKR002-4 Dimensioni: 640 x 456 x 860 mm

1. Il piano di lavoro è realizzato in materiale ABS con tecnologia di stampaggio a iniezione in un unico pezzo; presenta tre livelli, un lato con corrimano e due cassetti;

2. Dotato di rotelle silenziose da 3 pollici, due delle quali con funzione di freno;

3. Il carrello è in grado di sopportare un carico di 30-50 kg e funziona in modo silenzioso senza alcun rumore insolito, rendendolo ideale per gli ospedali per ridurre al minimo il disturbo ai pazienti.



Imballaggio

Dimensioni della confezione: 690 x 305 x 485 mm

Volume della confezione: 0,1 m³

Peso lordo: 9,9 kg



Guida

Un caldo promemoria:

Assicurarsi che il carrello sia installato correttamente come indicato nel manuale.

Componenti



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ① Maniglia*1 | ⑤ Capo corto*2 |
| ② Pannello*1 | ⑥ Cassetto*2 |
| ③ Pali verticali*8 | ⑦ Cassetto*4 |
| ④ Piastra di base*1 | ⑧ Pannello centrale*1 |

Installazione



1. Installare il retro del pannello sul cassetto e premere con la mano i piccoli montanti del pannello fino a inserirli nel cassetto.



2: Posizionare il pannello con il cassetto in posizione.



3. Installare la maniglia sul lato destro come mostrato nella figura e posizionare due tappi corti sul lato sinistro.



4. Capovolgere il pannello e serrare i quattro montanti verticali.



5. Installare i connettori filettati a doppia testa in cima ai quattro montanti verticali.



6. Coprire il pannello centrale.



7. Installare e serrare i quattro montanti verticali.



8. Coprire il pannello inferiore.



9. Fissare le quattro ruote. Per l'installazione in diagonale si consigliano due ruote con freno.



10. Schema di montaggio completato.

Applicazione

Applicazioni del prodotto: ospedali, consegna di medicinali, trattamenti, dispositivi di monitoraggio, macchine per elettrocardiogrammi; saloni di bellezza, case di cura, istituzioni assistenziali, sanatori, hotel, negozi di animali, scuole, negozi 4S, ecc;

2. Metodo di utilizzo




1-Corpo principale 2-caster


Dimensioni del carrello porta strumenti	Lunghezza	mm	640
	Larghezza		456
	L'altezza del carrello dal suolo		860
Peso	Carico di lavoro sicuro	KG	50

2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle

2.1.1 Bloccare la rotella: Dopo aver spinto il carrello nella posizione desiderata, premere il pulsante e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura seguente.

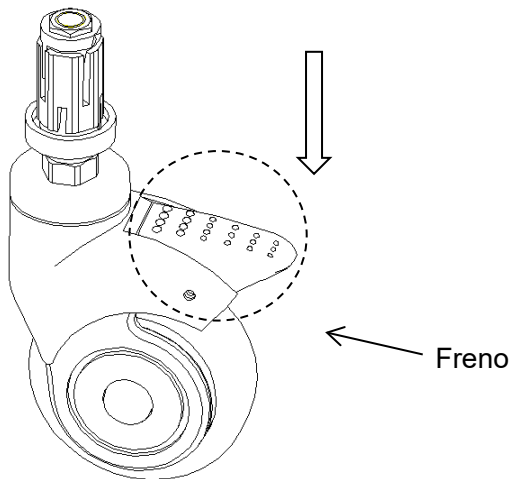

2.1.2 Sbloccare la rotella: Sollevare il pulsante con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "cli c k".

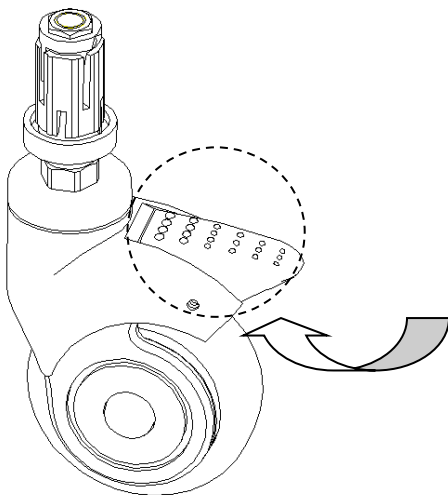

3. Esclusione dei guasti

Fallimenti comuni	Probabili ragioni	Metodi di esclusione
Difficile spostare l'intero carrello	1. La ruota dentata è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

4. Strumento carrello-manutenzione

1. Per utilizzare il carrello in modo sicuro, è necessario eseguire regolarmente ispezioni di sicurezza. Eseguire un'ispezione completa ogni sei mesi, per assicurarsi che non vi siano allentamenti nelle parti di collegamento e che il carrello possa funzionare normalmente.

2. Quando il carrello portastrumenti raggiunge la sua durata massima, le parti metalliche e plastiche della culla possono essere riciclate.

3. Evitare di colpire la culla e di graffiare il tubo della culla con oggetti appuntiti.

4. Se la struttura presenta macchie, si consiglia di pulirla con acqua, non utilizzare prodotti chimici alcalini e corrosivi per la pulizia, evitando la ruggine sulla superficie dell'acciaio inossidabile.

5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.

6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'impianto frenante.

7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata con un'ispezione visiva. Alcuni fili filati e altri accumuli possono essere avvolti intorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.

8. Giudicare la sostituzione dell'intera ruota in base all'usura. Dopo la sostituzione o l'installazione della ruota, accertarsi che il bullone e il dado dell'asse siano collegati in modo affidabile. Se possibile, utilizzare una rondella o un dado di bloccaggio.

9. Per le ruote dotate di freno, è necessario controllare regolarmente il corretto funzionamento dei freni. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di un carrello portastrumenti dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota con freno alla volta per cercare di spingere il carrello e verificare se le prestazioni dei freni di ciascuna ruota sono buone. Se il funzionamento dei freni delle rotelle si guasta a causa dell'usura o di danni alle ruote, sostituire immediatamente le ruote e testare nuovamente il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della ruota è danneggiato e il freno deve essere riparato

o sostituito, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario testare nuovamente le prestazioni dei freni delle rotelle.

5.Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello portastrumenti viene eseguito in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello portastrumenti, evitare di sottoporlo a forti vibrazioni e di proteggerlo dalla luce solare e dalla pioggia.
3. Il carrello porta strumenti deve essere riposto:
 - a) Temperatura ambiente: -40°C ~ 70°C.
 - b) Umidità relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressione atmosferica: 500hPa ~ 1060 hPa.

6.Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i documenti forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto; è necessario presentare questi materiali quando l'azienda esegue la garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante il processo di utilizzo, si prega di contattare la nostra azienda in tempo, in modo che la nostra azienda possa fornire un supporto tecnico accurato e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. Non smontare da soli il dispositivo interno di questo prodotto per evitare danni inutili. Se l'uso è compromesso da problemi di qualità, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il nostro rivenditore autorizzato.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda lo riparerà gratuitamente per gli utenti.
5. Servizio a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO:SKR002-4.640 | RIF.: 319-SKR002-4.640

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CARRO MEDICO / CARRELO SANITARIO /
CARRO MEDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Agricoltura moderna
Parco dimostrativo, città di Zhangjiagang,
Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Paesi Bassi



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spagna)

LOTTO:HW25036



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com