



Utilizador manual

SKR002-4.640
Carrinho em ABS



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098

Conteúdo

Introdução ao manual.....	2
1. Guia de instalação.....	Error! Marcador no definido.
2. Utilizar o método	6
2.1 Método de utilização dos rodízios.....	7
3. Exclusão de falhas	8
4. Trólei de instrumentos - manutenção.....	8
5. Embalagem, transporte, armazenamento.....	<u>9</u>
6. Serviço pós-venda.....	<u>9</u>

Introdução ao manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente os passos antes de o instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.

► Este manual é aplicável ao carrinho de instrumentos SKR002-4. Contém o método de instalação, as instruções de funcionamento e os pontos de controlo de manutenção.

► Os gráficos deste manual servem apenas de referência para os utilizadores. Na utilização efectiva, consulte o objeto real.

► Este manual do utilizador inclui a descrição, as instruções, a manutenção e os parâmetros técnicos do produto.

► Qualquer dúvida, contacte o centro de assistência pós-venda ou o distribuidor.

► Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve lê-lo e cumpri-lo.

Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com a utilização e as precauções.

1. Guia de instalação

Carrinho em ABS

Imagem



Parâmetros técnicos

Carrinho multifunções versátil, adequado para utilização em vários departamentos

Modelo: SKR002-4 Dimensões: 640 x 456 x 860 mm

1. A superfície de trabalho é feita de material ABS utilizando a tecnologia de moldagem por injeção numa única peça; possui três níveis, um lado com um corrimão e duas gavetas;
2. Equipado com rodízios silenciosos de 3 polegadas, dois dos quais com função de travagem;
3. O carrinho pode suportar uma carga de 30-50 kg e funciona silenciosamente sem qualquer ruído involuntário, o que o torna ideal para os hospitais para minimizar a perturbação dos doentes.



Embalagem

Dimensões da embalagem: 690 x 305 x 485 mm

Volume da embalagem: 0,1 m³

Peso bruto: 9,9 kg



Guia de instalação

Lembrete caloroso :

Certifique-se de que o carrinho é instalado corretamente de acordo com o manual.

Componentes



- | | |
|----------------------|--------------------|
| ① Pega*1 | ⑤ Tampa curta*2 |
| ② Pannel*1 | ⑥ Gaveta*2 |
| ③ Postes verticais*8 | ⑦ Bandeja*4 |
| ④ Placa de base*1 | ⑧ Pannel central*1 |

Instalação



1. instalar a parte de trás do painel na gaveta e pressionar os pequenos pilares do painel com a mão até que possam ser inseridos na gaveta.



2: Colocar o painel com a gaveta no sítio.



3. Instale a pega no lado direito, como mostra a figura, e coloque duas tampas curtas no lado esquerdo.



4. Vire o painel ao contrário e aperte os quatro postes verticais.



5. Instale os conectores roscados de cabeça dupla no topo dos quatro postes verticais.



6. Cobrir o painel central.



7. Instale e aperte os quatro postes verticais.



8. Cobrir o painel inferior.



9. Fixe os quatro rodízios.
Recomenda-se a utilização de dois rodízios com travão para a instalação na diagonal.



10. Esquema de montagem completo.

Aplicação

Aplicações do produto: hospitais, distribuição de medicamentos, tratamento, dispositivos de monitorização, máquinas de eletrocardiograma; salões de beleza, lares de idosos, instituições de assistência social, sanatórios, hotéis, lojas de animais, escolas, lojas 4S, etc;

2. Método de utilização




1-Corpo principal 2-Casters


Tamanho do carrinho de instrumentos	Comprimento	mm	640
	Largura		456
	A altura do carrinho em relação ao solo		860
Peso	Carga de trabalho segura	KG	50

2.1 Método de utilização dos rodízios

2.1.1 Bloquear o rodízio: Depois de empurrar o carrinho para a posição desejada, premir o botão e bloquear o rodízio quando ouvir um "clique", como mostra a figura abaixo.

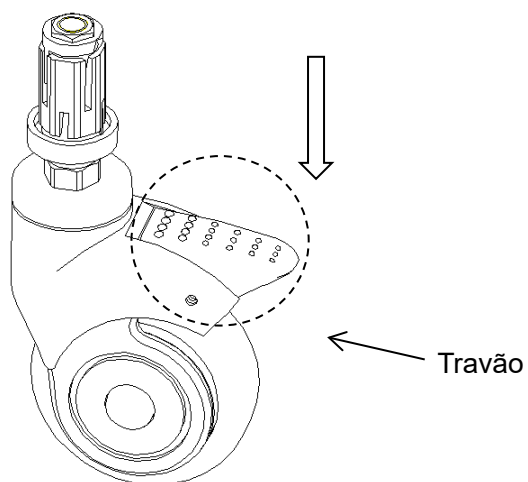

2.1.2 Desbloquear o rodízio: Levante o botão com o pé e desbloqueie o rodízio quando ouvir um "clique".

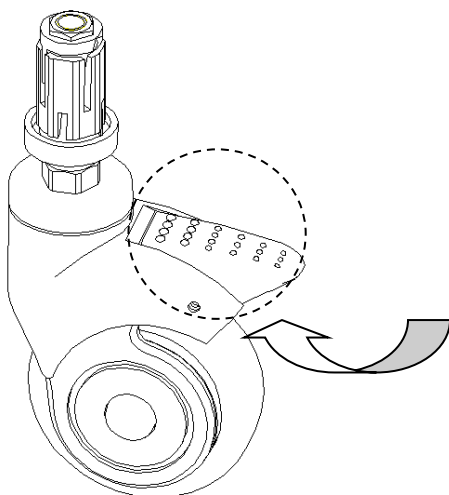

3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Difícil de deslocar o carrinho inteiro	1. O rodízio é bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Soltar o travão 2. Substituir o rodízio

4. Instrumento trólei - manutenção

1. Para utilizar o carrinho em segurança, as inspecções de segurança devem ser efectuadas regularmente. Efectuar uma inspeção completa de seis em seis meses, para garantir que as peças de ligação não estão soltas e que podem ser utilizadas normalmente.

2. Quando o carrinho de instrumentos atinge a sua vida útil máxima, as partes metálicas e plásticas do berço podem ser recicladas.

3. Evite bater no berço e riscar o tubo do berço com objectos afiados.

4. Se a estrutura tiver manchas, sugerimos que a limpe com água, não utilize produtos químicos alcalinos e corrosivos para limpar, evitando a ferrugem na superfície de aço inoxidável.

5. Verificar regularmente os rodízios para evitar bater ou sobrecarregar, o que provocará danos nos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a travagem, o que provocará danos no sistema de travagem.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de linha fiados e outras acumulações podem ser enrolados à volta da roda, retirar os parafusos e as porcas da roda, limpar os detritos e verificar se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser montadas de novo e utilizadas.

8. Avaliar se o rodízio é substituído por todo o rodízio de acordo com o desgaste. Depois de a roda ser substituída ou instalada, certifique-se de que o parafuso e a porca do eixo estão ligados de forma fiável. Se possível, utilize uma anilha ou uma porca de bloqueio.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. No caso de um carrinho de instrumentos equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez para tentar empurrar o carrinho e verificar se o desempenho do travão de cada rodízio é bom. Se a função dos travões dos rodízios falhar devido a desgaste ou danos nas rodas, substituir imediatamente as rodas e voltar a testar o

sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão tiver de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou um revendedor autorizado pela nossa empresa. Sempre que os travões são substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios tem de ser novamente testado.

5. embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho de instrumentos é efectuada de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evitar a precipitação, vibrações violentas e proteção contra a luz solar e a chuva durante o transporte do carrinho de instrumentos.
3. O carrinho de instrumentos deve ser guardado:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressão atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os ficheiros que acompanham a máquina e as facturas deste produto e apresente estes materiais quando a empresa efetuar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema no processo de utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que a nossa empresa possa fornecer-lhe apoio técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. Não desmontar o dispositivo interno deste produto para evitar danos desnecessários. Se a utilização for afetada devido a problemas de qualidade, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou o nosso revendedor autorizado.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver efetivamente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade no prazo de um ano, a empresa reparará o produto gratuitamente para os utilizadores.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO:SKR002-4.640 | REF.: 319-SKR002-4.640

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Equipamento Médico Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parque de demonstração, cidade de Zhangjiagang,

Província de Jiangsu, **China**



SUNGO Europa B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unidade 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Países Baixos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

46980, Valencia (Espanha)

LOTE:HW25036



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com