



Uso Manual

SKR-CT625-1 Carro medico



Imagen solo como referencia

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

STOCK CODE: 870098

1.Instalación de ruedas

Alinee el perno de la rueda con el orificio de montaje en la parte inferior del carro e inserte la rueda. Inserte el tornillo en el orificio de montaje y apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.



1




2




3

2. Utilice el método de ruedas

Bloquee la rueda: después de empujar el carro de anestesia a la posición deseada, presione el botón de ENCENDIDO con el pie y bloquee la rueda cuando escuche un "clic", como se muestra en la figura a continuación.

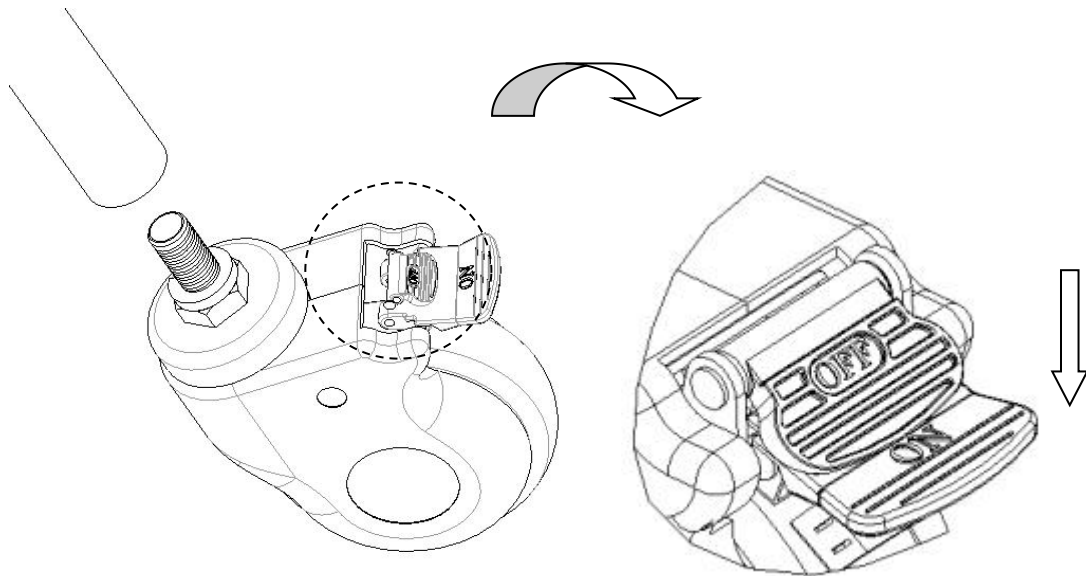

Desbloquee la rueda: presione el botón de APAGADO con el pie y desbloquee la rueda cuando escuche un "clic".

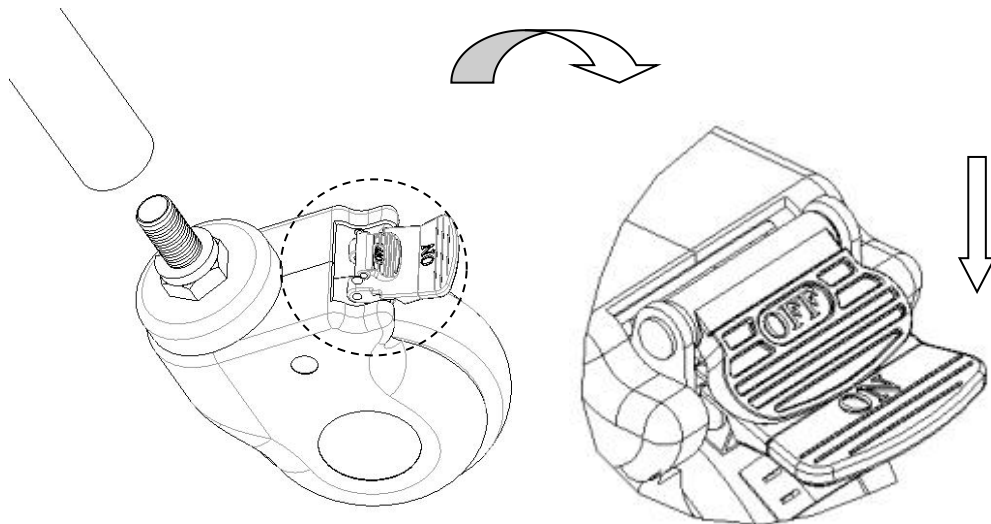

3.Exclusión de fallas

fallas comunes	Razones probables	Excluyendo métodos
Dificultad para mover todo el carro.	1. 1. La rueda está bloqueada sin soltar el freno. 2. 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno, verifique 2.1 2. Reemplace la rueda, verifique 1.2

4. Mantenimiento

1. Para utilizar el carro de anestesia de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en el carro de anestesia. Se recomienda revisarlo cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén flojas y que todo funcione con normalidad.
2. Cuando el marco del carro de anestesia envejece y alcanza un cierto tiempo de servicio, la parte metálica del carro de anestesia y las partes de plástico del marco del carro de anestesia se pueden reciclar.
3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulo afilado o cuchillos durante el uso y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente con manchas, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de anestesia, ya que podría oxidar la superficie de acero inoxidable.
5. Revise regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, lo que podría causar daños a las ruedas.
6. Está prohibido forzar el freno de las ruedas al frenar, lo que dañará el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que se enrolle algo de hilo hilado y otras acumulaciones alrededor de la rueda, retire los pernos y las tuercas de la rueda, limpie los desechos y verifique si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
8. Al juzgar si la rueda se reemplaza de acuerdo con el tiempo de uso, el desgaste, puede reemplazar las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes estén bien ensamblados y conectados. Si es posible, use arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarlo con este proceso.
9. Para las ruedas equipadas con frenos, es necesario verificar periódicamente si los frenos funcionan correctamente. Revise los frenos una vez al día o antes de cada uso. Para un carro de anestesia equipado con varias ruedas de freno, solo se puede bloquear una rueda de freno a la vez, lo que le permitirá intentar empujar el carro de anestesia y comprobar si el rendimiento de los frenos de cada rueda es bueno. Si la función del freno falla debido al desgaste o daño de las ruedas, reemplácelas inmediatamente y luego vuelva a probar el sistema de frenos.

5. Embalaje, Transporte, Almacenamiento

1. El embalaje del carro se realiza de acuerdo con el contrato o estándar del producto.
2. Evite salir corriendo, vibraciones violentas y evitar la luz solar y la lluvia durante el transporte

del carro.

3. El carro debe almacenarse:

- a) Temperatura ambiente: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- b) Humedad relativa: $\leq 85\%$.
- c) Presión atmosférica: $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$.

6. Servicio postventa

- 1. Guarde correctamente los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y debe presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
- 2. Si hay algún problema en el proceso de uso, comuníquese con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda brindarle servicios de mantenimiento y soporte técnico rápidos y precisos de manera oportuna.
- 3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o daña debido a la correcta instalación y uso de acuerdo con las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida con el "certificado" o factura.
- 4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente está dañado o no funciona normalmente debido a problemas de calidad dentro de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
- 5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SKR-CT625-1 | REF.: 319-SKR-CT625-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spain)



LOT:

