



Manual do utilizador

SKR-CT750-1 Carrinho médico



Imagem apenas para referência

1. Instalação dos rodízios

Alinhar o parafuso da roda com o orifício de montagem na parte inferior do carrinho e inserir a roda. Introduzir o parafuso no orifício de montagem e apertar o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio.



1




2




3

2. Método de utilização dos rodízios

Bloquear o rodízio: Depois de empurrar o carrinho de anestesia para a posição pretendida, prima o botão ON com o pé e bloqueie o rodízio quando ouvir um "clique", conforme ilustrado na figura abaixo.

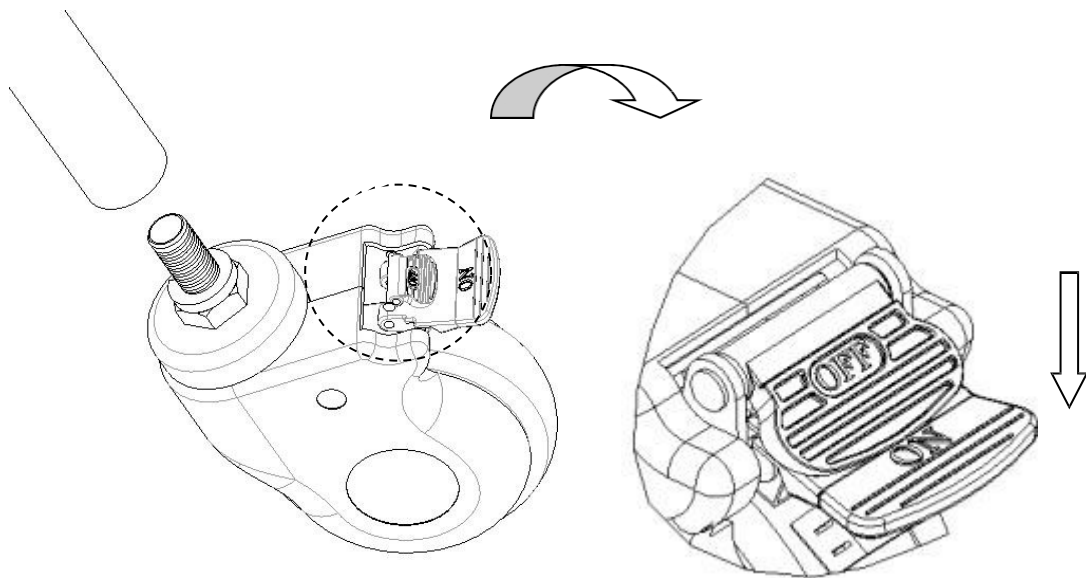

Desbloquear o rodízio: Premir o botão OFF com o pé e desbloquear o rodízio quando ouvir um "clique".

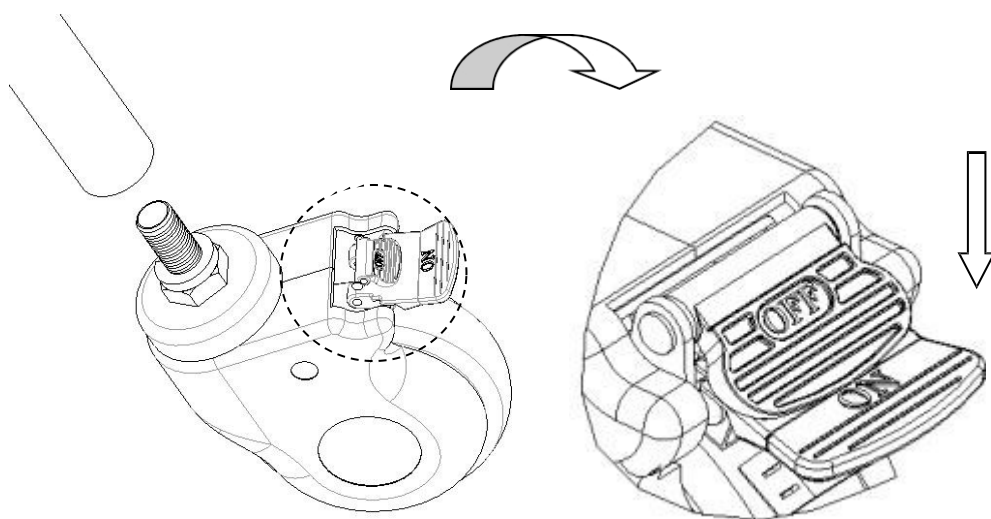

3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Difícil de deslocar o carrinho inteiro	1. O rodízio está bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Soltar o travão, verificar 2.1 2. Substituir o rodízio, verificar 1.2

4. Manutenção

1. Para utilizar o carrinho de anestesia em segurança, é necessário efetuar inspeções de segurança regulares ao carrinho de anestesia. Recomenda-se uma inspeção de seis em seis meses para garantir que as ligações não estão soltas e que todas as operações estão normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de anestesia envelhece e atinge um determinado tempo de serviço, a parte metálica do carrinho de anestesia e as partes plásticas da estrutura do carrinho de anestesia podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante a utilização e limpe-o frequentemente para o manter limpo e seco.

4. Se o painel ficar acidentalmente manchado com nódoas, recomenda-se a sua limpeza. Não utilize produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de anestesia, o que fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verifique regularmente os rodízios para evitar bater ou sobrecarregar, o que causará danos nos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a travagem, o que causará danos no sistema de travagem.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de linha fiados e outras acumulações podem ser enrolados à volta da roda, retirar os parafusos e as porcas da roda, limpar os detritos e verificar se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser montadas de novo e utilizadas.

8. Se o rodízio for substituído de acordo com o tempo de utilização e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e as porcas dos eixos estão bem montados e ligados. Se possível, utilize anilhas ou porcas de bloqueio para o ajudar neste processo.

9. No caso dos rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização. No caso de um carrinho de anestesia equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de anestesia.

se o desempenho do travão de cada rodízio é bom. Se a função do travão falhar devido a desgaste ou danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e volte a testar o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou o revendedor autorizado fornecido pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios deve ser novamente testado.

5. Embalagem, transporte e armazenamento

1. A embalagem do carrinho é efectuada de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Durante o transporte do carrinho, evite a precipitação, vibrações violentas e a exposição à luz solar e à chuva.
3. O carrinho deve ser armazenado:
 - a) Temperatura ambiente: +5 °C~ +40 °C
 - b) Humidade relativa: ≤ 85%.
 - c) Pressão atmosférica: 70 kPa~ 106 kPa.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os ficheiros que acompanham a máquina e as facturas deste produto e apresente-os quando a empresa efetuar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema no processo de utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que a nossa empresa possa fornecer apoio técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver avariado ou danificado devido à instalação e utilização corretas de acordo com as especificações, o produto beneficiará de uma garantia gratuita de um ano e de um serviço de manutenção vitalício com o "certificado" ou fatura.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver efetivamente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade no prazo de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD




MODEL:SKR-CT750-1 | REF.: 319-SKRCT750-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL /
CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

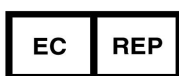

SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CI B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com