YE245C-MAX
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA LIGERA
MANUAL DE USO



DONGGUAN YATTLL INDUSTRY CO., LTD.
Address: No.2 Linchang Road, Pingshan Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Customer Service:
Tel: +86 769 89252728
Fax: +86 769 89252428
info@yattll.com
www.yattll.com

REV.1.1.1.19

CONTENIDO

PRECAUCIÓN: ..... - 2 -

INTRODUCCIÓN ..... - 3 -

MANTENIMIENTO .....- 3 -

AVISO DE SEGURIDAD .....- 4 -

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ..... - 6 -

ADVERTENCIA DE CONDUCCIÓN ..... - 7 -

PLEGAR Y DESPLEGAR ..... - 8 -

BATERÍA Y CARGA ..... - 9 -

MANDO Y MODO MANUAL..... - 10 -

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ..... - 11 -

PRECAUCIÓN:

Lea atentamente este manual antes de utilizar esta SILLA DE RUEDAS MANUAL. El uso inadecuado de la silla de ruedas puede causar daños, lesiones o accidentes de tráfico. Para mayor confort y bienestar en el uso de la silla de ruedas, por favor, lea atentamente el manual de instrucciones.

La batería se mantiene desconectada mientras se empaqueta la silla de ruedas. Encontrará los conectores macho y hembra bajo el asiento. Una vez que tenga la silla, conéctelos.

INTRODUCCIÓN

Agradecemos su compra de la silla de ruedas eléctrica YATTLL YE245C-MAX. El diseño de nuestra silla de ruedas es clásico: combina un asiento cómodo con sistemas de conducción y control excelentes. Estamos convencidos de que las características en el diseño y el uso sencillo de nuestra silla de ruedas le ofrecerán comodidad y bienestar en su día a día.

Lo que le preocupa a usted, nos preocupa a nosotros. Este manual de uso incluye avisos de seguridad, instrucciones de mantenimiento y de uso. Por favor, lea y siga todas las instrucciones presentes en este manual antes de utilizar la silla de ruedas eléctrica por primera vez.

YATTLL no se responsabiliza de daños materiales o personales causados por el mal uso de la silla de ruedas eléctrica. YATTLL no se responsabiliza de daños materiales personales causados por no seguir las instrucciones que se encuentran en este manual. Así, el buen entendimiento de este manual es muy importante antes de empezar a utilizar la silla de ruedas.

YATTLL se reserva el derecho de hacer cambios a la silla de ruedas si fuera necesario. Le garantizamos que los posibles cambios serían leves y no alterarían este manual de uso ni el producto que ha adquirido.

Por favor, conserve este manual ya que también forma parte de la compra de la silla de ruedas. Si encuentra cualquier problema con su silla de ruedas eléctrica, consulte el manual de instrucciones. Si el problema persiste, contacte con el proveedor.

Por último, esperamos que disfrute del funcionamiento de su silla de ruedas eléctrica. Que la silla de ruedas le proporcione no solo comodidad, sino también satisfacción y bienestar. Valoramos enormemente, además, que comparta sus observaciones con nosotros.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento diario de la silla de ruedas eléctrica es fundamental. Un mantenimiento adecuado puede aumentar la eficiencia y la vida útil de la silla de ruedas.

1. Limpie la silla de ruedas con un paño húmedo y quítele el polvo una vez por semana para preservar su apariencia.
2. Compruebe que la batería está completamente cargada antes de utilizar la silla de ruedas en el exterior.
3. No se levante sobre el reposapiés, la silla podría perder el equilibrio y provocar daños al usuario/a.

4. Mantenga la silla seca y limpia.
5. No utilice productos químicos corrosivos para limpiar la silla de ruedas.
6. Esta silla de ruedas es perfecta para su uso en superficies lisas, por lo que la batería dura más.

AVISO DE SEGURIDAD

Antes de encender y utilizar la silla de ruedas eléctrica es necesario LEER y COMPRENDER por completo este manual de uso. A medida que vaya utilizando la silla de ruedas en sus actividades cotidianas, se enfrentará a situaciones complicadas, como a espacios reducidos, superficies irregulares, escaleras mecánicas, o giros complicados. A continuación, le mostramos recomendaciones para su seguridad y mejor utilización de la silla de ruedas:

Práctica

Esta silla de ruedas está diseñada para ayudarle en sus actividades cotidianas. Por este motivo, su uso es sencillo. Tómese el tiempo que necesite para practicar con la silla y pronto se sentirá con la confianza y seguridad para poder controlarla sin dificultad.

Sistema de plegado

El diseño compacto de la silla de ruedas hace que, al plegarla, su tamaño sea reducido. Practicar cómo plegar y desplegar la silla de ruedas le ayuda a continuar con sus actividades diarias.

Cinturón de seguridad

Una vez sentado/a en la silla y preparado/a para manejarla, abróchese el cinturón de seguridad.

Vías públicas y carretera

Debido a la dificultad que supone utilizar la silla de ruedas en vías públicas o carreteras, se recomienda ir acompañado/a por un ser querido. Modere la velocidad y tenga cuidado con el resto de viandantes.
Debido a la poca visibilidad de la silla de ruedas por parte del tráfico, se recomienda que no la utilice por carretera.

Ascensor

Considere el ancho de la puerta del ascensor y las dimensiones del ascensor antes de entrar. Se requiere paciencia y determinación para poder entrar. Si se encuentra en el. umbral de la puerta del ascensor y empieza a cerrarse, empuje la puerta para que el sensor le detecte y la puerta vuelva a abrirse.

Sortear escalones y escaleras mecánicas

No conduzca la silla de ruedas por escalones ni escaleras mecánicas.

Sortear escalones y escaleras mecánicas

No conduzca la silla de ruedas por escalones ni escaleras mecánicas.

BORN TO INNOVATE





Características:

① Empuñadura

② Reposabrazos ergonómicos y abatibles

③ Mando sin cepillo

④ Asiento y respaldos acolchados y ergonómicos

⑤ Ruedas delanteras 8”

⑥ Ruedas traseras 12,5”

⑦ Reposapiés plegable

⑧ Bolsillo

⑨ Mecanismo de plegado

⑩ Sistema de suspensión

⑪ Batería de ion de litio

⑫ Tubo de soporte

⑬ Motor sin cepillo

⑭ Ruedas antivuelco

Maximum Loading Weight: 180 kg

ADVERTENCIA DE CONDUCCIÓN

ANTES DE UTILIZARLA:

1. *Por favor, lea completamente este manual y siga todas las instrucciones.*
2. *Compruebe que la silla de ruedas está completamente desplegada.*
3. *Asegúrese de que los conectores macho y hembra están bien conectados. Los encontrará bajo el asiento.*
4. *Una vez sentado/a en la silla de ruedas eléctrica, abróchese el cinturón.*
5. *Encienda el mando y presione el botón de disminución de la velocidad hasta el nivel de velocidad 1.*
6. *Compruebe que está en un lugar seguro antes de manejar la silla.*

DURANTE SU USO:

1. *Conduzca solamente en asfalto, aceras o zonas para peatones. No conduzca en carreteras ni autovías.*
2. *No conduzca la silla de ruedas bajo los efectos del alcohol o si está cansado/a.*
3. *Tenga precaución al conducir en lugares con poca luz.*
4. *Tenga precaución al conducir en lugares atestados de gente o centros comerciales.*
5. *Lleve acompañante cuando practique o cuando vaya al exterior.*
6. *No utilice su silla de ruedas para transportar bienes. Los bolsillos están diseñados para almacenar objetos pequeños y ligeros, como libros.*
7. *No se baje de la silla de ruedas mientras está en movimiento.*
8. *No utilice la silla de ruedas en lugares con poca luz.*
9. *Lleve cuidado con que su ropa u otras pertenencias no se enganchen en las ruedas.*

BORN TO INNOVATE

PLEGAR Y DESPLEGAR

Plegar la silla



1. Asegúrese de que la silla está en modo eléctrico; 2. Mueva hacia arriba la sujeción de plástico para desbloquearla;



Presione el mango con una mano después de abrir la sujeción de plástico;



Use una mano para sujetar el mango, y la otra para sujetar el tubo del asiento. Después, doble la silla;



Doble el reposapiés



De esta forma quedará su silla de ruedas una vez plegada;




Así, ya podrá transportar la silla de ruedas;

Desplegar la silla



1, Asegúrese de que la silla está en modo eléctrico; 2. Abra el reposapiés;

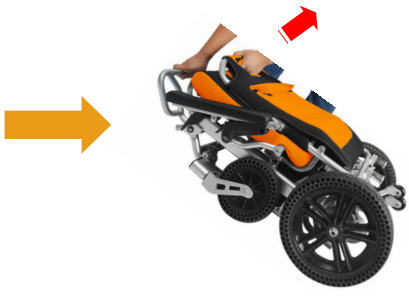

Tire del mango



Presione el tubo que sostiene el reposapiés;



Tu silla de ruedas quedará así.



Presione la sujeción de plástico para bloquear la estructura.




BATERÍA Y CARGA

Batería:

La silla de ruedas YATTLL YE245C-MAX tiene una sola batería de litio de 24V 15Ah que se encuentra en el bolsillo debajo del asiento.





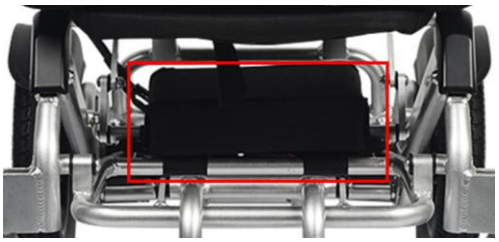

Por favor, carga y descarga de la batería con regularidad, que ayudará a mantener el tiempo de vida de la batería. Por favor, recuerde cargar la batería al menos una vez cada dos semanas.

Precaución:

1, No abra la batería , por favor vaya a la tienda donde usted compra para ayuda.
2, No parada circuite.
3, Debe ser desechado correctamente.
4, Usa el cargador especificado solamente.
5, Do ponga la batería y el cargador en la temperatura caliente, la batería puede explotar si dispuesto en el fuego.

CARGANDO TU SILLA DE RUEDAS

Encontrará fácilmente el cargador externo en la caja. Hay dos formas de cargar la silla de ruedas:
1. Para cargar a través del mando, hay una conexión de carga en la parte inferior del mando, puede cargar la batería conectando el cargador al controlador;





2. Para cargar la batería directamente, hay que sacar la batería del bolsillo.




INDICADOR DE CARGA

Las luces del cargador indican los diferentes estados de carga. Estos indicadores se encuentran en el propio cargador. Antes de la carga, se mostrará una luz roja; durante la carga, se mostrará una luz naranja; una vez la carga está completa, se mostrará una luz verde.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA


Para garantizar la máxima vida útil de la batería y el uso continuo de la silla de ruedas, siga estas pautas de carga según su uso:

1. *Se necesitan 6 horas para cargar la batería por completo. No la deje cargando durante la noche; retire el cargador cuando el indicador de carga se muestre en verde;*
2. *Si usa la silla de ruedas a diario, cargue la batería antes de que se acabe.*
3. *Si usa la silla de ruedas con poca frecuencia, cargue la batería una vez a la semana durante 6 horas.*

MANDO Y MODO MANUAL

Mando


El mando es sin cepillo, lo que lo hace únicamente compatible con motores sin cepillo. Las funciones se detallan a continuación:

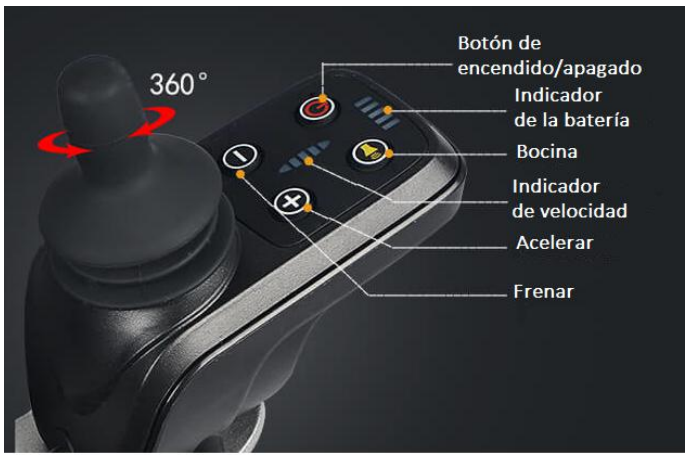




MODO MANUAL

Para su comodidad, Yattll YE245C-MAX está disponible tanto para el modo eléctrico como para el modo manual.

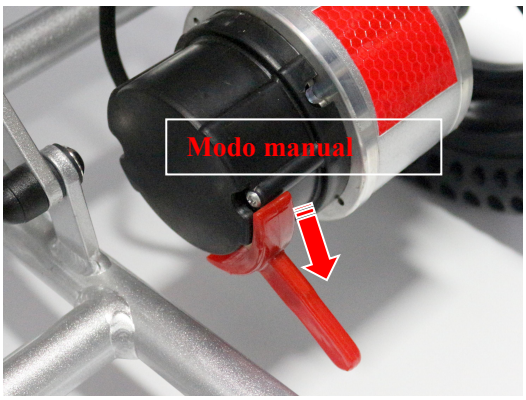

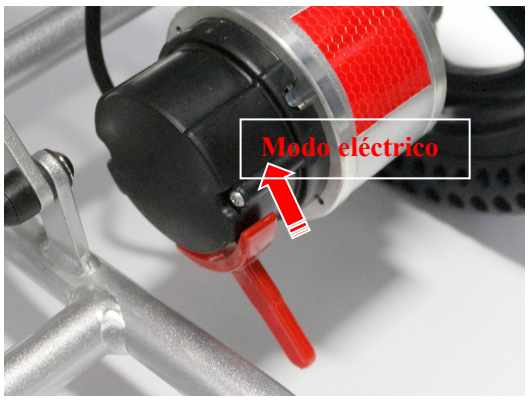

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La corriente no se enciende	1.El sistema de alimentación no está conectado 2.El sistema de alimentación y el mando no están conectados 3.Pérdida de carga de la batería	1.Compruebe los cables 2.Conecte las cuatro conexiones principales al mando 3.Cargue la batería
Visualización defectuosa del panel del control de conducción	1.La luz roja nº 1 parpadea: batería baja 2.La luz roja nº 2 parpadea: no hay señal del mando 3.La luz roja nº 3 parpadea: cargando 4.La luz roja nº 4 parpadea: el motor no está conectado 5.La luz roja nº 5 parpadea: el freno electromagnético no está conectado	1.Cargar la batería 2.Conecte las cuatro conexiones principales al mando o reemplace el mando 3.Está prohibido conducir la silla mientras está cargando 4. Introduzca bien el cable del motor en el enchufe. 5. Introduzca bien el cable del motor en el enchufe.
La silla tiembla y hace ruido al empezar a moverse	1.El límite de velocidad máxima es muy bajo 2.El motor no llega a arrancar	1.Suba el límite de velocidad máxima 2.Reemplace el motor
La electricidad se ha cortado automáticamente	La batería ha cortado la electricidad para protegerse debido a una resistencia demasiado alta	Encienda la corriente otra vez
Al encender el mando de conducción, la luz no funciona	La batería no tiene carga	Conecte el cargador y encienda la corriente tras 10 minutos de carga
La luz sigue sin funcionar después de la conexión	El enchufe no está bien conectado, compruebe la toma de corriente	Conecte la toma de corriente y compruebe si está floja
No ha podido plegar la silla de ruedas	El asiento no está bien plegado o el tornillo no se ha aflojado	Baje el asiento y desenrosque el tornillo
Empuja con las manos pero la silla no se mueve	La silla no está en modo manual	Mueva la barra de marchas al modo eléctrico