
Manual de instrucciones de la cama de hospital de tres funciones (Español)


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

I. **Nombre del producto: Cama de hospital de tres funciones**

II. **Número de tipo:** A02-6

III. **Composición estructural:** (como en la imagen)

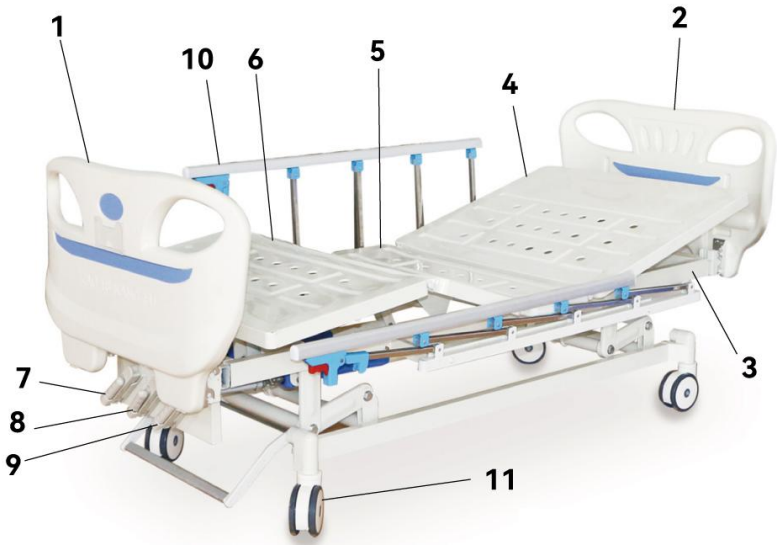

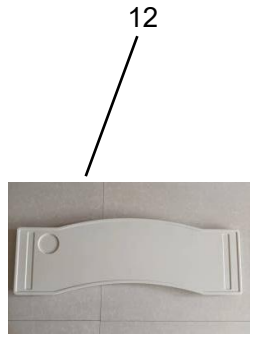



1) Piecero de la cama
2) Cabecero de la cama
3) Estructura de la cama
4) Panel trasero
5) Panel de la cama soldado
6) Panel de las patas
7) Manivela para elevar el respaldo
8) Manivela para elevar la cama
9) Manivela para elevar las patas
10) Barandillas
11) Ruedas con freno central
12) Mesa de comedor
13) Soporte para suero

IV. Aplicación: Es adecuada para el cuidado y la recuperación del paciente, y facilita su asistencia diaria.

1. El uso de camas hospitalarias debe ser supervisado por profesionales.
2. Las personas que midan más de 2 m y pesen más de 200 kg no pueden usar esta cama.
3. Este producto debe ser utilizado por una sola persona. No debe ser utilizado por dos o más personas al mismo tiempo.
4. El producto tiene tres funciones: elevación de espalda, elevación de piernas y elevación general.

V. Instalación:

1. Ruedas de la cama

Frena las ruedas e instálalas en las patas.

2. Cabecero y piecero de la cama

La parte interior del cabecero y el piecero cuenta con un sistema de sujeción. Las dos columnas metálicas de

montaje del cabecero y el piecero deben presionarse verticalmente hacia abajo para encajarlas en la ranura correspondiente y fijarse con el gancho del cabecero y el piecero.

3. Barandillas

Instala las barandillas, fija los tornillos a través de los orificios de las barandillas y el marco de la cama, y ajústalos con las tuercas.

VI. Cómo usar:

Esta cama de hospital está equipada con tres manivelas cuyas funciones son: elevación del respaldo, elevación general y elevación de las piernas.

1. Elevación del respaldo: Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para elevar el respaldo.
Gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el respaldo.
2. Elevación general: Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para elevar la cama.
Gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar la cama. .
3. Elevación del reposapiés: Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para elevar el reposapiés.
Gire la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el reposapiés..

VII. Atención

1. Compruebe que el cabecero y el piecero estén bien sujetos al armazón de la cama.
2. La carga de trabajo segura es de 120 kg y la carga máxima es de 250 kg.
3. Después de instalar la cama hospitalaria, colóquela en el suelo y compruebe que no se tambalee.
4. Lubrique el mecanismo de transmisión periódicamente.
5. Revise las ruedas periódicamente. Si no están bien ajustadas, ajústelas.
6. Al utilizar las funciones de elevación de respaldo, elevación de piernas y elevación general, no coloque las extremidades entre el armazón de la cama y el panel o la barandilla para evitar lesiones.

VIII. Transporte

Los productos embalados pueden transportarse por medios de transporte convencionales. Durante el transporte, protéjalos de la luz solar directa, la lluvia y la nieve. Evite el transporte con sustancias tóxicas, nocivas o corrosivas.

IX. Almacenar

Los productos envasados deben colocarse en una habitación seca y bien ventilada, sin materiales corrosivos ni fuentes de calor.

HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD
A1-2703 SHIDAI BUILDING,GUANG AN STREET.CHANG AN DISTRICT.SHIJIAZHUANG CITY.HEBEI PROVINCE.CHINA

EC REP
SUNGO Europe B.V
Fascinato Boulevard 522,unit 1.7.2909VA
Capelle aan del Ussel, The Netherlands

Quirumed S.L.U. ClF B97267405
C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,
Valencia (Spain)

CE MD