
Manuel d'instructions du lit d'hôpital à trois fonctions (Français)


	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

I. Nom du produit : Lit d'hôpital à trois fonctions

II. Numéro de type : A02-6

III. Composition structurelle : (voir illustration)

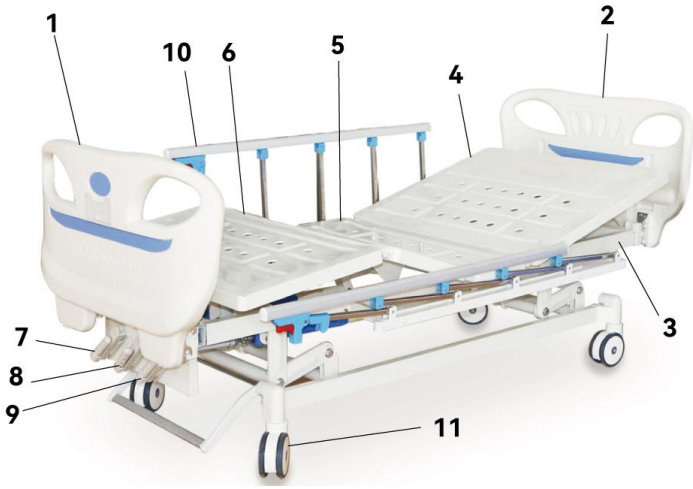

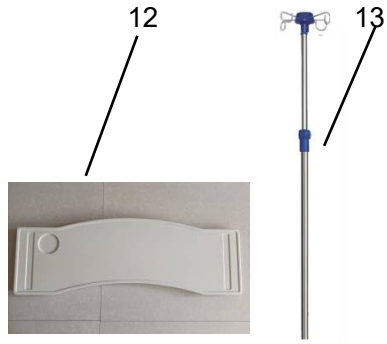

1) Pied de lit
2) Tête de lit
3) Cadre de lit
4) Panneau arrière
5) Panneau de lit soudé
6) Panneau de pieds
7) Manivelle de levage du dossier
8) Manivelle de levage du lit
9) Manivelle de levage des pieds
10) Barrières latérales
11) Roulettes avec frein central
12) Table à manger
13) Potence à perfusion

IV. Application: Ce lit est adapté aux soins et à la convalescence des patients et facilite l'assistance quotidienne.

1. L'utilisation de ce lit médicalisé doit être supervisée par un professionnel de santé.
2. Ce lit est déconseillé aux personnes mesurant plus de 2 m et pesant plus de 200 kg.
3. Ce produit est destiné à un usage individuel uniquement. Il ne doit pas être utilisé par deux personnes ou plus simultanément.
4. Ce produit offre trois fonctions : élévation du dossier, des jambes et élévation complète.

V. Installation :

1. Roulettes du lit: Bloquez les roulettes, puis installez-les sur les pieds.
2. Tête et pied de lit: L'intérieur de la tête et du pied de lit est équipé d'un système de fixation. Appuyez verticalement sur les deux colonnes de fixation métalliques correspondantes de la tête et du pied de lit pour les insérer dans les rainures de fixation inversées, puis verrouillez-les à l'aide des crochets.

3. Barrières de sécurité: Installez les barrières de sécurité, fixez les vis à travers les trous des barrières et du cadre du lit, puis serrez avec les écrous.

VI. Mode d'emploi :

Ce lit d'hôpital est équipé de trois manivelles dont les fonctions sont les suivantes : relevage du dossier, relevage général et relevage des jambes.

1. Relevage du dossier : Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le dossier.
Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le dossier.
2. Relevage général : Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le lit.
Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le lit.
3. Relevage des jambes : Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le panneau des jambes.
Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le panneau des jambes.

VII. Précautions d'emploi

1. Vérifiez que la tête et le pied de lit sont bien fixés au cadre du lit.
2. La charge de travail sécuritaire est de 120 kg, la charge maximale est de 250 kg.
3. Après l'installation du lit d'hôpital, posez-le au sol et vérifiez qu'il ne vacille pas.
4. La tringlerie doit être lubrifiée régulièrement.
5. Vérifiez régulièrement les roulettes. Si elles sont desserrées, resserrez-les.
6. Lors de l'utilisation des fonctions de relevage du dossier, des jambes et du lit, ne placez pas vos membres entre le cadre du lit et le panneau ou la barrière de sécurité afin d'éviter toute blessure.

VIII. Transport

Les produits emballés peuvent être transportés par les moyens de transport habituels. Pendant le transport, veillez à les protéger du soleil, de la pluie et de la neige. Évitez le transport avec des substances toxiques, nocives ou corrosives.

IX. Stockage

Les produits emballés doivent être stockés dans un local sec et bien ventilé, à l'abri des matériaux corrosifs et des sources de chaleur.

HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD
A1-2703 SHIDAI BUILDING,GUANG AN STREET.CHANG AN DISTRICT.SHIJIAZHUANG CITY.HEBEI PROVINCE.CHINA

EC REP
SUNGO Europe B.V
Fascinato Boulevard 522,unit 1.7.2909VA
Capelle aan del Ussel, The Netherlands

Quirumed S.L.U. ClF B97267405
C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,
Valencia (Spain)

CE MD