
Manuale di istruzioni per il letto ospedaliero a tre funzioni (italiano)

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

I. Nome del prodotto: Letto ospedaliero a tre funzioni

II. Codice modello: A02-6

III. Composizione strutturale: (come da immagine)

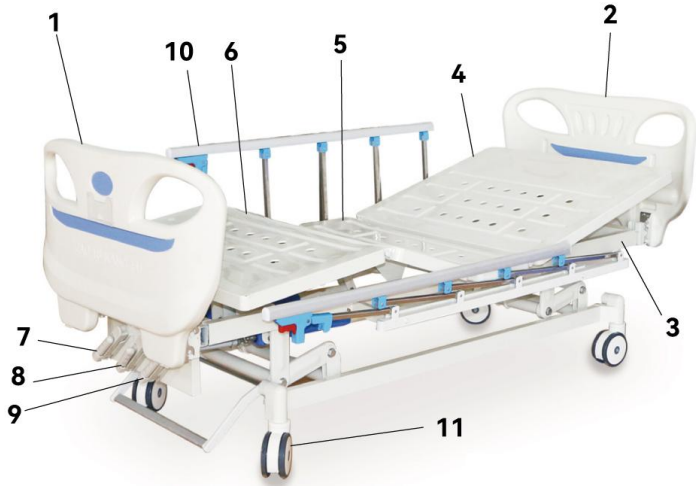





1) Pediera del letto
2) Testiera del letto
3) Telaio del letto
4) Pannello posteriore
5) Pannello del letto saldato
6) Pannello delle gambe
7) Manovella per il sollevamento dello schienale
8) Manovella per il sollevamento complessivo
9) Manovella per il sollevamento delle gambe
10) Sponde laterali
11) Ruote con freno centrale
12) Tavolino da pranzo
13) Asta per flebo

IV. Applicazione: È adatto per l'assistenza e la convalescenza dei pazienti e facilita la cura quotidiana del paziente.

1. L'utilizzo dei letti ospedalieri deve essere supervisionato da personale qualificato.
2. Le persone di altezza superiore a 2 metri e di peso superiore a 200 kg non possono utilizzare questo letto.
3. Questo prodotto deve essere utilizzato da una sola persona alla volta. Non utilizzare due o più persone contemporaneamente.
4. Il prodotto ha tre funzioni: sollevamento dello schienale, sollevamento delle gambe e sollevamento complessivo.

V. Installazione:

1. Ruote del letto: Bloccare le ruote, quindi installarle nelle gambe.
2. Testiera e pediera del letto: Il lato interno della testiera e della pediera è dotato di inserti a incastro. Le due colonne di montaggio metalliche corrispondenti della testiera e della pediera devono essere premute con

forza verticale verso il basso per incastrare le colonne di montaggio metalliche nell'apposita scanalatura e bloccate con il gancio della testiera e della pediera.
3. Sponde laterali
Installare le sponde laterali, fissare le viti attraverso i fori delle sponde e del telaio del letto e serrare con i dadi.

VI. Come si usa:
Questo letto ospedaliero è dotato di tre manovelle, le cui funzioni sono: sollevamento dello schienale, sollevamento complessivo, sollevamento delle gambe.
1. Sollevamento dello schienale: Ruotare la manovella in senso orario per sollevare lo schienale,
Ruotare la manovella in senso antiorario per abbassare lo schienale.
2. Sollevamento complessivo: Ruotare la manovella in senso orario per sollevare l'intero letto,
Ruotare la manovella in senso antiorario per abbassare l'intero letto.
3. Sollevamento delle gambe: Ruotare la manovella in senso orario per sollevare la parte delle gambe,
Ruotare la manovella in senso antiorario per abbassare la parte delle gambe.

VII. Attenzione
1. Verificare che la testiera e la pediera siano fissate saldamente al telaio del letto.
2. Il carico di lavoro sicuro è di 120 kg, il carico massimo è di 250 kg.
3. Dopo aver installato il letto ospedaliero, posizionarlo a terra e verificare che non oscilli.
4. Il meccanismo di azionamento deve essere lubrificato regolarmente.
5. Controllare regolarmente le ruote. Se non sono ben serrate, stringerle nuovamente. 6. Durante l'utilizzo delle funzioni di sollevamento dello schienale, delle gambe e del letto in generale, non posizionare gli arti tra il telaio del letto e il pannello o la sponda laterale, per evitare lesioni.

VIII. Trasporto
I prodotti imballati possono essere trasportati con i normali mezzi di trasporto. Durante il trasporto, prestare attenzione a proteggere il prodotto da sole, pioggia e neve. Evitare il trasporto con sostanze tossiche, nocive o corrosive.

IX. Conservazione
I prodotti imballati devono essere conservati in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da materiali corrosivi o fonti di calore.

HEBEI WEBIAN MEDICAL INSTRUMENT TRADING CO.,LTD
A1-2703 SHIDAI BUILDING,GUANG AN STREET.CHANG AN
DISTRICT.SHIJIAZHUANG CITY.HEBEI PROVINCE.CHINA

EC REP
SUNGO Europe B.V
Fascinato Boulevard 522,unit 1.7.2909VA
Capelle aan del Ussel, The Netherlands

Quirumed S.L.U. ClF B97267405
C/ Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna,
Valencia (Spain)

CE MD