




Utilizador manual

A045-1

Mesa Ginecológica em Aço Inoxidável

Código de registo: SKF-A

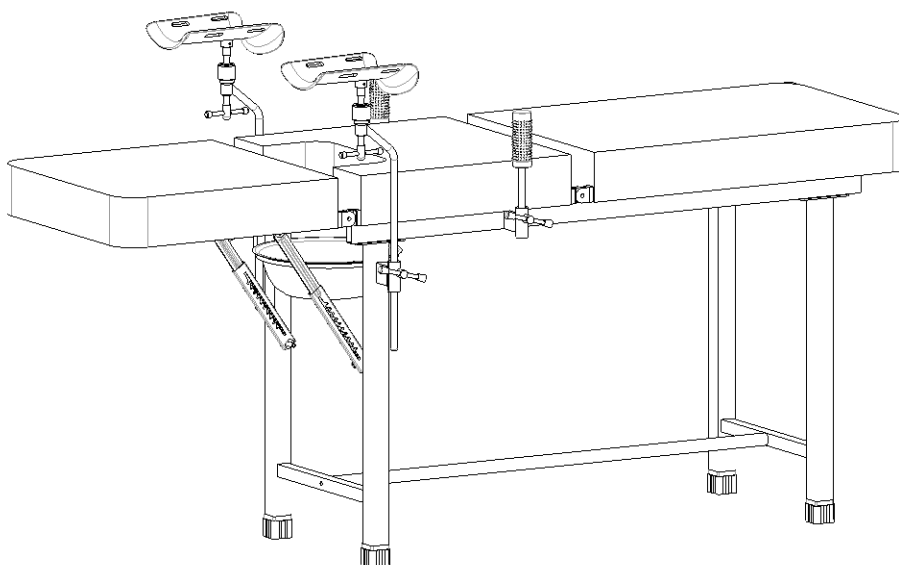

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098

Conteúdo

Introdução ao manual.....	2
1. Guia de instalação.....	3
1.1 Lista de acessórios standard.....	3
1.2 Instalação do pé de cama.....	6
1.3 Instalação do tubo de ligação.....	7
1.4 Instalação do nível mecânico.....	8
1.5 Instalação do pedal.....	9
1.6 Instalação da barra de mão.....	10
2. Método de utilização.....	11
2.1 Ajuste da secção das costas.....	12
2.2 Ajuste da secção das pernas.....	13
3. Mesa ginecológica de aço inoxidável - manutenção.....	13
4. Embalagem, transporte, armazenamento.....	14
5. Serviço pós-venda.....	14

Introdução ao manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente os passos antes de o instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.

Este manual é aplicável à mesa ginecológica de aço inoxidável A045-1. Contém o método de instalação, as instruções de funcionamento e os pontos de controlo de manutenção.

Os gráficos deste manual servem apenas de referência para os utilizadores. Na utilização efectiva, consulte o objeto real.

Este manual do utilizador inclui a descrição, as instruções, a manutenção e os parâmetros técnicos do produto.

Em caso de dúvidas, contactar o centro de assistência pós-venda ou o distribuidor.

► Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve lê-lo e cumpri-lo.





Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com a utilização e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão

Depois de abrir a caixa da embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa da embalagem:

Tabela a:

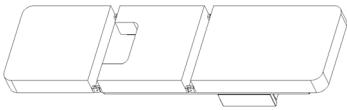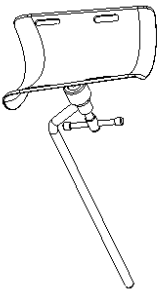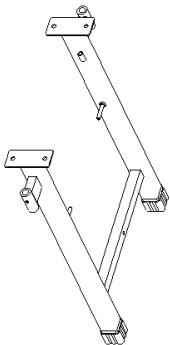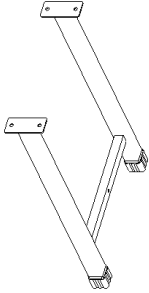NO.	Nome	Imagem	Especificação	QUANTIDADE	Unidade
1	Placa de cama		/	1	pc
2	Estribo		/	2	peças
2	Atrás do pé da cama		L427*W653mm	1	pç
3	Pé da cama da frente		L427*W653mm	1	pç











4	Bacia		ϕ 300*85mm	1	pç
5	Aro de bacia		ϕ 285-L80mm	1	pç
7	Tubo de ligação		Φ 25*993-M8mm	1	pçs
8	Parafuso	/	Consultar a tabela a.1	1	ajustar

Tabela a.1


NO.	Nome	Imagem	Especificação	QUANTIDADE	Unidade
1	Parafuso hexagonal		M10*25mm	8	peças
2	Almofada plana		$\Phi 10 * \Phi 21 * H1.8mm$	8	pcs
3	Anilha de mola		$\Phi 10 * \Phi 17 * H3mm$	8	pcs
4	Porca		M10mm	8	peças
5	Parafuso hexagonal		M8*40mm	2	peças
6	Almofada plana		$\Phi 8 * \Phi 16 * H1.2mm$	2	pcs
7	Anilha de mola		$\Phi 8 * \Phi 14 * H2.5mm$	2	pcs
8	Porca de bloqueio		M8mm	2	peças
9	Conjunto completo de cama ginecológica		Sete peças um conjunto	2	peças
10	Estrutura da mão		$\Phi 32mm$	2	peças
11	Manga de plástico para o punho		$\Phi 32mm$	2	pcs

1.2 Instalação do pé da cama


Coloque uma almofada de proteção e coloque o corpo do carrinho de instrumentos de cabeça para baixo;

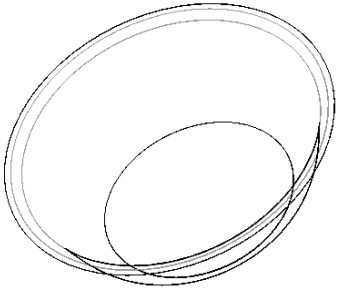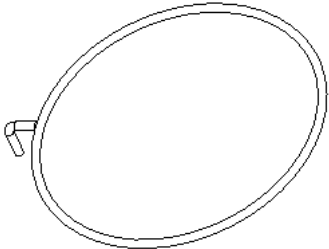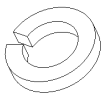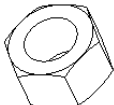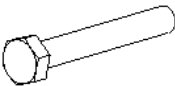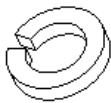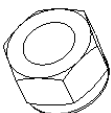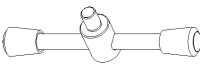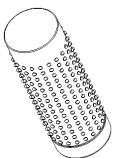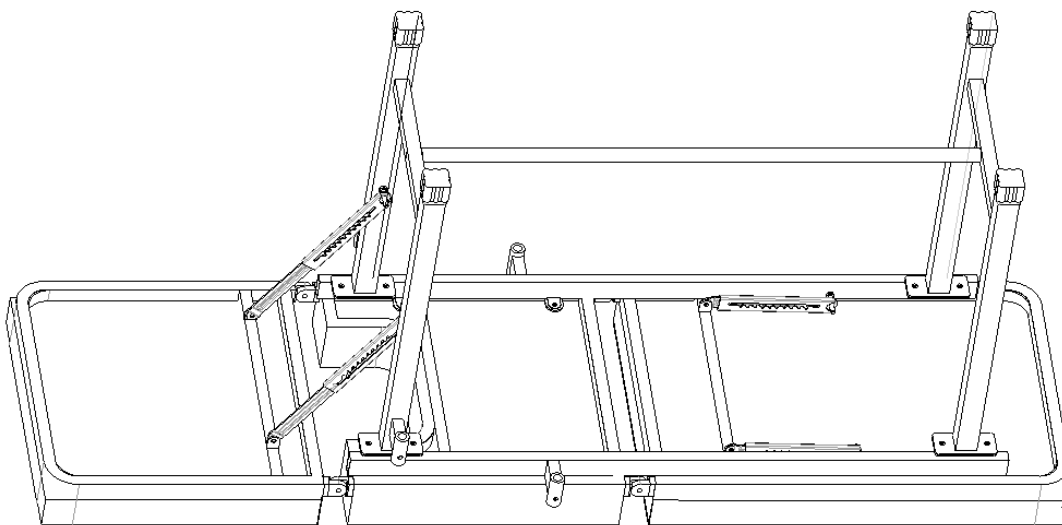


Parafuso sextavado

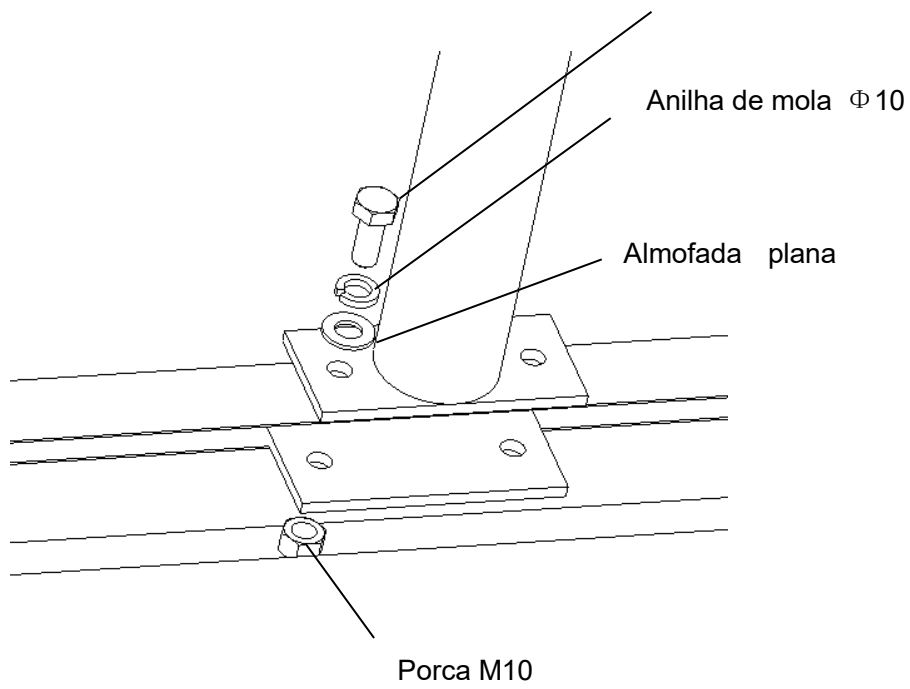



1.3 Instalação do tubo de ligação

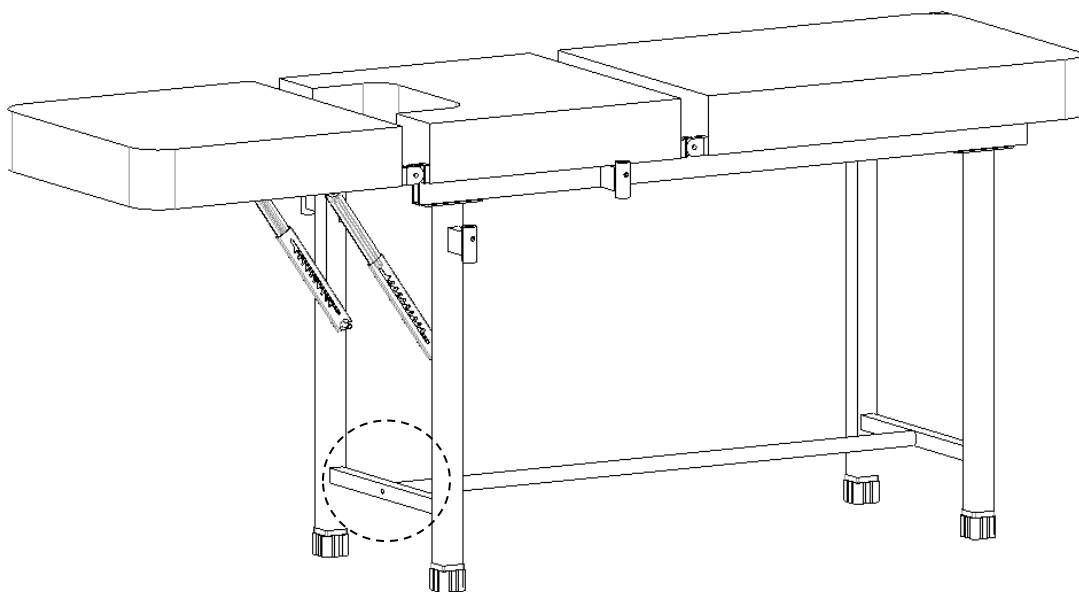

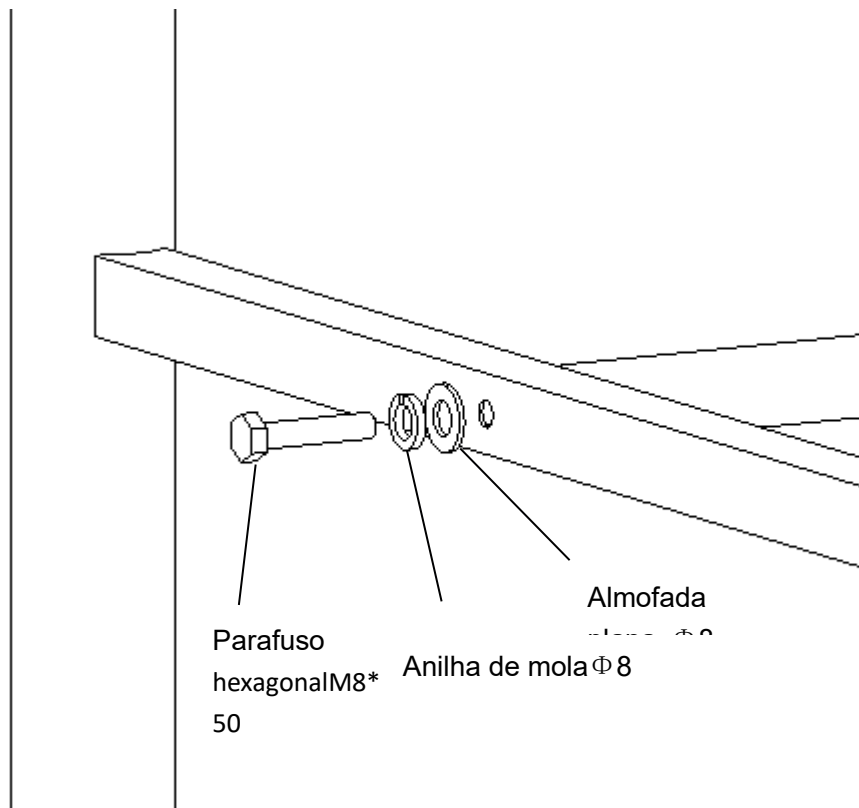


1.4 Instalação mecânica do nível

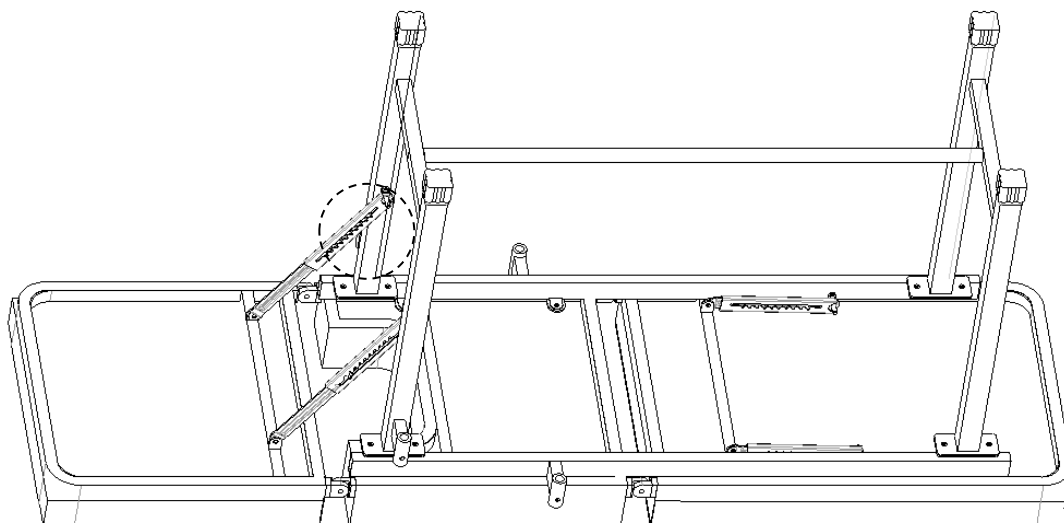


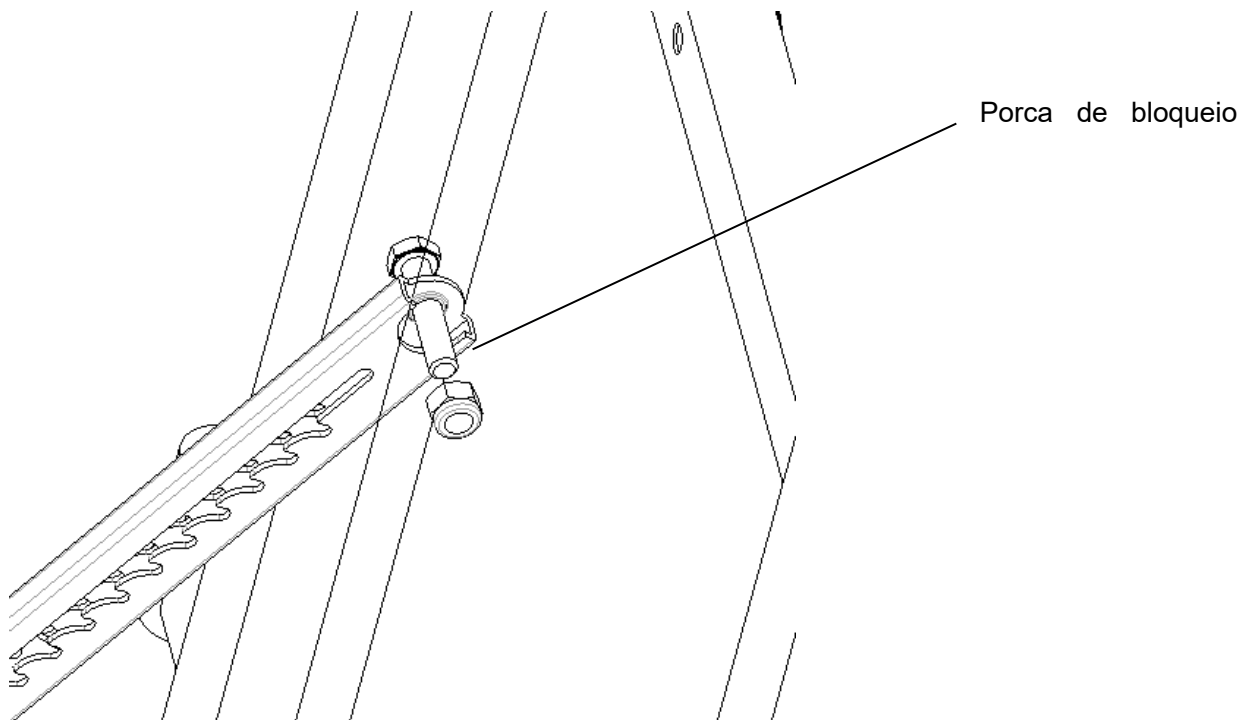


1.5 Instalação do pedal

Introduzir o pedal na manga do parafuso, rodar a chave 1 para ajustar a altura do pedal e rodar a chave 2 para ajustar o ângulo do pedal em 360°

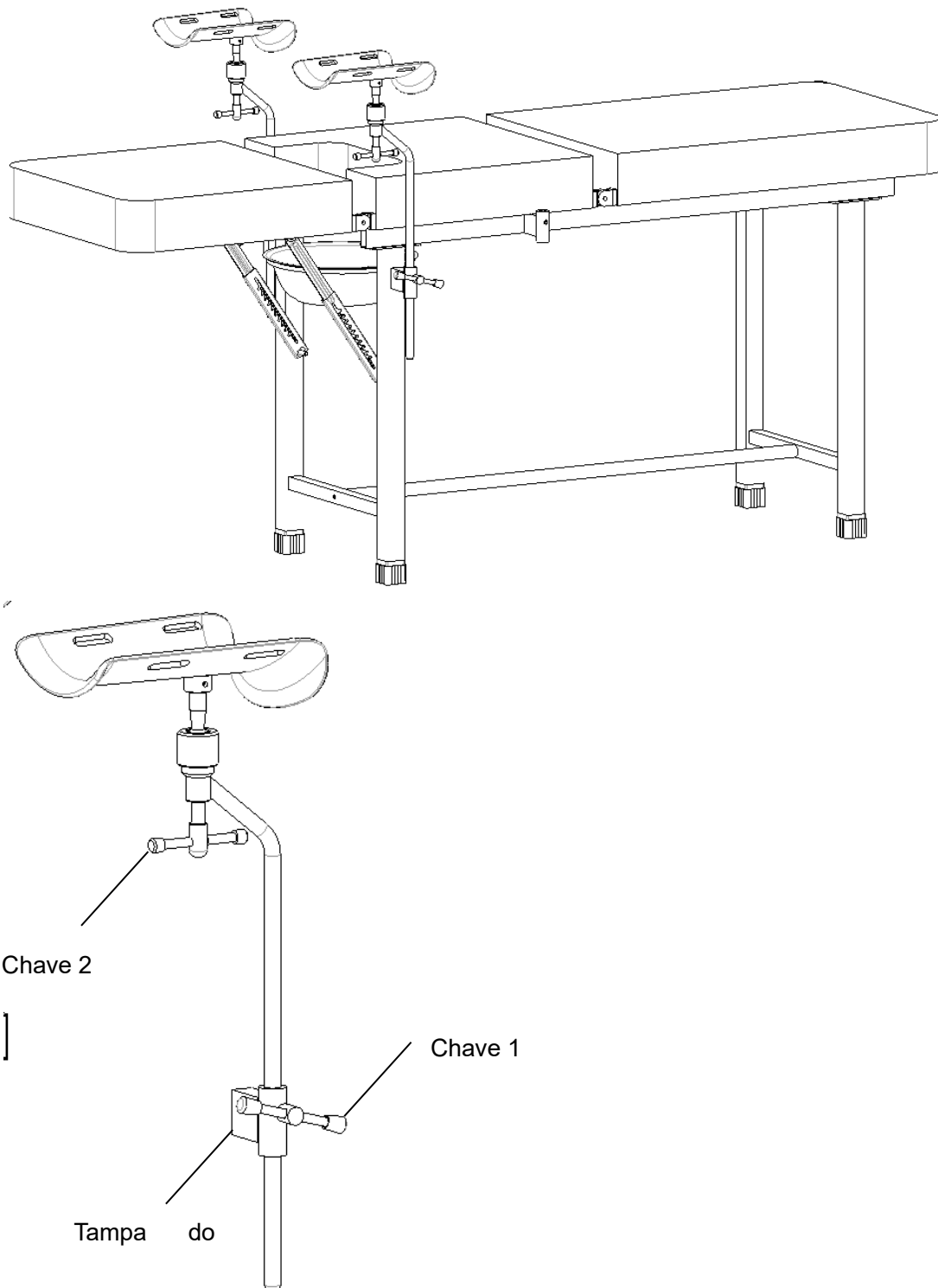


1.6 Instalação da barra de mão

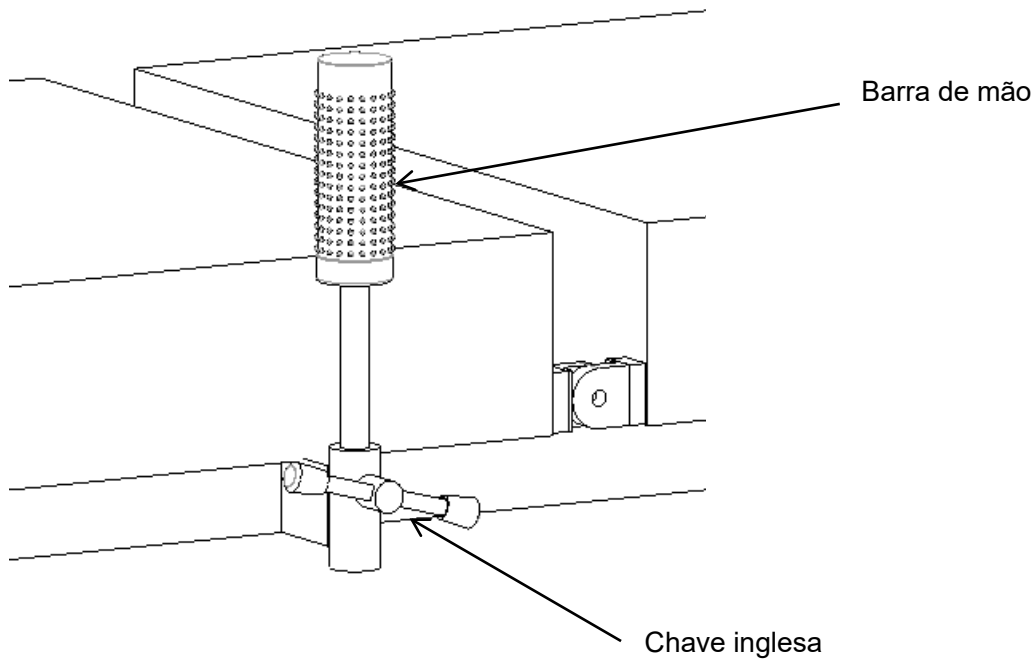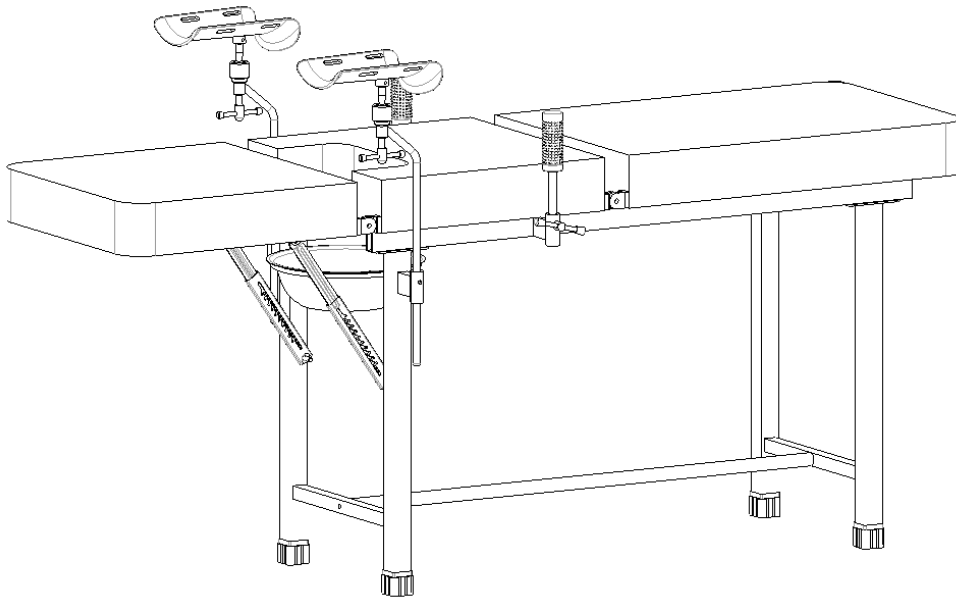

Rodar a chave pode ajustar a altura da barra de mão


2. método de utilização

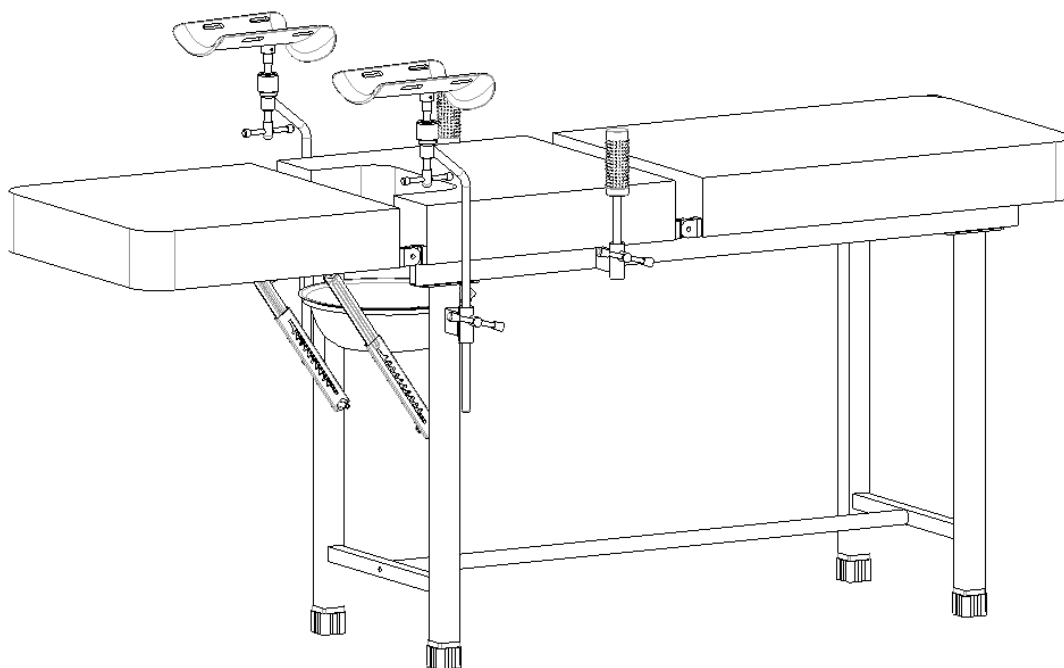

Dimensão	Comprimento	mm	1820±10
	Largura		590±10
	Altura		800±10
Peso	Capacidade de carga segura	Kg	170


2.1 Ajuste da secção posterior

Levantar o painel posterior diretamente para o ângulo desejado para completar a elevação do painel posterior. Elevar a placa dorsal até ao ângulo máximo e, em seguida, baixar a placa dorsal para completar a descida da placa dorsal.

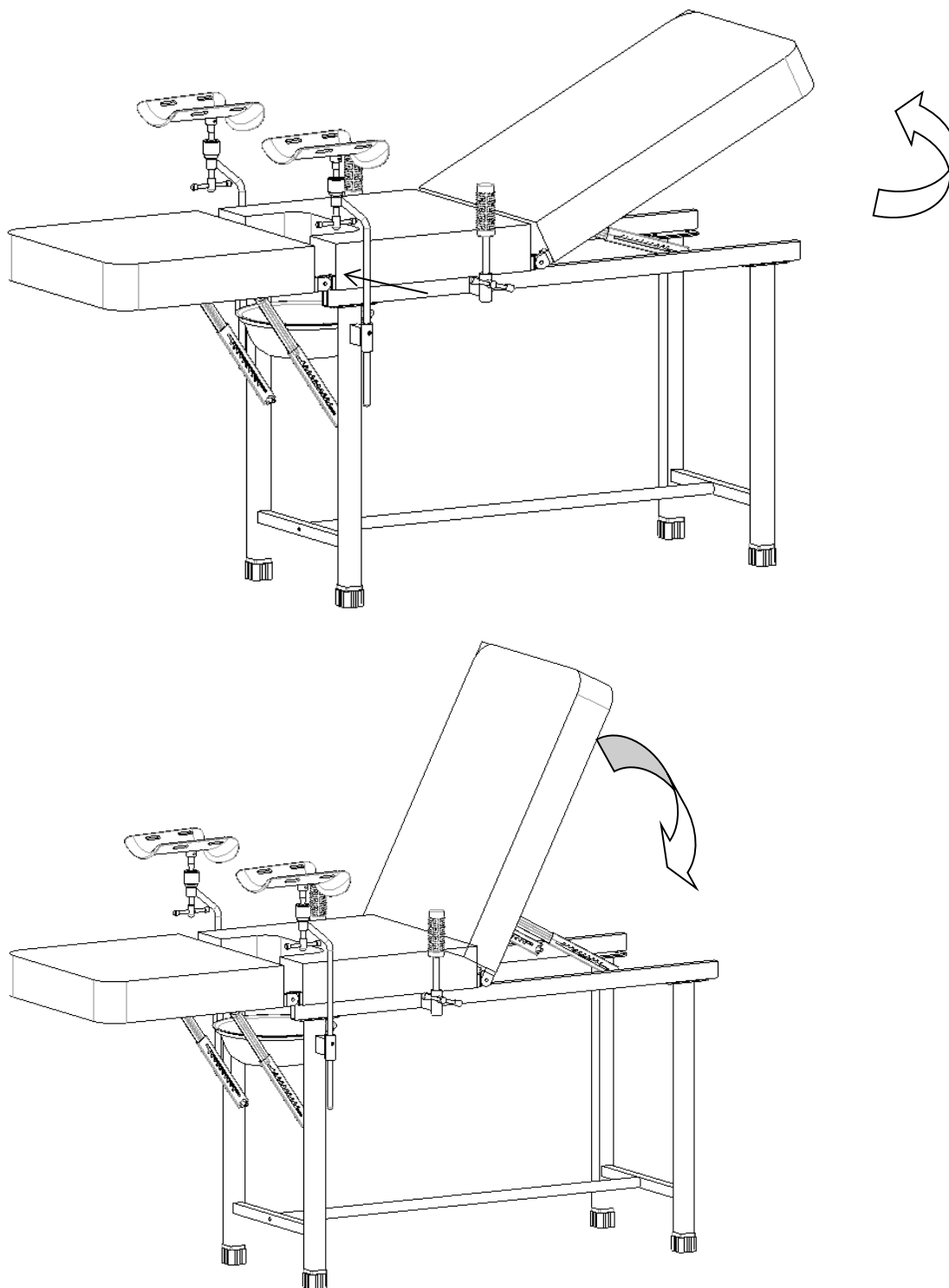

2.2 Regulação da secção da perna

Levantar a placa para pernas diretamente para o ângulo máximo e, em seguida, baixar lentamente a placa para costas para completar a descida da perna.

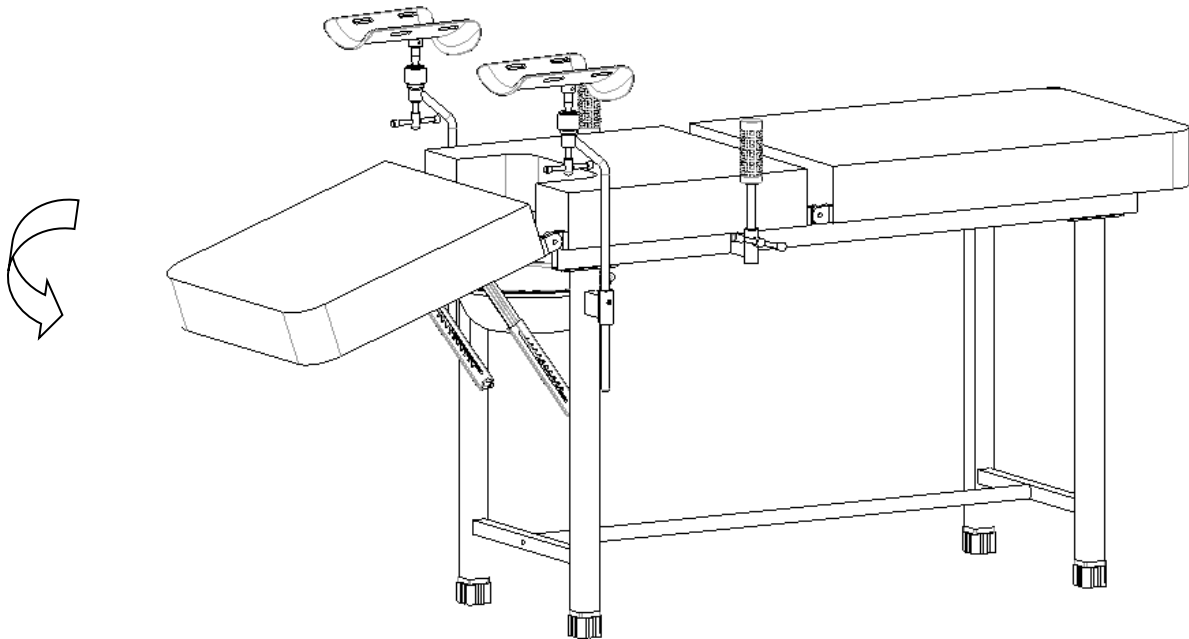

3. Mesa ginecológica em aço inoxidável - manutenção

1. Para utilizar a mesa ginecológica de aço inoxidável em segurança, é necessário efetuar regularmente inspeções de segurança. Recomenda-se uma inspeção de seis em seis meses para garantir que as ligações não estão soltas e que todas as operações são normais.
2. Quando a mesa ginecológica de aço inoxidável envelhece e atinge um determinado tempo de serviço, a parte metálica do carrinho de tratamento e as partes de plástico da estrutura da bacia de aço inoxidável podem ser recicladas.
3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante a utilização e limpe-o frequentemente para o manter limpo e seco.
4. Se o painel ficar acidentalmente manchado com nódoas, recomenda-se a sua limpeza. Não utilizar produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de tratamento, o que provocará a oxidação da superfície de aço inoxidável.

4. embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem da mesa ginecológica em aço inoxidável é efectuada de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evitar a precipitação, a vibração violenta e a proteção contra a luz solar e a chuva durante o transporte da mesa ginecológica de aço inoxidável.
3. A mesa ginecológica de aço inoxidável deve ser armazenada:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressão atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

5. serviço pós-venda

1. Por favor, guarde os arquivos que vem com a máquina e as faturas deste produto corretamente, e você precisa apresentar esses arquivos quando a empresa realiza garantia e manutenção para o produto.
2. Se houver algum problema no processo de utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que a nossa empresa possa fornecer-lhe apoio técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. Não desmontar o dispositivo interno deste produto para evitar danos desnecessários. Se verificar que a utilização é afetada devido a problemas de qualidade, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou o nosso revendedor autorizado.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver efetivamente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade no prazo de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

MESA GINECOLÓGICA**Jiangsu Saikang Equipamento Médico Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Agricultura Moderna, cidade de Zhangjiagang,
Província de Jiangsu, China

**SUNGO Europa B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Países Baixos



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia (Espanha)

LOTE:HW25xxx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com