




Manual do utilizador

SK-B1

Mesa de exame em aço inoxidável

Código de registo: SK-B1

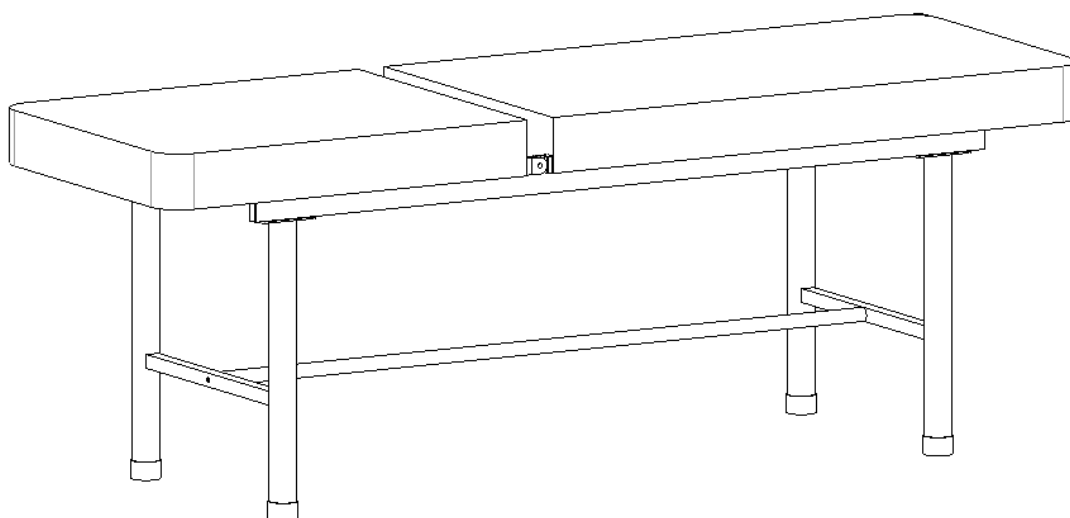

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098

Conteúdo

Introdução manual	2
1. Guia de instalação.....	3
1.1 Lista de acessórios padrão	3
1.2 Instalação da estrutura do pé.....	5
1.3 Instalação do tubo de ligação	6
2. Método.....	7
2.1 Função de elevação do encosto.....	7
3. Mesa de exame em aço inoxidável Manutenção do-	8
4. Embalagem, transporte, armazenamento.....	9
5. Serviço pós-venda.....	9

Introdução manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente as etapas antes de instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.

- ▶ Este manual é aplicável à mesa de exame em aço inoxidável SK-B1. Ele contém o método de instalação, instruções de operação e pontos de verificação de manutenção.
- ▶ Os gráficos neste manual são apenas para referência dos utilizadores. Na utilização real, consulte o objeto real.
- ▶ Este manual do utilizador inclui a descrição, instruções, manutenção e parâmetros técnicos do produto.
- ▶ Em caso de dúvidas, entre em contacto com o centro de assistência pós-venda ou distribuidor.
- ▶ Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve lê-lo e cumpri-lo.
- ▶ Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com o uso e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios padrão

Após abrir a caixa de embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa de embalagem.

Tabela a:










N.º	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Placa do sofá		/	1	pc
2	Estrutura do pé		539*543 mm	2	unidades
3	Tubo de ligação		Φ25*1,2*1253-M8 mm	1	unidade
4	Parafuso	/	Consulte a Tabela a.1	1	conjunto

Tabela a.1:



N.º	Nome	Imagem	Especificação	QTD	Unidade
1	Parafuso hexagonal externo		M10*25 mm	8	unidades
2	Arruela plana		$\Phi 10^* \Phi 21^* H1,8$ mm	8	unidades
3	Arruela elástica		$\Phi 10^* \Phi 17^* H3$ mm	8	unidades
4	Porca de fixação		M10 mm	8	unidades
5	Parafuso hexagonal externo		M8*40 mm	2	unidades
6	Arruela plana		$\Phi 8^* \Phi 16^* H1,2$ mm	2	unidades
7	Arruela elástica		$\Phi 8^* \Phi 14^* H2,5$ mm	2	unidades

1,2 Instalação da estrutura do pé


Coloque uma almofada protetora e vire a estrutura principal de cabeça para baixo;

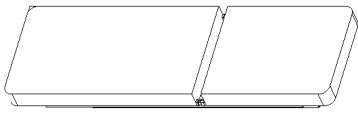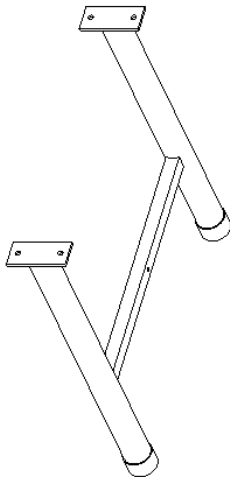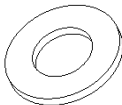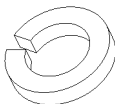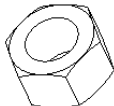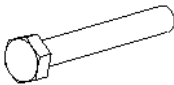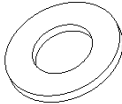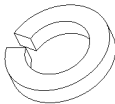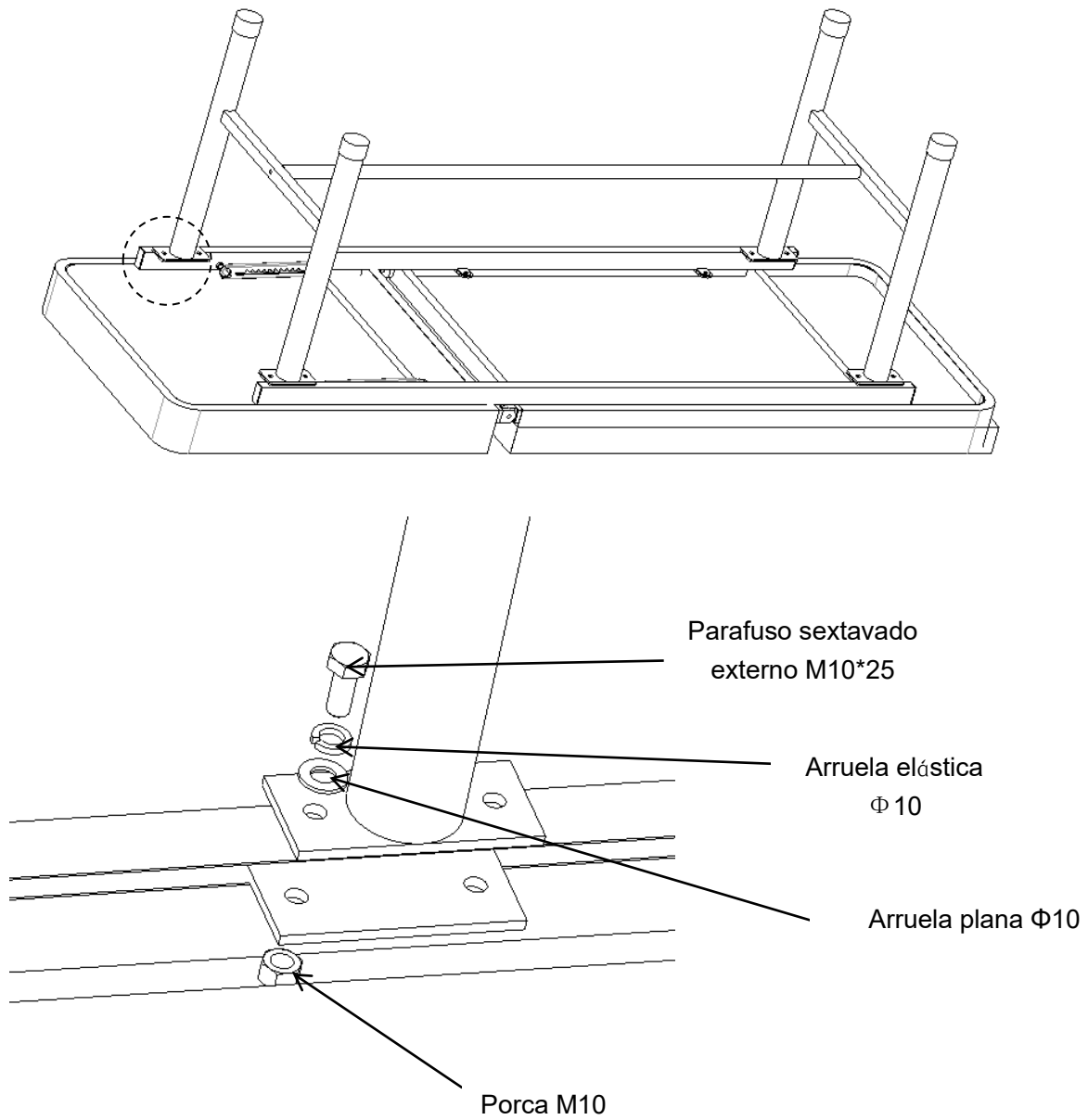

1.3 Instalação do tubo de ligação

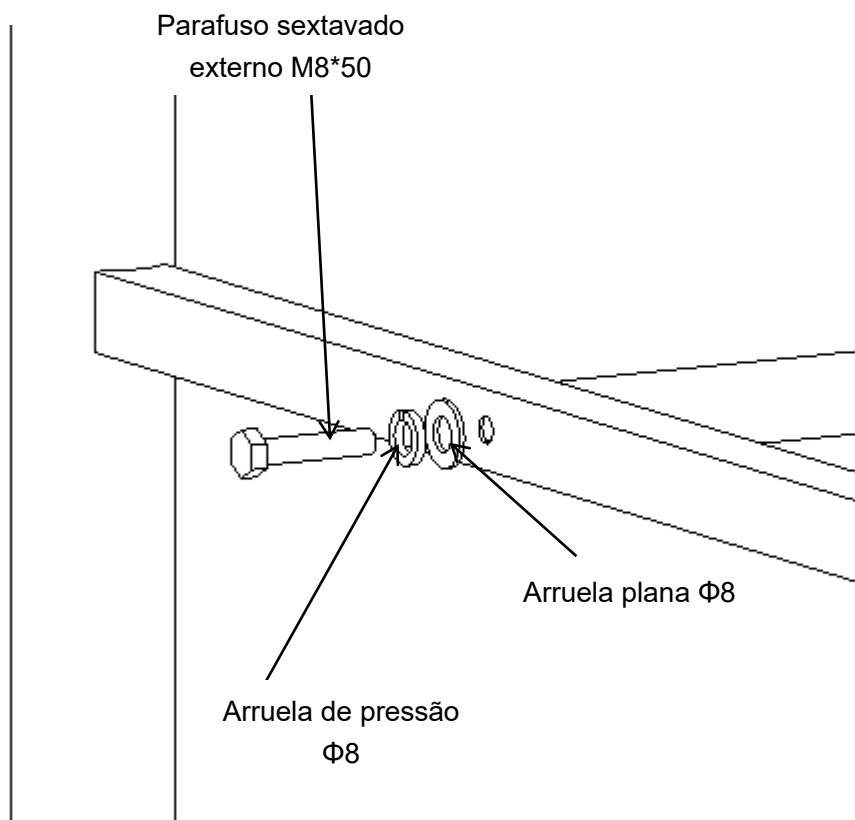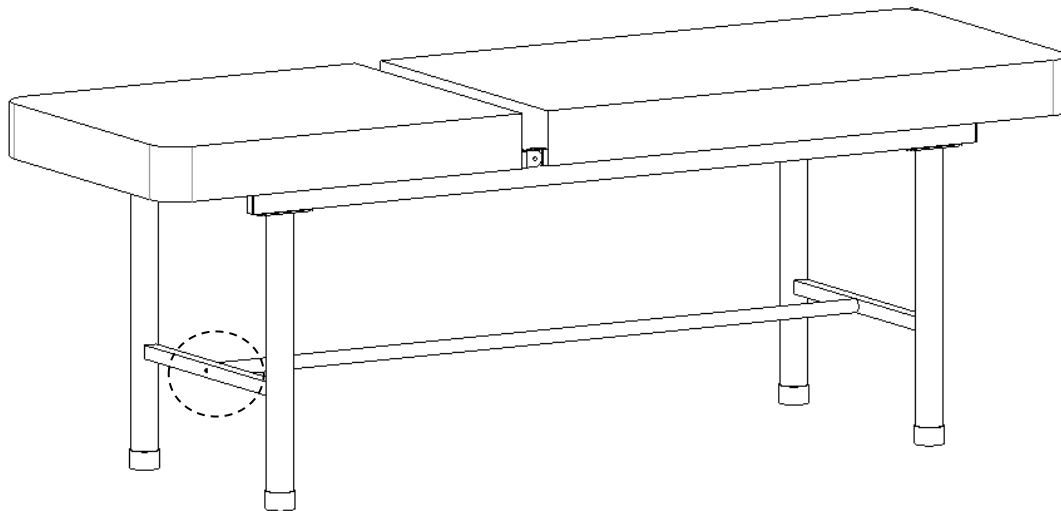


2. Método de utilização

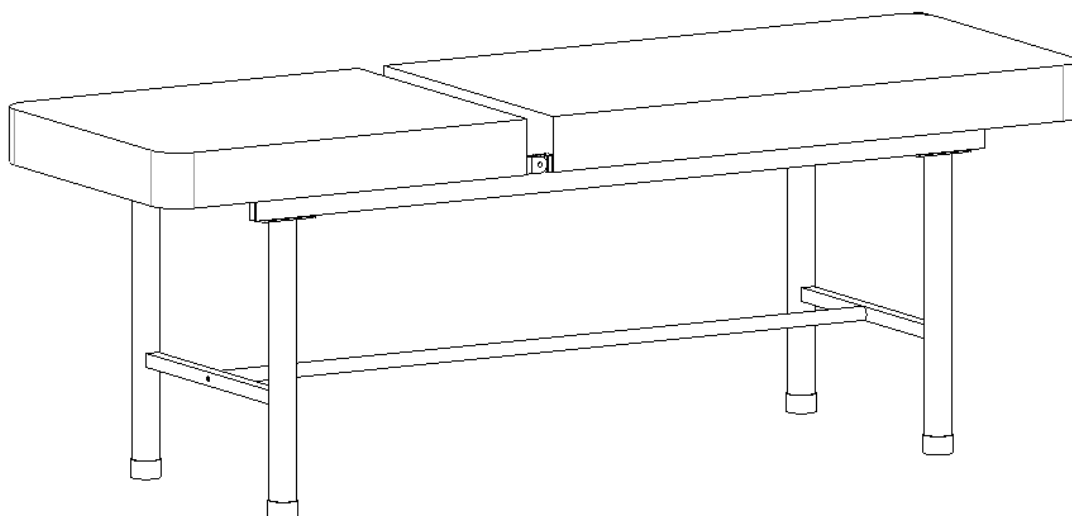


Dimensões	Comprimento	mm	1900±10
	Largura		600±10
	Altura		680±10
Peso	Carga de trabalho segura	Kg	170

2,1 Função de elevação do encosto

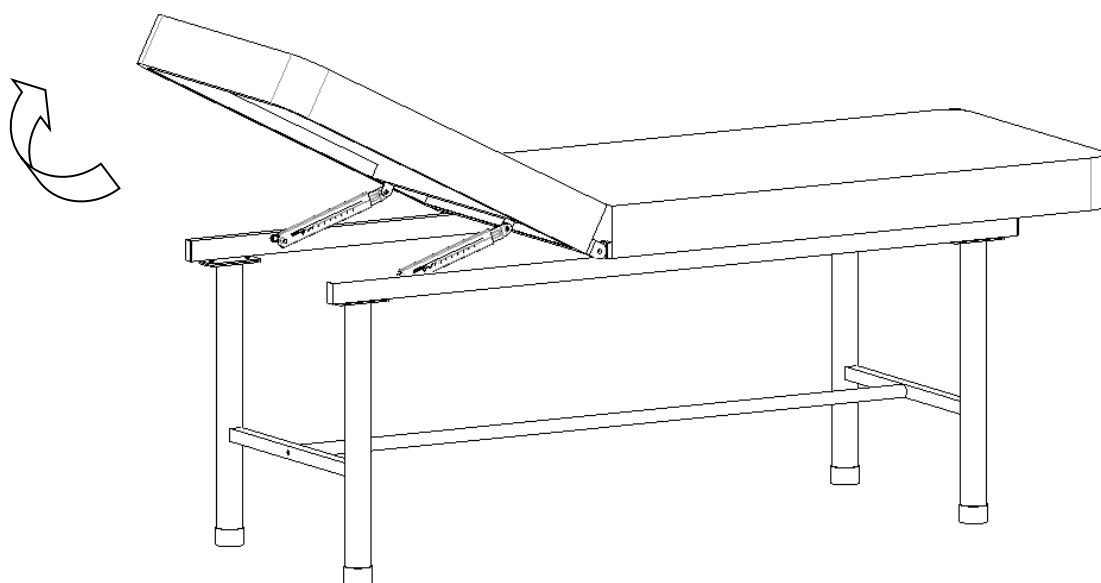

Levante a placa traseira para ativar a função de elevação do encosto. Levante a placa até a

posição mais alta e, em seguida, abaixe a placa traseira.

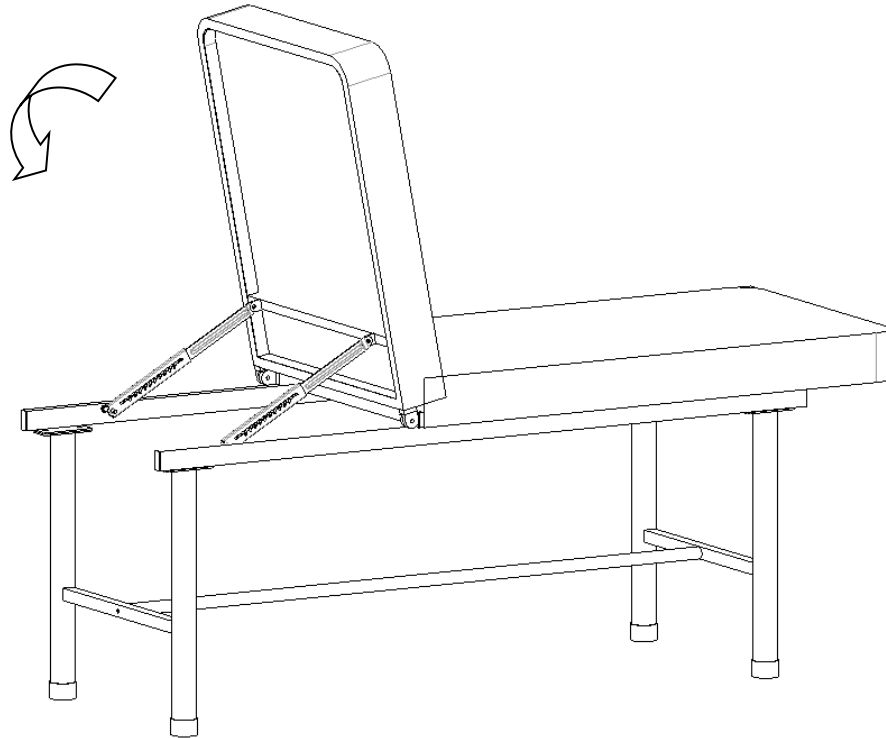

3. Mesa de exame em aço inoxidável - manutenção

1. Para utilizar a mesa de exame com segurança, é necessário realizar inspeções de segurança regulares na mesa de exame. Recomenda-se verificá-la a cada seis meses para garantir que as conexões não estejam soltas e que todas as operações estejam normais.
2. Quando a estrutura da mesa de exame envelhece e atinge um determinado tempo de manutenção, as peças metálicas e plásticas da mesa de exame podem ser recicladas.
3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante o uso e limpe-o frequentemente para mantê-lo limpo e seco.
4. Se o painel for acidentalmente manchado, recomenda-se limpá-lo. Não use produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar a mesa de exame, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

4. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem da mesa de exame é realizada de acordo com o contrato ou padrão do produto.
2. Evite pressas, vibrações violentas e proteja da luz solar e da chuva durante o transporte da mesa de exame.
3. A mesa de exame deve ser armazenada:
 - a) Temperatura ambiente: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidade relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressão atmosférica: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

5. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os ficheiros que acompanham a máquina e as faturas deste produto, pois terá de os apresentar quando a empresa realizar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema durante a utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que possamos fornecer-lhe assistência técnica e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver avariado ou danificado devido à instalação e utilização corretas de acordo com as especificações, o produto terá um ano de garantia gratuita e serviço de manutenção vitalício com o «certificado» ou fatura.
4. A partir da data de compra, se estiver realmente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade dentro de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL: SK-B1 | REF.: 319-SK-B1

MESA DE EXAMEN / EXAMINATION TABLE / TABLE D'EXAMEN / TAVOLO DA VISITA / MESA DE EXAME / Untersuchungstisch



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT: HW26xxx



2026-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ESTOQUE: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com