Benutzer handbuch

A6k5s

Elektrisches Krankenhausbett

Registrierungscode: SKD-A

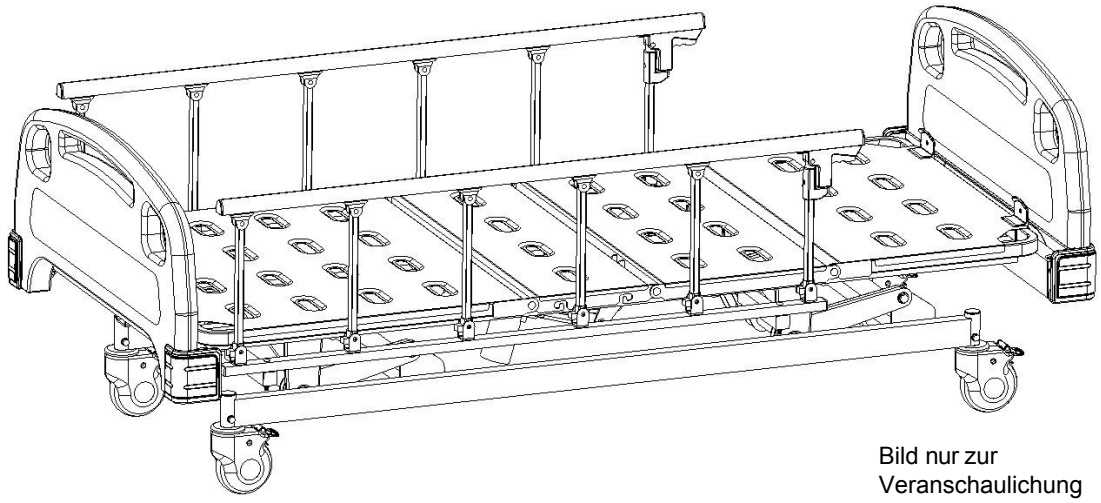


Bild nur zur Veranschaulichung

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

Inhalt

Manuelle Einführung 2

1. Installationsanleitung 3

1.1 Liste des Standardzubehörs 3

1.2 Montage der Rollen 5

1.3 Montage der Seitenschutzbügel 6

1.4 Montage der PP-Matratzenhalter 7

1.5 Montage von Kopf- und Fußteil 8

1.6 Montage der Infusionsständer 9

2. Verwendungsmethode 10

2.1 Verwendungsmethode der Rollen 11

2.2 Verwendungsmethode für Geländer 12

2.3 Verwendung von Entwässerungshaken 13

2.4 Verwendung von Infusionsständern 14

2.5 Verwendung der Handsteuerung 15

3. Ersatzteilwechsel und Wartung 16

4. Fehlerbehebung 17

5. Bettwartung 18

6. Reinigung des Bettes 19

7. Matratzenreinigung und -pflege 20

8. Rollenprüfung und Wartung 20

9. Wartung der Schutzgeländer 21

10. Ersatzteilliste 21

11. Verpackung, Transport, Lagerung 23

12. Kundendienst 23

Einführung in die Hand

Krankenhausbetten sind unverzichtbare Ausstattungsgegenstände für das Wohlbefinden, die Behandlung und die Genesung bettlägeriger Patienten. Krankenhausbetten ermöglichen es Patienten, bequemere Positionen einzunehmen, darunter auch solche, die manchmal von Ärzten empfohlen werden und in einem normalen Bett nur sehr schwer zu erreichen wären, da dort ständig Stützen angebracht oder entfernt werden müssten. Krankenhausbetten können manuell oder automatisch bedient werden. Die Funktionen des automatischen Krankenhausbettes werden über Tasten an den Seitenwänden des Bettes oder über eine Fernbedienung gesteuert. Das manuelle Krankenhausbett verfügt über zwei durch Kurbeln ausgelöste Bewegungen, mit denen das Kopfteil angehoben werden kann, was das Füttern erleichtert, Rückfluss verhindert und die Atmung erleichtert. Außerdem kann der Fußteil angehoben werden, was die Durchblutung der unteren Gliedmaßen verbessert, da der Patient lange Zeit liegen muss. Andererseits ist die Sicherheit des Patienten in dieser Zeit der Genesung sehr wichtig, daher sind alle unsere Betten mit Seitenschutzgittern ausgestattet, die verhindern, dass der Patient nachts aufsteht und stürzt.

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Inbetriebnahme genau. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheitshinweisen vertraut sind.

► Diese Anleitung gilt für das elektrische Krankenhausbett A6k5s. Sie enthält die Installationsmethode, die Bedienungsanleitung und die Wartungs- und Kontrollpunkte.

► Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für den Benutzer.
Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.

► Dieses Benutzerhandbuch enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartungshinweise und technischen Parameter des Produkts.

► Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.

► Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.

► Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen die Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung für „ “

Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:














Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Kopfteil		Hakenabstand: L910*H55 mm	1	Stück
2	Fußteil		Hakenabstand: L910*H55 mm	1	Stück
3	Seitenschiene		Sechste Aluminiumlegierung Seitenschiene	2	Stück
4	Lenkrolle		5-Zoll-Rollen mit Abdeckung	4	Stück
5	Infusionsständer		Φ16-19 mm/cremefarbener Haken	1	Stück
6	Bettplattform		L1925*B820 mm	1	Stück
7	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Satz


Tabelle a.1:


Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	PP-Matratzenhalter		PP	2	Stück
2	Sechskantschraube		M8*70 mm	4	Stück
3	Flache Unterlegscheibe		Φ8*Φ16*H1,2 mm	4	Stück
4	Federscheibe		Φ8*Φ14*H2,5 mm	4	Stück
5	Mutter		M8 mm	4	Stück
6	Sechskantschraube		M8*16 mm	8	Stück
7	Flache Unterlegscheibe		Φ8*Φ16*H1,2 mm	8	Stück
8	Federscheibe		Φ8*Φ14*H2,5 mm	8	Stück

1.2 Rollen e Montage

Legen Sie eine Schutzunterlage aus und stellen Sie das Bettgestell auf den Kopf.
Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskantschlüssel.

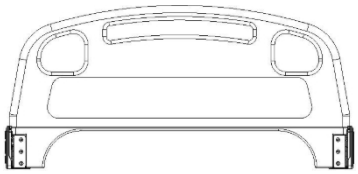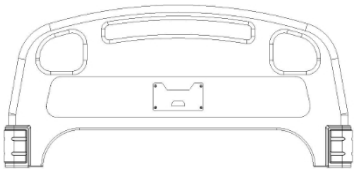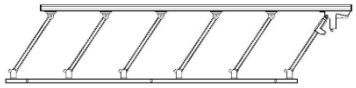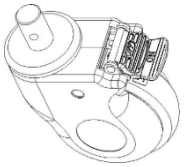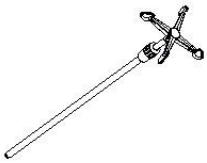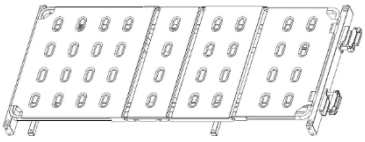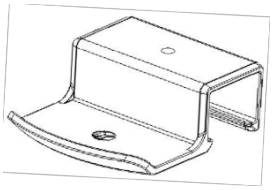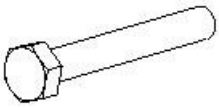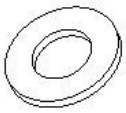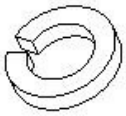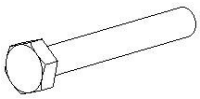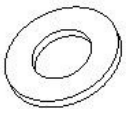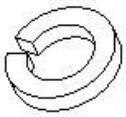

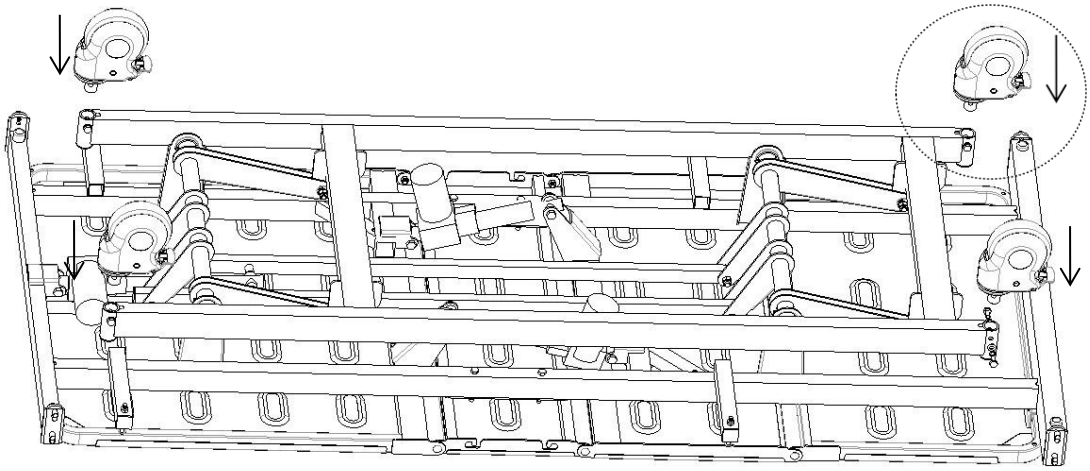


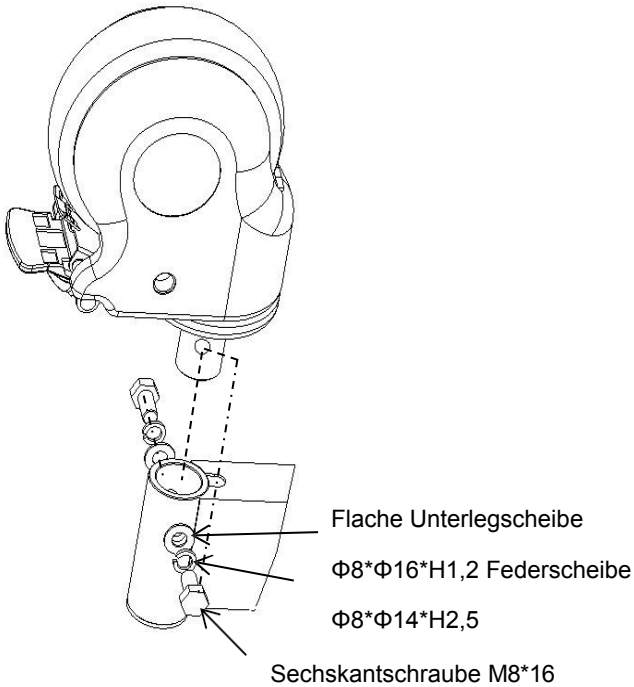


1.3 e Montage der seitlichen Schutzgeländer


Stellen Sie das Bett aufrecht und montieren Sie die Schutzleiste (die Abbildung entspricht möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt, sie dient nur zur Veranschaulichung der Montage).
Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskantschlüssel.




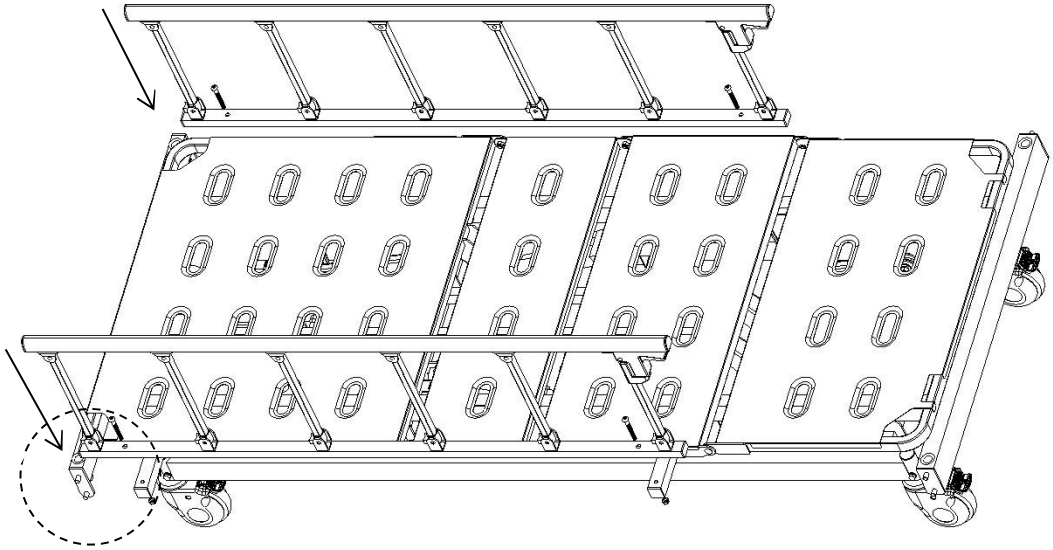

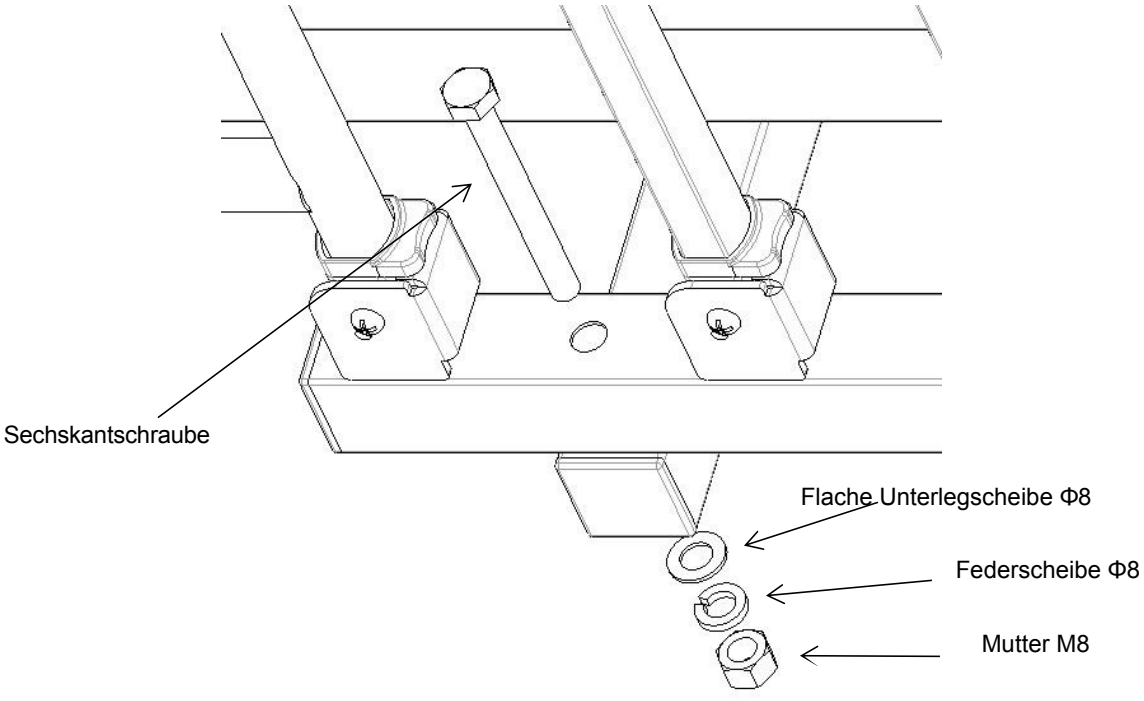


1.4 r Einbau eines PP-Matratzenhalters

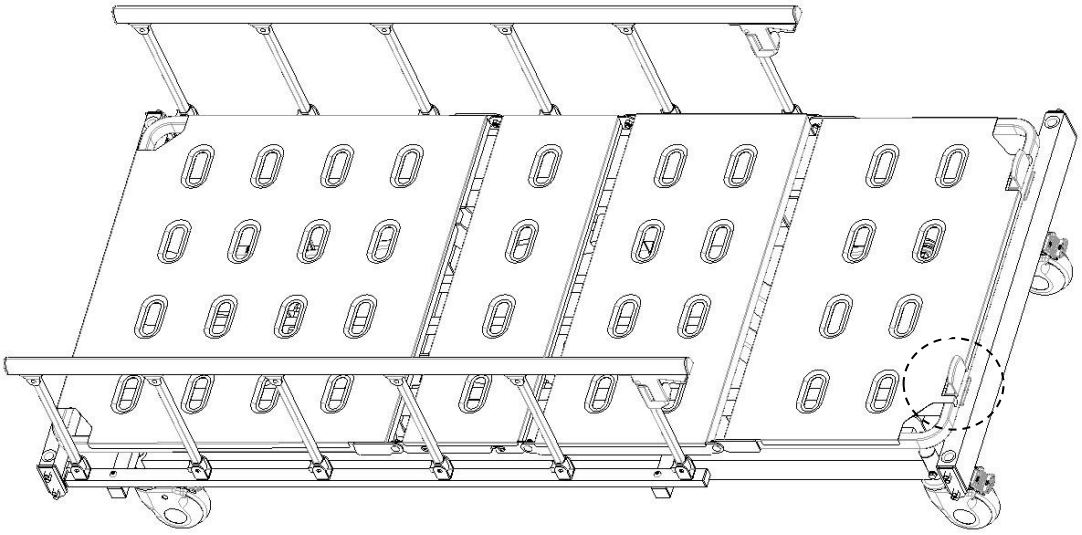


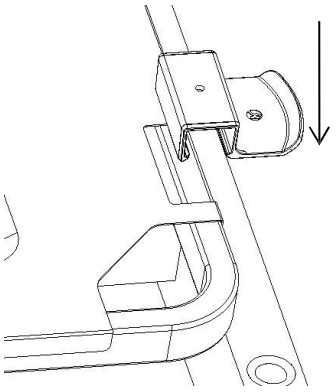


1

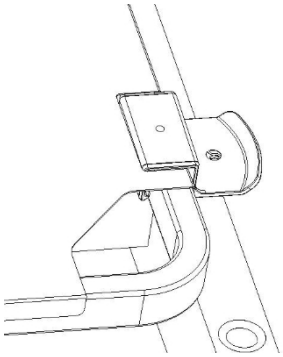

2

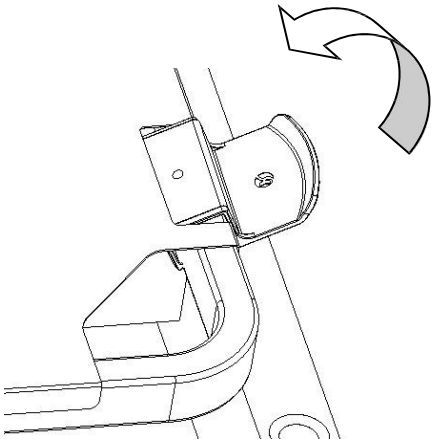


3

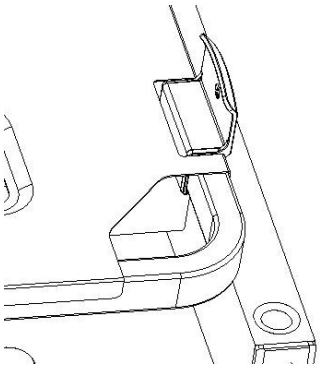



4

1.5 Montage von Kopf- und Fußteil Methode

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, sondern dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung.

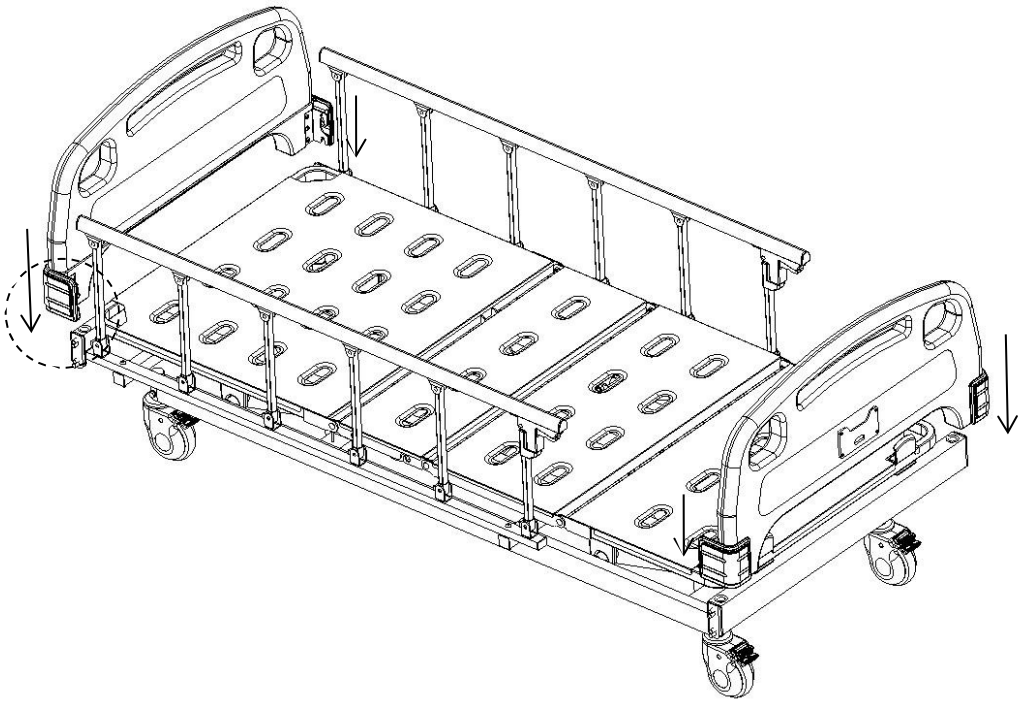

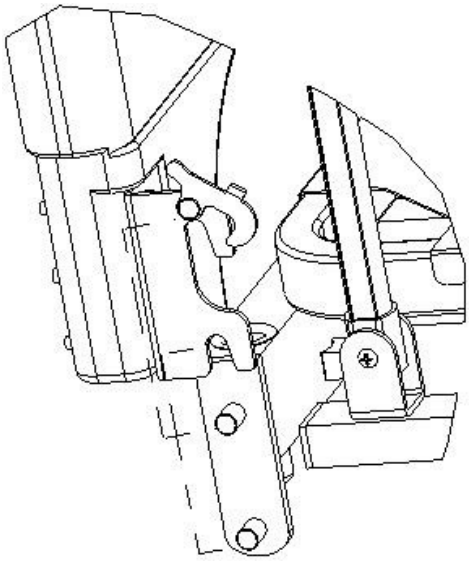


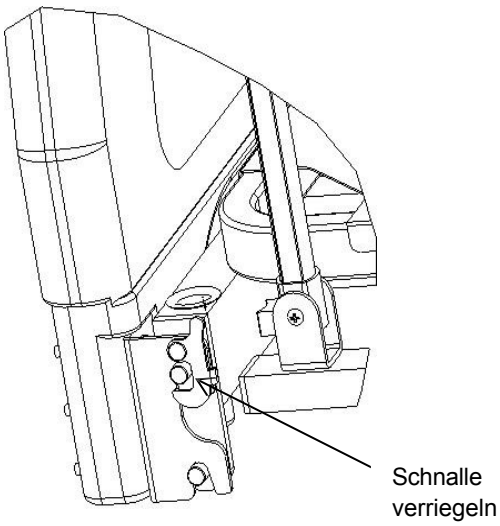


1.6 IV-Stangen


Montage des weiblichen Teils: Drücken Sie den Kunststoffhaken (weiblicher Teil) auf das Φ16 mm Edelstahlrohr.

Montage des männlichen Teils: Setzen Sie den Kunststoffhaken (männlicher Teil) direkt über den weiblichen Teil in Kreuzform, richten Sie dann die Schnallen am männlichen Teil an den Schlitzen am weiblichen Teil aus und drücken Sie sie nach unten. Nachdem Sie ein „Klicken" hören, überprüfen Sie, ob das Ende der Schnalle fest sitzt. Ist dies der Fall, ist die Montage abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie weiter nach unten, bis die Schnalle fest sitzt.
Setzen Sie den installierten Infusionsständer senkrecht in die Infusionsständerhalterung ein. (Der Pfeil in der Abbildung zeigt die Infusionsständerhalterung an.)

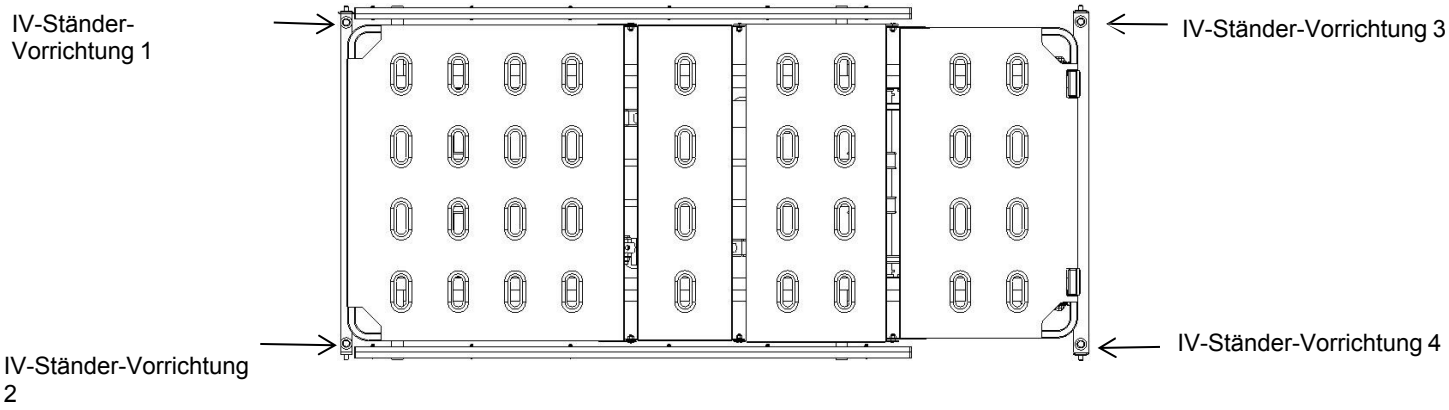


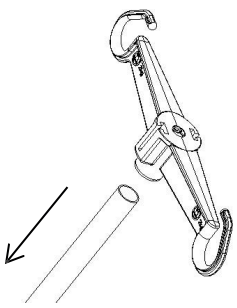


1

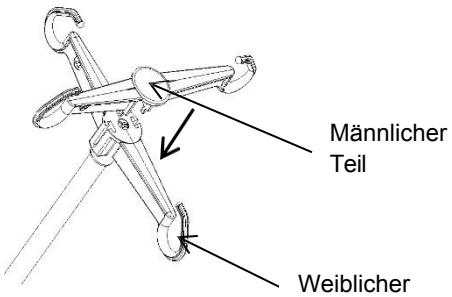

2

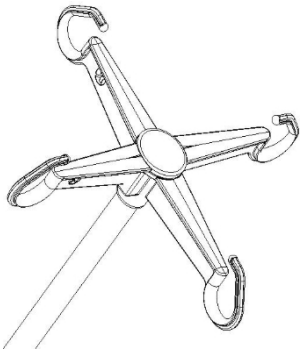


3

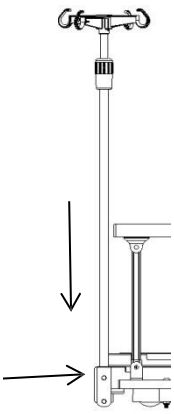

4

2. -Methode verwenden

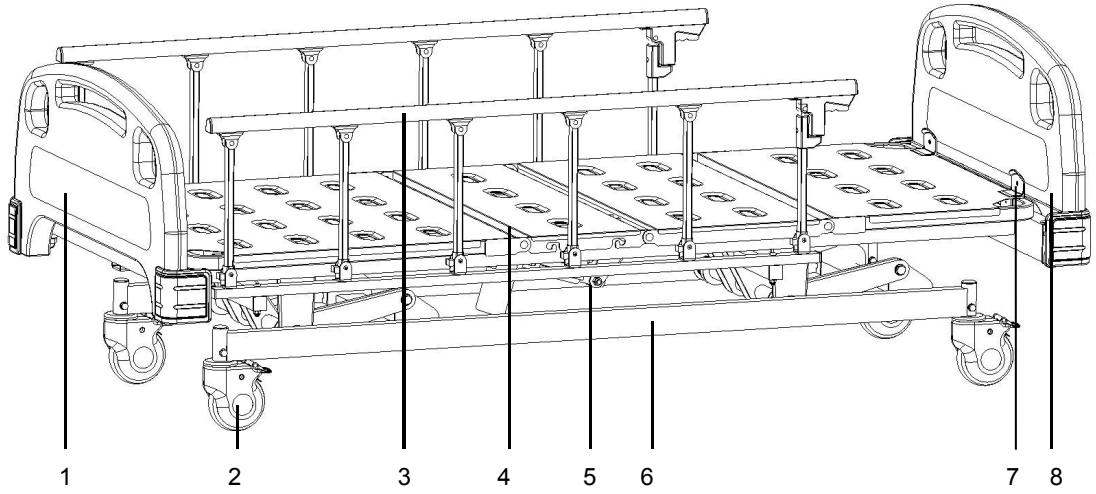

1 Kopfteil 2-Rollen 3-Schutzgitter 4-Bettfläche 2-5-

Ablaufhaken 6-Bettrahmen 7-Matratzenhalter 8-Fußbrett


Länge der Liegefläche	Länge	mm	1925±10
	Breite		820±10
	Die niedrigste Höhe des Bettes vom Boden aus		400±10
Abmessungen	Länge		2110±10
	Breite		960±10
	Höhe		400-710±10
Neigungsbereich	Rückwand	/	0–75 ±5
	Beinbrett		0-35±5°
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	200

2.1 Verwendung von Rollen mit „ ”-Mechanismus


⚠ Wenn sich ein Patient auf dem Bett befindet, muss vor dem Bewegen des Bettes das Seitengitter hochgeklappt werden.

⚠ Außer wenn das Bett bewegt werden muss, muss die Rollenbremse während der restlichen Zeit betätigt werden. Alle vier Radbremsen müssen betätigt werden.

2.1.1 Rollen arretieren: Nachdem Sie das Bett in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste „ON“ und arretieren Sie die Rollen, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.

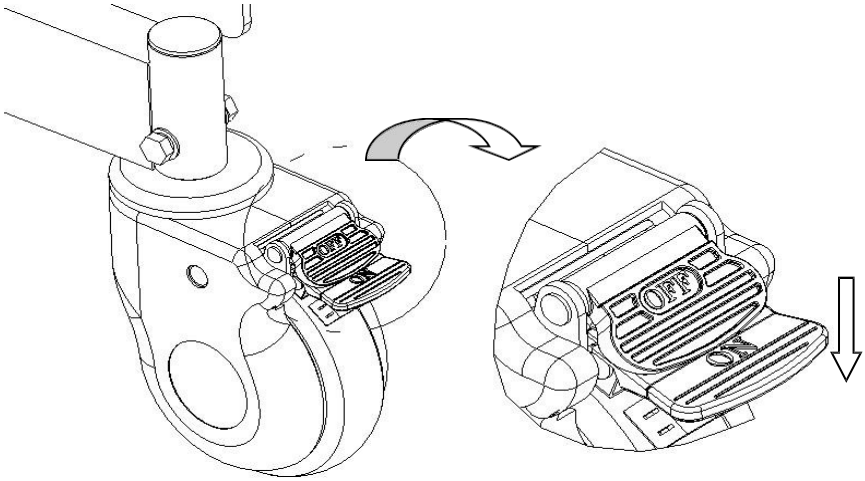


2.1.2 Rollen entriegeln: Drücken Sie mit dem Fuß auf den OFF-Knopf und entriegeln Sie die Rollen, wenn Sie ein „Klicken“ hören.

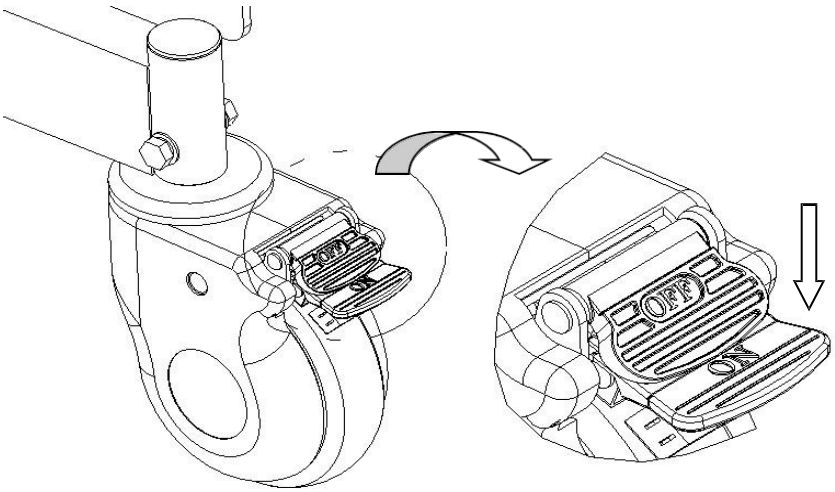


2.2 Verwendung der Handlauf-


2.2.1 Anheben und Absenken der Schutzgeländer


Anheben der Schutzgeländer: Halten Sie den roten Griff der Schutzgeländer fest und heben Sie sie an. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, sind die Schutzgeländer verriegelt.

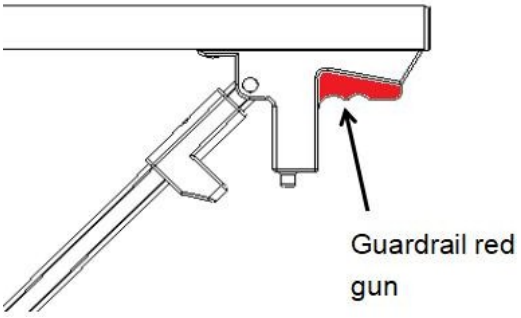

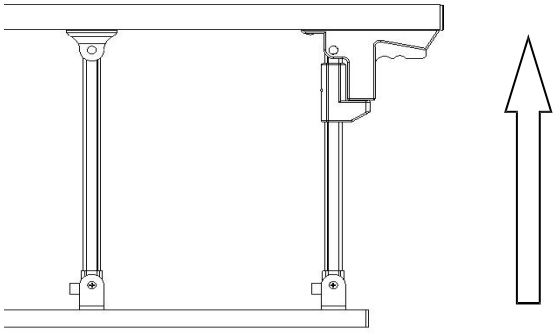


Senken der Leitplanke: Halten Sie den roten Griff der Leitplanke fest und legen Sie sie langsam ab.

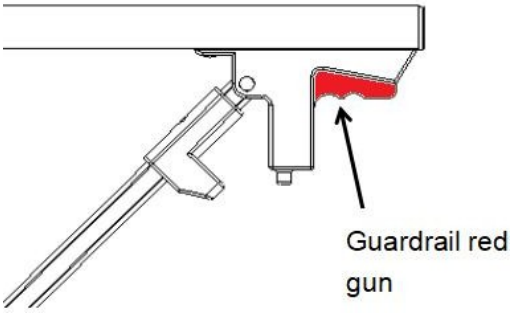


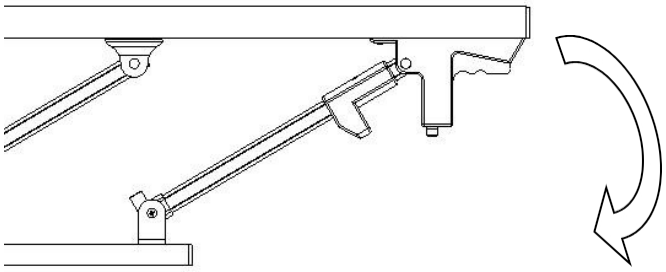

2.3 Verwendung der Entwässerungs shaken

Die Abflussklauen sind in der Abbildung dargestellt.

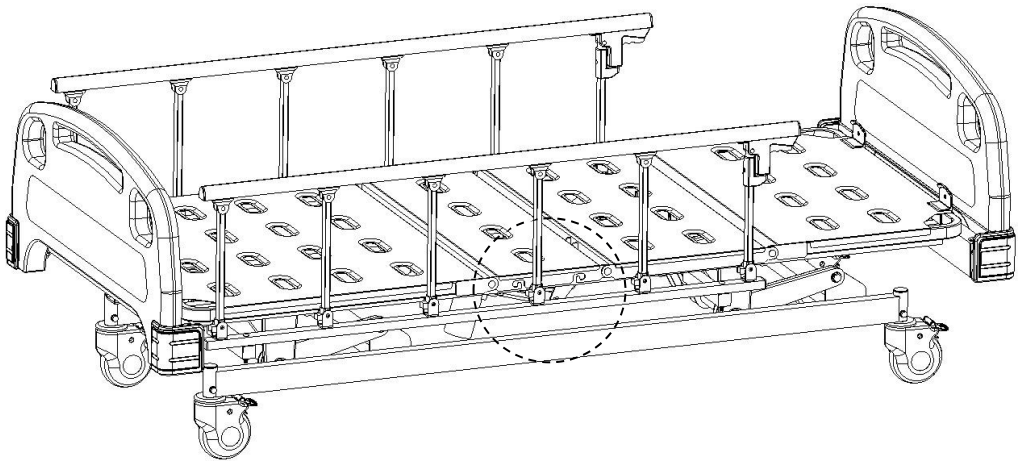

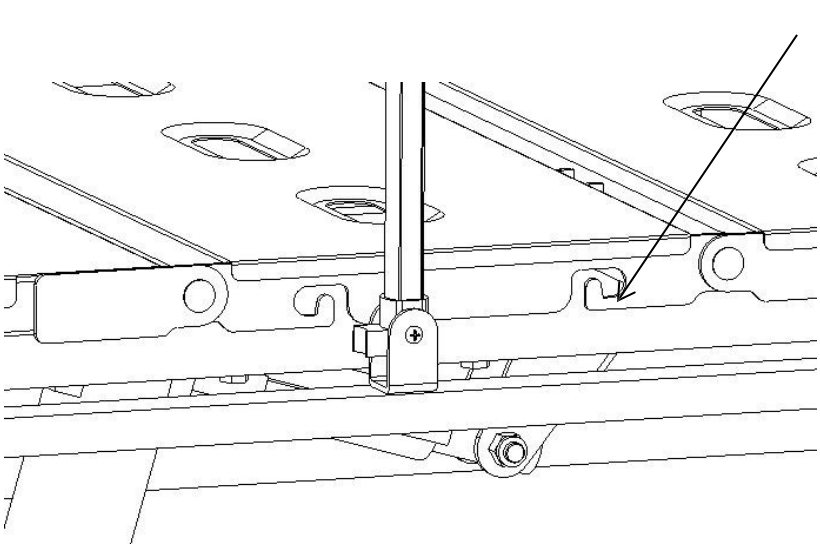


2.4 Verwendungsmethode des IV- ständers


Einstellen der Höhe des Infusionsständers:

1. Lösen Sie zunächst vorsichtig die äußere Hülse gegen den Uhrzeigersinn, führen Sie das Innenrohr des Infusionsständers in die äußere Hülse ein und stellen Sie dann die Länge der Verlängerungsstange nach oben oder unten ein.

2. Stellen Sie anschließend die gewünschte Länge ein und ziehen Sie die äußere Hülse vorsichtig fest. Die maximale Tragkraft jedes Hakens beträgt 2 kg, insgesamt 8 kg.
(Höhenverstellung: 890–1540 mm)

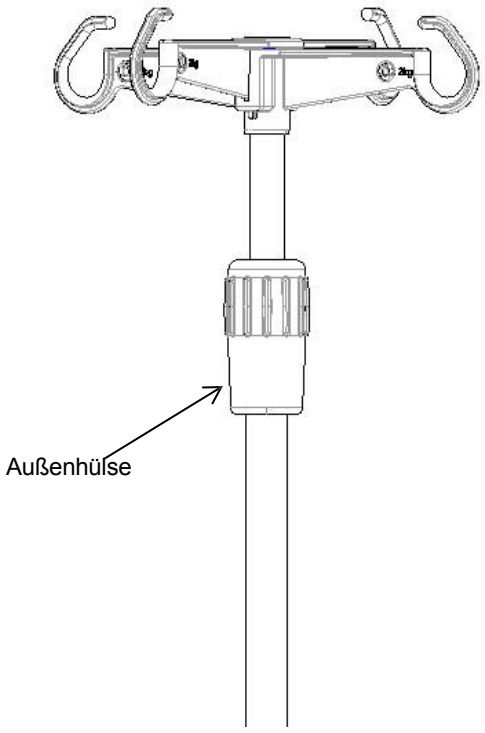

2.5 Verwendung des Hand s-Controllers

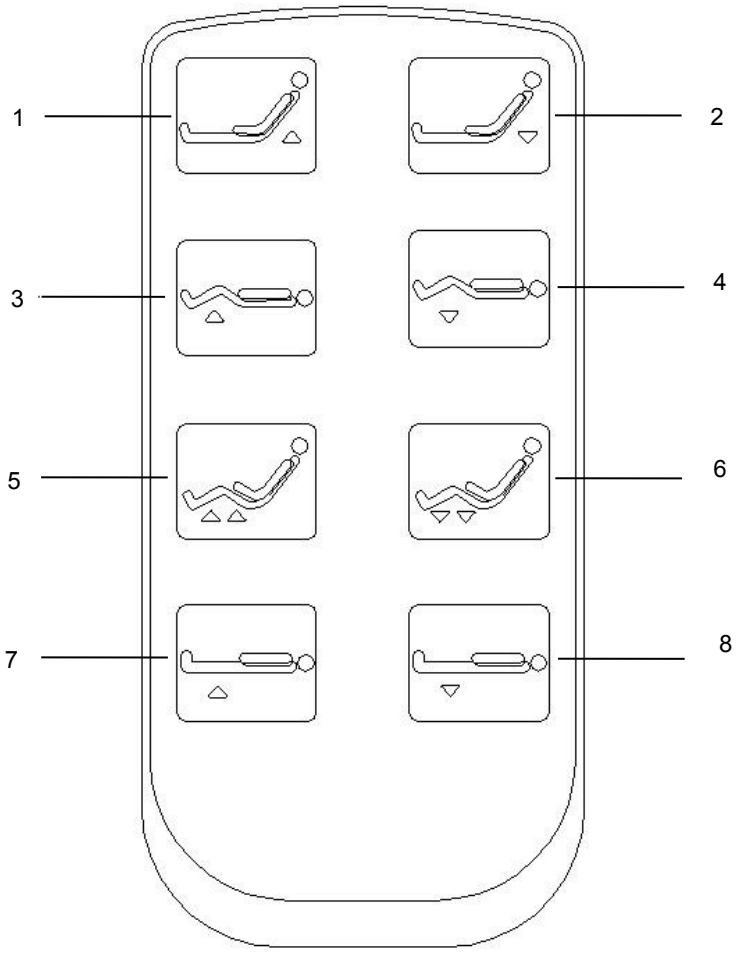


1: Rückwärts-Taste 2:
Vorwärts-Taste 3: Bein
hoch-Taste 4: Bein
runter-Taste


5:Taste zum Anheben von Rücken und Beinen (automatische Konturanpassung)

6: Rücken- und Beinverbindung absenken (automatische Konturanpassung)
7: Taste „Gesamtes Bett anheben“
8: Taste „Gesamtes Bett
absenken“

3. Ersatzteilaustausch und Wartung von „ “

Verwenden Sie 2 Stück 17-Zoll-Inbusschlüssel , um den Motor zu lösen, die Schraube herauszunehmen und den Motor auszutauschen. Nach dem Austausch die Schrauben in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge einsetzen und mit dem Schraubenschlüssel festziehen.

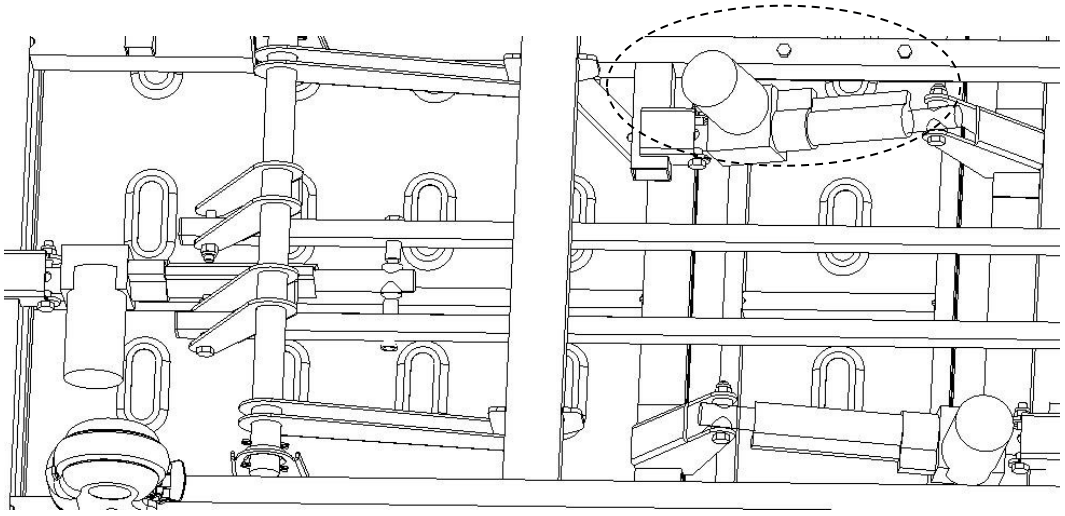

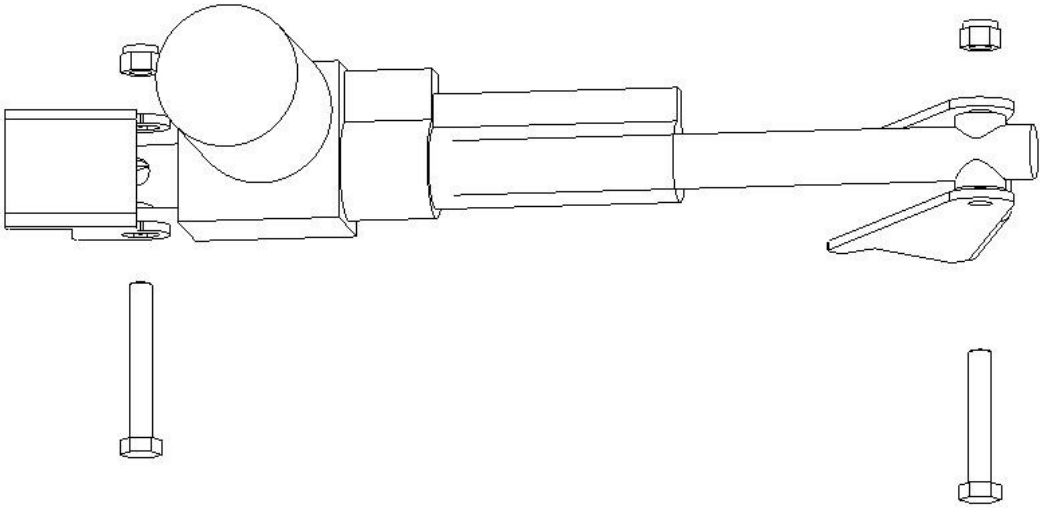


4. Fehler


Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Ausschlussmethoden
Das gesamte Bett lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse blockiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1 2. Rolle austauschen, 1.1 überprüfen
Die Schutzleiste lässt sich leicht lösen	Die Schutzleiste sitzt nicht fest	Heben Sie die Schutzleiste wieder nach oben und lassen Sie die Hand los, nachdem Ein „Klicken“ ist zu hören
Laute Geräusche beim Auf- und Abbewegen der Bettplatte	Die beweglichen Teile sind verrostet und nicht ausreichend geschmiert	Geben Sie die richtige Menge Schmieröl an die Gelenkstellen der beweglichen Teile
Ein Teil des Bettes funktioniert nicht	Der Knopf der Handsteuerung funktioniert nicht	Ersetzen Sie die Handsteuerung
Das elektrische Bett funktioniert nicht	Stecker nicht eingesteckt und keine Stromversorgung	Stecker einstecken und Gerät einschalten

5. B- -Wartung

1. Um das Bett sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile fest sitzen und die Auf- und Abwärtsfunktion des Bettes normal funktioniert.

2. An den Verbindungsstellen der häufig bewegten Teile des Bettes muss bei der täglichen Inspektion eine angemessene Menge Schmieröl hinzugefügt werden; bei starker Abnutzung sollte es aus Sicherheitsgründen sofort ersetzt werden, schmieren Sie die Teile wie abgebildet.

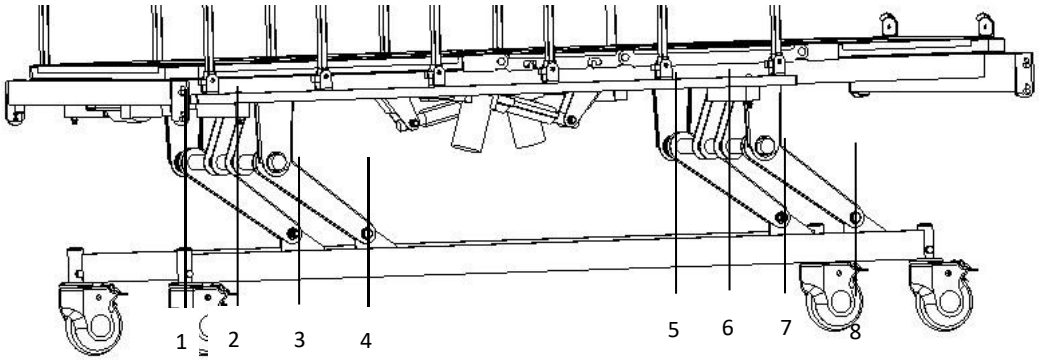

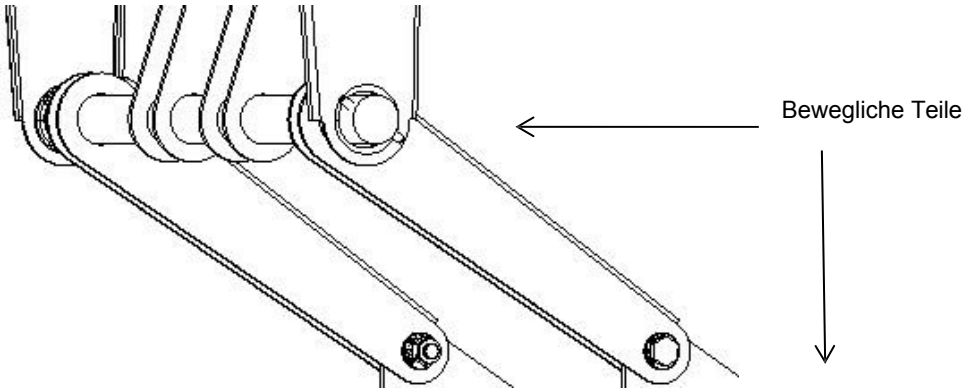

3. Vermeiden Sie Stöße gegen das Bett und Kratzer an der Beschichtung des Bettes durch scharfe Gegenstände.

4. Bitte vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in das Bett und die Matratze eindringt, da dies zu Rost, ungewöhnlichen Geräuschen und Bakterienbildung führen kann. Wenn Wasser eindringt, wischen Sie es sofort ab.

6. Wenn das Bettgestell altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht hat, können die Metallteile des Bettes und die Kunststoffteile des Kopf- oder Fußteils sowie die Schutzgitter recycelt werden.

6. Reinigung des Bettes

1. Wringen Sie zum Reinigen das mit einem neutralen, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel getränkte Tuch aus und wischen Sie damit das Bett ab. Wringen Sie anschließend das mit Wasser getränkte Tuch aus, um die restlichen Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, und trocknen Sie das Bett abschließend mit einem trockenen Tuch.

2. Verwenden Sie keine flüchtigen Substanzen (Verdünner, Lösungsmittel, Benzin usw.), da diese chemische Reaktionen hervorrufen und das Bett beschädigen können.

3. Wenn Sie zur Reinigung ein Desinfektionsmittel verwenden, verdünnen Sie es vor der Verwendung unbedingt gemäß der angegebenen Konzentration. Je nach Zusammensetzung des Desinfektionsmittels kann es Metallteile, Kunststoffteile usw. angreifen und unerwünschte Erscheinungen wie Verfärbungen und Verformungen verursachen. Daher wird folgende Zusammensetzung des Desinfektionsmittels empfohlen:

0,05～ 0,2 % Ammoniumchlorid-Desinfektionsmittel
0,05～ 0,2 % chloriertes Phenol-Desinfektionsmittel 0,05 % Diclofenac-Ethan-Lösung
0,05～ 0,2 % Natriumhypochlorit-Desinfektionsmittel

Verwenden Sie keine Rauchsterilisatoren, Autoklaven und kein Methyl (Phenol) zur Reinigung des Kopf- und Fußteils des Bettes. Dies kann zu Korrosion, Verfärbungen und Beschädigungen führen.

Hinweis: Achten Sie beim Reinigen des Bettes oder beim Wechseln der Bettwäsche auf die Ecken, Kanten und Schrauben des Rahmens, um Kratzer zu vermeiden.

7. Matratzenreinigung und Pflege von Matratzen n

1. Vermeiden Sie bei der Verwendung Kratzer durch scharfkantige Werkzeuge oder Messer, decken Sie die Matratze mit Laken oder Reinigungspads ab und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie vor Austrocknung zu schützen.

2. ℃Reinigen Sie die Matratze regelmäßig mit einem Staubsauger. Der Matratzenbezug kann bei 100 °C gewaschen werden.

3. Legen Sie die Matratze regelmäßig auf, um einen frischen und bequemen Schlaf zu gewährleisten, aber achten Sie darauf, dass die Matratze nicht zu lange aufliegt.

4. Bei versehentlichen Flecken auf dem Stoff befolgen Sie bitte die entsprechenden Reinigungsempfehlungen in der Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung des Stoffes.

5. Wenn versehentlich Kaugummi oder andere klebrige Substanzen auf den Stoff gelangen, wischen Sie diese nicht mit Gewalt ab. Verwenden Sie einen Eisbeutel, um sie zu verhärten, und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.

6. Wenn Sie aufgrund von Abnutzung lose Fäden entdecken, ziehen Sie diese nicht mit der Hand heraus, sondern schneiden Sie sie mit einer Schere ab.

* Wenn Ihre Bestellung keine Matratze enthält, beachten Sie bitte die Vertragsbedingungen.

8. Rollenerkennung und Wartung der Rollen

1. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen können.

2. Fetten Sie die Rollen oder Räder regelmäßig, wobei die Häufigkeit der Nachschmierung entsprechend den tatsächlichen Einsatzbedingungen festgelegt werden sollte. Im Allgemeinen wird alle sechs Monate Schmierfett nachgefüllt.

3. Achten Sie nach der Reinigung der Rollenausrüstung darauf, Fett nachzufüllen. Die Auswahl des Schmierfetts sollte sich nach der tatsächlichen Einsatzumgebung richten, wobei besondere hohe oder niedrige Temperaturen zu berücksichtigen sind, und es sollte das entsprechende Schmierfett ausgewählt werden.

4. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.

5. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch Sichtprüfung festgestellt werden. Einige Gewindefäden und andere Ablagerungen können sich um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

6. Um zu beurteilen, ob die Rollen aufgrund ihrer Nutzungsdauer und Abnutzung ausgetauscht werden müssen, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen und gut miteinander verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.

7. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Krankenhausbett mit

mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, das Bett zu schieben. Überprüfen Sie auch, ob die Bremsleistung jeder einzelnen Rolle einwandfrei ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.






8. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

9. Wartung der Seitensicherung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Seitenschienen korrekt montiert sind, um zu verhindern, dass der liegende Patient verrutscht und herunterrollt.
2. Bitte überprüfen Sie immer die Schrauben der Gesamtposition der Schutzschiene und des Drahtes, um ein Lösen und Herunterfallen zu verhindern.
3. Bitte verwenden Sie die roten Kunststoffteile des Leitplankenschalters ordnungsgemäß und wenden Sie keine Gewalt an, um eine Beschädigung der Leitplanke zu vermeiden.

10. Ersatzteil- sliste

Nr.	Bezeichnung	Modell	Abbildung	Spezifikation
1	A900/PP/Kopf- und Fußteil	S0FJBT010019		Hakenabstand: 910*55 mm
2	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105931		Linke Seite
3	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105932		Rechte Seite
4	IV-Stange	S0FJSY010003		Φ16-19/cremefarben
5	5-Zoll-Lenkrolle	LGPLU101TS014		φ24

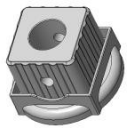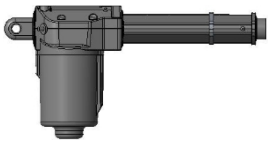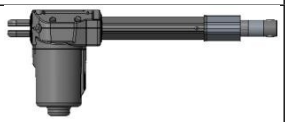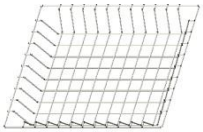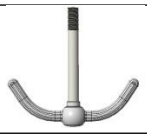6	Rollen-Viererset	GPSL101TS297		50*50 mm
7	HJ-Motor 100	LGPDJ101TS575		HJA58/ Hub 100 mm/ Einbaumaß 275 mm
8	HJ-Motor 150	LGPDJ101TS574		HJA58/ Hub 150 mm/ Einbaumaß 325 mm
9	HJ-Motor 200	LGPDJ101TS573		HJA58/ Hub 200 mm/ Einbaumaß 375 mm
1	HJ-Steuerkasten	LGPDJ101TS576	/	HJT13E Schaltnetzteil/100-240 V/50/60 Hz/weiß
11	HJ Handsteuerung	LGPDJ101TS577		HJH18 Fernbedienung
12	HJ-Netzleitung	LGPDJ101TS578		Gerade Leitung 3 m/weiß
13	HJ-Signalleitung	LGPDJ101TS579		W971 Signalleitung/weiß
14	Korb (Einbaumaß 560 mm)	LS1FJF0102008		600*540*80 mm (optional)
	Ablaufhaken	GPSL101TS437		55*61 mm
16	Namenskarte	GPSL101TS184		/

Hinweis: Aufgrund von Produktaktualisierungen sind Teile des Originalprodukts möglicherweise nicht lebenslang verfügbar. (Das Unternehmen garantiert, dass für die verkauften Produkte innerhalb von 6 Jahren nach Ende ihrer Produktion die erforderlichen Ersatzteile geliefert werden können.

11. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des elektrischen Bettes erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.

2. Vermeiden Sie während des Transports des elektrischen Bettes überstürztes Handeln, starke Erschütterungen und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Regen aus.

3. Das elektrische Bett sollte wie folgt gelagert werden:

a) Umgebungstemperatur: +5 ° ℃ ~ +40 °℃ .

b) Relative Luftfeuchtigkeit:≤ 85 %.

c) Luftdruck: 70 kPa~ 106 kPa.

d) Spannung: AC 100-220±22V;

e) Netzfrequenz: 50±5 Hz

4. Das Gerät verfügt über eine interne Stromversorgung und die Schutzart ist Typ B.

A) Betriebsspannung: DC 24 V.

B) Eingangsleistung: 500 VA.

C) Sicherungsmodell und Nennleistung: F3AL 250 V, 5 × 20 mm

D) Betriebsart: intermittierende Belastung und Dauerbetrieb

E) Schutzart: IPX4

F) Nicht-AP/APG-Geräte

Symbolerklärung:

 Hinweis! Überprüfen Sie die mit dem Bett mitgelieferte Datei. IPX4 Schutzart

 Geräte der Klasse II

 Schutzerdung

12. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten am Produkt durchführt.

2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.

3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und ein lebenslanger Wartungsservice mit dem „Zertifikat" oder der Rechnung, sofern das Produkt aufgrund der korrekten Installation und Verwendung gemäß den Spezifikationen defekt oder beschädigt ist.

4. Zerlegen Sie das Innere dieses Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.

5. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum tatsächlich beschädigt ist oder aufgrund von Qualitätsproblemen nicht ordnungsgemäß funktioniert, bietet das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.

6. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

Quirumed

MODEL:A6k / REF.:319-SK005-4

CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 3 FUNCIONES Y BARANDILLAS /ELECTRIC HOSPITAL BED 3 FUNCTIONS AND RAILS/LIT D'HOPITAL ELECTRIQUE 3 FUNCTIONS AVEC BARRIERES/LETTO OSPEDALIERO ELETTRICO 3 FUNZIONI E SPONDE/ CAMA DE HOSPITAL ELETRICA 3 FUNCOES E PROTECOES LATERAIS/ ELEKTRISCHES KRANKENHAUSBETT MIT 3 FUNKTIONEN UND GELANDER

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

CE MD

Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com