Manuelles Krankenhausbett
Modell: SK033-1

Bedienungsanleitung



Abbildung nur zur Veranschaulichung

Inhalt

1. Manuelle Einführung 2
2. Geltungsbereich 2
3. Funktionen 2
4. Technische Parameter 2
5. Installationsanleitung 2
6. Verwendungsmethode 7
7. Hinweise 10
8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen 10
9. Wartung 11
10. Lagerung 11
11. Transport 11
12. Produktliste 11

Hinweis: Das Aussehen der in diesem Handbuch beschriebenen Produkte kann geringfügig vom Aussehen der fertigen Produkte abweichen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung der Produkte. Wir bitten um Ihr Verständnis, falls Ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstehen sollten.

1. Handbuch „ “ Einleitung

Dieses Handbuch ist Teil des Artikels, auf den es sich bezieht. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur SICHERHEIT BEIM GEBRAUCH UND ZUR WARTUNG enthalten. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich; wir behalten uns das Recht vor, Informationen zu Verbesserungszwecken zu ändern, ohne verpflichtet zu sein, dieses Handbuch zu aktualisieren. Die Grafiken und Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich als Beispiele. Produktverbesserungen sind jederzeit möglich.

2. Geltungsbereich von „ “

Es wird hauptsächlich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege eingesetzt.

3. Merkmale

1. Die Liegefläche ist pulverbeschichtet und mit Stanzlöchern versehen.
2. Das Kopf- und Fußteil aus ABS lässt sich leicht montieren und demontieren.
3. Die Seitengitter können nach oben und unten geklappt werden.
4. Der Winkel des Rücken- und Kniebereichs kann mit manuellen Griffen eingestellt werden, sodass sich der Patient wohlfühlt.
5. Es zeichnet sich durch seine sichere Verwendung, einfache Desinfektion und Reinigung aus.

4. Technische Parameter des Modells „ ”

Modell-Nr.	A100s
Gesamtgröße	0°-75°(±5°)
Maximale Belastung	250 kg
Neigungswinkel der Rückenlehne	2100 mm × 970 mm × 500 mm


5. Installations sanleitung

Um Verpackungsvolumen zu sparen und einen sicheren Transport zu gewährleisten, ist das von Ihnen erhaltene Krankenhausbett nicht montiert. Möglicherweise müssen Sie das Kopf- und Fußteil, die Rollen und den Drehtisch (falls Sie diesen gewählt haben) montieren.

Die Montageanleitung liegt der Bedienungsanleitung bei. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte genau.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Bett vollständig montiert ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Vor der Montage müssen folgende Teile bereitgestellt werden:

<table>
<tr><td colspan="4">Die wichtigsten Werkzeuge und Schrauben</td></tr>
<tr><td> 1</td><td> 2</td><td>1.Hakenentwässerung 2.Mutter</td><td>*2 Stück</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 1</td><td>1. Schraube</td><td>*10 Stück</td></tr>
</table>

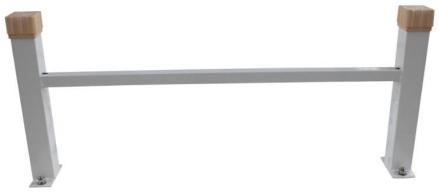 1 2 3 4 5	1. Schraube 2. Abstandhalter 3.Distanzscheibe 4. Mutter 5.Federscheibe	*4 Stück *4 Stück
 1	1. Bettfuß	*2 Stück
 1 2 3 4	1. Kurze Schraube 2. Federscheibe 3. Distanzscheibe 4. Mutter	*8 Stück
 1 2	1. Schrauben und Muttern 2. Distanzkeil	*2 Stück
 1 2 3	1. Distanzscheibe 2. Mutter 3.Federscheibe	*2 Stück
 1  2	1. Großer Schraubenschlüssel: 8 mm Schraube: 14 10 mm Schraube: 17 2. Kleiner Schraubenschlüssel: 8 mm Sicherungsmutter: 13 10 mm Sicherungsmutter: 17	*1 Stück
 1	Schraubendreher	*1 Stück

Alle Schrauben und Muttern an die richtige Stelle setzen und festziehen!

Schritt 1: Das Bett ist flach. Abbildung 1 zeigt (1):




1

Schritt 2: Installieren Sie den Abflusskanal. Abbildung 2 zeigt:

Befestigen Sie den Abflusshaken, indem Sie ihn am Bett festdrehen. Er wird an beiden Seiten der Bettbalken angebracht.




*2 Stück

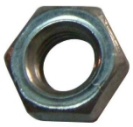

*2 Stück



1

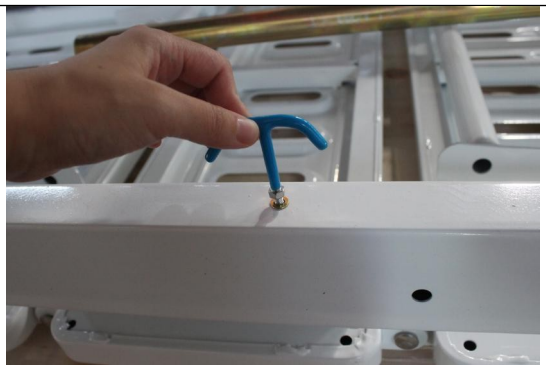

2

Schritt 3: Bringen Sie die Schrauben für die Bettbeine an. Abbildung 3 zeigt (1-3):




*2 Stück




*8 Stück



1

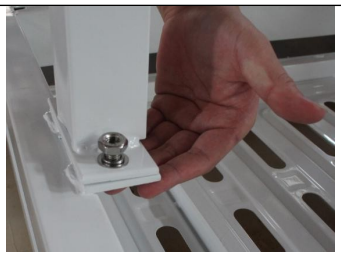

2

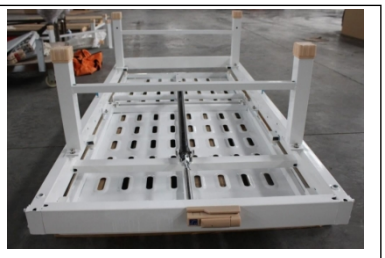

3

Schritt 4: Befestigen Sie das Ende des Kopfendes. Abbildung 6 zeigt (1-3):

Zwei Haken an beiden Seiten. Halten Sie das Kopfteil fest, um es an den beiden Stahlsäulen einzuhängen. Wichtig: Decken Sie die kleine Stahlplatte ab, um das Kopfteil zu arretieren.



1



2



3

6. Verwenden Sie die Methode „ “



(Das Aussehen des Kopf- und Fußendes kann von dem Ihnen gelieferten Produkt abweichen.)





Abbildung 1

Abbildung 1 Die Kurbel, die Sie erhalten, kann eine andere Form haben, hat jedoch dieselbe Funktion.

6.1 Funktion

6.1.1 Verstellbarer Rückenlehnenwinkel:



Drehen Sie den Kurbelgriff des „Rückenlehne”-Griffs im Uhrzeigersinn, um den Rückenbereich anzuheben.

Drehen Sie den Kurbelgriff von „Rückenlehne” gegen den Uhrzeigersinn, um den Rückenbereich abzusenken (Abbildung 2).

6.1.2 Fußstütze winkelverstellbar



Drehen Sie den Kurbelgriff der „Fußstütze" im Uhrzeigersinn, um den Kniewinkel anzuheben.

6.2 Verwendung einer Infusionsstange:

Stellen Sie den Infusionsständer bei Gebrauch auf. Wenn der Infusionsständer aufrecht steht, kann die Höhe eingestellt werden. Wenn die Höhe nicht ausreicht, drehen Sie Punkt C und ziehen Sie den Ständer B nach oben, um ihn höher zu stellen, und drehen Sie dann Punkt C im Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren, und hängen Sie den Infusionsbeutel an Punkt A auf. (Abbildung 3)





Abbildung 3

6.3 Verwendung von Rollen:

Wenn Ihr Bett mit Rollen ausgestattet ist, können Sie das Bett mit oder ohne Patienten darauf bewegen.

Hinweis: Arretieren Sie die Rollen, wenn Sie das Bett anhalten oder positionieren.

Bremspedale an den Rollen. (Abbildung 4)



Feststellen



Entriegeln Abbildung 4

6.4 Ablaufhaken

Der Abflusshaken wird am Bett angebracht. Er dient zum Aufhängen des Urinbeutels. Befestigen Sie den Abflusshaken durch Drehen am Bett. (Abbildung 5) Wenn Sie ihn nicht benötigen, können Sie ihn wieder abnehmen.

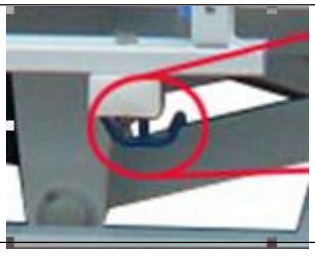


Abbildung 5

7. Hinweise

7.1 Das Bedienpersonal muss diese Anleitung sorgfältig lesen, die Anweisungen befolgen und sich mit den korrekten Betriebs- und Wartungsverfahren des Krankenhausbettes vertraut machen.

7.2 Achten Sie beim Transfer von Patienten darauf, die Seitengitter zu verriegeln. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die aus einer unsachgemäßen Bedienung resultieren.

7.3 Illegale und unsachgemäße Handlungen sowie eine Überlastung sind verboten, um eine Beschädigung des Krankenhausbettes durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

8. Warnung und Vorsicht ( )

⚠ LASSEN SIE KINDER WÄHREND DES BETRIEBS NICHT AUF ODER IN DER NÄHE DES BETTES.⚠ LASSEN SIE DIESES GERÄT NICHT VON KINDERN BEDIENEN.

⚠ STELLEN SIE BEIM BEDIENEN DER HI-LOW-, KNIE- UND RÜCKENFUNKTION DES BETTES IMMER SICHER, DASS DIE BETTBEWOHNERIN ODER DER BETTBEWOHNER RICHTIG INNERHALB DER BETTGrenzen POSITIONIERT IST. LASSEN SIE BEI DER BEDIENUNG DER FUNKTIONEN KEINE EXTREMITÄTEN ÜBER DIE SEITEN ODER ZWISCHEN DIE BETTGITTER HERAUSRAGEN.

⚠ VERWENDEN SIE KEINE NICHT ZUGELASSENEN SEITENGITTER.

⚠ WARN-/VORSICHTSHINWEISE AUF DEM BETT WEISEN AUF GEFAHREN ODER UNSICHERE PRAKTIKEN HIN, DIE ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.

⚠ BEI DER VERWENDUNG VON NASAL- ODER MASKENARTIGEN VERABREICHUNGSGERÄTEN MÜSSEN SAUERSTOFF- ODER LUFTLEITUNGEN ORDNUNGSGEMÄSS VERLEGT UND BEFESTIGT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SICH DIE LEITUNGEN WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES BETTES NICHT VERWICKELN UND EVENTUELL DURCHSCHNEIDEN.

⚠ STELLEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME SICHER, DASS DIE NIETEN DES BETTRAHMS ORDNUNGSGEMÄSS IN DEN BETTKENDHAKEN SITZEN: ANDERNFALLS KANN ES ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN KOMMEN.

⚠ HALTEN SIE ALLE BEWEGLICHEN TEILE FREI VON HINDERNISSEN (Z. B. DECKEN/Laken, HEIZDECKEN/HEIZKISSEN, SCHLÄUCHE, KABEL UND ANDERE PRODUKTE)

9. Wartung

9.1 Halten Sie das Gerät routinemäßig sauber (einschließlich Desinfektion).

9.2 Überprüfen Sie, ob Teile locker sind oder nicht wie gewohnt funktionieren.

10. Lagerung


10.1 An einem feuchtigkeitsgeschützten und korrosionsfreien Ort lagern.

11. Transport

11.1 Transport mit üblichen Transportmitteln: Schiff, Flugzeug, Zug, LKW.

11.2 Krankenhausbetten können manuell transportiert werden.

11.3 Während des Transports nicht werfen oder fallen lassen.

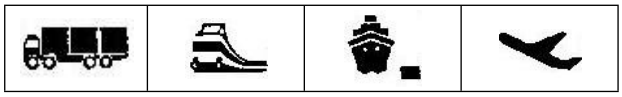

12. Produktliste

Nr.	Name	Menge
1	Bettgestell	1 Satz
2	Kopf- und Fußteil	1 Satz
3	Rollen	4
4	Infusionsständer	1
5	Seitengitter	1 Satz
6	Ablaufhaken	2
7	Matratzenhalter	1
8	Schrauben und Muttern für die Montage	Einige (siehe Montageanleitung)
9	Benutzerhandbuch	1
10	Typenschild	1
11	Hebestange	1
12	Hebestangengriff	1