Letto ospedaliero manuale
Modello: SK033-1

Manuale d'uso



Immagine solo a scopo illustrativo

Indice

1. **Introduzione al manuale** **2**

2. **Ambito di applicazione** **2**

3. **Caratteristiche** **2**

4. **Parametri tecnici** **2**

5. **Guida all'installazione** **2**

6. **Metodo di utilizzo** **7**

7. **Note** **10**

8. **Avvertenze e precauzioni** **10**

9. **Manutenzione** **11**

10. **Conservazione** **11**

11. **Trasporto** **11**

12. **Elenco dei prodotti** **11**

Nota: l'aspetto dei prodotti descritti nel presente manuale potrebbe differire leggermente da quello dei prodotti finiti. Ciò non influirà sulle prestazioni dei prodotti. Ci scusiamo per l'eventuale disagio causato.

1. Manuale Introduzione

Il presente manuale è parte integrante dell'articolo a cui si riferisce. Si prega di leggere attentamente le istruzioni in quanto forniscono informazioni importanti sulla SICUREZZA DURANTE L'USO E LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE. Le descrizioni e le immagini contenute nella pubblicazione non sono vincolanti; ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione a scopo di miglioramento senza alcun obbligo di aggiornare il presente manuale. La grafica e le immagini contenute nel presente manuale sono solo esempi. È possibile apportare miglioramenti ai prodotti.

2. Ambito di applicazione dell'

È utilizzato principalmente in ospedali, case di cura e assistenza domiciliare.

3. Caratteristiche

1. La superficie del letto è verniciata a polvere, con fori punzonati.
2. La testiera e la pediera in ABS possono essere facilmente montate e smontate.
3. La sponda di protezione può essere sollevata verso l'alto e abbassata verso il basso.
4. L'angolazione dello schienale e della parte delle ginocchia può essere regolata tramite maniglie manuali, garantendo il comfort del paziente.
5. Si caratterizza per la sua sicurezza d'uso, la facilità di disinfezione e pulizia.

4. Parametri tecnici del modello

Modello n.	A100s
Dimensioni complessive	0°-75°(±5°)
Carico massimo	250 kg
Angolo di sollevamento dello schienale	2100 mm*970 mm*500 mm


5. Installare la guida

Per risparmiare spazio nell'imballaggio e garantire un trasporto sicuro, il letto ospedaliero che avete ricevuto non è assemblato. Potrebbe essere necessario installare la testiera e la pediera, le rotelle e il piano girevole (se selezionato).

La guida all'installazione è allegata al manuale d'uso. Leggere attentamente questa guida e seguire rigorosamente i passaggi indicati.

Nota: assicurarsi che il letto sia completamente installato prima di utilizzarlo. Parti da preparare prima dell'installazione:

<table>
<tr><td colspan="4">Gli attrezzi principali e le viti</td></tr>
<tr><td> 1</td><td> 2</td><td>1. Scarico del gancio 2. Dado</td><td>*2 pezzi</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 1</td><td>1. Vite</td><td>*10 pezzi</td></tr>
</table>

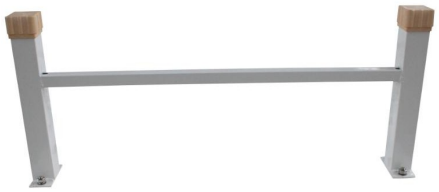 1 2 3 4 5	1. Vite 2. Distanziale 3. Spessore distanziatore 4. Dado 5. Rondella elastica	*4 pezzi *4 pezzi
 1	1. Gamba del letto	*2 pezzi
 1 2 3 4	1. Vite corta 2. Rondella elastica 3. Spessore distanziatore 4. Dado	*8 pezzi
 1 2	1. Bulloni e dadi 2. Cuneo distanziatore	*2 pezzi
 1 2 3	1. Spessore distanziatore 2.Dado 3. Rondella elastica	*2 pezzi
 1  2	1. Chiave inglese grande: Vite da 8 mm: 14 Vite da 10 mm: 17 2. Chiave piccola: 8 mm Dado di bloccaggio: 13 Dado di bloccaggio da 10 mm: 17	*1 pz
 1	Cacciavite	*1 pz

Posizionare tutte le viti e i dadi nel posto giusto, quindi serrare bene!

Fase 1: Il letto è piatto. La figura 1 mostra (1):




1

Fase 2: Installare il gancio di drenaggio. La figura 2 mostra:

Installare il gancio di drenaggio ruotandolo sul letto. Sono montati su entrambi i lati delle travi del letto.




*2 pezzi

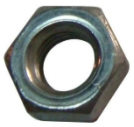

*2 pezzi



1

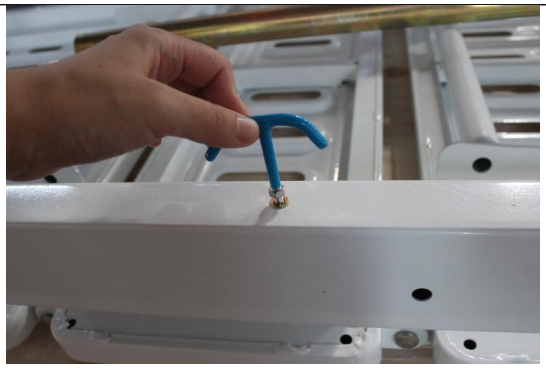

2

Fase 3: Installare le viti delle gambe del letto. La figura 3 mostra (1-3):




*2 pezzi




*8 pezzi



1

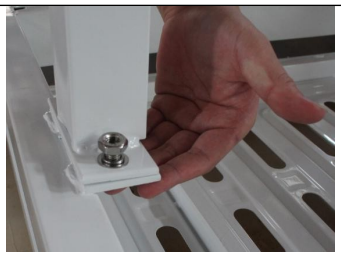

2

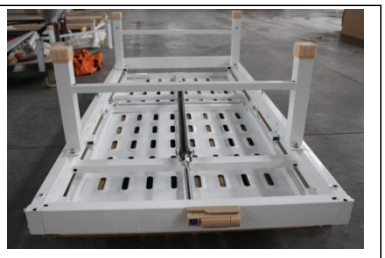

3

Fase 4: Installare l'estremità della testiera del letto. La figura 6 mostra (1-3):

Due ganci su entrambi i lati. Tenere la testiera per agganciarla alle due colonne in acciaio. Importante: coprire la piccola piastra in acciaio per bloccare la testiera.



1



2



3

6. Utilizzare il metodo " "



(L'aspetto della testiera e della pediera potrebbe differire da quello del prodotto ricevuto)





Figura 1 Figura 1

La manovella che riceverete potrebbe avere una forma diversa, ma la stessa funzione.

6.1 Funzione

6.1.1 Angolo dello schienale regolabile:



Ruotare la manovella della maniglia "Back Rest" in senso orario per sollevare la sezione posteriore.

Ruotare la manovella di "Back Rest" in senso antiorario per abbassare la sezione posteriore (Figura 2).

6.1.2 Angolo del poggiapiedi regolabile



Ruotare la manovella del "Poggiapiedi" in senso orario per sollevare la sezione delle ginocchia

6.2 Utilizzo dell'asta portaflebo:

Erigere l'asta portaflebo quando la si utilizza. Quando l'asta portaflebo è in posizione verticale, è possibile regolarne l'altezza. Se l'altezza non è sufficiente, ruotare il punto C e tirare l'asta B per alzarla, quindi ruotare il punto C in senso orario per bloccarlo e appendere la sacca per infusione al punto A. (Figura 3)





Figura 3

6.3 Metodo di utilizzo delle rotelle:

Se il letto è dotato di rotelle, è possibile spostarlo con o senza il paziente.

Nota: bloccare le rotelle quando si ferma o si posiziona il letto.

Pedali del freno sulle rotelle. (Figura 4)



Bloccare



Sbloccare Figura 4

6.4 Gancio di drenaggio

Il gancio di drenaggio è applicato al letto. Viene utilizzato per appendere la sacca per l'urina. Installare il gancio di drenaggio ruotandolo sul letto. (Figura 5) Se non è necessario, è possibile rimuoverlo.



Figura 5

7. Note

7.1 Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, seguire le istruzioni e acquisire familiarità con le corrette procedure di funzionamento e manutenzione del letto ospedaliero.

7.2 Durante il trasferimento dei pazienti, assicurarsi di bloccare la sponda di protezione. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso improprio.

7.3 Sono vietate azioni illegali e barbariche e il funzionamento in condizioni di sovraccarico, al fine di evitare un uso improprio che possa danneggiare il letto ospedaliero.

8. Avvertenza e Attenzione

⚠⚠N ON PERMETTERE AI BAMBINI DI SALIRE SUL LETTO O AVVICINARSI AD ESSO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. A T T E N Z I O N E NON PERMETTERE AI BAMBINI DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO.

⚠ QUANDO SI UTILIZZA LA FUNZIONE DI ALZATA/ABBASSAMENTO, PIEDI E SCHIENA DEL LETTO, ASSICURARSI SEMPRE CHE LA PERSONA ALLEATA AL LETTO SIA POSIZIONATA CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DEI CONFINI DEL LETTO. NON LASCIARE CHE ALCUNA ESTREMITÀ SPORGI AL DI FUORI DEL LETTO O TRA LE SPONDE DEL LETTO DURANTE L'ESECUZIONE DI QUALSIASI FUNZIONE.

⚠ NON UTILIZZARE GABBIE LATERALI NON AUTORIZZATE.

⚠ LE ETICHETTE DI AVVERTENZA/CAUTELA APPOSTE SUL LETTO INDICANO I PERICOLI O LE PRATICHE NON SICURE CHE POTREBBERO CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI.

⚠ QUANDO SI UTILIZZANO DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE NASALI O MASCHERATI, I TUBI DELL'OSSIGENO O DELL'ARIA DEVONO ESSERE POSIZIONATI E FISSATI CORRETTAMENTE PER ASSICURARE CHE NON SI AGGROVIGLIANO E NON SI ROMPANO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL LETTO.

⚠ PRIMA DI UTILIZZARE IL LETTO, ASSICURARSI CHE I RIVETTI DEL TELAIO DEL LETTO SIANO CORRETTAMENTE INSERITI NEI GANCIO ALLE ESTREMITÀ DEL LETTO: IN CASO CONTRARIO, POTREBBERO VERIFICARSI LESIONI O DANNI.

⚠ MANTENERE TUTTE LE PARTI MOBILI LIBERE DA OSTACOLI (AD ESEMPIO Coperte/lenzuola, coperte/cuscini riscaldanti, tubi, cavi e altri tipi di prodotti)

9. Manutenzione

9.1 Mantenere pulito come da routine (inclusa la disinfezione).

9.2 Controllare che non vi siano parti allentate o fuori posto.

10. Conservazione


10.1 Conservare in un luogo protetto dall'umidità e dalla corrosione.

11. Trasporto

11.1 Trasportare con mezzi di trasporto comuni: nave, aereo, treno, camion.

11.2 Il letto ospedaliero può essere movimentato manualmente.

11.3 Non lanciare o far cadere durante il trasbordo.

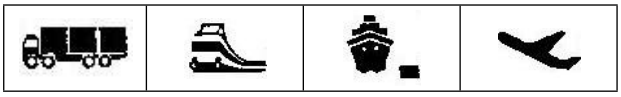

12. Elenco dei prodotti

N	Nome	Quantità
1	Struttura letto	1 set
2	Testiera e pediera	1 set
3	Ruote	4
4	Asta portaflebo	1
5	Sponda laterale	1 set
6	Ganci di drenaggio	2
7	Supporto per materasso	1
8	Viti e dadi per l'installazione	Alcuni (fare riferimento alla guida all'installazione)
9	Manuale d'uso	1
10	Targhetta identificativa	1
11	Asta di sollevamento	1
12	Maniglia del palo di sollevamento	1