Manual de usuario

SKR-AT670

Pintado en color Carro de anestesia

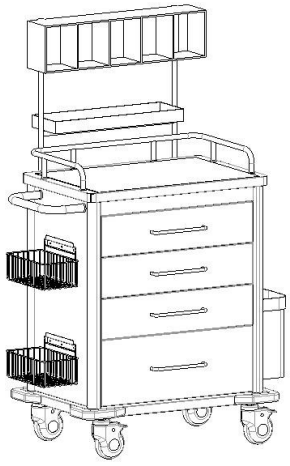






Imagen solo para referencia

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar

Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que las siguientes piezas estén completas en la caja:

Tabla a:

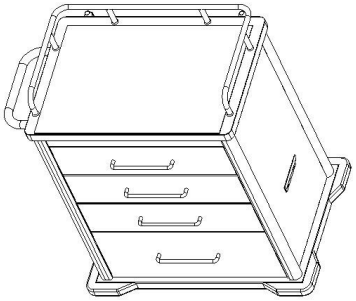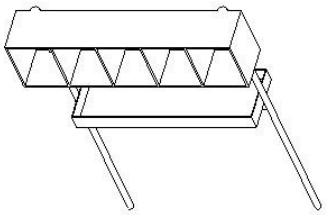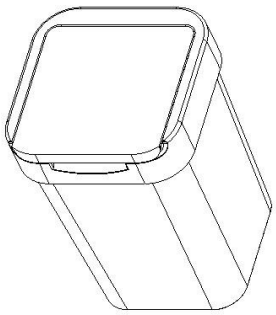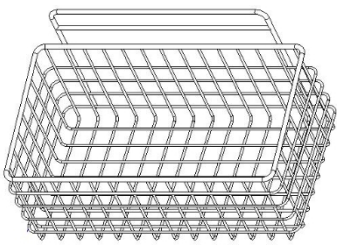N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Cuerpo principal		670 mm (largo) x 450 mm (ancho) x 880 mm (alto)	1	pcs
2	Caja de anestesia		Longitud 600 mm/Total 5 rejillas	1	pcs
3	Cubo de basura (con tapa)		L180*W180*H265 mm	1	pcs
4	Cesta de malla		180 mm x 180 mm x 265 mm	2	unidades





5	Rueda con freno		Ruedas de 4 pulgadas con freno	2	pcs
6	Rueda sin freno		Rueda giratoria de 4 pulgadas sin freno	2	pcs
7	Tornillo	/	Consulte la tabla a.1	1	juego

Tabla a.1


N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cant	Unidad
1	Arandela elástica		Φ12*Φ19,72*H3,54 mm	4	pcs

1.2 Instalación de ruedas


Coloque una almohadilla protectora y ponga el cuerpo del carro boca abajo;
Saque la arandela elástica Φ12 del paquete de tornillos, saque las ruedas y, a continuación, insértelas en el tubo y apriételas en sentido horario con una llave hexagonal interior.

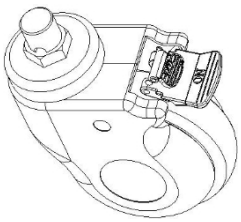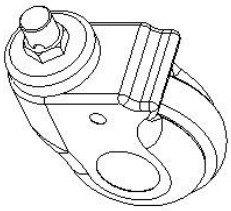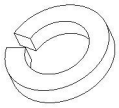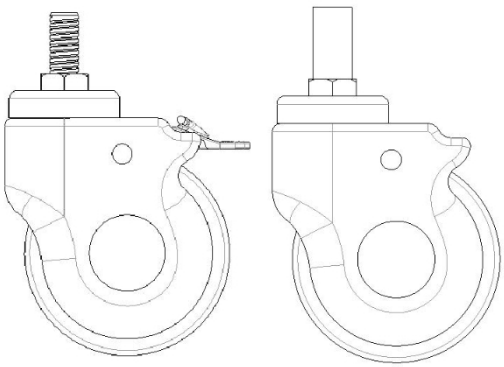

1

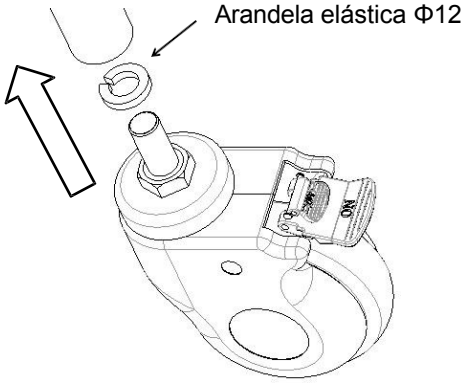

2

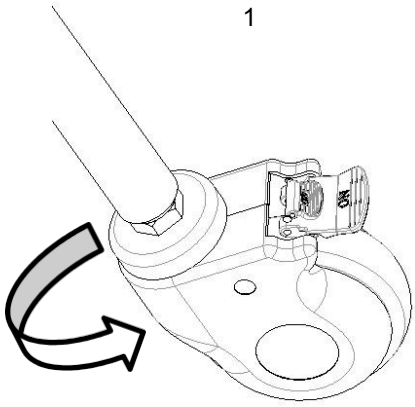



3




4


1.3 Instalación de la cesta de malla

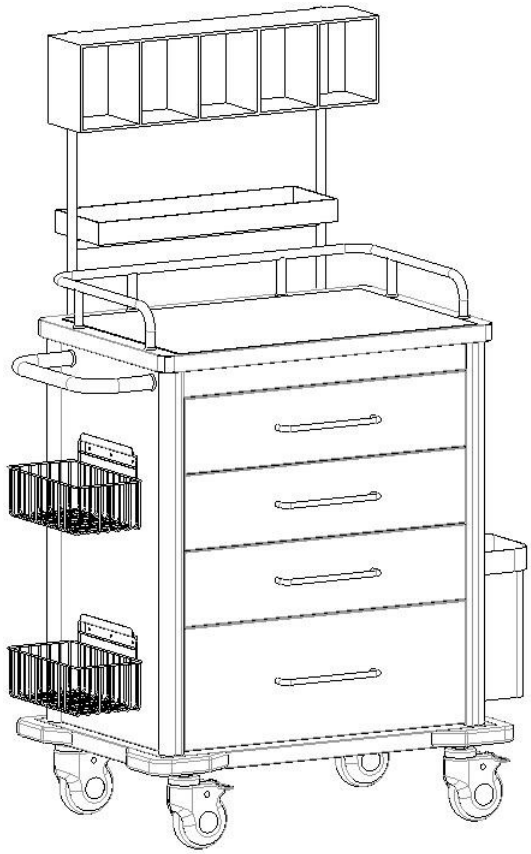


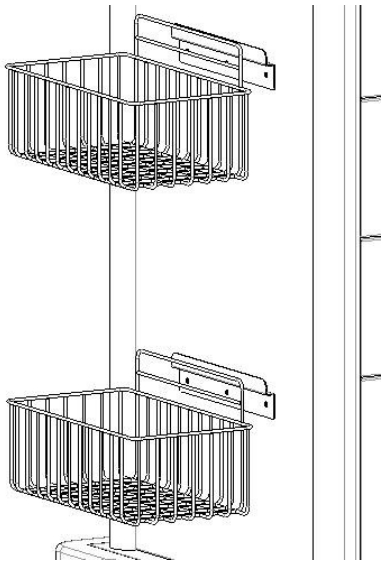


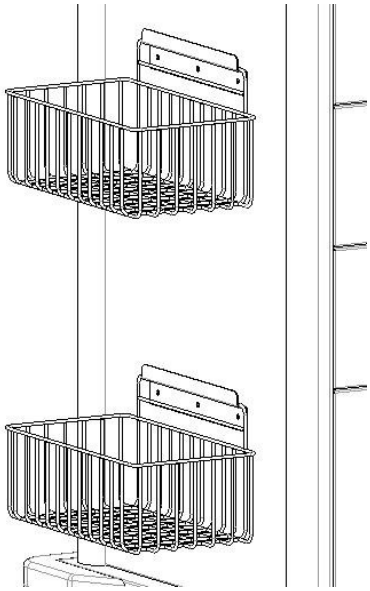


1.4 Instalación del cubo de basura

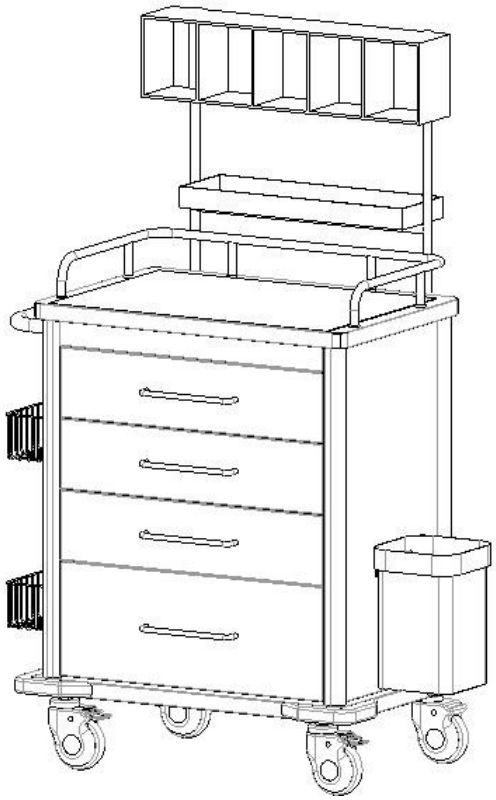

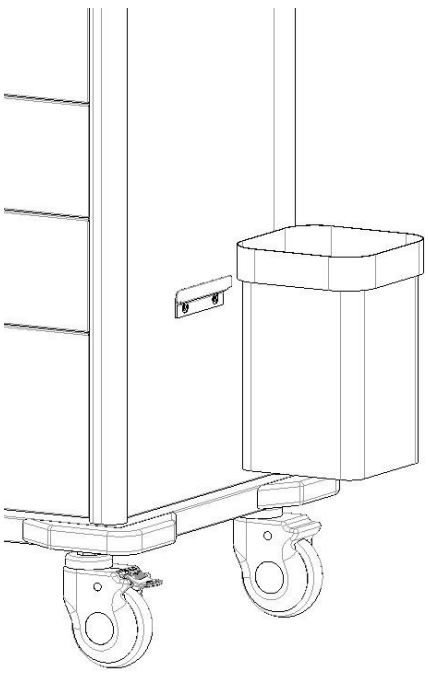

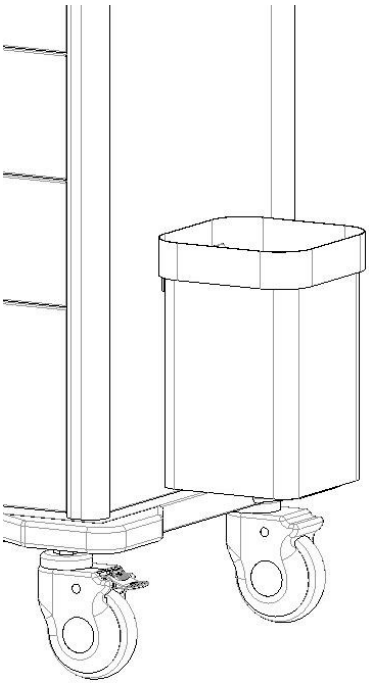

1. Método de uso

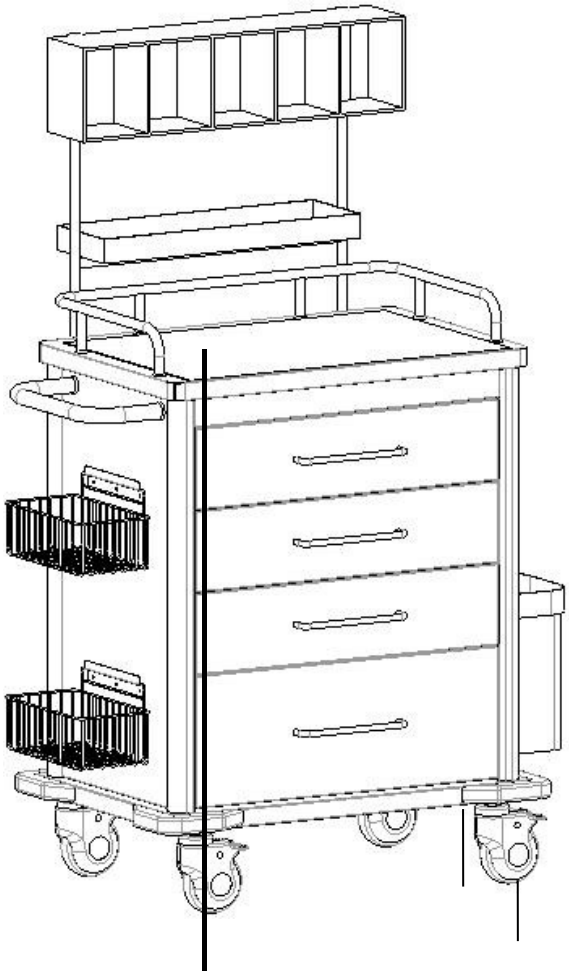


Carro de anestesia pintado en un solo color2 ruedas


Tamaño del carro	Longitud	mm	670
	Ancho		45
	Altura del carro sobre el suelo		960
Peso	Carga de trabajo segura	Kg	50

2.1 Método de uso de las ruedas

Bloquee la rueda: después de empujar el carro de anestesia hasta la posición deseada, pulse el botón ON con el pie y bloquee la rueda cuando oiga un «clic», tal y como se muestra en la figura siguiente.

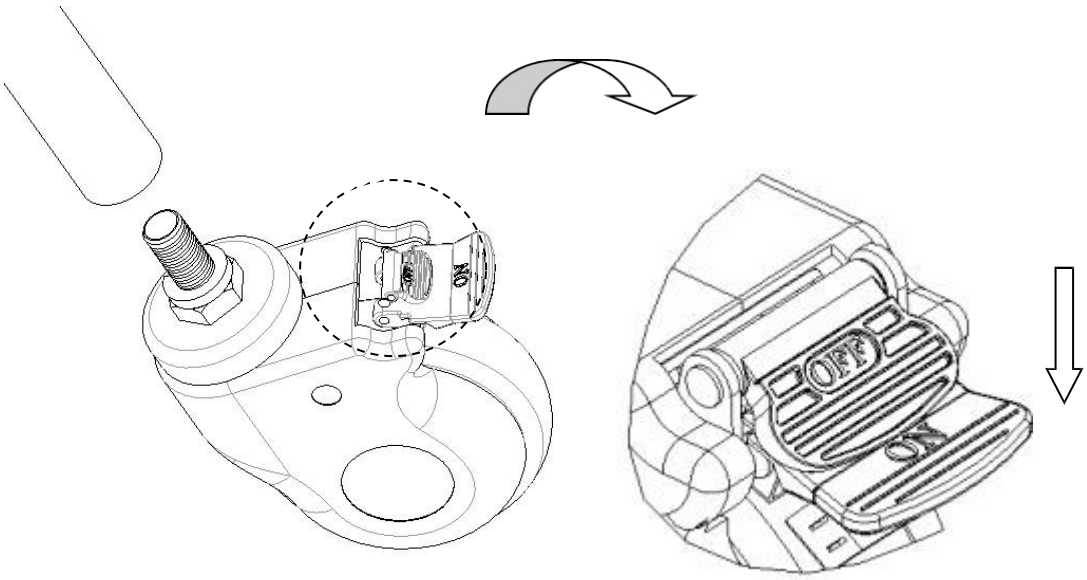

Desbloqueo de la rueda: pulse el botón OFF con el pie y desbloquee la rueda cuando oiga un «clic».

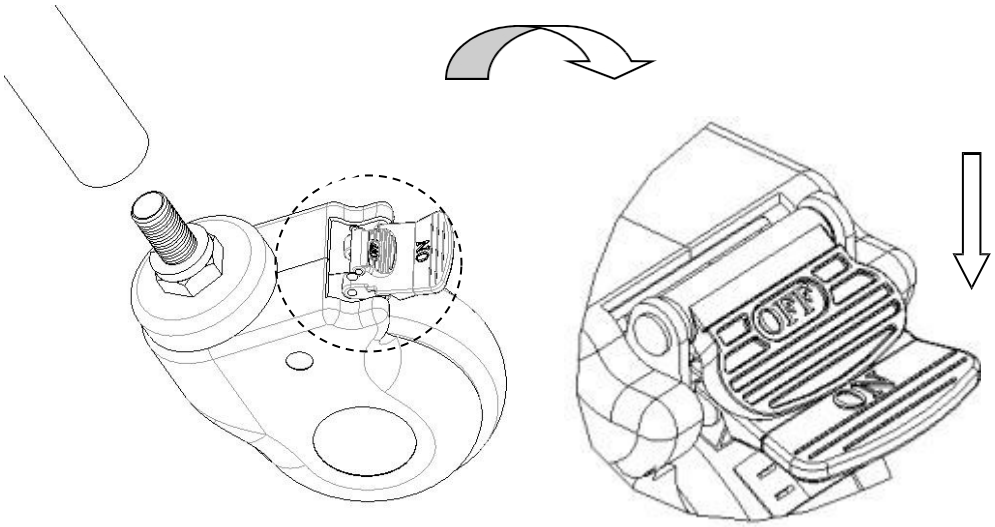

3. Exclusión de averías

Averías comunes	Causas probables	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro	1. La rueda está bloqueada sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno, compruebe 2.1 2. Sustituya la rueda giratoria, compruebe 1.2

4. Mantenimiento

1. Para utilizar el carro de anestesia de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas. Se recomienda comprobarlo cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y que todas las operaciones sean normales.
2. Cuando el bastidor del carro de anestesia envejece y alcanza un determinado tiempo de mantenimiento, las piezas metálicas y plásticas del bastidor del carro de anestesia pueden reciclarse.
3. Evite rayar el panel con aparatos afilados o cuchillos durante su uso y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de anestesia, ya que podrían oxidar la superficie de acero inoxidable.
5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, ya que podrían dañarlas.
6. Está prohibido forzar las ruedas para frenar, ya que esto podría dañar el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que haya hilos enredados y otras acumulaciones alrededor de la rueda; retire los pernos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
8. Para determinar si es necesario sustituir las ruedas en función del tiempo de uso y el desgaste, puede sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes estén bien colocados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.
9. En el caso de las ruedas con freno, es necesario comprobar periódicamente que los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro de anestesia equipado con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá intentar empujar el carro de anestesia y comprobar si el rendimiento de uno de los frenos de cada rueda es bueno. Si la función del freno falla debido al desgaste o a daños en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a comprobar el sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con un distribuidor autorizado de nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se debe volver a comprobar el funcionamiento de los frenos de las ruedas.

5. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje del carro se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite salir apresuradamente, las vibraciones violentas y proteja el carro de la luz solar y la lluvia durante su transporte.
3. El carro debe almacenarse:

a) Temperatura ambiente: -40 °°C ~ +70 °°C .

b) Humedad relativa:≤ 95 %.

c) Presión atmosférica: 500 hPa~ 1060 hPa.

6. Servicio posventa

1. Conserve los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, ya que deberá presentarlos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a la mayor brevedad posible para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a una instalación y un uso correctos según las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y un servicio de mantenimiento de por vida con el «certificado» o la factura.
4. A partir de la fecha de compra, si el producto está realmente dañado o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

MODEL:SKR-AT670 | REF.: 319-SKR-AT670

CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

CE MD



QuirumedS.L.U.CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

