Manuale utente

SKR-AT670

Verniciato a colori Carrello per anestesia

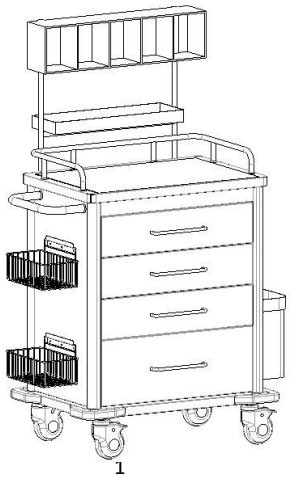


Immagine solo a scopo illustrativo





SAIKANG Medical

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Dopo aver aperto la confezione, verificare che tutte le parti seguenti siano presenti nella confezione:

Tabella a:

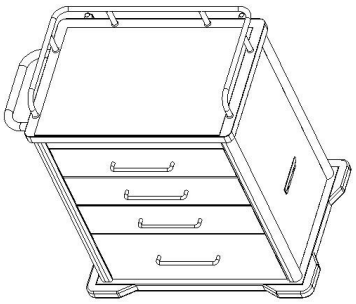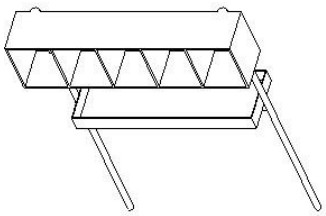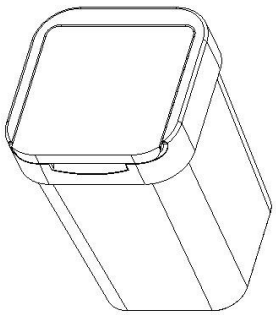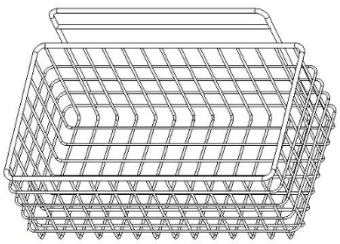N	Nome	Immagine	Specifiche	Q	Unità
1	Corpo principale		L670*P450*H880 mm	1	pz
2	Scatola per anestesia		Lunghezza 600 mm/Totale 5 griglie	1	pz
3	Cestino (con coperchio)		L180*P180*H265 mm	1	pz
4	Cestino in rete		L180*P180*H265 mm	2	pezzi





5	Ruota con freno		Ruota da 4 pollici con freno	2	pz
6	Rotella senza freno		Ruota girevole da 4 pollici senza freno	2	pz
7	Vite	/	Fare riferimento alla tabella a.1	1	set

Tabella a.1


N	Nome	Immagine	Specifiche	Quantità	Unità
1	Rondella elastica		Φ12*Φ19,72*H3,54 mm	4	pz

1.2 Installazione delle rotelle


Posizionare un cuscinetto protettivo e capovolgere il corpo del carrello;
Estraete la rondella elastica Φ12 dalla confezione delle viti, estraete le rotelle, quindi inseritele nel tubo e serrate in senso orario con una chiave a brugola.

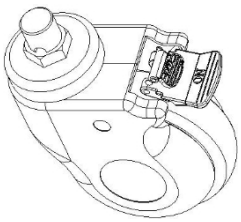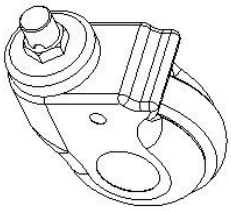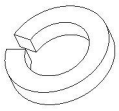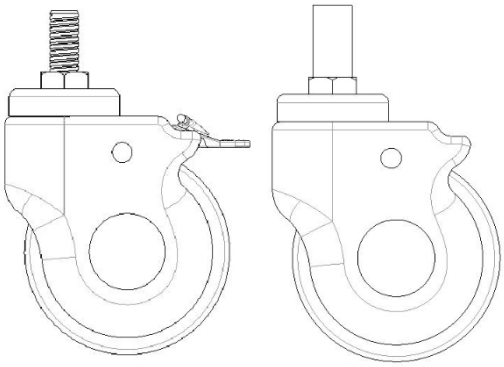


1

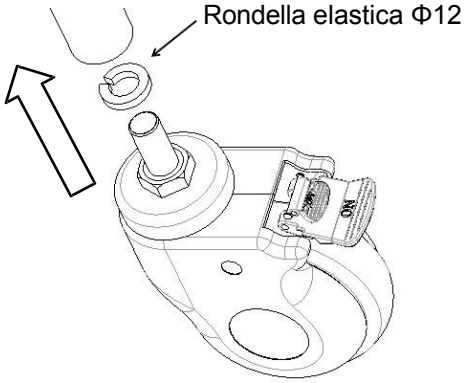

2

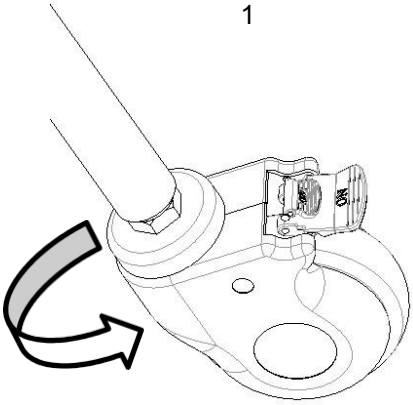



3

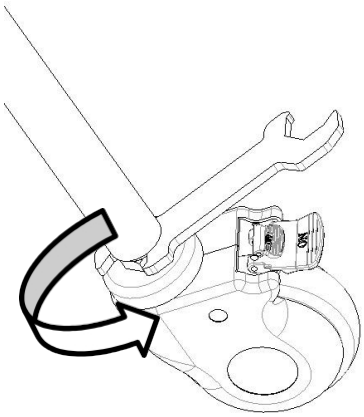


4


1.3 Installazione cestino in rete

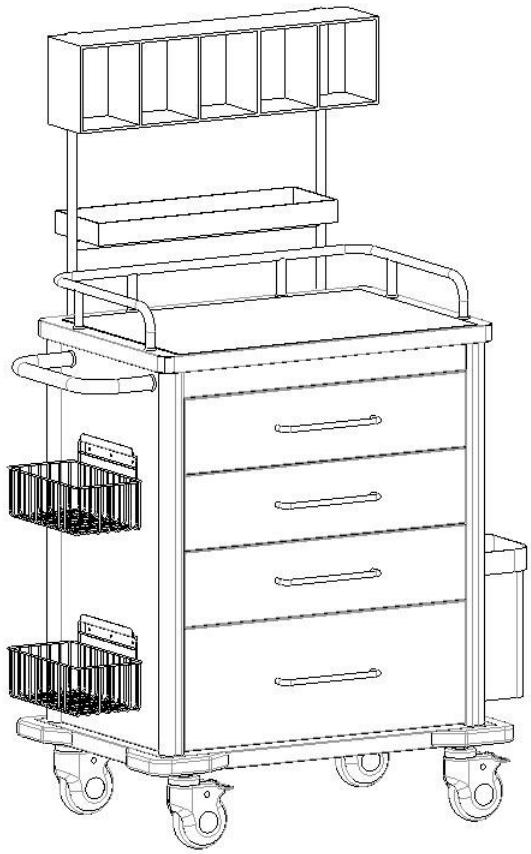


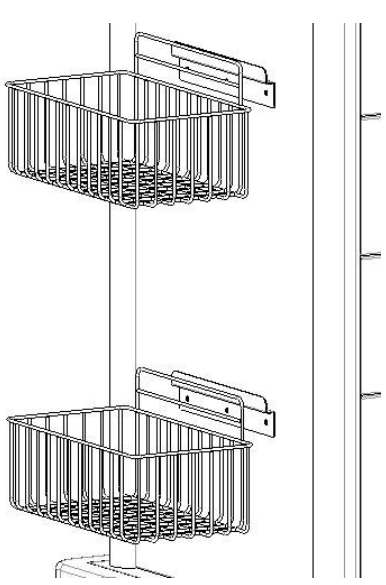


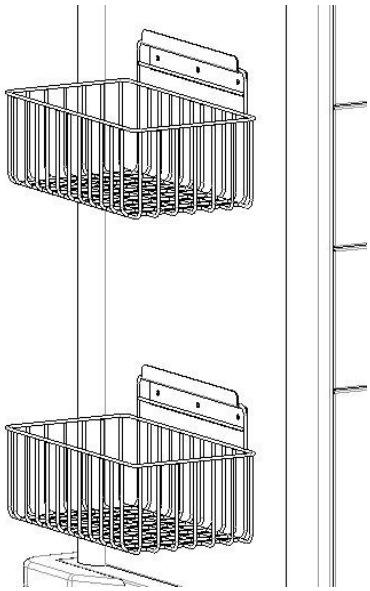


1.4 Installazione del cestino dei rifiuti

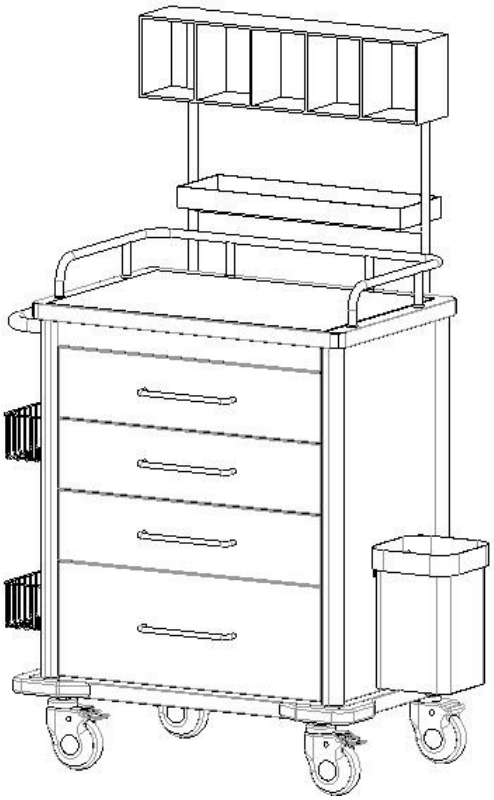

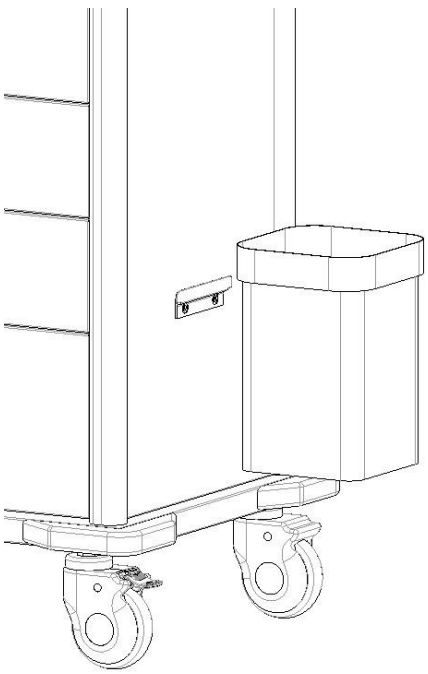

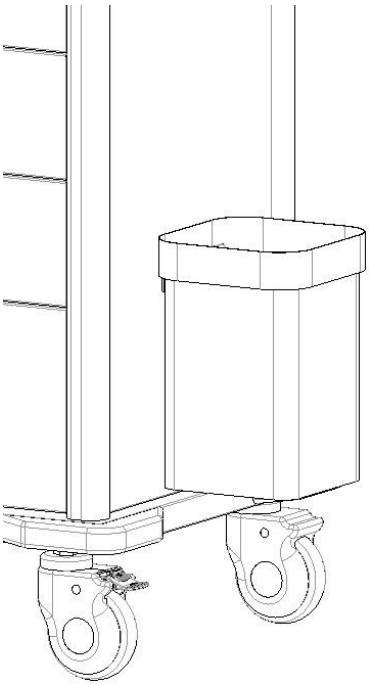

1. Modalità d'uso

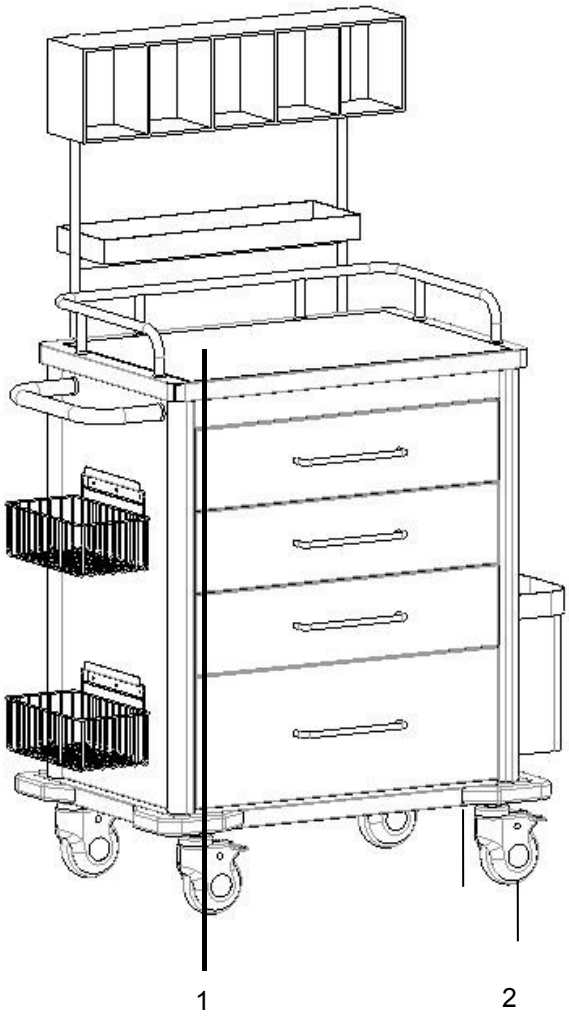


Carrello per anestesia verniciato in tinta unita 2 ruote


Dimensioni carrello	Lunghezza	mm	670
	Larghezza		450
	L'altezza del carrello dal suolo		960
Peso	Carico di lavoro sicuro	kg	50

2.1 Modalità d'uso delle ruote

Bloccare la rotella: dopo aver spinto il carrello per anestesia nella posizione desiderata, premere il pulsante ON con il piede e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura sottostante.

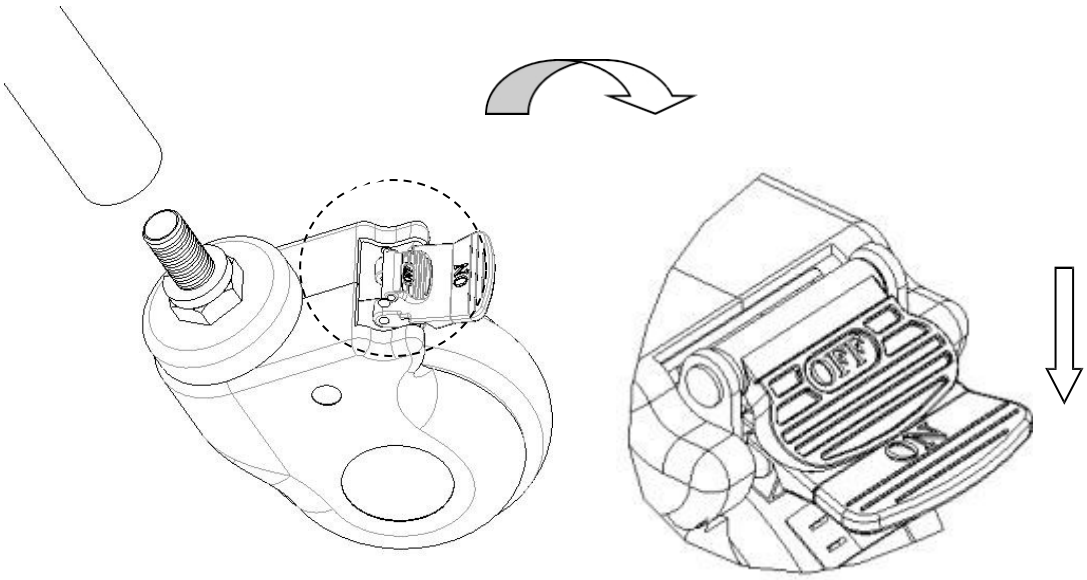

Sbloccare la rotella: premere il pulsante OFF con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "clic".

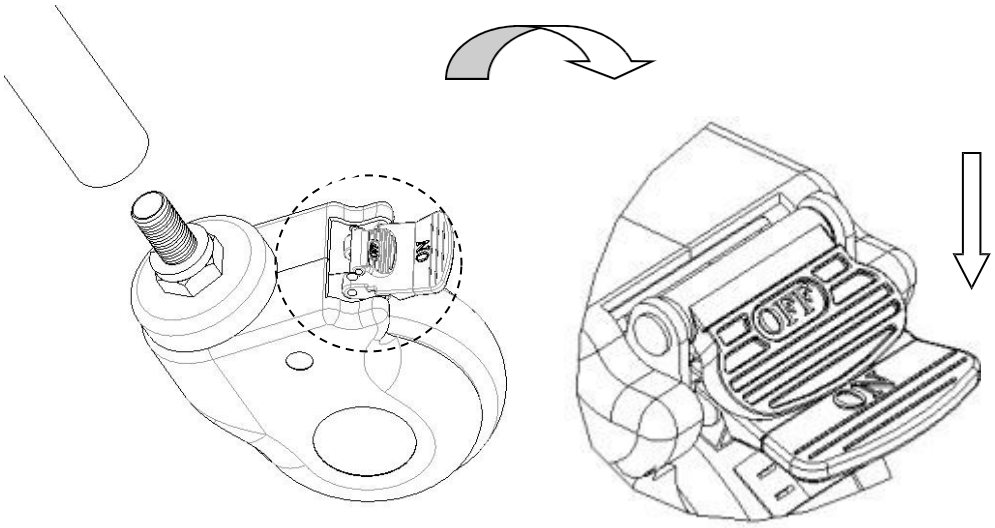

3.Esclusione dei guasti

Guasti comuni	Probabili cause	Metodi di esclusione
Difficoltà a spostare l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza aver rilasciato il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno, controllare 2.1 2. Sostituire la rotella, controllare 1.2

4. Manutenzione

1.Per utilizzare il carrello per anestesia in modo sicuro, è necessario eseguire regolari controlli di sicurezza sul carrello stesso. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per assicurarsi che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.

2.Quando il telaio del carrello per anestesia invecchia e raggiunge un determinato periodo di manutenzione, le parti metalliche e quelle in plastica del telaio possono essere riciclate.

3.Evitare di graffiare il pannello con oggetti appuntiti o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.

4.Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il carrello per anestesia, poiché potrebbero causare la ruggine della superficie in acciaio inossidabile.

5.Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi, che potrebbero danneggiarle.

6.È vietato forzare le ruote durante la frenata, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema frenante.

7.L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata mediante ispezione visiva. Alcuni fili di filo ritorto e altri accumuli possono avvolgersi attorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere rimontate e riutilizzate.

8.Per valutare se il rotella deve essere sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzare rondelle di sicurezza o controdadi per facilitare questa operazione.

9.Per le ruote dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Per un carrello per anestesia dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello per anestesia e verificare anche se il funzionamento del freno di ciascuna ruota è corretto. Se il funzionamento del freno non è corretto a causa dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e quindi riprovare il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio post-vendita o un rivenditore autorizzato dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, è necessario verificare nuovamente il funzionamento dei freni delle rotelle.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello viene effettuato in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Evitare di trasportare il carrello in modo affrettato, sottoponendolo a vibrazioni violente, ed evitare l'esposizione alla luce solare e alla pioggia durante il trasporto.
3. Il carrello deve essere conservato:

a) °CTemperatura ambiente: da -40 °C a +~ °C +70 °°C .

b) Umidità relativa:≤ 95%.

c) Pressione atmosferica: 500 hPa~ 1060 hPa.

6. Assistenza post-vendita

1. Conservare accuratamente i documenti forniti con la macchina e le fatture relative al prodotto, poiché saranno necessari per l'esecuzione della garanzia e della manutenzione da parte dell'azienda.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare tempestivamente la nostra azienda, in modo che possa fornire un'assistenza tecnica accurata e rapida e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa di un'installazione e un utilizzo corretti secondo le specifiche, il prodotto beneficerà di un anno di garanzia gratuita e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. A partire dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Assistenza a vita dal produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

MODEL:SKR-AT670 | REF.: 319-SKR-AT670

CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

CE MD



QuirumedS.L.U.CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:

