

Balanza pesapersonas KERN MPB

Balanza pesapersonas con función IMC



KERN MPB-P
con soporte



KERN MPB
con indicador
desocupado

Nuestro distribuidor especializado



1



1



2

Características

- Plataforma de pesaje de acero estable con superficie antideslizante y resistente a la abrasión
- Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- Uso fácil y confortable por 4 teclas
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
- Puede ser utilizada con pilas así como adaptador de red


Datos técnicos

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del plato de pesaje AxPx 315x300x60 mm
- Dimensiones del indicador AxPx 210x110x50 mm
- Sólo MPB-P: Dimensiones totales (soporte incl.) AxPx 315x440x1010 mm
- Longitud de cable del indicador (solamente para el modelo sin soporte) aprox. 120 cm
- Puede ser utilizada con pilas, 6 x 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 170 h
- Adaptador de red (externo) está incluido
- Peso neto MPB aprox. 4,6 kg; MPB-P aprox. 6,4 kg

Accesorios

- 1 Maleta robusta de transporte para proteger, transportar y guardar la balanza, solo para modelo sin soporte, KERN MPS-A07
- 2 Barra medidora mecánica para la altura, campo de medición entre 60 y 200 cm, para atornillar al soporte (MPS-PM) (por delante o por detrás), o para poner encima, acreditación médica conforme a 93/42/CEE, ilustr. parecida, KERN MSF 200
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN EOB-A02S05
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida - sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20x22 cm por paño, KERN MYC-01

ESTÁNDAR

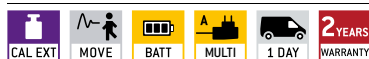

OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg		Opción Cert. de calibración DAKKS	
				DKD KERN	
KERN					
MPB 300K100	300	0,1		963-129	
MPB 300K100P	300	0,1		963-129	

Pictograma



Programa de ajuste CAL:

Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.



Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio.



Alimentación por acumulador:

Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.



Adaptador de red universal:

con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para UE, RU.



Calibración DAKKS de balanzas (DKD):

En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKKS en días hábiles.



Envío de paquetes:

En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



Garantía:

En el pictograma se indica la duración de la garantía.